

Эксперт в области стоматологических решений для дентальной имплантации

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ UNICON

Каталог продукции


СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ UNICON

Каталог продукции

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ
UNICON
Каталог продукции

Имплантат UNICON


Став кульминацией наших научных исследований и разработок в области улучшенных клинических решений, имплантат UniCon с гордостью представляет собой вершину эволюции 11-градусного соединения. Имплантат UniCon объединяет унифицированную линию протезирования с единым типом соединения, не зависящим от диаметра или длины имплантата, обеспечивает повышенную механическую стабильность и предлагает подлинную клиническую эффективность благодаря оптимизированному хирургическому протоколу.

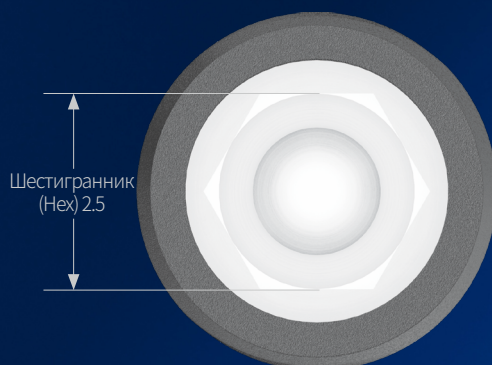

Единый тип соединения


Упрощённая система абатментов
Упрощённое управление складскими запасами
Единый драйвер на все случаи

Шестигранник (Hex) 2.5

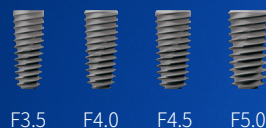


Повышенная прочность

Выше устойчивость к переломам, чем у аналогичных систем
Прогнозируемая долгосрочная стабильность

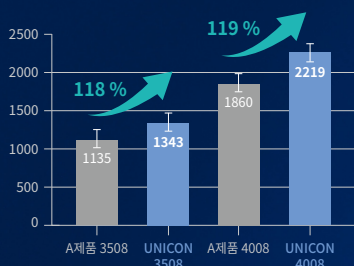

Апикальная резьба увеличенной глубины

Усиленная апикальная резьба
- Максимальная первичная стабильность
- Предназначены для одномоментной имплантации

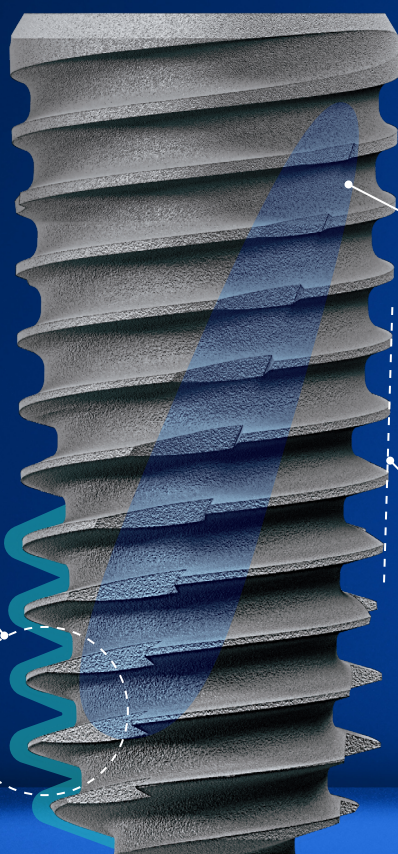

Непрерывная режущая кромка

- Улучшенная самонарезающая конструкция
- Надежная и стабильная установка

Конусность 1,5°/ Двойная резьба

- Обеспечение прочной начальной фиксации
- Быстрая и стабильная установка
- Атравматичная установка

Универсальная + Удобная
Universal + Convenient = "UNICON"

Название, подчёркивающее универсальность применения при всех типах костной ткани и клинических случаях, а также простой и удобный протокол установки

Поверхность импланта UNICON

Гибридная обработка поверхности SLA (HSA)

Оптимальная морфология поверхности

Микротекстура корональной части предотвращает перимплантит, а апикальный макрорельеф обеспечивает превосходную остеоинтеграцию

Гибридная пескоструйная обработка и кислотное травление


Двойное кислотное травление

Высокотемпературная гидроструйная обработка

Вакуумная ультразвуковая очистка в 7 этапов

UV-обработка

Абсолютно чистая поверхность

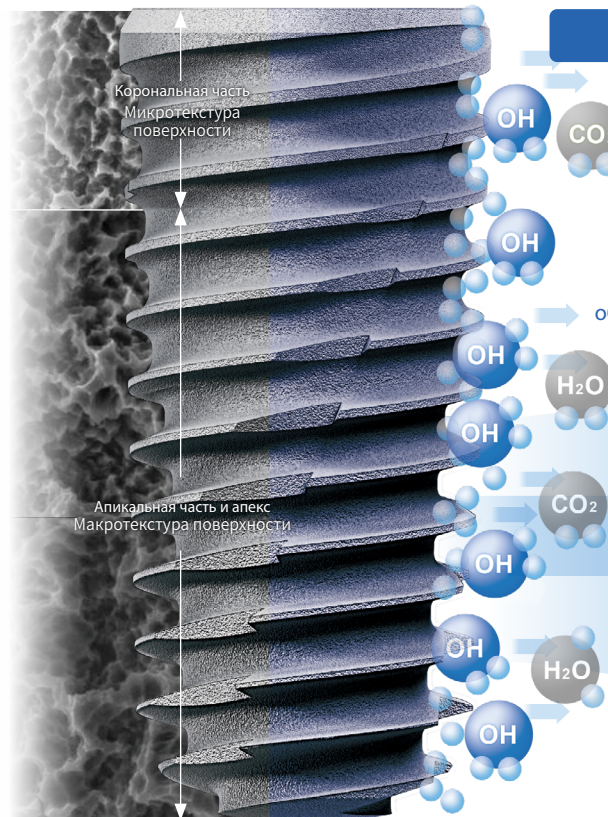

Модификация поверхности с помощью VUV-обработки

Предотвращение биологического старения поверхности

VUV-обработка удаляет более 90% органических загрязнений с поверхности имплантата, обеспечивая сверхгидрофильность и ускоренную остеоинтеграцию

VUV-обработка

Удаление углеводородных загрязнений

Создание сверхгидрофильной поверхности

Электростатическая активация поверхности

Усиление адгезии клеток и белков

Ускоренная остеоинтеграция

Запатентованная поверхность HSA


Благодаря многолетним исследованиям и экспериментам на базе технологии SLA (пескоструйная обработка крупнозернистым абразивом + кислотное травление) достигнут уникальный, присущий только имплантатам DIO уровень шероховатости поверхности



* Патент KOREI № 10-1652968


Что такое VUV-обработка?

VUV – это ультрафиолетовое излучение с наивысшей энергией, применяемое в полупроводниковых процессах DIO были первыми, кто применил вакуумное ультрафиолетовое облучение (VUV) для удаления органических загрязнений с поверхности имплантата. Эффективность метода подтверждена совместным исследованием с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA, США)

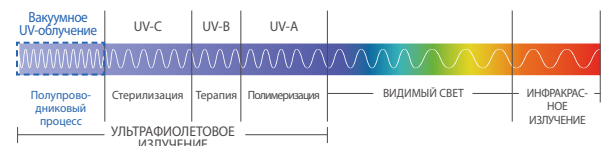

VUV, Срок остеоинтеграции в 2 раза быстрее!

Меньшее количество органических загрязнений на поверхности и повышенная абсорбция крови обеспечивают более стабильную остеоинтеграцию, сокращая срок лечения

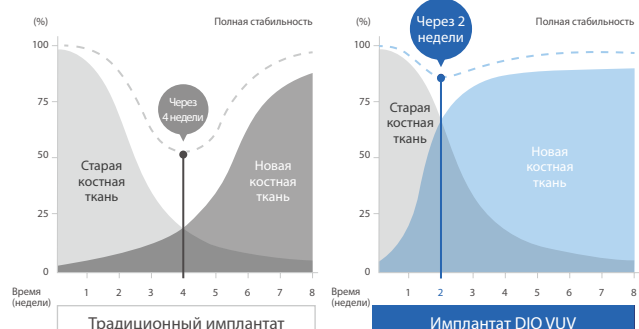

* Источник: «Имплантология», выпуск 22, 05 ноября 2013 года, Такахио Огава, кандидат наук, и др.

Имплантат UNICON

Анатомический S-образный изгиб
для минимизации воздействия
на костную и десневую ткань

Унифицированный дизайн

Единый анатомический
S-образный дизайн
Атравматичность для костной и
десневой ткани

Единый анатомический S-образный изгиб применяется на всех этапах — от заживления и снятия оттисков до протезирования. Это минимизирует вмешательство в костную ткань и давление на десну, формирует идеальный профиль прорезывания и способствует созданию здоровых межзубных сосочков.



Интуитивный дизайн

Интуитивное подтверждение
корректного соединения

Благодаря интуитивному дизайну с отчетливой референтной точкой, полная или неполная посадка легко верифицируется на рентгенограммах



Статус посадки	Полная посадка	Неполная посадка
Зазор в соединении	Нулевой зазор	Зазор
Формирователь десны		
Слепочный трансфер для закрытой ложки		

Детальное проектирование

Оптимизировано для цифрового протезирования

Геометрия абатмента оптимизирована для повышения точности цифрового сканирования и улучшения прилегания циркониевых протезов.

Функция реперных точек
при регистрации сканов

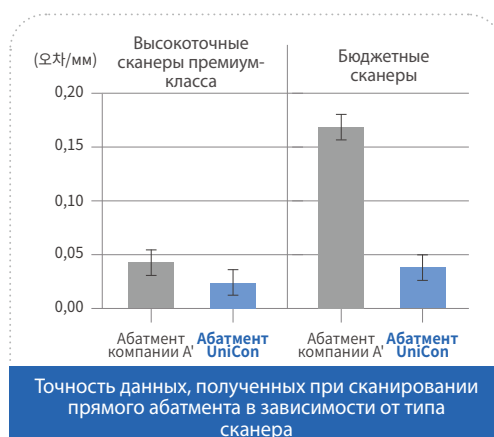
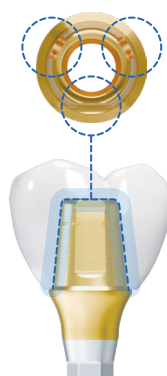


Мультифункциональное первоначальное сверло

Обеспечивает высокоточное первичное препарирование костной ткани в лунках удаленных зубов


Режущие кромки на торце и по бокам гарантируют стабильность препарирования при любой траектории, выбранной хирургом.

* Диаметр: Предназначено для расширения от Ø2,0 до Ø2,7

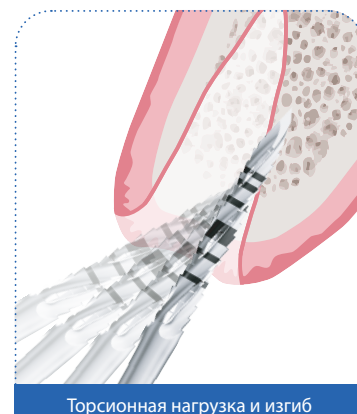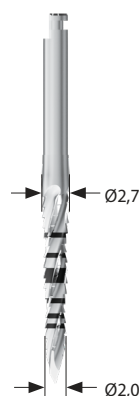


Сверло для формирования плоской костной площадки

Даже при точном первичном препарировании лунки имплантат может сместиться в сторону дефекта в момент установки. Сверло для формирования плоской костной площадки позволяет позиционировать имплантат точно в соответствии с заданным положением.

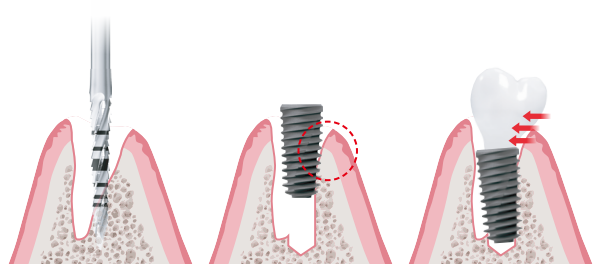

- " Исключительно на этапе первичного препарирования
- " Отсутствие первичной стабильности имплантата
- " Смещение в сторону дефекта при установке на наклонной поверхности

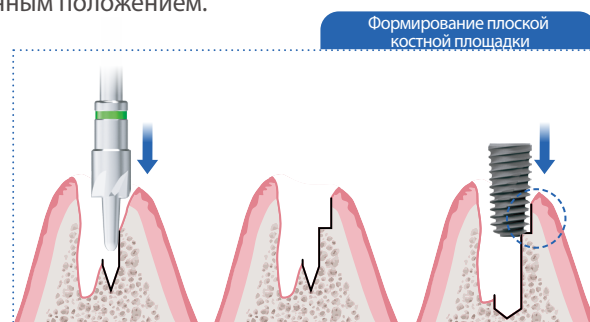


- " Проведение сверла по ранее сформированному каналу
- " Формирование плоской площадки (препарирование)
- " Стабильная установка имплантата без смещения

Бор для коррекции альвеолярного гребня или расширения после первичного препарирования

Применяется для коррекции узких гребней и неровной костной ткани

Также используется для расширения перегородки лунки после первичного препарирования в области моляров.


* Предотвращает смещение кортикальной пластинки в области перегородки

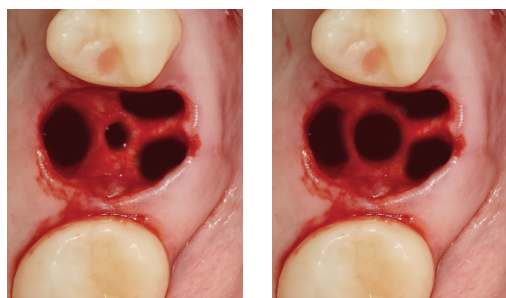

- " Высокоскоростное препарирование альвеолярного гребня
- " Стабильное и равномерное препарирование без смещения


Коническое сверло для установки имплантата

Коническое сверло UniCon неизменно демонстрирует высокую режущую способность на костной ткани любого типа, а встроенный ограничитель глубины гарантирует точность и удобство работы. Обтекаемая форма корпуса обеспечивает прямую ирригацию ложа имплантата, снижая риск перегрева костной ткани.

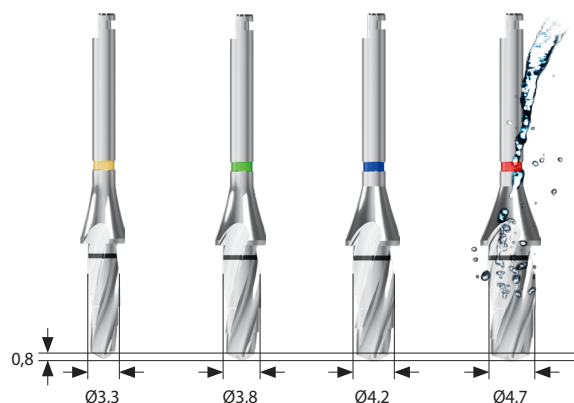


Прямое сверло для установки имплантата



Прямое сверло используется в следующих случаях.

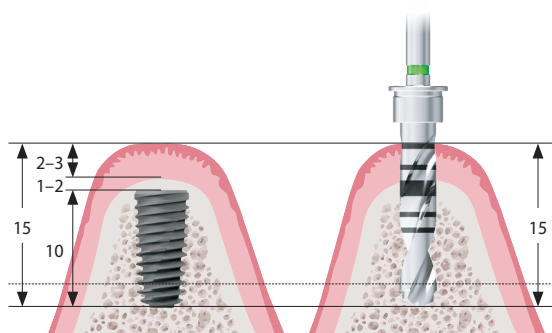

При необходимости использования длинного сверла в условиях закрытого протокола (без отслаивания лоскута)

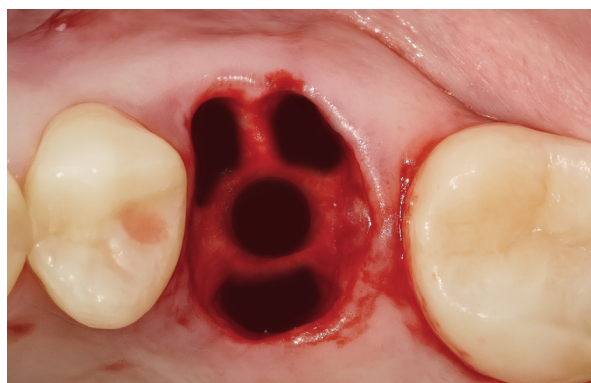



При необходимости частичного расширения костного ложа в плотной костной ткани или чтобы избежать чрезмерного момента в апикальной части при работе в области межкорневой перегородки лунки.

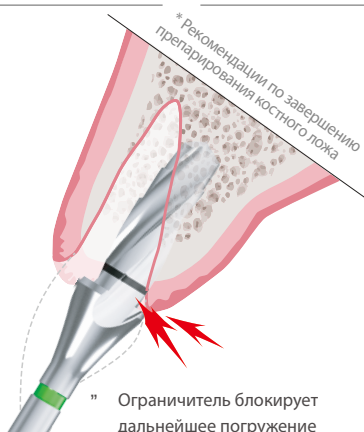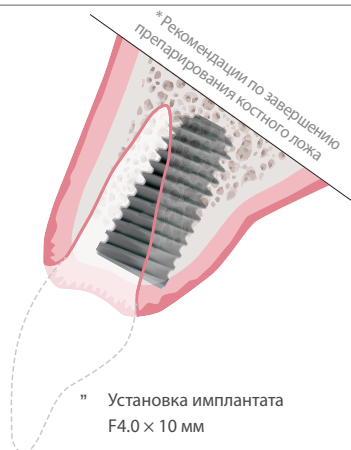

Имплантовод

для установки имплантата


Имплантовод позволяет устанавливать имплантат на глубину до 7 мм ниже уровня мягких тканей, в зависимости от их толщины. Это обеспечивает точную установку на заданную глубину даже при высоком крутящем моменте

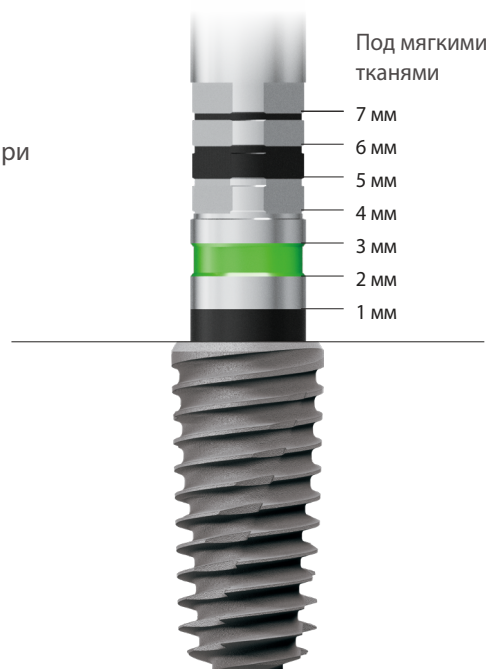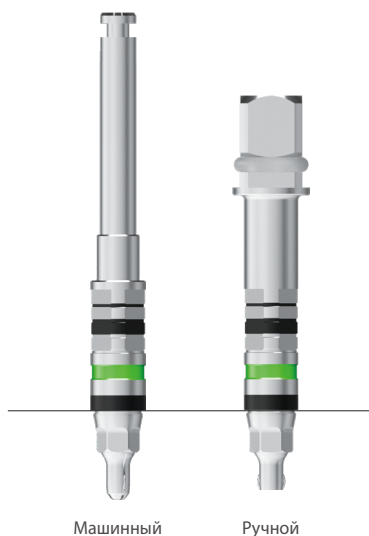

Финальный контрольный пин

для проверки глубины и положения установки имплантата



Мы рекомендуем проводить финальную проверку после установки имплантата. Проверьте глубину и направление окклюзии и при необходимости выполните корректировки.

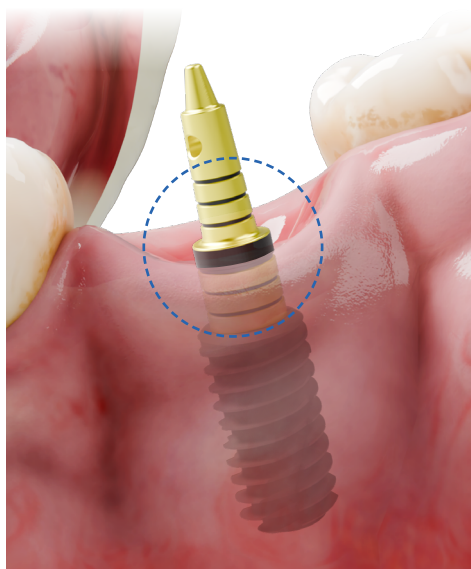

Формирователь десневого контура

Удаление избыточной кости, препятствующей фиксации

Этот инструмент предназначен для иссечения костной ткани, создающей помеху после установки имплантата, и незаменим в случаях глубокой имплантации. Он повторяет форму формирователя десны, что предотвращает избыточное удаление костной ткани. Используйте сверло, соответствующее форме выбранного формирователя десны, для точного препарирования

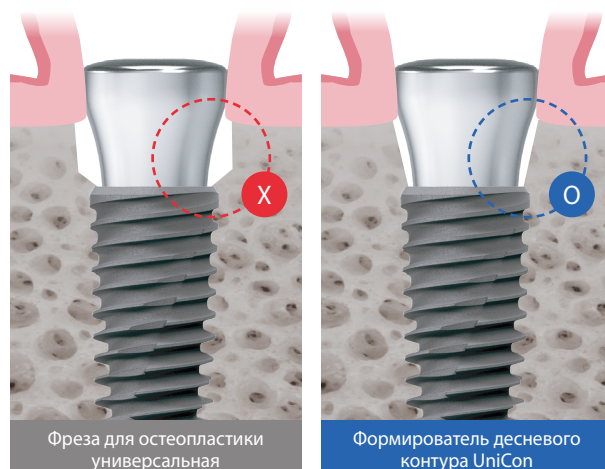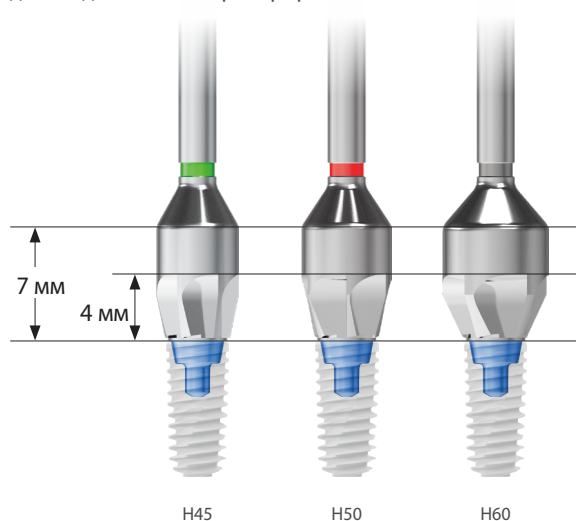

Позиционирующая насадка для удобного позиционирования имплантатов и контроля меж имплантатных промежутков

При одиночных, мостовидных и концевых дефектах позиционирующая насадка может использоваться на этапе начального препарирования для одновременного учета промежутков до соседних зубов и габаритов будущего протеза. Инструмент может применяться с мукотомом 2.0 мм, сверлом для позиционирования или первичным контрольным пином — в зависимости от клинической задачи. Конструкция с эффективной ирригацией минимизирует риск перегрева костной ткани в процессе препарирования

Клык/Премоляр	Общее назначение
Ø7,2	Ø8,0
Второй моляр	Первый моляр
Ø9,0	Ø10,0
Изготовлено из биосовместимого медицинского силикона для безопасного введения сверл или инструментов	



Система имплантатов UNICON Содержание

013
Имплантат
UNICON



014
Винт-
заглушка



014
Форми-
рователь
десны



016
Цементи-
руемый
абатмент



017
Монолит-
ный абат-
мент Ø3,5



017
Защитный
колпачок
для
абатмента



017
Слепочный
колпачок
абатмента



018
Угловой
абатмент



018
Времен-
ный
абатмент



019
Слепоч-
ный транс-
фер для
открытой
ложки



019
Слепочный
трансфер
для закры-
той ложки



019
Лабора-
торный
аналог



022
Мульти-
юнит
абатмент



022
Мульти-
юнит
угловой
абатмент



023
Мульти-
юнит
Колпачок
закрыва-
ющий



023
Трансфер
для мульти-
юнита
(открытая
ложка)



022
Сканирую-
щий маркер
(Н-сканбо-
ди) на мульти-
юнит



023
Скан-адап-
тер для
мульти-
юнит абат-
ментов



024
Лабора-
торный
аналог
мульти-
юнита



024
Титановый
цилиндр
для мульти-
юнит абат-
ментов



024
Вре-
менный
цилиндр
мульти-
юнита



026
DeSR
базовый
абатмент
(короткий)



026
DeSR
базовый
абатмент
(длинный)



027
DeSR
колпачок
закрываю-
щий



027
DeSR
Н-сканбо-
ди



027
Скан-а-
даптер
DeSR



028
DeSR
цифровой
аналог



028
Колпачок
для стан-
дартного
абатмента
DeSR



028
DeSR
трансфер
для закры-
той ложки



029
DeSR
лабора-
торный
аналог



029
Винт
прямой
фиксаци
DeSR



029
Винт для
фиксаци
коронки
DeSR



032
Абатмент
с соедине-
нием DIO-
Lock



032
Лабора-
торный
аналог



032
Драйвер
Locator



033
Драйвер
DIO-Lock



033
Набор
уплотни-
тельных
колец па-
тричной
части



033
Сменная
уплотни-
тельная
патрица



033
Расширен-
ная сменная
уплотни-
тельная
патрица



034
Набор
колпачков
с черными
обработ-
очными
патрицами



034
Черная об-
работочная
патрица



034
Блокирую-
щий
спейсер



034
Слепочный
трансфер



035
Н-сканбоди/
Кондуктор
Jig



035
Скан-
адаптер




036
Предва-
рительно
отфрезе-
рованная
балка/
Премилл-
балка



036
Титановое
основание
гибридного
абатмента



039

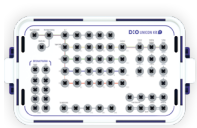UNICON
Хирургический
Набор 7


UK 07

041

Мукоотом
Ø2,0


041

Сверло
для пози-
циониро-
вания


041

Мульти-
функци-
ональное
первоначальное
сверло


041

Бор для
коррекции
альвео-
лярного
ребра


042

Прямое
сверло
(Ø2,2)


042

Сверло
для фор-
мирования
плоской
костной
площадки


042

Позици-
онирующая
насадка


043

Пин для
первич-
ной про-
верки


043

Прямое
сверло


043

Кони-
ческое
сверло


044

Кортикаль-
ное сверло


044

Импланто-
вод


044

Финаль-
ный
контроль-
ный пин


045

Форми-
рователь
десневого
контура


045

Набор уд-
линителей
для сверл


045

Шести-
гранная
отвертка
1,2 мм


046

Удлини-
тель кон-
нектора


046


Динамо-
метриче-
ский ключ


046

Двусто-
ронний
глубино-
мер



Наборы для синус-лифтинга Содержание

047

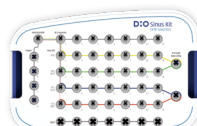Хирургический
набор для
синус-лиф-
тинга


SKDS 01

049

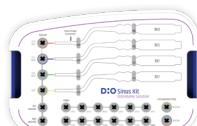Набор осте-
отомов для
синус-лиф-
тинга


SKOS 01

051

Мульти-
функци-
ональное
первоначальное
сверло ST


051

Сверло
для рас-
ширения
синуса


051

Сверло для
синус-
лифтинга


052

Сверло ST
для рас-
ширения
синуса


052

Сверло
ST для
синус-
лифтинга


052

Остеотом
Wave ST


053

Фиксатор



053

Гидрав-
лический
подъемник
мембраны


053

Гидрав-
лический
подъ-
емник
мембраны
Dummy


054

Хирургический
молоточек


054

Инстру-
мент для
отслоения
синусной
мембраны


054

Глубино-
мер


054

Трубка для
физиоло-
гического
раствора


- HSA/Комплектация
 - Имплантат | Код заказа: UCR 0000SF (например: UCR 4010SF)
 - Имплантат + винт-заглушка | Код заказа: UCR 0000S (например: UCR 4010S)
- VUV/Комплектация
 - Имплантат | Код заказа: UCR 0000UV3 (например: UCR 4010UV3)



Единица измерения мм

R**F3.5 (Ø3,8)****Hex 2,5**

Длина	7	8,5	10	11,5	13
HSA	UCR 3507SF	UCR 3508SF	UCR 3510SF	UCR 3511SF	UCR 3513SF
VUV	UCR 3507UV3	UCR 3508UV3	UCR 3510UV3	UCR 3511UV3	UCR 3513UV3

R**F4.0 (Ø4,25)****Hex 2,5**

Длина	7	8,5	10	11,5	13
HSA	UCR 4007SF	UCR 4008SF	UCR 4010SF	UCR 4011SF	UCR 4013SF
VUV	UCR 4007UV3	UCR 4008UV3	UCR 4010UV3	UCR 4011UV3	UCR 4013UV3

R**F4.5 (Ø4,6)****Hex 2,5**

Длина	7	8,5	10	11,5	13
HSA	UCR 4507SF	UCR 4508SF	UCR 4510SF	UCR 4511SF	UCR 4513SF
VUV	UCR 4507UV3	UCR 4508UV3	UCR 4510UV3	UCR 4511UV3	UCR 4513UV3

R**F5.0 (Ø5,05)****Hex 2,5**

Длина	7	8,5	10	11,5	13
HSA	UCR 5007SF	UCR 5008SF	UCR 5010SF	UCR 5011SF	UCR 5013SF
VUV	UCR 5007UV3	UCR 5008UV3	UCR 5010UV3	UCR 5011UV3	UCR 5013UV3

Винт-заглушка

Используется для защиты внутреннего соединения имплантата во время двухэтапной операции.

- Используют отвертку Hex 1.2.
- Инструкция по применению
 - ① Перед затягиванием винта удалите из имплантата кровь и любые загрязнения.
 - ② Затяните винт Ручной с помощью отвертки Hex 1.2 (5–8 Н · см).
- Момент затяжки: 5–8 Н · см



Единица измерения мм

R

Размер имплантата		Стандартный	
Высота	0,4	1,4	2,4
Код	UCRCSS	UCRCSM	UCRCSL

Формирователь десны

Конструкция имеет анатомическую S-образную форму, чтобы минимизировать воздействие на кость при глубокой установке имплантата.

- Инструкция по применению
 - ① После установки имплантата убедитесь, что на рентгеновском снимке в области конуса 11° отсутствует зазор для подтверждения полной посадки.
 - ② При необходимости используйте соответствующий формирователь десневого контура (хирургический колпачок) нужного диаметра (см. стр. 45)
- Используют отвертку Hex 1.2.
- Комплектация: Абатмент
- Момент затяжки: 5–8 Н · см

※ Медицинское изделие однократного применения




Единица измерения мм

R

Размер имплантата		Стандартный					
Диаметр		Ø3,0	Ø4,0	Ø4,5	Ø5,0	Ø6,0	Ø7,0
Высота	3	UCRHA 303	UCRHA 403	UCRHA 453	UCRHA 503	UCRHA 603	UCRHA 703
	4	UCRHA 304	UCRHA 404	UCRHA 454	UCRHA 504	UCRHA 604	UCRHA 704
	5	UCRHA 305	UCRHA 405	UCRHA 455	UCRHA 505	UCRHA 605	UCRHA 705
	6	UCRHA 306	UCRHA 406	UCRHA 456	UCRHA 506	UCRHA 606	UCRHA 706
	7	UCRHA 307	UCRHA 407	UCRHA 457	UCRHA 507	UCRHA 607	UCRHA 707
	8	UCRHA 308	UCRHA 408	UCRHA 458	UCRHA 508	UCRHA 608	UCRHA 708

Цементируемый | Угловой | Временный абатмент


Схема ортопедического лечения

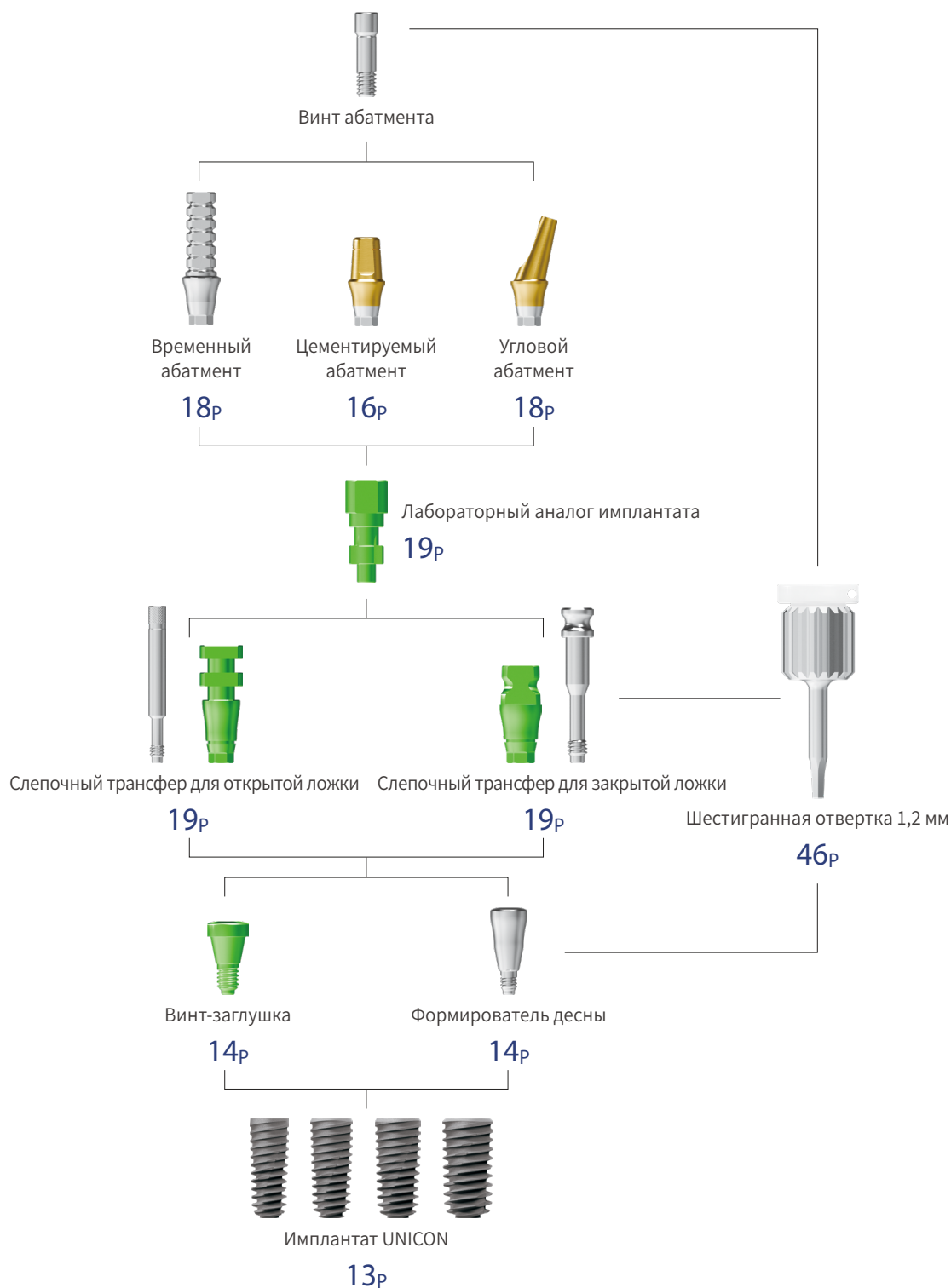

Цементируемый абатмент

Используется для стандартного изготовления протезов с цементной/винтовой фиксацией

- Сверхточное соединение с допуском 1/1000 мм
- Анатомическая S-образная форма: минимизирует воздействие на кость при глубокой установке.
- Продуманная геометрия внутренних соединений гарантирует безупречную посадку циркониевых конструкций без риска сколов и напряжений
- Конструкция штифта позволяет легко проводить прямое сканирование на уровне абатмента.
- Поставляются с шестигранным (Hex) и безшестигранным (Non-Hex) типом соединения
- Совместим со слепочным колпачком для абатмента
- Используют отвертку Hex 1.2.
- Комплектация: Абатмент + Винт абатмента
- Момент затяжки: 30–35 Н·см

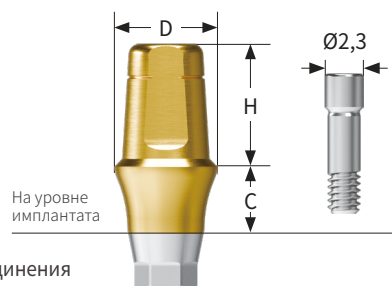

Единица измерения мм

R		Размер имплантата		Стандартный		
		Диаметр	Ø4,5	Ø5,0	Ø6,0	Ø7,0
Hex	Высота 4	Манжета 2	UCRCA 4542H	UCRCA 5042H	UCRCA 6042H	-
		3	UCRCA 4543H	UCRCA 5043H	UCRCA 6043H	-
		4	UCRCA 4544H	UCRCA 5044H	UCRCA 6044H	-
		5	UCRCA 4545H	UCRCA 5045H	UCRCA 6045H	-
		6	UCRCA 4546H	UCRCA 5046H	UCRCA 6046H	-
		7	UCRCA 4547H	UCRCA 5047H	UCRCA 6047H	-
		8	UCRCA 4548H	UCRCA 5048H	UCRCA 6048H	-
		Высота 5,5	Манжета 2	UCRCA 4552H	UCRCA 5052H	UCRCA 6052H
	3		UCRCA 4553H	UCRCA 5053H	UCRCA 6053H	UCRCA 7053H
	4		UCRCA 4554H	UCRCA 5054H	UCRCA 6054H	UCRCA 7054H
	5		UCRCA 4555H	UCRCA 5055H	UCRCA 6055H	UCRCA 7055H
	6		UCRCA 4556H	UCRCA 5056H	UCRCA 6056H	UCRCA 7056H
	7		UCRCA 4557H	UCRCA 5057H	UCRCA 6057H	UCRCA 7057H
	8		UCRCA 4558H	UCRCA 5058H	UCRCA 6058H	UCRCA 7058H
	Высота 7		Манжета 2	UCRCA 4572H	UCRCA 5072H	UCRCA 6072H
		3	UCRCA 4573H	UCRCA 5073H	UCRCA 6073H	-
		4	UCRCA 4574H	UCRCA 5074H	UCRCA 6074H	-
		5	UCRCA 4575H	UCRCA 5075H	UCRCA 6075H	-
		6	UCRCA 4576H	UCRCA 5076H	UCRCA 6076H	-
		7	UCRCA 4577H	UCRCA 5077H	UCRCA 6077H	-
8		UCRCA 4578H	UCRCA 5078H	UCRCA 6078H	-	
R		Диаметр	Ø4,5	Ø5,0	Ø6,0	Ø7,0
Non-Hex	Высота 4	Манжета 2	UCRCA 4542N	UCRCA 5042N	UCRCA 6042N	-
		3	UCRCA 4543N	UCRCA 5043N	UCRCA 6043N	-
		4	UCRCA 4544N	UCRCA 5044N	UCRCA 6044N	-
		5	UCRCA 4545N	UCRCA 5045N	UCRCA 6045N	-
		6	UCRCA 4546N	UCRCA 5046N	UCRCA 6046N	-
		7	UCRCA 4547N	UCRCA 5047N	UCRCA 6047N	-
		8	UCRCA 4548N	UCRCA 5048N	UCRCA 6048N	-
		Высота 5,5	Манжета 2	UCRCA 4552N	UCRCA 5052N	UCRCA 6052N
	3		UCRCA 4553N	UCRCA 5053N	UCRCA 6053N	UCRCA 7053N
	4		UCRCA 4554N	UCRCA 5054N	UCRCA 6054N	UCRCA 7054N
	5		UCRCA 4555N	UCRCA 5055N	UCRCA 6055N	UCRCA 7055N
	6		UCRCA 4556N	UCRCA 5056N	UCRCA 6056N	UCRCA 7056N
	7		UCRCA 4557N	UCRCA 5057N	UCRCA 6057N	UCRCA 7057N
	8		UCRCA 4558N	UCRCA 5058N	UCRCA 6058N	UCRCA 7058N
	Высота 7		Манжета 2	UCRCA 4572N	UCRCA 5072N	UCRCA 6072N
		3	UCRCA 4573N	UCRCA 5073N	UCRCA 6073N	-
		4	UCRCA 4574N	UCRCA 5074N	UCRCA 6074N	-
		5	UCRCA 4575N	UCRCA 5075N	UCRCA 6075N	-
		6	UCRCA 4576N	UCRCA 5076N	UCRCA 6076N	-
		7	UCRCA 4577N	UCRCA 5077N	UCRCA 6077N	-
8		UCRCA 4578N	UCRCA 5078N	UCRCA 6078N	-	

* Изготавливается по заказу

Монолитный абатмент

* Особая серия: Единый типоразмер Ø3,5

Используется для изготовления протезов с цементной фиксацией в условиях узкого протезного пространства под формирователь десны 3,0 мм

- Сверхточное соединение с допуском 1/1000 мм
- Анатомическая S-образная форма: минимизирует воздействие на кость при глубокой установке.
- Продуманная геометрия внутренних соединений гарантирует безупречную посадку циркониевых конструкций без риска сколов и напряжений
- Позволяет проводить прямое снятие оттиска на уровне абатмента
- Используйте монолитный внешний ключ Ø3,0 (USAD 3006B)
- Комплектация: Абатмент
- Момент затяжки: 30–35 Н·см



Единица измерения мм

R


Hex

Размер имплантата		Стандартный						
Диаметр		Ø3,5 (для нижней челюсти, фронтального отдела и премоляров)						
Манжета	2	3	4	5	6	7	8	
Высота	4,0	UCRSA 3042	UCRSA 3043	UCRSA 3044	UCRSA 3045	UCRSA 3046	UCRSA 3047	UCRSA 3048
	5,5	UCRSA 3052	UCRSA 3053	UCRSA 3054	UCRSA 3055	UCRSA 3056	UCRSA 3057	UCRSA 3058
	7	UCRSA 3072	UCRSA 3073	UCRSA 3074	UCRSA 3075	UCRSA 3076	UCRSA 3077	UCRSA 3078

Защитный колпачок для абатмента

Используется для защиты абатментов в полости рта и уменьшения дискомфорта пациента.

- Подходит для временного использования в качестве временного протеза
- Обеспечивает превосходную стабильность фиксации

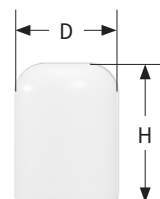

Единица измерения мм

R

Размер имплантата		Стандартный			
Диаметр		Ø4,5	Ø5,0	Ø6,0	Ø7,0
Высота	4,0	UCRAPC 454	UCRAPC 504	UCRAPC 604	-
	5,5	UCRAPC 455	UCRAPC 505	UCRAPC 605	UCRAPC 705
	7	UCRAPC 457	UCRAPC 507	UCRAPC 607	-

Слепочный колпачок абатмента

Используется для снятия оттиска на уровне абатмента

- Обеспечивает превосходную стабильность фиксации



Единица измерения мм


R

Размер имплантата		Стандартный		
Высота		4,0	5,5	7,0
Диаметр	Ø4,5	UCRAIC 454	UCRAIC 455	UCRAIC 457
	Ø5,0	UCRAIC 504	UCRAIC 505	UCRAIC 507
	Ø6,0	UCRAIC 604	UCRAIC 605	UCRAIC 607
	Ø7,0	-	UCRAIC 705	-
Цвет		Желтый	Серый	Синий

Угловой абатмент

Используется преимущественно для передних зубов при коррекции пути введения протеза

- Используется для стандартного изготовления протезов с цементной/винтовой фиксацией
- Сверхточное соединение с допуском 1/1000 мм
- Анатомическая S-образная форма: минимизирует воздействие на кость при глубокой установке.
- Шестигранник выполнен в двух вариантах (тип А и В) для точного позиционирования абатмента.
- Пришеечная часть соединения имеет золотистое покрытие для улучшения эстетики
- Используют отвертку Hex 1.2.
- Комплектация: Абатмент + Винт абатмента
- Момент затяжки: 30–35 Н·см

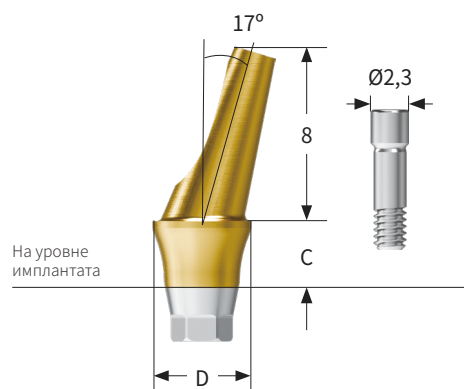

Единица измерения мм

R


Размер имплантата		Стандартный		
Диаметр		Ø4,5	Ø5,0	Ø6,0
Hex A	Манжета 3	UCRAA 4583AH	UCRAA 5083AH	UCRAA 6083AH
	4	UCRAA 4584AH	UCRAA 5084AH	UCRAA 6084AH
	5	UCRAA 4585AH	UCRAA 5085AH	UCRAA 6085AH
Hex B	Манжета 3	UCRAA 4583BH	UCRAA 5083BH	UCRAA 6083BH
	4	UCRAA 4584BH	UCRAA 5084BH	UCRAA 6084BH
	5	UCRAA 4585BH	UCRAA 5085BH	UCRAA 6085BH
Non-Hex	Манжета 3	UCRAA 4583N	UCRAA 5083N	UCRAA 6083N
	4	UCRAA 4584N	UCRAA 5084N	UCRAA 6084N
	5	UCRAA 4585N	UCRAA 5085N	UCRAA 6085N

* Изготавливается по заказу

Временный абатмент

Используется для изготовления временных протезов.

- Анатомическая S-образная форма: минимизирует воздействие на кость при глубокой установке.
- Вертикальная часть размечена с интервалом 1,5 мм для точного укорачивания
- Используют отвертку Hex 1.2.
- Комплектация: Абатмент + Винт абатмента
- Момент затяжки: 20 Н·см

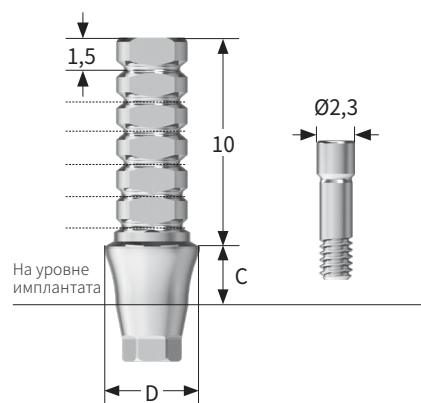

Единица измерения мм


R

Размер имплантата		Стандартный	
Диаметр		Ø4,5	
Тип	Hex	Non-Hex	
Манжета 2	UCRTA 4502H	UCRTA 4502N	
3	UCRTA 4503H	UCRTA 4503N	
4	UCRTA 4504H	UCRTA 4504N	
5	UCRTA 4505H	UCRTA 4505N	

Слепочный трансфер для открытой ложки

Снятие оттиска методом открытой ложки

- Анатомическая S-образная форма: легкое соединение после заживления без сопротивления десны
- Визуальный контроль прилегания: бороздка над имплантатом сигнализирует о неполной посадке
- Дизайн головки минимизирует воздействие при многократном снятии оттиска методом открытой ложки.
- Используют отвертку Hex 1.2 / Комплектация: Слепочный трансфер + Фиксирующий винт

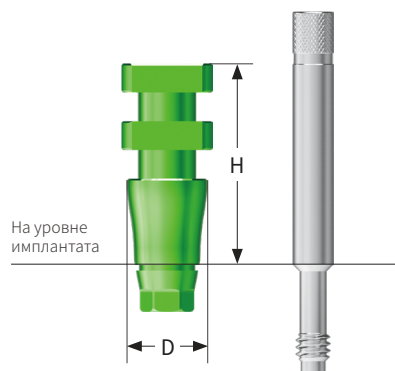

Единица измерения мм

R


Hex

Размер имплантата		Стандартный			Винт
Диаметр		Ø4,0	Ø4,5	Ø5,0	
Высота	11	UCRPIC 4011H	UCRPIC 4511H	UCRPIC 5011H	UCRPIC P11
	15	UCRPIC 4015H	UCRPIC 4515H	UCRPIC 5015H	UCRPIC P15
	19	UCRPIC 4019H	UCRPIC 4519H	UCRPIC 5019H	UCRPIC P19

Слепочный трансфер для закрытой ложки

Снятие оттиска методом закрытой ложки

- Анатомическая S-образная форма: легкое соединение после заживления без сопротивления десны
- Профиль сечения и высота вертикальной части определяют типоразмер
- Визуальный контроль прилегания: бороздка над имплантатом сигнализирует о неполной посадке
- Используется для регистрации прикуса при замене винта (арт. UCRTIC S0)
- Используют отвертку Hex 1.2 / Комплектация: Слепочный трансфер + Фиксирующий винт

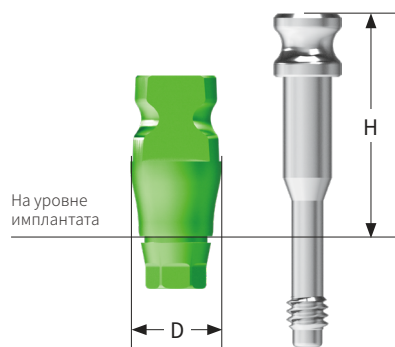

Единица измерения мм

R

Hex

Размер имплантата		Стандартный			Винт
Диаметр		Ø4,0	Ø4,5	Ø5,0	
Высота	10	UCRTIC 4043H	UCRTIC 4543H	UCRTIC 5043H	UCRTIC S3
	12	UCRTIC 4045H	UCRTIC 4545H	UCRTIC 5045H	UCRTIC S5
	14	UCRTIC 4047H	UCRTIC 4547H	UCRTIC 5047H	UCRTIC S7

Лабораторный аналог


Воспроизведение формы имплантата на рабочей модели

※ Не является медицинским изделием

Единица измерения мм

R


Размер имплантата		Стандартный
Диаметр		Ø4,5
Высота 11		UCRLA

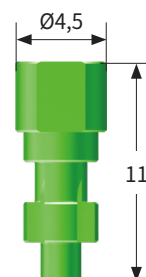

D:O IMPLANT

Мульти-юнит | Мульти-юнит угловой абатмент

Схема ортопедического лечения

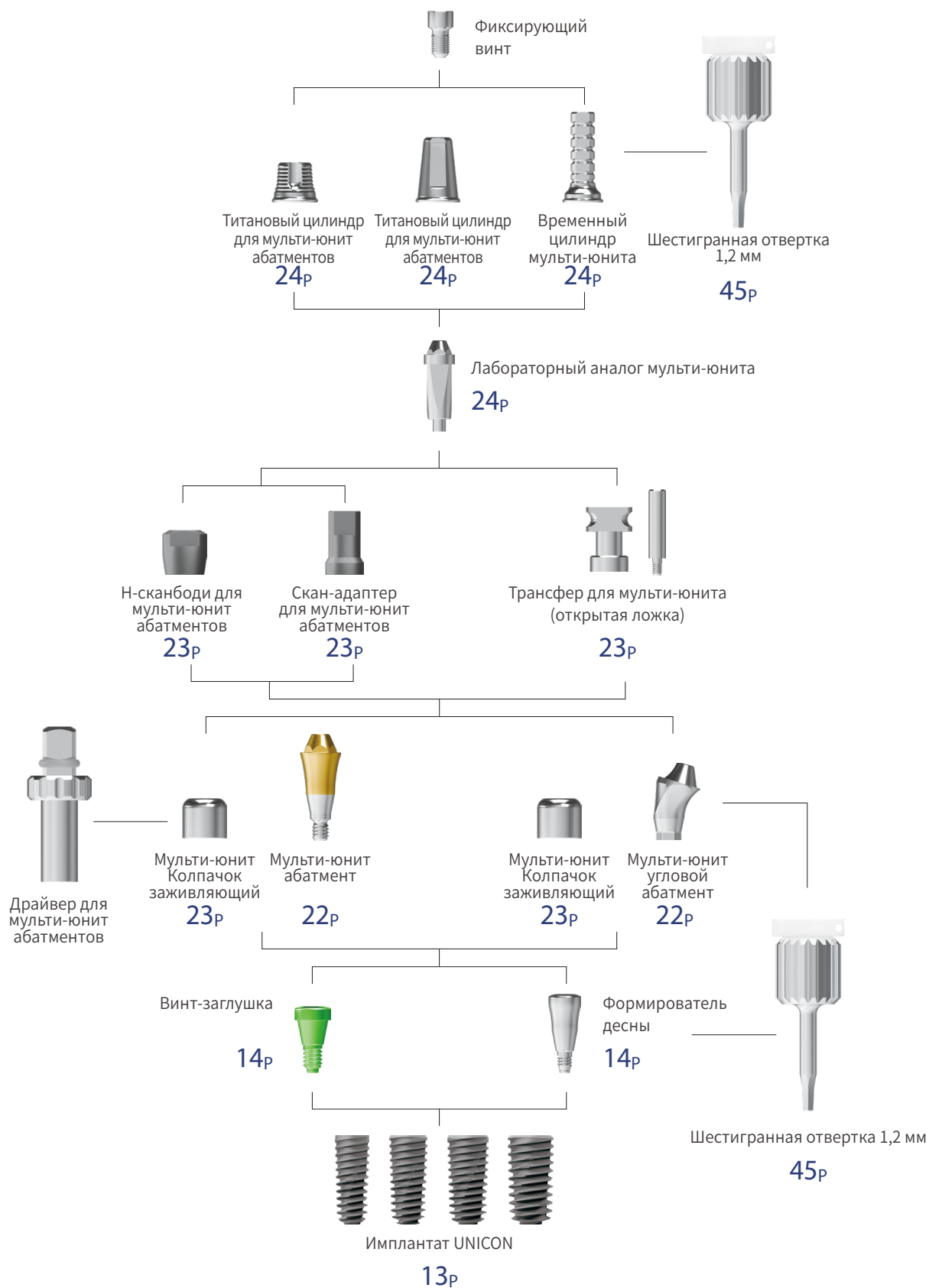

Мульти-юнит абатмент

Применяется для протезирования протяженных мостовидных конструкций в различных клинических случаях

- Сверхточное соединение с допуском 1/1000 мм
- Анатомическая S-образная форма: легкое соединение после заживления без сопротивления десны
- Та же платформа, что и у Мульти-юнит углового абатмента
- Используйте драйвер для мульти-юнит абатментов: ключ-трещотка (UMADR 33B)/Машинный ключ (UMADM 33)
- Комплектация: Мульти-юнит абатмент + Держатель для мульти-юнит абатмента (UCRMASH)
- Момент затяжки: 30–35 Н·см



Держатель

Единица измерения мм

R


D Ø4,8

Размер имплантата		Стандартный						
Диаметр		Ø4,8						
Манжета	1	2	3	4	5	6	7	
Код	UCRMA 4801	UCRMA 4802	UCRMA 4803	UCRMA 4804	UCRMA 4805	UCRMA 4806	UCRMA 4807	

Мульти-юнит угловой абатмент

Применяется для протезирования протяженных мостовидных конструкций в различных клинических случаях

- Сверхточное соединение с допуском 1/1000 мм
- Анатомическая S-образная форма: легкое соединение после заживления без сопротивления десны
- Та же платформа, что и у Мульти-юнит углового абатмента
- Линейка цилиндров предназначена исключительно для Non-Hex(бездвигательных) абатментов
- Используют отвертку Hex 1.2.
- Комплектация: Мульти-юнит угловой абатмент + Винт углового мульти-юнит абатмента (UCRMABS) + Держатель для мульти-юнит абатмента (UCRMAAH)
- Момент затяжки: 30–35 Н·см

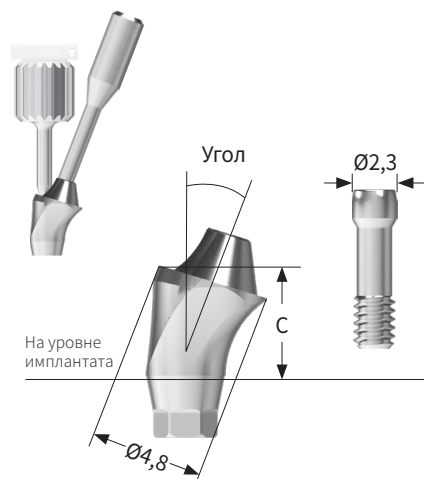

Единица измерения мм

R

D Ø4,8


Размер имплантата		Стандартный	
Диаметр		Ø4,8	
Тип		Hex	
Угол		17°	30°
Манжета 2	UCR17MA 4802H		-
3	UCR17MA 4803H		UCR30MA 4803H
4	UCR17MA 4804H		UCR30MA 4804H
5	UCR17MA 4805H		UCR30MA 4805H
6	UCR17MA 4806H		UCR30MA 4806H
7	UCR17MA 4807H		UCR30MA 4807H
Винт		UCRMABS	

Мульти-юнит Колпачок заживляющий

Защищает абатменты в полости рта и уменьшает дискомфорт пациента.

- Предназначен для прямых и угловых мульти-юнит абатментов
- Используют отвертку Hex 1.2/момент затяжки: 5–8 Н·см

R	Единица измерения мм	
	Размер имплантата	Стандартный
	Диаметр	Ø5,0
	Высота 4,5	HCN 40504

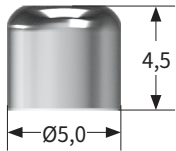


Трансфер для мульти-юнита (открытая ложка)

Трансфер для снятия оттиска методом открытой ложки на уровне абатмента

- Использовать с открытой ложкой / Для прямых и угловых мульти-юнит абатментов
- Используют отвертку Hex 1.2/Комплектация: Слепочный трансфер для открытой ложки с направляющим штифтом

R	Единица измерения мм		
	Размер имплантата	Стандартный	
	Диаметр	Ø4,8	
	Тип	Hex	Non-Hex
	Высота 8	IPN 40508	IPN 40508N
	Направляющий штифт	PCN 40310	PCN 40310S

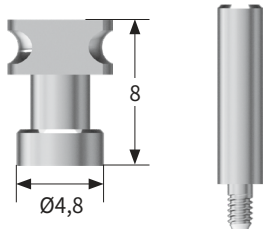


Н-сканбоди для мульти-юнит абатментов

Позволяет получать цифровой оттиск на уровне формирователя десны и абатмента

- Предназначен для прямых и угловых мульти-юнит абатментов
- Используют отвертку Hex 1.2/Комплектация: Н-сканбоди + Винт Н-сканбоди (CHSBS 04)
- Момент затяжки: 5–8 Н·см

R	Единица измерения мм		
	Размер имплантата	Стандартный	
	Диаметр	Ø4,8	
	Тип	Hex	Non-Hex
	Высота 4,5	CHSB 4805	MRHSB 4805

* — : Выпуск запланирован на первую половину 2026 года.

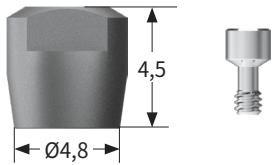


Скан-адаптер для мульти-юнит абатментов

Используется для снятия цифрового оттиска на уровне абатмента

- Используют отвертку Hex 1.2/Комплектация: Н-сканбоди + Винт Н-сканбоди (CHCANS 07)
- Момент затяжки: 5–8 Н·см

R	Единица измерения мм		
	Размер имплантата	Стандартный	
	Диаметр	Ø4,8	
	Тип	Hex	Non-Hex
	Высота 8	CSAN 4808	MRSCAN 4808

* — : Выпуск запланирован на первую половину 2026 года.

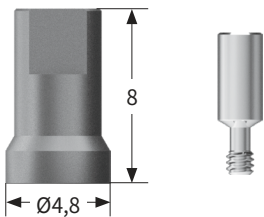

Лабораторный аналог мульти-юнита

Используется для переноса мульти-юнит абатментов на рабочую гипсовую модель.



Единица измерения мм


R

Размер имплантата	Стандартный
Диаметр	Ø4,8
Высота 14.2	UCRMLA

Титановый цилиндр для мульти-юнит абатментов

Используется для изготовления протезов с цементной и винтовой фиксацией

- Предназначен для прямых и угловых мульти-юнит абатментов
- Используют отвертку Hex 1.2.
- Комплектация: Титановый цилиндр + фиксирующий винт (UCRMACS)
- Момент затяжки: 20 Н·см

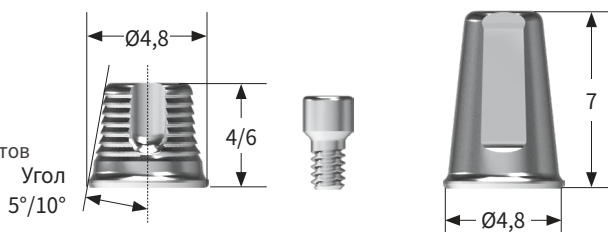

Единица измерения мм


R

Размер имплантата	Стандартный					
Диаметр	Ø4,8					Ø4,8
Тип	Hex					Non-Hex
Угол	5°		10°	5°		10°
Высота	4	UCRMCC 405H	UCRMCC 410H	UCRMCC 405N	UCRMCC 410N	-
	6	UCRMCC 605H	-	UCRMCC 605N	-	-
	7	-	-	-	-	-
						UCRMCC 487H
						UCRMCC 487N

Временный цилиндр мульти-юнита

Используется для изготовления временных протезов на уровне абатмента.

- Используют отвертку Hex 1.2.
- Комплектация: Временный цилиндр + винт цилиндра (UCRMACS)
- Момент затяжки: 20 Н·см

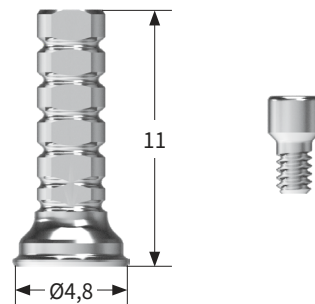


Единица измерения мм

R

Размер имплантата	Стандартный	
Диаметр	Ø4,8	
Тип	Hex	Non-Hex
Высота 11	UCRMAT 480H	UCRMAT 480N

Абатмент DeSR Схема ортопедического лечения

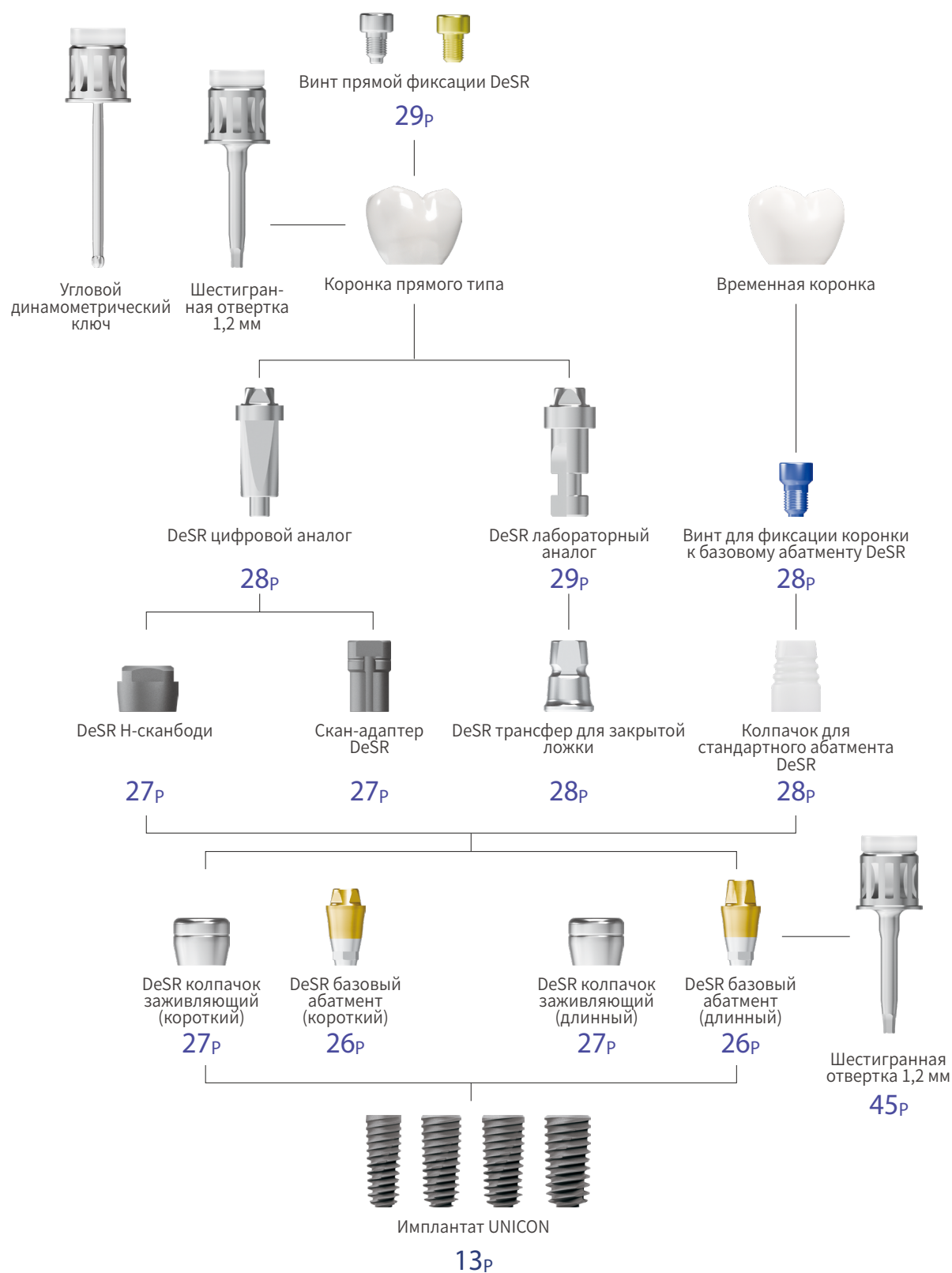


DeSR базовый абатмент (короткий и длинный)

Базовый абатмент DeSR

Используется для изготовления циркониевых протезов с винтовым креплением.

- Угол компенсации траектории: Ø4,2 – 20° / Ø4,8, Ø5,5 – 30°
- Комплектация: Hex (базовый абатмент + винт + держатель)/ Non-Hex (базовый абатмент)
- Момент затяжки: 30–35 Н·см

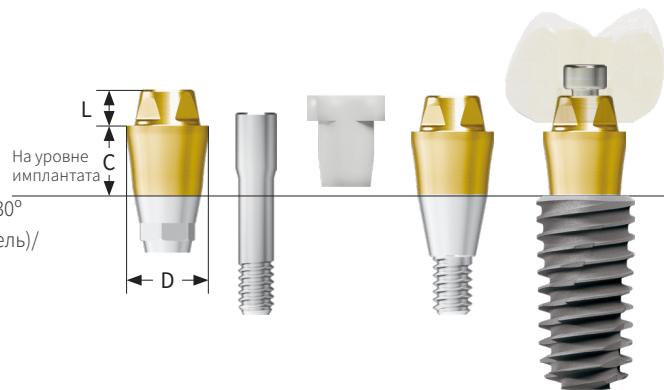

R

Короткий

Размер имплантата				Стандартный		Единица измерения мм
Диаметр		Ø4,2	Ø4,8		Ø5,5	
Hex	Длина 1,8	Манжета 1,5	-	DSRBA 4801H	DSRBA 5501H	
		2,5	DSRBA 4202H	DSRBA 4802H	DSRBA 5502H	
		3,5	DSRBA 4203H	DSRBA 4803H	DSRBA 5503H	
		4,5	DSRBA 4204H	DSRBA 4804H	DSRBA 5504H	
		5,5	DSRBA 4205H	DSRBA 4805H	DSRBA 5505H	
		6,5	DSRBA 4206H	DSRBA 4806H	DSRBA 5506H	
		7,5	DSRBA 4207H	DSRBA 4807H	DSRBA 5507H	
Non-Hex	Длина 1,8	Манжета 1,5	-	DSRBA 4801N	DSRBA 5501N	
		2,5	DSRBA 4202N	DSRBA 4802N	DSRBA 5502N	
		3,5	DSRBA 4203N	DSRBA 4803N	DSRBA 5503N	
		4,5	DSRBA 4204N	DSRBA 4804N	DSRBA 5504N	
		5,5	DSRBA 4205N	DSRBA 4805N	DSRBA 5505N	
		6,5	DSRBA 4206N	DSRBA 4806N	DSRBA 5506N	
		7,5	DSRBA 4207N	DSRBA 4807N	DSRBA 5507N	

R

Длинный

Размер имплантата				Стандартный		Единица измерения мм
Диаметр		Ø4,2	Ø4,8		Ø5,5	
Hex	Длина 2,8	Манжета 1,5	-	DSRBAL 4801H	DSRBAL 5501H	
		2,5	DSRBAL 4202H	DSRBAL 4802H	DSRBAL 5502H	
		3,5	DSRBAL 4203H	DSRBAL 4803H	DSRBAL 5503H	
		4,5	DSRBAL 4204H	DSRBAL 4804H	DSRBAL 5504H	
		5,5	DSRBAL 4205H	DSRBAL 4805H	DSRBAL 5505H	
		6,5	DSRBAL 4206H	DSRBAL 4806H	DSRBAL 5506H	
		7,5	DSRBAL 4207H	DSRBAL 4807H	DSRBAL 5507H	
Non-Hex	Длина 2,8	Манжета 1,5	-	DSRBAL 4801N	DSRBAL 5501N	
		2,5	DSRBAL 4202N	DSRBAL 4802N	DSRBAL 5502N	
		3,5	DSRBAL 4203N	DSRBAL 4803N	DSRBAL 5503N	
		4,5	DSRBAL 4204N	DSRBAL 4804N	DSRBAL 5504N	
		5,5	DSRBAL 4205N	DSRBAL 4805N	DSRBAL 5505N	
		6,5	DSRBAL 4206N	DSRBAL 4806N	DSRBAL 5506N	
		7,5	DSRBAL 4207N	DSRBAL 4807N	DSRBAL 5507N	

DeSR абатмент Компоненты

DeSR колпачок заживляющий

Используется при недостаточной первичной стабильности имплантата для защиты абатментов в полости рта и уменьшения дискомфорта пациента

- Момент затяжки: 5–8 Н·см



Короткий

Длинный

Единица измерения мм

R


Размер имплантата		Стандартный		
Диаметр		Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5
Короткий	Длина 4,5	DSRNHC 4204	DSRHC 4804	DSRHC 5504
Длинный	Длина 5,5	DSRNHCL 4205	DSRHCL 4805	DSRHCL 5505

※ Компоненты должны соответствовать базовому абатменту короткого или длинного типа.

DeSR H-сканбоди

Позволяет получать цифровой оттиск на уровне формирователя десны и абатмента

- Момент затяжки: 5–8 Н·см

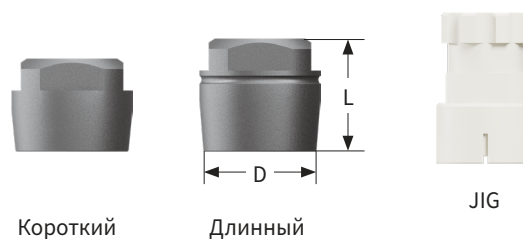

Короткий

Длинный

JIG

Единица измерения мм

R


Размер имплантата		Стандартный		
Диаметр		Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5
Короткий	Длина 4,5	DSRNHSB 4204	DSRHSB 4804	DSRHSB 5504
Длинный	Длина 5,5	DSRNHSBL 4205	DSRHBSL 4805	DSRHBSL 5505
Кондуктор Jig		JIG 501	JIG I551	JIG 602

※ Компоненты должны соответствовать базовому абатменту короткого или длинного типа.

Скан-адаптер DeSR

Используется для снятия цифрового оттиска на уровне абатмента

- Момент затяжки: 5–8 Н·см

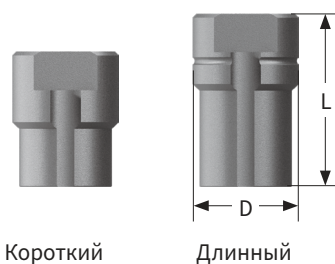

Короткий

Длинный

Единица измерения мм

R


Размер имплантата		Стандартный		
Диаметр		Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5
Короткий	Длина 7	DSRNSA 4207	DSRSA 4807	DSRSA 5507
Длинный	Длина 9	DSRNSAL 4209	DSRSAL 4809	DSRSAL 5509

※ Компоненты должны соответствовать базовому абатменту короткого или длинного типа.

DeSR цифровой аналог

Используется для переноса абатментов DeSR на модели, напечатанные на 3D-принтере

- Момент затяжки: 5–8 Н·см

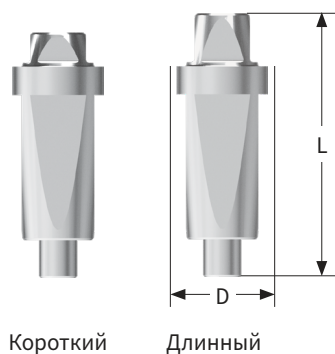

Единица измерения мм

R

Размер имплантата		Стандартный	
Диаметр		Ø4,2	Ø4,8
Короткий	Длина 13	DSRNDА 42	DSRDA 48
Длинный	Длина 14	DSRNDAL 42	DSRDAL 48

※ Компоненты должны соответствовать базовому абатменту короткого или длинного типа.

Колпачок для стандартного абатмента DeSR

Используется для изготовления временной коронки путем фиксации и на базовом абатменте в полости рта

- Комплектация: Колпачок базового абатмента + винт (DSRBACS 1804H)
- Момент затяжки: 20 Н·см



Единица измерения мм

R


Размер имплантата		Стандартный		
Диаметр		Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5
Короткий (5 мм)	Hex	DSRNBAC 4205H	DSRBAC 4805H	DSRBAC 5505H
	Non-Hex	DSRNBAC 4205N	DSRBAC 4805N	DSRBAC 5505N
Длинный (7 мм)	Hex	DSRNBACL 4207H	DSRBACL 4807H	DSRBACL 5507H
	Non-Hex	DSRNBACL 4207N	DSRBACL 4807N	DSRBACL 5507N

※ Компоненты должны соответствовать базовому абатменту короткого или длинного типа.

DeSR трансфер для закрытой ложки

Слепочный трансфер для закрытой ложки на уровне абатмента

- Комплектация: Слепочный трансфер для закрытой ложки + фиксирующий винт (DSRTIS 05)
- Момент затяжки: 5–8 Н·см

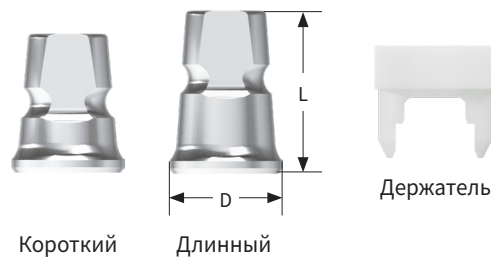

Единица измерения мм

***Поставляется отдельно**


R

Размер имплантата		Стандартный		
Диаметр		Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5
Короткий	5,5 мм	DSRNTI 4205H	DSRTI 4805H	DSRTI 5505H
Длинный	6,5 мм	DSRNTIL 4206H	DSRTIL 4806H	DSRTIL 5506H
Держатель		DSRTIH 4248		DSRTIH 5565

※ Компоненты должны соответствовать базовому абатменту короткого или длинного типа.

DeSR лабораторный аналог

Используется для переноса абатментов DeSR на рабочие гипсовые модели

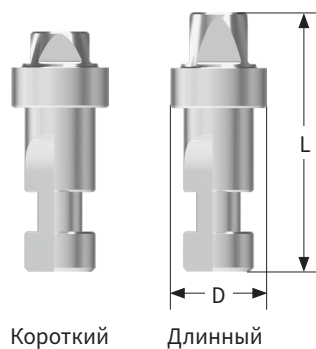

Единица измерения мм

R

Размер имплантата		Стандартный	
Диаметр	Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5
Короткий	Длина 12	DSRNA 42	DSRLA 55
Длинный	Длина 13	DSRLAL 48	DSRLAL 55

※ Компоненты должны соответствовать базовому абатменту короткого или длинного типа.

Винт прямой фиксации DeSR

Предназначен для коронки прямого типа

- Прямой тип: DSRDS 1804H/Угловой тип: DSRDS 1804T
- Используют отвертку Hex HD 1200A/ключ Torx ATD 1700.
- Момент затяжки: 25 Н·см



Hex



Шлиц Torx



Случаи, не требующие угловой коррекции



Случаи, требующие угловой коррекции

Единица измерения мм

R

Размер имплантата		Стандартный
Тип	Шестигранник (Hex) 1,2	Шлиц Torx
	DSRDS 1804H	DSRDS 1804T

Винт для фиксации коронки DeSR

Используется для проверки первичного контакта при фиксации (посадке) коронок в полости рта



Единица измерения мм


R

Размер имплантата		Стандартный
Высота 7		DSRCSS 185

D:O IMPLANT

Условно-съемный протез с опорой на имплантаты

DIO-Lock Схема ортопедического лечения

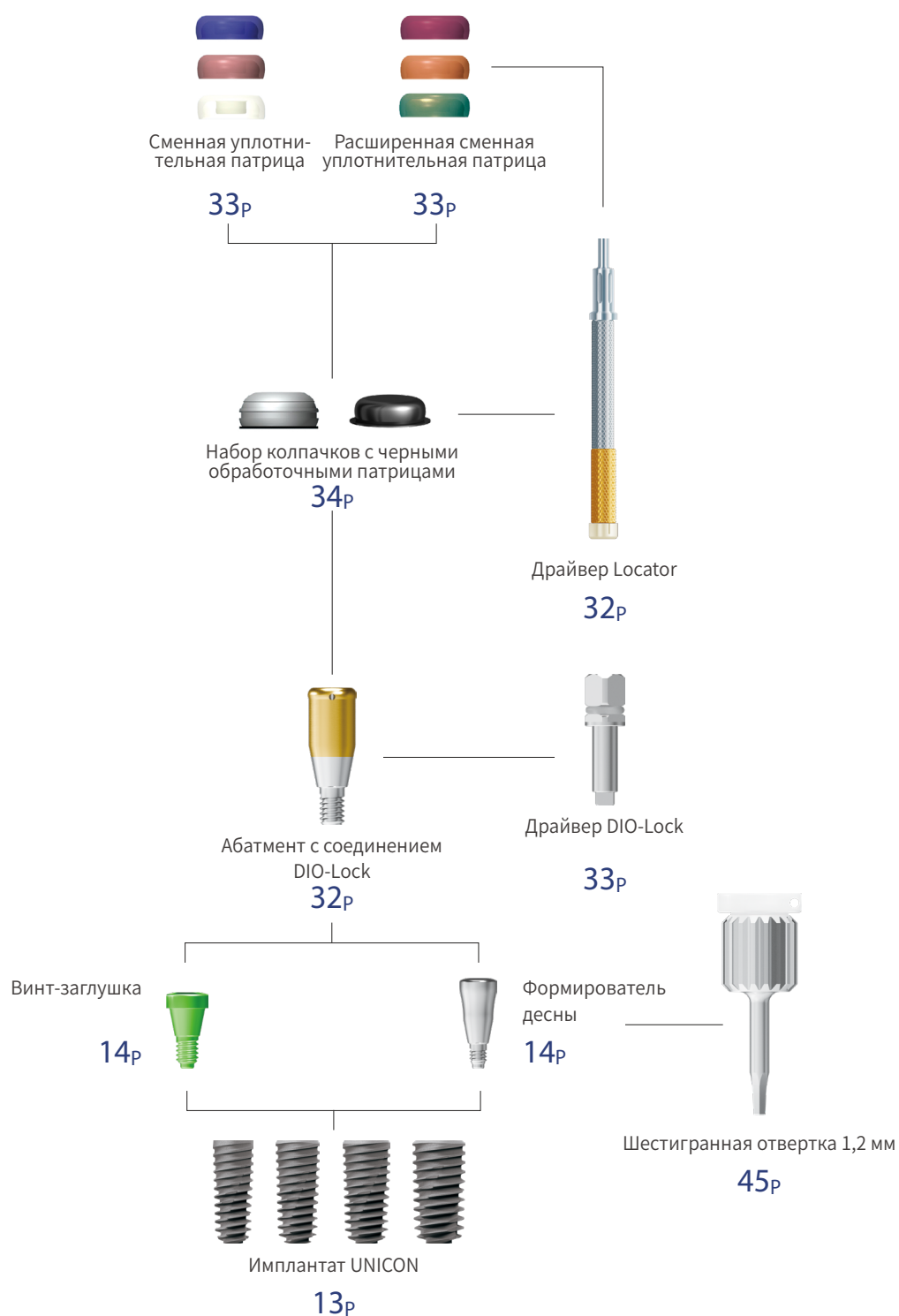

Абатмент DIO-Lock (погружного типа)

Абатмент DIO-Lock — усовершенствованная альтернатива традиционным системам (шаровидные аттачменты, балочная система). Соединяется с имплантатом и фиксируется с патрицей в протезе, позволяя многократное соединение/разъединение

- Используют Драйвер DIO-Lock.
- Момент затяжки: 30–35 Н·см



Единица измерения мм

R

Размер имплантата	Стандартный
Манжета 1	LCAS 3701
2	LCAS 3702
3	LCAS 3703
4	LCAS 3704
5	LCAS 3705
6	LCAS 3706
7	LCAS 3707

Абатмент DIO-Lock (погружного типа)

Компоненты

Лабораторный аналог

Лабораторный аналог абатмента



R

Размер имплантата	Стандартный
	LCALA 3910

Драйвер Locator

Используется для фиксации и извлечения сменной патрицы в колпачке протеза.

- Состоит из 3 частей, может применяться как ручной ключ для DIO-Lock



R


Размер имплантата	Стандартный
	08393

Абатмент DIO-Lock (погружного типа)

Компоненты

Драйвер DIO-Lock

Драйвер для абатмента DIO-Lock

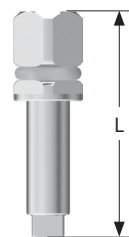

R

Единица измерения мм


Размер имплантата	Стандартный	
Длина	10	15
	LDW 5010	LDW 5015

Набор уплотнительных колец патричной части

- Комплектация: 2 комплекта: колпачки для протеза + сменные патрицы (белый, розовый, синий) + Блокирующий спейсер + черная обработанная патрица
- Выберите и используйте патрицу с соответствующей удерживающей силой в зависимости от клинической ситуации
- Замените патрицу с помощью драйвера Locator

R

Размер имплантата	Стандартный
Тип	2Set
	08519-2

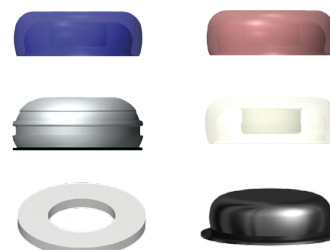

Сменная уплотнительная патрица

Элемент, обеспечивающий удерживающую силу протеза. Заменяется при снижении ретенции. Компенсация угла до 20°

- Комплектация: 4ea

R

Размер имплантата	Стандартный		
Ретенция	6 Н	12 Н	22 Н
	08529	08527	08524
Интенсивность	Низкая	Средняя	Высокая



Расширенная сменная уплотнительная патрица

Элемент, обеспечивающий удерживающую силу протеза. Заменяется при снижении ретенции. Компенсация угла до 40°

- Комплектация: 4ea

R

Размер имплантата	Стандартный		
Ретенция	4 Н	8 Н	16 Н
	LOC 08548	LOC 08915	LOC 08547
Интенсивность	Низкая	Средняя	Высокая



Набор колпачков с черными обработочными патрицами

- Комплектация: Колпачки для протеза 4 шт. + черные обработочные патрицы 4 шт.

R	Размер имплантата	Стандартный
		08510



Черная обработочная патрица

Патрица, используемая на этапе протезирования

- Комплектация: 4ea

R	Размер имплантата	Стандартный
		08515



Блокирующий спейсер

Используется для изоляции зазора между абатментом и колпачком протеза

- Комплектация: 20ea

R	Размер имплантата	Стандартный
		08514



Слепочный трансфер

Слепочный трансфер для абатмента(открытая ложка)


- Комплектация: Слепочный трансфер для открытой ложки 4 шт. + черная обработочная патрица 4 шт.

R	Размер имплантата	Стандартный
		08505



Н-сканбоди/Кондуктор Jig

- Комплектация: Н-сканбоди + винт скан-маркера
- Момент затяжки: 5–8 Н·см
- Кондуктор Jig поставляется отдельно

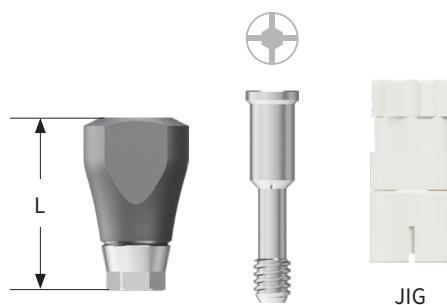

* Поставляется отдельно


Единица измерения мм

R	Размер имплантата				Кондуктор Jig	
	Длина	4	6	8		
D Ø5,0						
	Вид сверху					
	Винт	HSCAN 541H SSCAN 2009H	HSCAN 561H SSCAN 2011H	HSCAN 581H SSCAN 2013H	JIG 501	
R	D Ø6,0					
		Вид сверху				
		Винт	HSCAN 641H SSCAN 2009H	HSCAN 661H SSCAN 2011H	HSCAN 681H SSCAN 2013H	JIG 601
R	D Ø6,0					
		Вид сверху				
		Винт	HSCAN 642H SSCAN 2009H	HSCAN 662H SSCAN 2011H	HSCAN 682H SSCAN 2013H	JIG 602
R	D Ø7,0					
		Вид сверху				
		Винт	HSCAN 741H SSCAN 2009H	HSCAN 761H SSCAN 2011H	HSCAN 781H SSCAN 2013H	JIG 701

Скан-адаптер

Фиксируется на имплантатах во рту или лабораторных аналогах в гипсовой модели для сканирования (интраоральным/лабораторным сканером) при изготовлении индивидуальных абатментов

- Комплектация: Скан-адаптер + Винт
- Момент затяжки: 5–8 Н·см

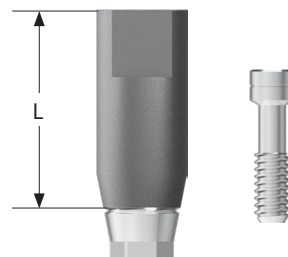


Единица измерения мм

R	Размер имплантата			Стандартный	
	Длина		9	15	Винт
			SCAN 01[H]	SCAN 01-15[H]	
					SSC 2008H

Предварительно отфрезерованная балка/ Премилл-балка

- Комплектация: Премилл-балка + винт (SSC 2008H) (2 шт.)
- Момент затяжки: 30–35 Н·см

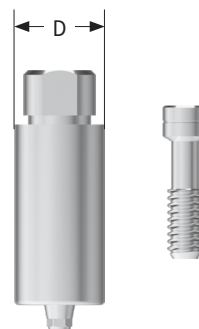

Единица измерения мм

R

Размер имплантата		Стандартный		
Тип	Hex	Non-Hex		
Диаметр	Ø10	Ø12	Ø10	Ø12
	CBSS 01[H]	CBSS 02[H]	CBSS 01N[H]	CBSS 02N[H]

Титановое основание гибридного абатмента

Гибридный абатмент: титановое основание на имплантате +
циркониевая культевая часть для эстетики фронтальных зубов

- Комплектация: Гибридный абатмент + винт (SSC 2008H)
- Момент затяжки: 30–35 Н·см



Единица измерения мм

R

Размер имплантата		Стандартный			
Диаметр		Ø4,5		Ø5,5	
Тип		Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
Часть 4	Манжета 1	UFHL 45401H[H]	UFHL 45401N[H]	UFHL 55401H[H]	UFHL 55401N[H]
	2	UFHL 45402H[H]	UFHL 45402N[H]	UFHL 55402H[H]	UFHL 55402N[H]
	3	UFHL 45403H[H]	UFHL 45403N[H]	UFHL 55403H[H]	UFHL 55403N[H]
Часть 5,5	Манжета 1	UFHL 45501H[H]	UFHL 45501N[H]	UFHL 55501H[H]	UFHL 55501N[H]
	2	UFHL 45502H[H]	UFHL 45502N[H]	UFHL 55502H[H]	UFHL 55502N[H]
	3	UFHL 45503H[H]	UFHL 45503N[H]	UFHL 55503H[H]	UFHL 55503N[H]
Часть 7	Манжета 1	UFHL 45701H[H]	UFHL 45701N[H]	UFHL 55701H[H]	UFHL 55701N[H]
	2	UFHL 45702H[H]	UFHL 45702N[H]	UFHL 55702H[H]	UFHL 55702N[H]
	3	UFHL 45703H[H]	UFHL 45703N[H]	UFHL 55703H[H]	UFHL 55703N[H]

- Функция Smart Position: предварительное планирование расстояния между имплантатами и ортопедической конструкции
- Коническое сверло с отличной режущей способностью и стоппером для точного контроля глубины
- Расположение элементов слева направо в соответствии с клиническим протоколом

Сверло для формирования плоской костной площадки
PBFD 40

Прямое сверло
SD 2207
SD 2208
SD 2210
SD 2011
SD 2013

Коническое сверло
UCTD 3507 UCTD 4007 UCTD 4507 UCTD 5007
UCTD 3508 UCTD 4008 UCTD 4508 UCTD 5008
UCTD 3510 UCTD 4010 UCTD 4510 UCTD 5010
UCTD 3511 UCTD 4011 UCTD 4511 UCTD 5011
UCTD 3513 UCTD 4013 UCTD 4513 UCTD 5013

Кортикальное сверло
CD 35
CD 40
CD 45
CD 50

Имплантовод
UFDE 36L
UFDW 35S
UFDW 35L

Формирователь десневого контура
HC 45 HC 50
HC 60

Шестигранная отвертка 1,2 мм
UHND 12S
UHND 12L
UHND 12S
UHND 12L

Удлинитель для сверла
DECS 15

Удлинитель коннектора
CE 6512A

Мультифункциональное первоначальное сверло
MID 20L

Бор для коррекции альвеолярного гребня
MB 20L

Мукотом
TP 20

Пин для первичной проверки
ICP 20

Сверло для позиционирования
PD 20L

Прямое сверло
SD 2715
SD 3015
SD 3615
SD 4115
SD 4615


Финальный контрольный пин
FCP 36

Позиционирующая насадка
PB 72 PB 90
PB 80 PB 100


D:O UNICON Kit

Протокол препарирования костного ложа под имплантаты UNICON Набор


F3.5
Имплантат

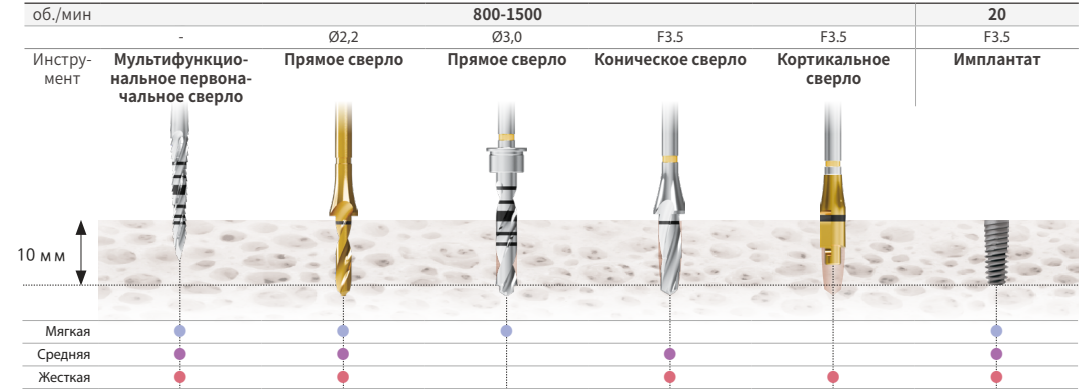


F4.0
Имплантат

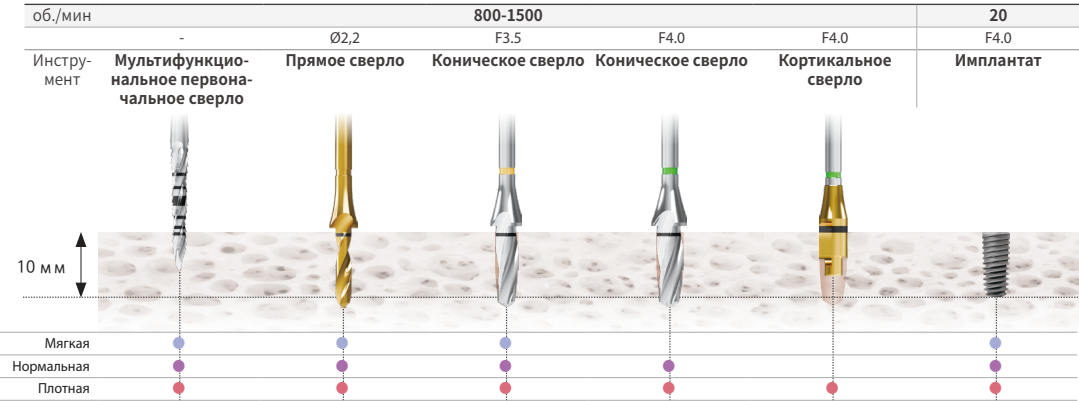

F4.5
Имплантат

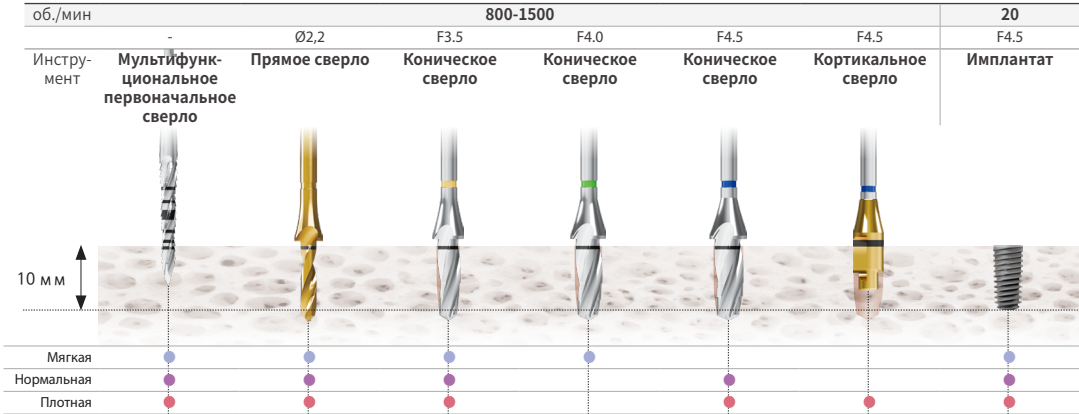

F5.0
Имплантат

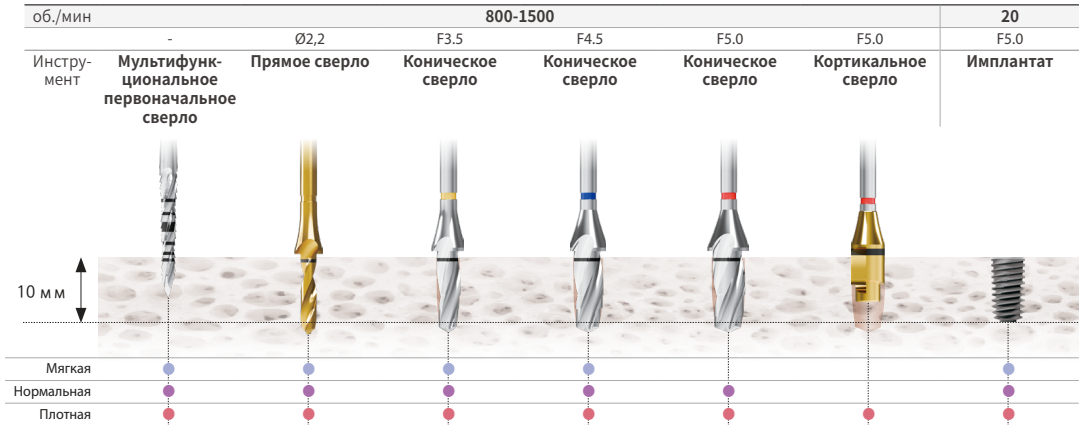


Набор хирургических инструментов Набор

Мукотом Ø2,0

Используется для иссечения десны в области планируемой установки имплантата

- Может использоваться для позиционирования при присоединении позиционирующей насадки.

Единица измерения мм	
Диаметр	Ø2,0
Код	TP 20

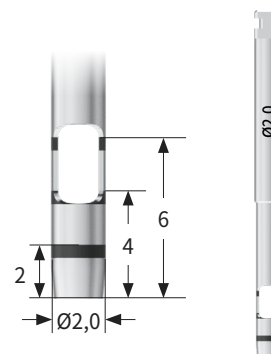


Сверло для позиционирования

Применяется для обозначения первичной позиции имплантата

- Может использоваться для позиционирования при присоединении позиционирующей насадки.

Единица измерения мм	
Диаметр	Ø2,0
Код	PD 20L

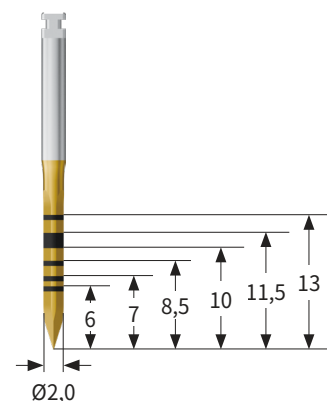


Мультифункциональное первоначальное сверло

Используется для формирования начального отверстия или коррекции направления

- Особенность конструкции исключает проскальзывание на наклонных костных поверхностях

Единица измерения мм	
Диаметр	Ø2,0 – Ø2,7
Код	MID 20L

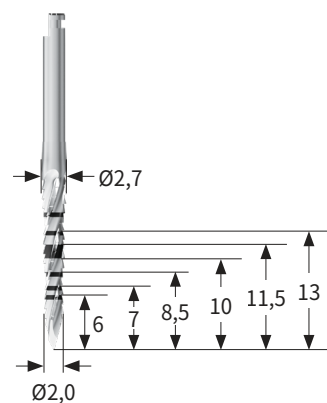


Бор для коррекции альвеолярного гребня

Коррекция неровного гребня и расширение ложа (после удаления/начального препарирования)

- 2000 об./мин.

Единица измерения мм	
Диаметр	Ø2,0 – Ø3,0
Длина	30 34
Код	MB 20S MB 20L

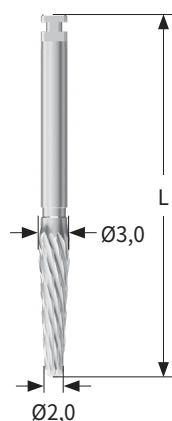

Прямое сверло (Ø2.2)

Используется для формирования начального отверстия

Единица измерения мм					
Диаметр	Ø2,2				
Длина	7	8,5	10	11,5	13
Код	SD 2207	SD 2208	SD 2210	SD 2011	SD 2013



Сверло для формирования плоской костной площадки

Используется для подготовки ложа имплантата после удаления однокорневого зуба

Единица измерения мм		
Диаметр	Ø4,0	Ø4,5
Код	PBFD 40	PBFD 45
Цвет	Зеленый	Синий



Позиционирующая насадка

Измерение расстояния до рядом стоящих зубов при формировании пилотного отверстия

- Совместим с мукоотомом Ø2,0, сверлом для позиционирования и пином для первичной проверки
- Конструкция обеспечивает эффективную ирригацию



Единица измерения мм				
Длина	8			
Диаметр	Ø7,2	Ø8,0	Ø9,0	Ø10,0
Цвет	Зеленый	Серый	Синий	Оранжевый
   				
Код набора (5 шт.)	PB 72S5	PB 80S5	PB 90S5	PB 100S5
Код набора (1 шт.)	PBS			

Набор хирургических инструментов Набор

Пин для первичной проверки

Устанавливается в отверстие, полученное на этапе начального препарирования, с целью оценки угла наклона и прикуса с зубами-антагонистами

- Двусторонний инструмент: Один конец используется со сверлом для позиционирования, другой — для многократного контроля пилотных отверстий

Единица измерения мм

Диаметр	Ø2,0
Код	ICP 20




Прямое сверло

- Можно погружаться на глубину до 18 мм
- Благодаря высокой режущей способности требуется особый контроль глубины
- При необходимости можно использовать с фиксатором (поставляется отдельно)

Единица измерения мм



Длина	15 (См. изображение справа)				
Диаметр	Ø2,7	Ø3,0	Ø3,6	Ø4,1	Ø4,6
Код	SD 2715	SD 3015	SD 3615	SD 4115	SD 4615
Цвет	-	Желтый	Зеленый	Синий	Красный

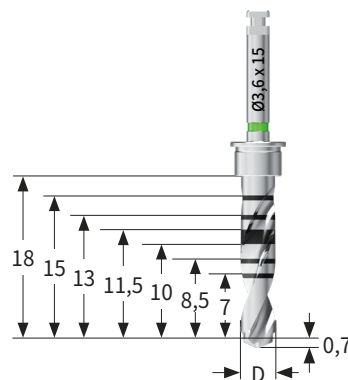

Коническое сверло

Многоступенчатое коническое сверло, оптимизированное под форму имплантата

- Ограничитель глубины с запасом 1 мм
- Эргономичная рукоятка с возможностью ирригации

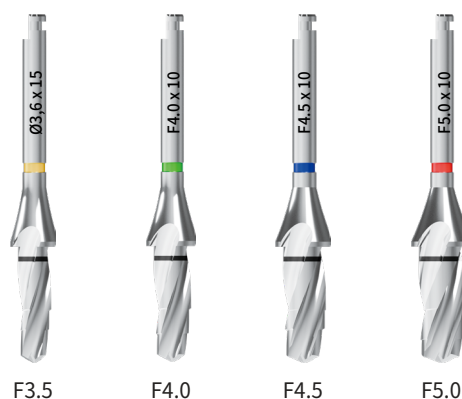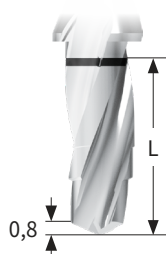

Единица измерения мм

	F3.5	F4.0	F4.5	F5.0
Длина 7	UCTD 3507	UCTD 4007	UCTD 4507	UCTD 5007
8,5	UCTD 3508	UCTD 4008	UCTD 4508	UCTD 5008
10	UCTD 3510	UCTD 4010	UCTD 4510	UCTD 5010
11,5	UCTD 3511	UCTD 4011	UCTD 4511	UCTD 5011
13	UCTD 3513	UCTD 4013	UCTD 4513	UCTD 5013
Цвет	Желтый	Зеленый	Синий	Красный

Кортикальное сверло

Используется для удаления кортикального слоя в плотной костной ткани.

- Соблюдать глубину до маркировочной линии

Единица измерения мм				
	F3.5	F4.0	F4.5	F5.0
Диаметр	Ø3,7	Ø4,15	Ø4,5	Ø4,95
Код	CD 35	CD 40	CD 45	CD 50
Цвет	Желтый	Зеленый	Синий	Красный




Имплантовод

Можно установить имплантат на глубину до 7 мм ниже мягких тканей.

***Поставляется отдельно**

Единица измерения мм				
Тип	Машинный		Ключ-трещотка	
Длина	8	11,5	14	21
Код	UFDE 36S	UFDE 36L	UFDW 35S	UFDW 35L

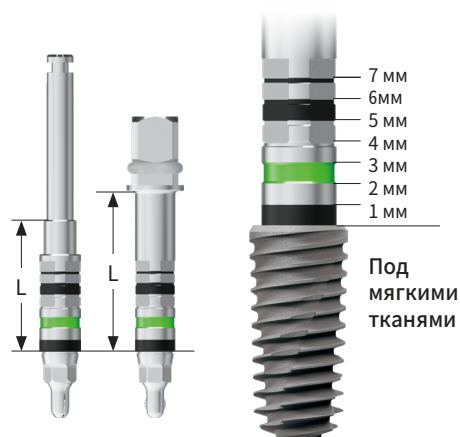

Финальный контрольный пин

Соединяется с установленным имплантатом для проверки глубины, направления и смыкания с зубами-антагонистами

Единица измерения мм	
Длина	12
Код	FCP 36

Проверка окклюзии



Формирователь десневого контура

Используется для удаления прилегающей кости после установки имплантата.

- Форма, повторяющая контур формирователя десны, предотвращает излишнее удаление костной ткани

Единица измерения мм

Диаметр	Ø5,1	Ø5,6	Ø6,6
Код	НС 45	НС 50	НС 60
Цвет	Зеленый	Красный	Серый




Набор удлинителей для сверл

- Увеличивает длину сверла на 15,5 мм; легкая ирригация благодаря защитному колпачку
- Комплектация: Удлинитель сверла (DE 15) + заглушка (DEC 07)

※ Можно приобрести отдельно


Код	DECS 15
-----	---------

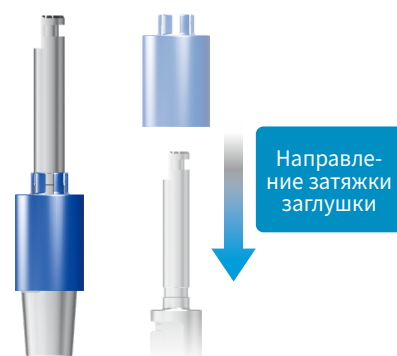

Шестигранная отвертка 1,2 мм

Хирургический инструмент для фиксации абатмента к имплантату

- Ручной инструмент можно фиксировать пинцетом при узком межчелюстном расстоянии в области жевательных зубов

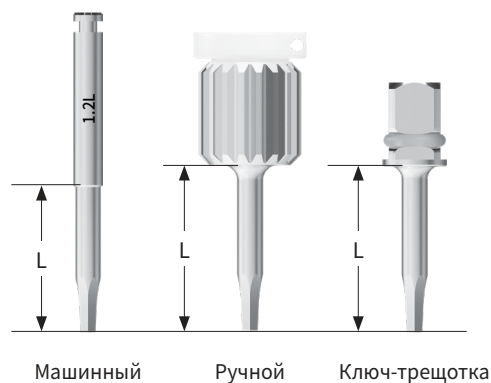

*Поставляется отдельно

Единица измерения мм

Тип	Машинный		Ручной		Ключ-трещотка	
Длина	6	12	13	18	13	20
Код	UHDE 12S	UHDE 12L	UHDH 12S	UHDH 12L	UHDW 12S	UHDW 12L


Удлинитель коннектора

Увеличивает рабочую длину коннектора при установке имплантата

***Поставляется отдельно**

Единица измерения мм

Тип	Ключ-трещотка	Машинный
Длина 8	CE 6508A	CE 6508M
12	CE 6512A	CE 6512M

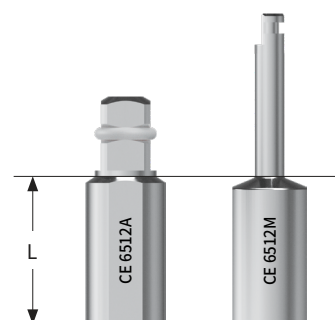

Ключ-трещотка Машинный

Динамометрический ключ

Используется для коррекции положения имплантата и фиксации абатмента/винтов

- Для достижения нужного момента затяжки плавно тяните рукоятку до совмещения с индикаторной линией



Код	DTW 0080
-----	----------

Двусторонний глубиномер

Используется для измерения глубины сформированного костного ложа


- Может применяться в качестве зонда для оценки глубины пародонтального кармана и конфигурации костного ложа




Код	DDG 1506
-----	----------

Хирургический набор для синус-лифтинга (SKDS 01) Набор

- Специализированный набор для закрытого синус-лифтинга
- Включает ограничитель сверла, соответствующий остаточной высоте кости
- Для поднятия на высоту до 3 мм включительно: безопасное и быстрое препарирование только сверлом
- Для более высокого подъема (на большую высоту) используйте гидравлический подъемник мембраны для безопасного и удобного синус-лифтинга

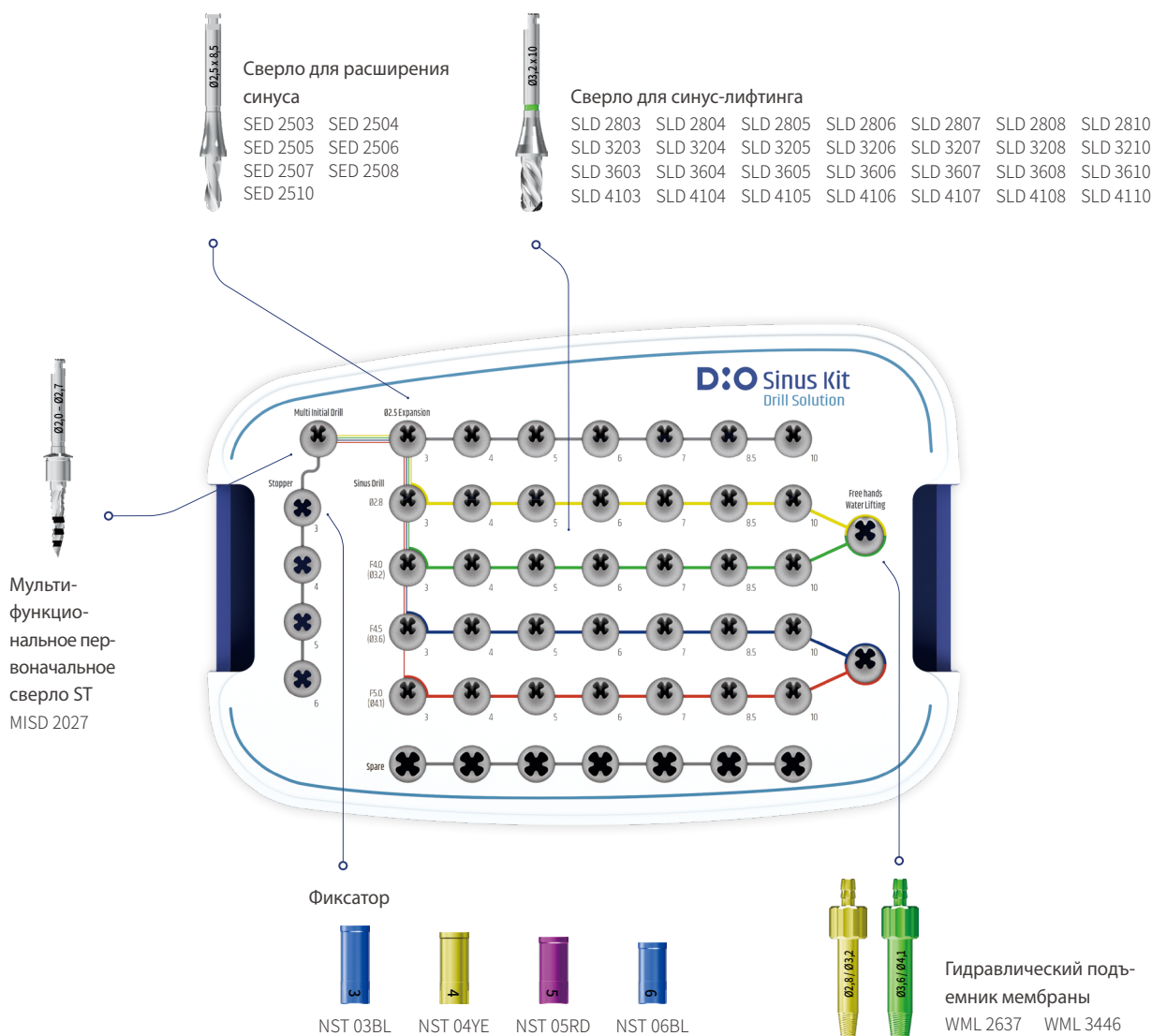

Инструмент для отслоения синусной мембраны
SMDT 01

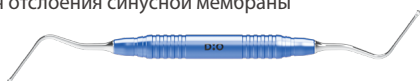

Глубиномер
DPG 2050




Трубка для физиологического раствора
MLT 40300




* Компоненты нижней панели

Протокол препарирования Набор


F3.5 x
8,5 мм
Остаточная
кость
6 мм

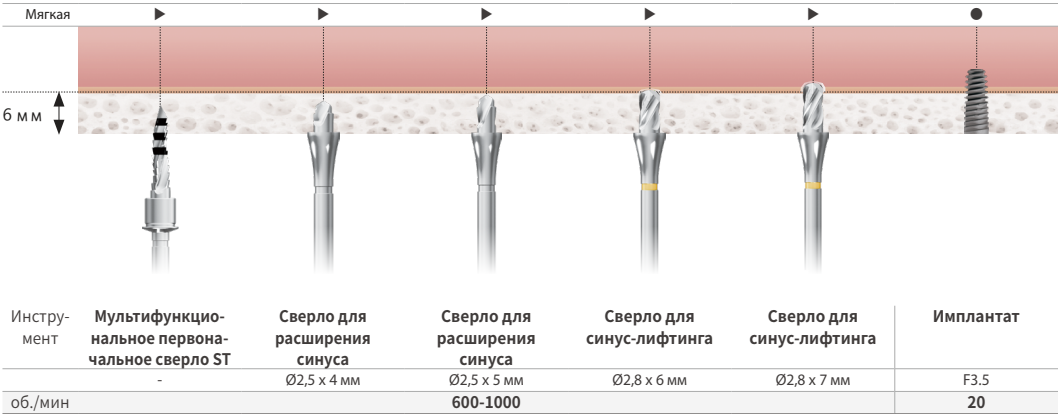


F4.0 x
8,5 мм
Остаточная
кость
6 мм

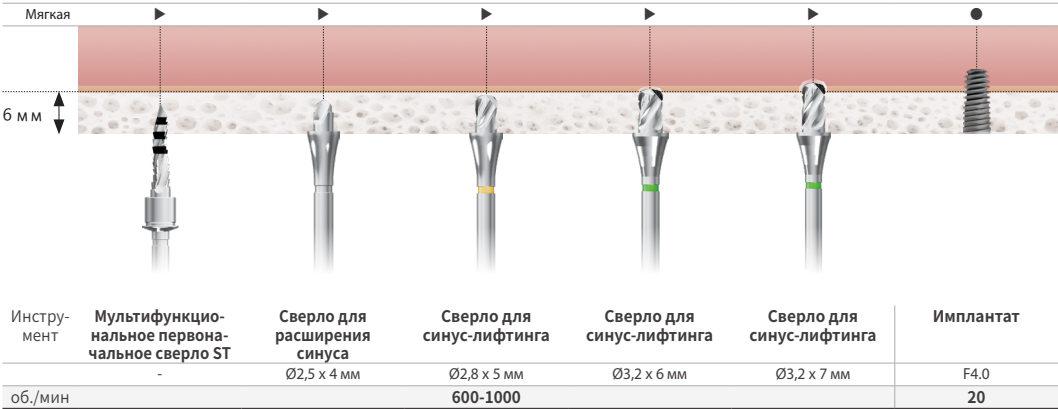

F4.5 x
8,5 мм
Остаточная
кость
6 мм

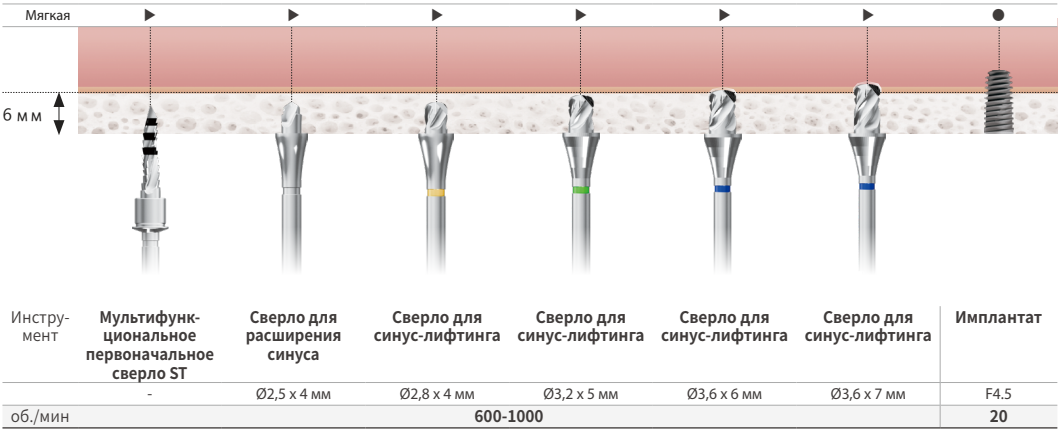


F5.0 x
8,5 мм
Остаточная
кость
6 мм

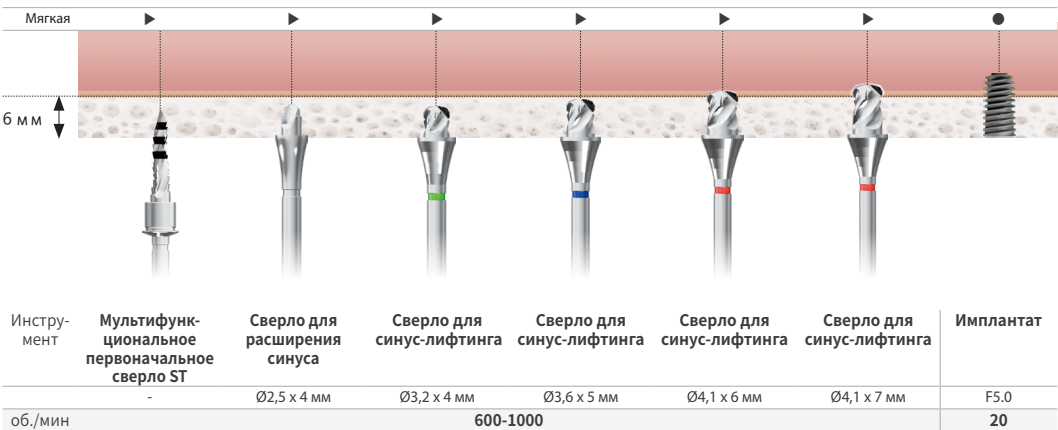


Набор остеотомов для синус-лифтинга (SKOS 01) Набор

- Специализированный набор для закрытого синус-лифтинга
- Разработан для максимального комфорта - снижает ударную нагрузку
- Легкая регулировка глубины с помощью специального ограничителя
- Для более высокого подъема (на большую высоту) используйте гидравлический подъемник мембраны для безопасного и удобного синус-лифтинга

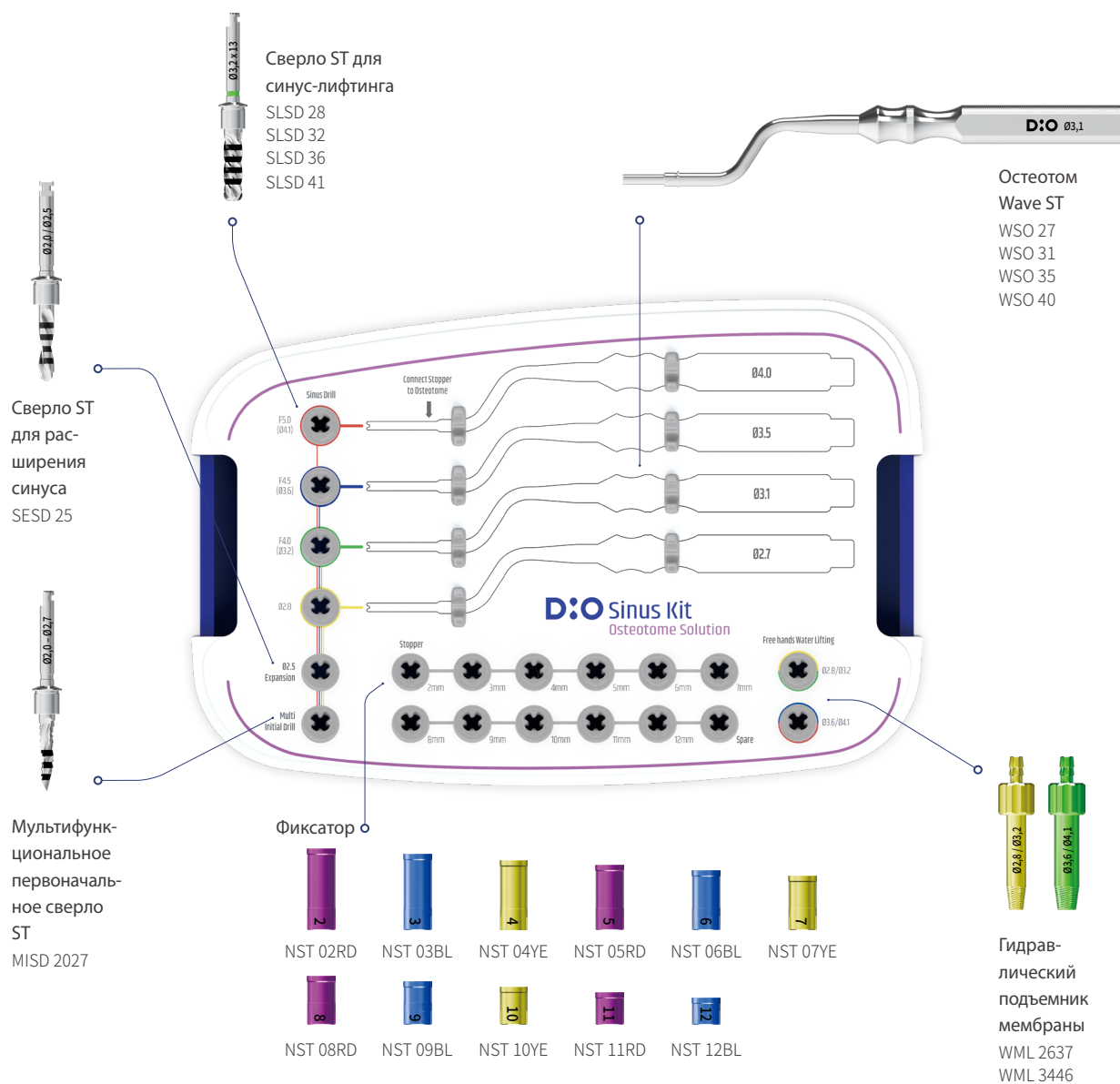

Инструмент для отслоения синусной мембраны
SMDT 01

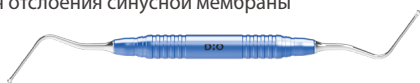

Глубиномер
DPG 2050



Трубка для физиологического раствора
MLT 40300



Хирургический молоточек
OSM 001



* Компоненты нижней панели

F3.5 x 8,5 мм

Остаточная кость 6 мм

Инструмент	Мультифункциональное первоначальное сверло ST	Сверло ST для расширения синуса Ø2,5 x 4 мм	Сверло ST для синус-лифтинга Ø2,8 x 5 мм	Остеотом Wave ST Ø2,7 x 6 мм	Имплантат F3.5
об./мин	-	600-1000			20

F4.0 x 8,5 мм

Остаточная кость 6 мм

Инструмент	Мультифункциональное первоначальное сверло ST	Сверло ST для расширения синуса Ø2,5 x 4 мм	Сверло ST для синус-лифтинга Ø3,2 x 5 мм	Остеотом Wave ST Ø3,1 x 6 мм	Имплантат F4.0
об./мин	-	600-1000			20

F4.5 x 8,5 мм

Остаточная кость 6 мм

Инструмент	Мультифункциональное первоначальное сверло ST	Сверло ST для расширения синуса Ø2,5 x 4 мм	Сверло ST для синус-лифтинга Ø2,8 x 5 мм	Сверло ST для синус-лифтинга Ø3,6 x 5 мм	Остеотом Wave ST Ø3,5 x 6 мм	Имплантат F4.5
об./мин	-	600-1000			20	

F5.0 x 8,5 мм

Остаточная кость 6 мм

Инструмент	Мультифункциональное первоначальное сверло ST	Сверло ST для расширения синуса Ø2,5 x 4 мм	Сверло ST для синус-лифтинга Ø3,2 x 5 мм	Сверло ST для синус-лифтинга Ø4,1 x 5 мм	Остеотом Wave ST Ø4,0 x 6 мм	Имплантат F5.0
об./мин	-	600-1000			20	


Набор хирургических инструментов Набор

Мультифункциональное первоначальное сверло ST

Используется для формирования начального отверстия / коррекция направления

- Рабочая часть исключает соскальзывание при работе на скошенной поверхности кости
- Ограничитель применяется опционально, в зависимости от высоты остаточной кости

Единица измерения мм	
Диаметр	Ø2,0
Код	MISD 2027

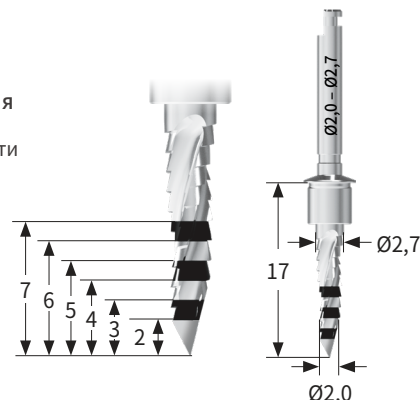

Сверло для расширения синуса

Используется для расширения отверстия перед применением сверла для синус-лифтинга.

- Включает сверла, соответствующие остаточной высоте кости


Единица измерения мм							
Диаметр	Ø2,5						
Длина	3	4	5	6	7	8,5	10
Код	SED 2503	SED 2504	SED 2505	SED 2506	SED 2507	SED 2508	SED 2510



Сверло для синус-лифтинга

Сверло для синус-лифтинга, смещающее костные опилки к мембране в процессе препарирования

- Атравматичная форма для сохранения целостности мембраны
- Включает сверла, соответствующие остаточной высоте кости

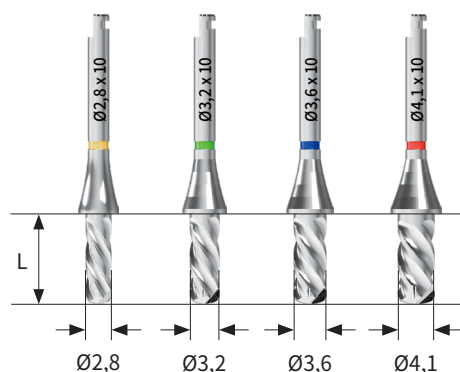


Единица измерения мм				
Диаметр	Ø2,8	Ø3,2	Ø3,6	Ø4,1
Длина 3	SLD 2803	SLD 3203	SLD 3603	SLD 4103
4	SLD 2804	SLD 3204	SLD 3604	SLD 4104
5	SLD 2805	SLD 3205	SLD 3605	SLD 4105
6	SLD 2806	SLD 3206	SLD 3606	SLD 4106
7	SLD 2807	SLD 3207	SLD 3607	SLD 4107
8,5	SLD 2808	SLD 3208	SLD 3608	SLD 4108
10	SLD 2810	SLD 3210	SLD 3610	SLD 4110
Цвет	Желтый	Зеленый	Синий	Красный

Сверло ST для расширения синуса

Используется для расширения отверстия перед применением сверла для синус-лифтинга ST.

- Ограничитель применяется опционально, в зависимости от высоты остаточной кости

Единица измерения мм	
Диаметр	Ø2,5
Код	SESD 25

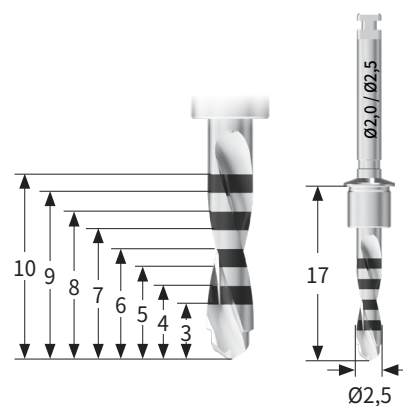


Сверло ST для синус-лифтинга

Сверло для синус-лифтинга, смещающее костные опилки к мембране в процессе препарирования

- Атравматичная форма для сохранения целостности мембраны
- Ограничитель применяется опционально, в зависимости от высоты остаточной кости

Единица измерения мм				
Диаметр	Ø2,8	Ø3,2	Ø3,6	Ø4,1
Код	SLSD 28	SLSD 32	SLSD 36	SLSD 41

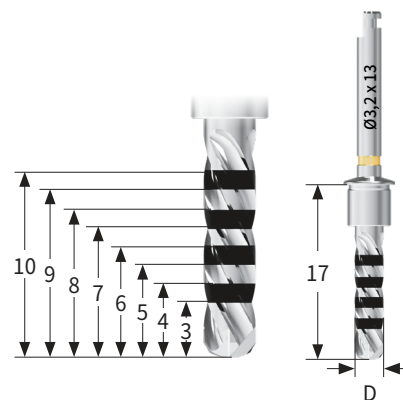

Остеотом Wave ST

Разработан для максимального комфорта - снижает ударную нагрузку

- Легкая регулировка глубины с помощью специального ограничителя



Единица измерения мм				
Диаметр	Ø2,7	Ø3,1	Ø3,5	Ø4,0
Код	WSO 27	WSO 31	WSO 35	WSO 40

Набор хирургических инструментов Набор

Фиксатор

Используется для контроля глубины при работе: мультифункциональным первоначальным сверлом ST, сверлом ST для расширения синуса, сверлом ST для синус-лифтинга и волнообразным остеотомом ST.

- Цветовая маркировка по длине + лазерная гравировка на ограничителе для быстрого распознавания



Единица измерения мм

Длина препарирования	2	3	4	5	6	7
Длина ограничителя	15	14	13	12	11	10
Код	NST 02RD	NST 03BL	NST 04YE	NST 05RD	NST 06BL	NST 07YE
						
Длина препарирования	8	9	10	11	12	
Длина ограничителя	9	8	7	6	5	
Код	NST 08RD	NST 09BL	NST 10YE	NST 11RD	NST 12BL	
						

Гидравлический подъемник мембраны

Инструмент для гидравлического синус-лифтинга

- Вкручивается по часовой стрелке в подготовленное отверстие
- Комфортный гидравлический синус-лифтинг, не требующий дополнительной помощи

Единица измерения мм

Диаметр	Ø3,7	Ø4,6
Доступный диаметр отверстия	Ø2,8–3,2	Ø3,6–4,1
Код	WML 2637	WML 3446



Гидравлический подъемник мембраны Dummy

Используется для блокировки соседних отверстий при проведении гидравлического подъема в двух и более точках

***Поставляется отдельно**

Единица измерения мм

Диаметр	Ø3,7	Ø4,6
Доступный диаметр отверстия	Ø2,8–3,2	Ø3,6–4,1
Код	WMLD 2637	WMLD 3446



Хирургический молоточек



Код

OSM 001

Инструмент для отслоения синусной мембраны

Используется для отделения мембраны через альвеолярный гребень

- Узкий атравматичный профиль гарантирует безопасный подъем при истонченной остаточной кости



Код

SMDT 01

Глубиномер

Используется для измерения глубины сформированного костного ложа



Код

DPG 2050

Трубка для физиологического раствора

- Шприц приобретается отдельно



Код

MLT 40300

D:O IMPLANT

D:O IMPLANT