

DIO IMPLANT SYSTEM

Каталог продукции

D:O

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

Система имплантатов DIO
Каталог продукции

Дата издания декабрь 2025 г.
Издатель ООО «ДИО РУС»

DIO IMPLANT SYSTEM

Каталог продукции

ДИО Имплант по всему миру



Выходя за рамки имплантологии, компания DIO стремится к развитию цифровой стоматологии.

Воодушевленные своей миссией, мы превращаем передовые корейские разработки в глобальный стандарт качества и инноваций по всему миру.

Сегодня DIO признана не только на внутреннем рынке, но и более чем в 70 странах как ведущая компания в области цифровой стоматологии с выдающимися технологиями и качеством продукции.

Внутренняя Сеть

Штаб-квартира
DIO

Каннам
Канбук
Кёнъин
Кёнги
Канвон
Тэджон

Кванджу
Чонджу
Пусан
Ульсан
Тэгу
Кённам
Чеджу



Глобальная Сеть	Азия	Америка	Европа	Латвия	Океания	Ближний Восток
	Китай	США	Россия	Литва	Австралия	Турция
	Япония	Канада	Италия	Эстония		Иордания
	Тайвань	Мексика	Португалия	Албания		Ирак
	Индия	Колумбия	Испания	Кипр		Иран
	Таиланд	Перу	Франция	Швейцария		
	Вьетнам	Эквадор	Украина	Дания	Центральная Азия	Африка
	Гонконг	Коста-Рика	Румыния	Нидерланды	Казахстан	Египет
	Мьянма		Чехия	Австрия	Узбекистан	Ливия
	Сингапур		Словакия	Великобритания	Кыргызстан	Марокко
	Камбоджа		Польша	Болгария		Тунис
	Непал		Венгрия			

История компании ДИО Имплант


Компания в центре передовых технологий, создающая лучшее будущее.
Мы стремимся сделать жизнь людей счастливее благодаря непрерывным инновациям.

1988 - 2008

- 1988 · Основание АО «ДИО»
- 1990 · Отбор Банком Кореи как перспективное предприятие
- 1994 · Статус высокотехнологичной компании (Миннауки)
- 1995 · Сертификация GS, CE;
· Экспортная премия (10 млн USD)
- 1997 · Сертификат ISO 9001
- 1998 · Сертификат EM (марка качества)
- 1999 · Экспортная премия (50 млн USD)
- 2000 · Основание филиала в Китае
· Регистрация на KOSDAQ
· Премия Премьер-министра
- 2002 · Запуск производства имплантатов
· Включение в список ведущих производителей
- 2003 · Президентская премия (капитальное оборудование)
- 2005 · Сертификат ISO 13485
· Основание филиала во Вьетнаме
- 2006 · Сотрудничество с Biostet Medical (Германия)
· Основание филиала в Австралии
· Одобрение FDA (США)
- 2007 · D.S.I Science & Trade co. Ltd. (Пекин)
· Сертификация KGMP

2009 - 2015

- 2009 · Патент на коронарный стент
· Соцпроект с Ассоциацией стоматологов Кореи (10 лет)
· Сертификация «Ведущее предприятие Пусана»
· Одобрение SFDA (Китай)
- 2010 · Первый в Кореи выпуск стента Biomatrix
· Запуск системы узких имплантатов
· Запуск сканера iTero
· Запуск Customized Абатмент I-Fit
· Почётная грамота Министра экономики знаний за вклад в региональные инвестиции
· Почётная грамота Министра экономики знаний на 40-й Корейской выставке точной промышленности
- 2011 · Запуск VUV Surface Treatment
· Запуск системы имплантатов UF
· Признана образцовой компанией г. Пусан
· Премия Минэкономики за развитие региональных инвестиций
· Экспортная премия (100 млн USD)
- 2012 · Запуск TRIOS Scanbody
· Запуск HSA Prosthetic Система
· Запуск цифрового решения Trione
- 2013 · Основание филиалов в Тайване и Мексике
- 2014 · Запуск цифровой системы имплантатов DIO NAVI
· Создание общества сотрудников-акционеров
· Награда за вклад в экспорт
- 2015 · Отбор в программу World Class 300

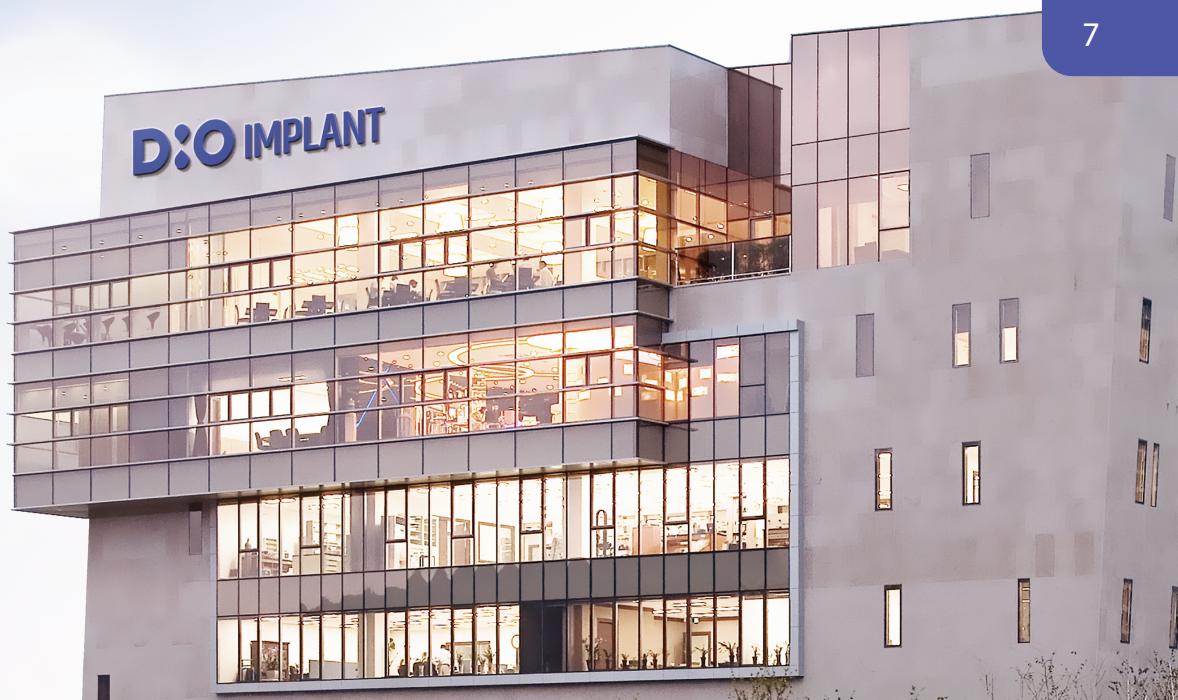

2016 - 2020

- | | |
|------|---|
| 2016 | <ul style="list-style-type: none"> • Запуск 'SMART NAVI' • Основание DIO Digital Academy (DDA) • Подписание многостороннего соглашения о совместных исследованиях (Multi Study MOU, 9 стран) • Основание компании DIO Digital Corporation в Японии • Ведущая организация нацпроекта по медбиотехнологиям |
| 2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Основание филиала в Индии и производственного предприятия в Китае (Чжэянг) • Запуск цифровой ортодонтической системы DIO Ortho NAVI |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Основание SICHUAN DIO CO., LTD. (Китай) • Запуск 3D-принтера DIO PROBO • Запуск материалов для 3D-печати • Запуск UV Activator • Запуск 'DIO NAVI Full Arch' • Основание NYU DIO Digital Academy |
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Приобретение компании CPM PHARMA, LDA (Португалия) • Приобретение компании WHITECAP HOLDINGS, LLC (США) • Национальная награда за технологические инновации (Южная Корея) • Запуск UV Активатор2 (награждён iF Design Award 2020) |
| 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Создание инновационного R&D-центра в Сеуле • Приобретение DIO VINA CO., LTD (Вьетнам) • Основание филиала в Турции • Награда Минтруда за достижения общества сотрудников-акционеров • Запуск материала для протезов DIO NAVI-P. MAX • Запуск прозрачной ортодонтической системы DIO Ortho NAVI Clear Aligner |


2021 - 2025

- | | |
|--------------|--|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Запуск DIO Ecosystem (цифровая ортопедия) • Запуск 3D-принтера DIO PROBO Z • Филиалы в Италии, Таиланде, Великобритании и России • Завершение создания цифровой платформы • 500 000 имплантатов DIO NAVI • Запуск набора New Dr. SOS+ |
| 2022
Open | <ul style="list-style-type: none"> • Титульное спонсорство LPGA 2022 ДИО Имплант LA • 700 000 имплантатов DIO NAVI |
| 2023
Open | <ul style="list-style-type: none"> • Филиал в Венгрии (DIO CENTRAL EUROPE Kft) • Титульное спонсорство LPGA 2023 ДИО Имплант LA • Запуск имплантата DIO UFIII • 800 000 имплантатов DIO NAVI • Запуск абатмента DIO DeSR • 1 млн имплантатов VUV (глобальные продажи) |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"> • 10 000 полных дуг DIO NAVI Full Arch (глобально) • 1 000 000 имплантатов DIO NAVI • Экспортная награда (50 млн \$) |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"> • Присвоение статуса высокотехнологичной компании Министерством • Получение европейских сертификаций CE и MDR • Открытие онлайн-магазина DIO-Mall • Запуск набора New Sinus |

Гибридная пескоструйная обработка и кислотное травление


Верхняя часть имплантата имеет микротекстуру для помощи в предотвращении периимплантита, в то время как тело и апикальная часть обработаны для создания оптимальной шероховатости поверхности, обеспечивающей превосходную остеоинтеграцию.

Верхняя часть

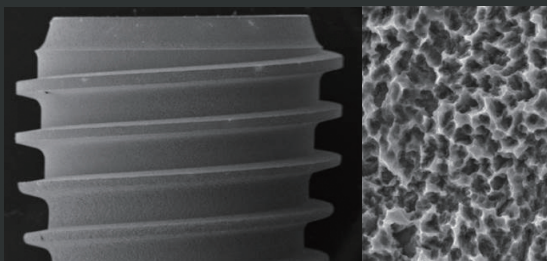

Микротекстура поверхности (2,5 мкм)


Нижняя часть и Апекс

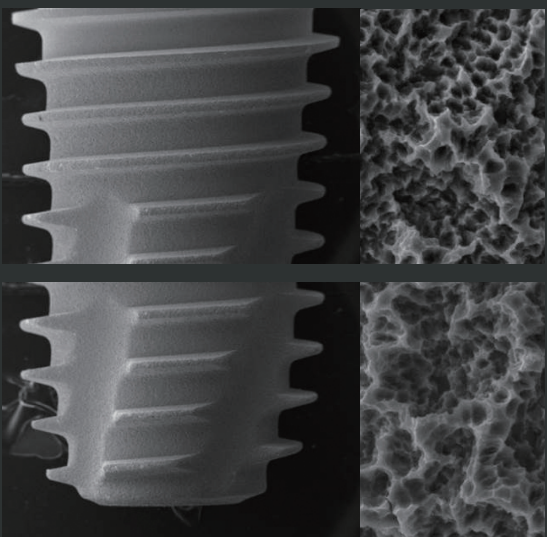


Макротекстура поверхности



Эффект от модификации поверхности имплантата

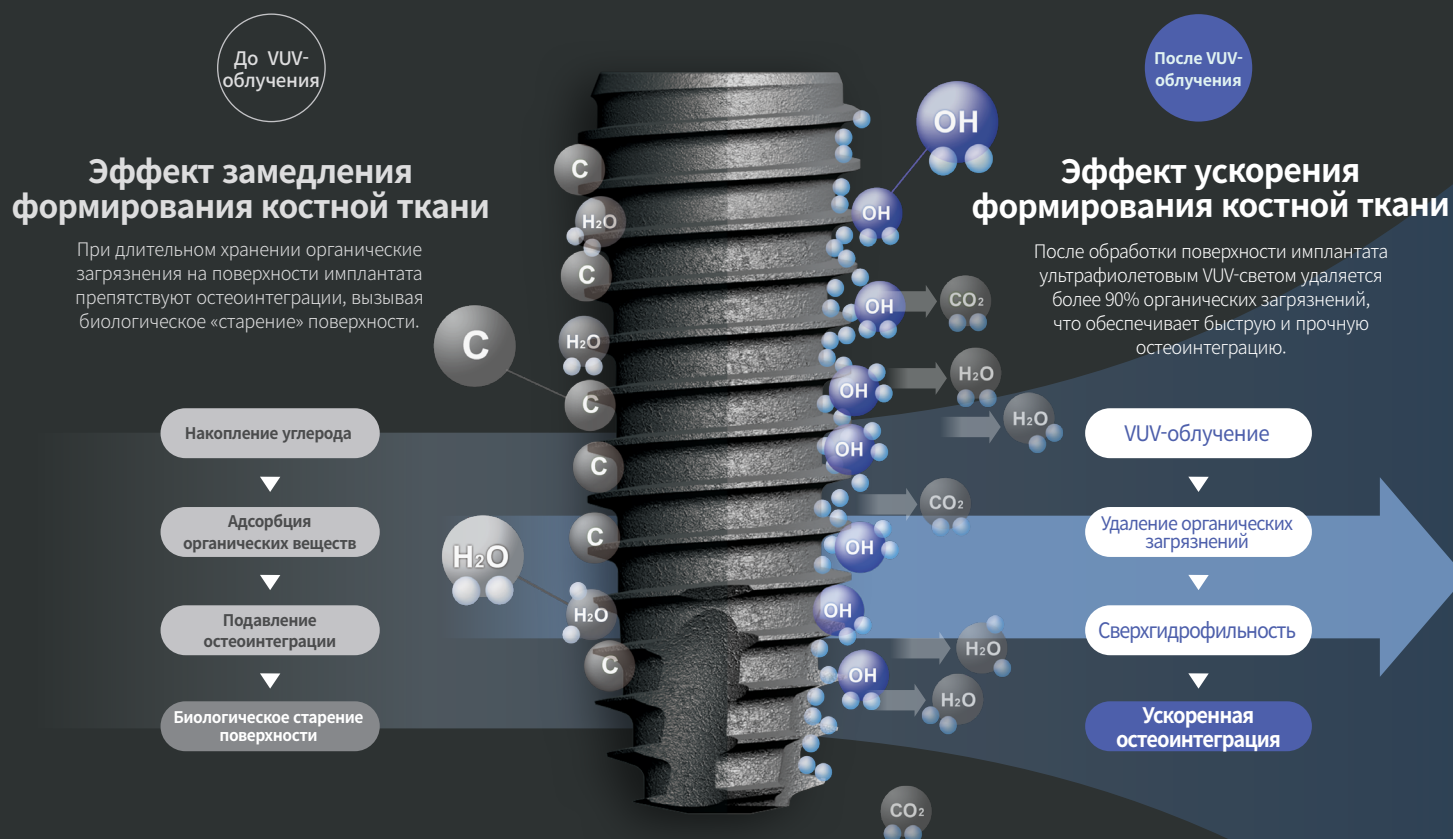

Обычные имплантаты

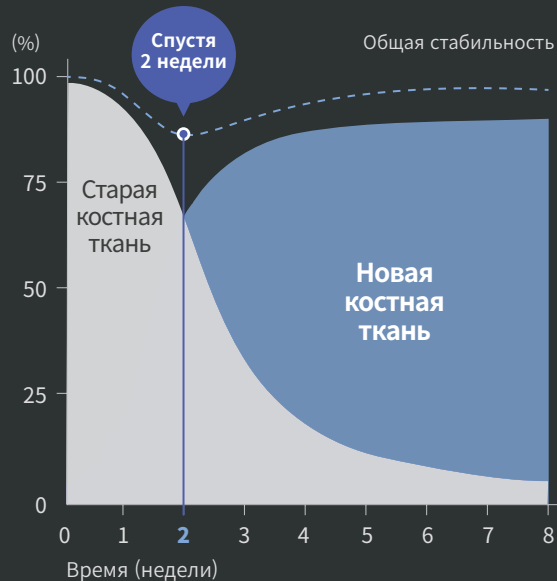

DIO VUV-имплантаты

Система Погружного Типа Содержание

026		030		034		036	
Имплантат UFII		Имплантат UFIII		Винт-заглушка		Формирователь десны	

039		041		042		043		044	
Цементируемый абатмент		Абатмент обтачиваемый		Угловой абатмент		UCLA CCM-абатмент		UCLA пластиковый абатмент	

045		046		048		049		050	
Временный абатмент		Двойной абатмент		Трансфер для открытой ложки		Трансфер для закрытой ложки		Аналог имплантата винтообразного	

053		054		054		055		055	
Абатмент монолитный		Защитный колпачок		Колпачок слепочный		Аналог монолитного абатмента		Пластиковый выжигаемый колпачок	

057		058		060		060		061	
Multi-unit Прямой абатмент		Multi-unit Угловой абатмент		Multi-unit Заживляющий колпачок		Multi-unit Трансфер для открытой ложки		Multi-unit Слепочный трансфер для открытой ложки	

061		061		062		062		063	
Multi-unit Маркер H-Scan Body		Multi-unit Адаптер для сканера		Multi-unit Абатмент угловой Jig		Multi-unit Винт прямой		Multi-unit Аналог абатмента	

063		064		064		065	
Multi-unit Цифровой аналог		064 Цилиндр цементируемый		Multi-unit Пластмассовый цилиндр		Multi-unit Временный цилиндр	

Система Погружного Типа Содержание

087		091		094		096	
Цифровой абатмент		Колпачок защитный		Маркет H-Scan Body/Jig		Адаптер для сканера	
098		098		099			
Балка предварительно отшлифованная		Цифровой аналог		Гибридный абатмент			

103		106		106		106		107	
UFII имплантаты		Имплантовод		Винт заглушка		Винт закрывающий		Формирователь десны	
109		110		111		106		107	
Цементируемый абатмент		Удлинённый Цементируемый абатмент		Угловой абатмент		UCLA CCM абатмент		UCLA пластиковый абатмент	
114		115		116		116		119	
Временный абатмент		Трансфер для открытой ложки		Трансфер для закрытой ложки		Аналог имплантата винтообразного		Абатмент монолитный	
119		120		120		121		121	
Колпачок защитный		Колпачок слепочный		Цилиндр позиционный		Лабораторный аналог абатмента & Пин		Аналог монолитного абатмента	
121		122		122		122		123	
Оcta Пластиковый колпачок абатмента		Абатмент монолитный		Колпачок защитный		Колпачок слепочный		Аналог монолитного абатмента	
123		125		125		126		126	
Пластиковый колпачок абатмента		Оcta абатмент		Оcta Колпачок закрывающий		Оcta Трансфер для открытой ложки		Оcta Трансфер для закрытой ложки	
126		127		127		127		127	
Аналог Оcta абатмента		Оcta Временный цилиндр		Оcta Цилиндр с цементной фиксацией		Оcta Цилиндр гладкомассовый			

Система Непогружного Типа Содержание

129

Абатмент шаровидный



130

Аналог абатмента шаровидного



130

Кольцевой уплотнитель



130

Набор кольцевого уплотнителя с ретейнером



130

Набор кольцевого уплотнителя с колпачком шаровидным



131

Маркет H-Scan Body / Jig



132

Адаптер для сканера



132

Балка предварительно отшлифованная



133

Гибридный абатмент



133

Цифровой аналог



137		139		141		141		143	
Protap Post Type имплантаты		Protap Ball Type имплантаты		Трансфер для открытой ложки Post Type		Аналог абатмента Post Type		Кольцевой угнетитель	
143	  	143		144		144		144	
Колпачок шаровидный Ball Тип		Аналог абатмента шаровидного Ball Тип		Цементируемый абатмент Ball Тип		Индивидуальный абатмент Ball Тип		Колпачок закрывающий	
144									
Трансфер для закрытой ложки Ball Тип									

Хирургический Набор Содержание

148

Хирургический набор

UF 07



149

Хирургический набор


UF 15



150

Набор UFil Narrow


UF 08

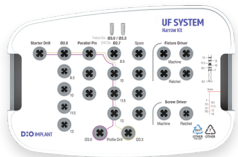

151

Набор UFil Wide


UF 09

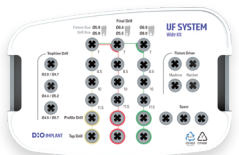

152

Набор UFil Starter


UFST 00

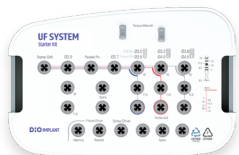

153

Набор UFil Master


UF 06

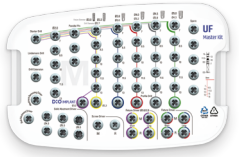

162

Мастер-набор UFil Internal

UF 12

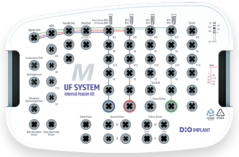

164

Стартовое сверло



164

Первоначальное сверло



164

Ограничитель сверла



164

Ограничитель сверла



165

Сверло прямое



165

Сверло Линдерманна



165

Финальное сверло



166

Финальное сверло



166

Прямой ограничитель сверла



167

Ограничитель сверла



168

Профильное сверло



168

Расширитель



169

Конический метчик



170

Штифт параллельный



170

Направляющий штифт



170

Пилотное сверло



171

Штифт направляющий



171

Штифт наклонный



172

Драйвер имплантата



173

Набор удлинителя для сверла



174

Имплантовод Отвёртка (Машина)



174

Имплантовод
Отвёртка
(ключ-трещотка)



175

Шестигранная
отвертка
(Машина)



175

Шестигранная
отвертка
(ключ-трещотка)



176

Драйвер
абатмента



177

Угловая
отвёртка



177

Отвёртка
для снятия
абатмента



177

Костный
трепан



178

Динамометрический
ключ



178

Глубиномер



178


Открытый
ключ



Наборы DIO NAVI Содержание


176

Набор
DIO NAVI
Master S
UF 77

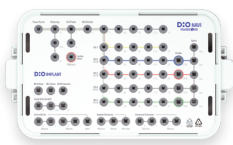


183

Набор
DIO NAVI
Narrow
UF 14

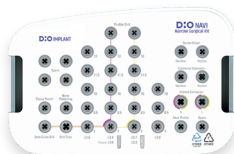


184

Набор
DIO NAVI
Wide
UF 11

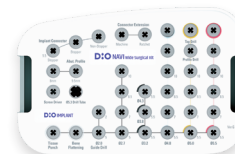


185

Набор
DIO NAVI
Starter
UFST 01

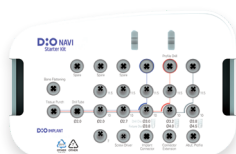


203

Набор
DIO Master
UF 05

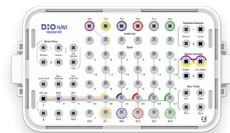


204

Набор DIO NAVI
Flapless Crestal
Sinus
SMK 02

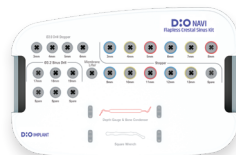

208

Набор
DIO NAVI
Special
SGF 02

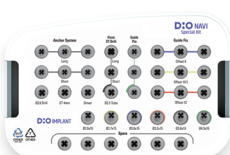

194

Мукотом



194

Сверло для
выравнивания
кости



194

Направляющее
сверло
Гайд



195

Первоначальное
сверло



195

Начальная
позиционирующая
фреза



195

Трубка для
фиксации
сверла



196

Финальное
сверло
(Narrow)



196

Финальное
сверло
(Regular)



197

Финальное
сверло
(Wide)



198

Профильное
сверло



198

Конический
метчик



199

Боковая
режущая
фреза



199

Сверло для
обеспечения
профиля



200

Удлинитель
сверла
(Набор)



200

Удлинитель
соединения




200

Коннектор
для удаления
имплантата



201

Соединитель
имплантата

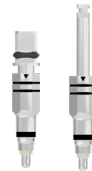

202

Отвертка /
ключ
(Машина)



202

Отвертка /
ключ
(Ключ
-трещотка)



202

Динамометрический
ключ



205

Ограничитель сверла Ø2.0



205

Сверло для синус-лифтинга



206

Ограничитель сверла Ø3.2 (Гребневой подход)



206

Глубиномер и уплотнитель кости



207

Подъемник мембраны



207

Квадратный ключ



207

Трубка для Ирригации



209

Анкерное сверло



209

Ограничитель



209

Анкерный винт



209

Направитель анкерного винта



210

Первоначальное сверло



210

Прямое разметочное сверло



210

Прямое сверло



211

Хирургический шаблон для фиксации штифтом



211

Хирургический шаблон для фиксации штифтом



212

Металлический игольчатый наконечник



213

Сверло для профилирования кости



213

Направляющий винт



213

Инструмент для снятия уплотнителя абатмента



214

Направляющая муфта




214

Анкерная втулка



215

Фреза для направляющей гильзы

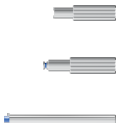

Прочие наборы Содержание

218

Набор
New
Dr.SOS+


DRS 05



224

Набор
Sinus Master

SMK 01

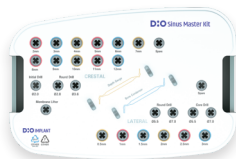

232

Набор
Sinus Lift


SLK 01



233

Набор
Osteotome


OST 01

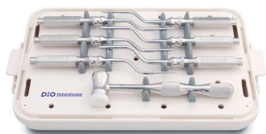

234

Набор
Bone Expander


BEP 00

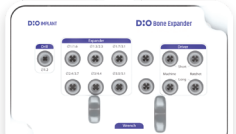

235

Набор
UFII Prosthetic

UFP 02

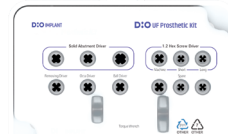

219

Внутренний
направитель

219

Внешний
направитель

220

Реверсное
сверло

220

Экстрактор



221

Съемник
винтов

221

Держатель
винта

222

Универсальный
извлекатель
имплантата

222

Направитель
винтового
метчика

222

Прямоугольная
ручка

223

Адаптер
квадратного
сечения

223

Квадратный
ключ

223

Костный
трепан

225

Первоначальное
сверло Ø2.0

225

Сверло
круглое

225

Ограничитель



226

Глубиномер



226

Костный
уплотнитель

226

Подъемник
мембраны

226

Трубка
для
иригации

227

Сверло
круглое

227

Сверло
трубчатое

227

Ограничитель



238

Винт НКР



Оборудование и Материалы

Содержание

242DIO
PROBO Z3D-принтер
и материалы**243**DIO PROBO
Cure23D-принтер
и материалы**246**UV
Activator2

UV-Активатор

**244**

DIO NAVI-C&B

3D-принтер
и материалы**244**DIO NAVI-SG/
SG023D-принтер
и материалы**244**DIO NAVI-
Model033D-принтер
и материалы**245**DIO NAVI-
Denture023D-принтер
и материалы**245**DIO NAVI-
Cast023D-принтер
и материалы

250

DIO NAVI
Гайд
Система



01

Система Погружного Типа

026	Имплантат UFII	053	Абатмент монолитный
030	Имплантат UFIII	057	Прямой абатмент
034	Винт-заглушка	067	Стандартный абатмент DeSR
036	Формирователь десны	075	Оста абатмент
039	Цементируемый абатмент	081	Аналог абатмента шаровидного
041	Абатмент обтачиваемый	085	Цифровой абатмент
042	Угловой абатмент	094	Цифровые компоненты
043	UCLA абатмент		
045	Временный абатмент		
046	Двойной абатмент		

Имплантат UFII

Открытая резьба

Открытая резьба облегчает отведение костных опилок и позволяет регулировать глубину установки имплантата.

Верхняя резьба

Первичная фиксация

Коническая резьба на прямом имплантате эффективно распределяет нагрузку и снижает ее на верхнюю часть имплантата.

Прямое тело

Снижает костное повреждение.

Постоянный диаметр тела имплантата снижает травматизацию костной ткани и обеспечивает стабильную установку даже при увеличенной длине имплантата.

Коническое тело

Постепенное направляющее сужение

Коническая форма имплантата обеспечивает плавное и лёгкое введение даже при минимальном препарировании в мягкой костной ткани.

Смещение платформы

Конструкция со смещённой платформой (Платформа Switching) обеспечивает стабильное соединение и предотвращает резорбцию кости вокруг шейки имплантата.

Конусное соединение Морзе



Коническое соединение между имплантатом и абатментом обеспечивает герметичность, высокую механическую прочность и надёжную передачу нагрузки.

Режущая кромка


Острая режущая кромка улучшает самонарезающее действие (Self-tapping) и облегчает установку имплантата даже в плотной кости.

Апикальная часть

Закруглённая форма апекса снижает риск повреждения анатомических структур при установке имплантата.

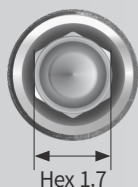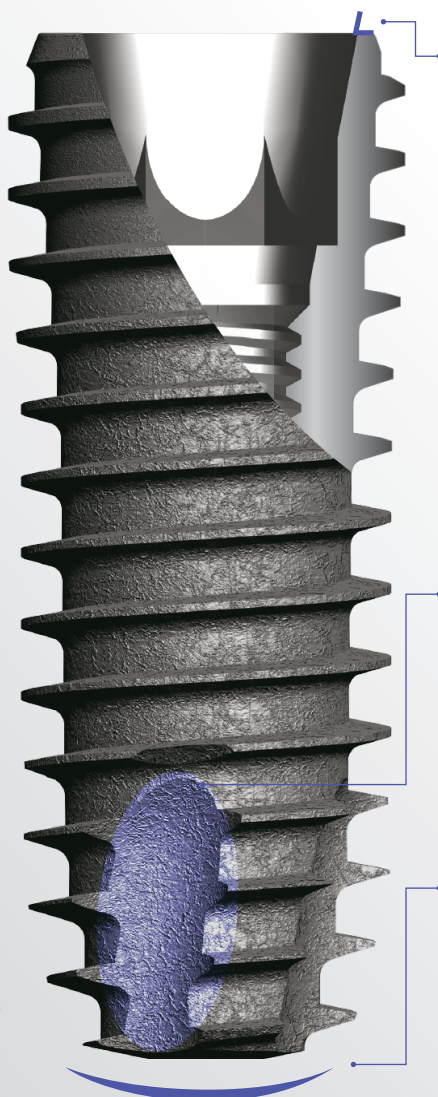

Hex 1.7

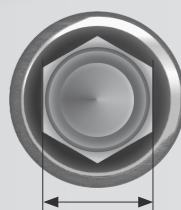

Hex 2.5

Hex

1.7

2.5

Тело
Имплантата

Ø3.0

Ø3.3

Ø3.8

Ø4.0

Ø4.5

Ø5.0

Ø5.5

Ø5.9

Ø6.4

Ø6.9


Narrow

Regular

Narrow Имплантат

Имплантат Ø3.0 — предназначен для фронтального отдела

- VUV / Комплектация
 - Имплантат | Код заказа : UF(II)N 0000UV3 (ex : UF(II)N 3008UV3)

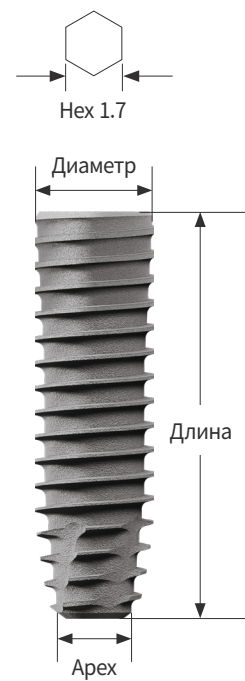

N

D Ø3.0
Hex 1.7
Апекс Ø1.6

	Ед.изм.мм				
Длина	8.5	10	11.5	13	15
					
VUV	UF(II)N 3008UV3	UF(II)N 3010UV3	UF(II)N 3011UV3	UF(II)N 3013UV3	-


N

D Ø3.3
Hex 1.7
Апекс Ø1.9

	Ед.изм.мм				
Длина	8.5	10	11.5	13	15
					
VUV	UF(II)N 3308UV3	UF(II)N 3310UV3	UF(II)N 3311UV3	UF(II)N 3313UV3	-

Regular Имплантат

- VUV / Комплектация
- Имплантат | Код заказа : UF(II) 0000UV3 (ex : UF(II) 3808UV3)

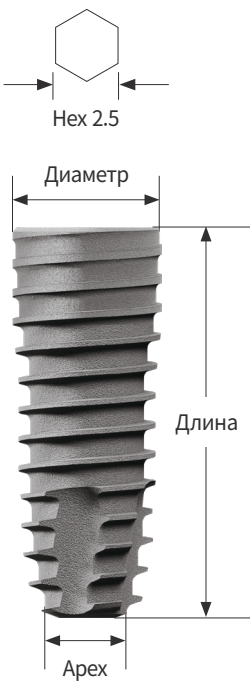


R

D Ø3.8
Hex 2.5
Апекс Ø1.4

	Ед.изм.мм			
Длина	8.5	10	11.5	13
				
VUV	UF(II) 3808UV3	UF(II) 3810UV3	UF(II) 3811UV3	UF(II) 3813UV3


R

D Ø4.0
Hex 2.5
Апекс Ø1.6

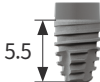
Длина	7(5.5)	7	8.5	10	11.5	13
						
VUV	UF(II) 4005UV3	UF(II) 4007UV3	UF(II) 4008UV3	UF(II) 4010UV3	UF(II) 4011UV3	UF(II) 4013UV3

R


D Ø4.5
Hex 2.5
Апекс Ø1.6

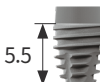Длина	7(5.5)	7	8.5	10	11.5	13
						
VUV	UF(II) 4505UV3	UF(II) 4507UV3	UF(II) 4508UV3	UF(II) 4510UV3	UF(II) 4511UV3	UF(II) 4513UV3

R
D Ø5.0
Hex 2.5
Apex Ø2.0

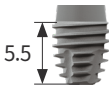Длина	7(5.5)	7	8.5	10	11.5	13
						
VUV	UF(II) 5005UV3	UF(II) 5007UV3	UF(II) 5008UV3	UF(II) 5010UV3	UF(II) 5011UV3	UF(II) 5013UV3


R
D Ø5.5
Hex 2.5
Apex Ø2.5

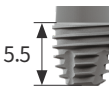Длина	7(5.5)	7	8.5	10	11.5	13
						
VUV	UF(II) 5505UV3	UF(II) 5507UV3	UF(II) 5508UV3	UF(II) 5510UV3	UF(II) 5511UV3	UF(II) 5513UV3

R
D Ø5.9
Hex 2.5
Apex Ø3.6

Длина	7(5.5)	7	8.5	10	11.5
					
VUV	UF(II) 6005UV3	UF(II) 6007UV3	UF(II) 6008UV3	UF(II) 6010UV3	UF(II) 6011UV3

R
D Ø6.4
Hex 2.5
Apex Ø3.6

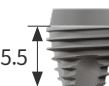Длина	7(5.5)	7	8.5	10	11.5
					
VUV	UF(II) 6505UV3	UF(II) 6507UV3	UF(II) 6508UV3	UF(II) 6510UV3	UF(II) 6511UV3

Имплантат UFIII


Имплантат Система погружного типа

Полностью конический корпус

Коническая конструкция обеспечивает превосходную стабильность при установке.

Мощная режущая кромка

Острая и длинная режущая кромка обеспечивает легкое вкручивание и самонарезание даже при минимальном препарировании кости.

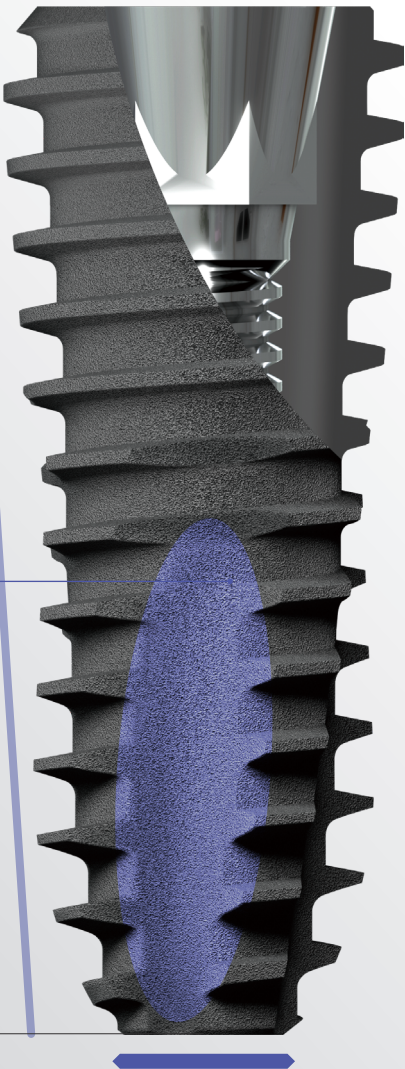


Увеличенный диаметр


Гарантирует стабильную фиксацию даже в условиях мягкой кости и при проведении синус-лифтинга.

Широкий шаг резьбы

Геометрия и глубина резьбы рассчитаны для достижения максимальной площади костного контакта с имплантатом.

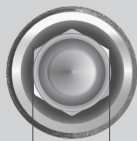

Hex 1.7

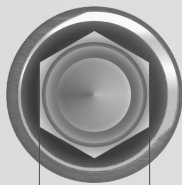

Hex 2.5

Hex

1.7

2.5



Ø3.0

Ø3.3

Ø3.8

Ø4.0

Ø4.5

Ø5.0

Ø5.5

Ø5.9

Ø6.4

Ø6.9

Тело
Имплантата


Narrow

Regular

Narrow Имплантат

VUV / Комплектация

- Имплантат — Артикул: UFIIN 0000UV3 (например: UFIIN 3008UV3)

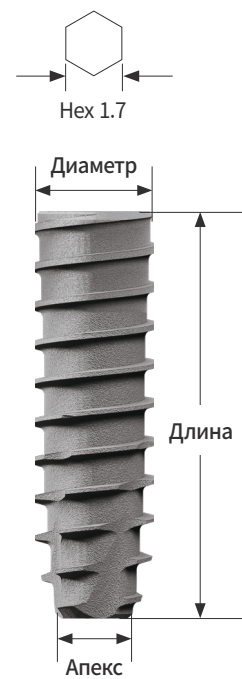

N
D Ø3.0
Hex 1.7
Апекс Ø1.6

	Ед.изм.мм				
Длина	8.5	10	11.5	13	15
					
VUV	UFIIN 3008UV3	UFIIN 3010UV3	UFIIN 3011UV3	UFIIN 3013UV3	-


N
D Ø3.3
Hex 1.7
Апекс Ø1.7

	Ед.изм.мм				
Длина	8.5	10	11.5	13	15
					
VUV	UFIIN 3308UV3	UFIIN 3310UV3	UFIIN 3311UV3	UFIIN 3313UV3	-

Regular Имплантат

VUV / Комплектация

• Имплантат — Артикул: UFIII 0000UV3 (например: UFIII 3808UV3)

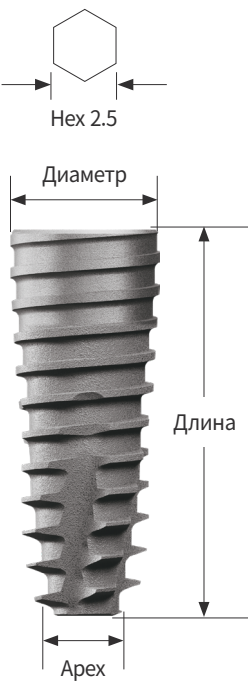

R

D Ø3.8
Hex 2.5
Апекс Ø1.4

	Ед.изм.мм			
Длина	8.5	10	11.5	13
				
VUV	UFIII 3808UV3	UFIII 3810UV3	UFIII 3811UV3	UFIII 3813UV3

R

D Ø4.0
Hex 2.5
Апекс Ø1.6

Длина	7	8.5	10	11.5	13
					
VUV	UFIII 4007UV3	UFIII 4008UV3	UFIII 4010UV3	UFIII 4011UV3	UFIII 4013UV3

R

D Ø4.5
Hex 2.5
Апекс Ø1.6

Длина	7	8.5	10	11.5	13
					
VUV	UFIII 4507UV3	UFIII 4508UV3	UFIII 4510UV3	UFIII 4511UV3	UFIII 4513UV3


R

D Ø5.0
Hex 2.5
Apex Ø2.0

Длина	7	8.5	10	11.5	13
					
VUV	UFIII 5007UV3	UFIII 5008UV3	UFIII 5010UV3	UFIII 5011UV3	UFIII 5013UV3


R

D Ø5.5
Hex 2.5
Apex Ø2.4

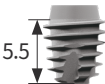Длина	7(5.5)	7	8.5	10	11.5	13
						
VUV	UFIII 5505UV3	UFIII 5507UV3	UFIII 5508UV3	UFIII 5510UV3	UFIII 5511UV3	UFIII 5513UV3


R

D Ø5.9
Hex 2.5
Apex Ø2.4

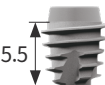Длина	7(5.5)	7	8.5	10	11.5
					
VUV	UFIII 6005UV3	UFIII 6007UV3	UFIII 6008UV3	UFIII 6010UV3	UFIII 6011UV3

R

D Ø6.4
Hex 2.5
Apex Ø2.6

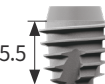Длина	7(5.5)	7	8.5	10	11.5
					
VUV	UFIII 6505UV3	UFIII 6507UV3	UFIII 6508UV3	UFIII 6510UV3	UFIII 6511UV3

Винт-заглушка Компоненты

Используется для защиты внутренней полости имплантата при проведении операции в два этапа.

- Используемый инструмент : отвертка Hex 1.2
- Инструкция по применению :
 - ① Удалите кровь и загрязнения из внутренней полости имплантата.
 - ② Установите винт, используя отвертку Hex 1.2, затягивая вручную с усилием 5–8 Н·см.
- Момент затяжки: 5–8 Н·см




Ед.изм.мм

Размер	N R	
	Narrow	Regular
		 
Высота 0	UNSCS 2700	SSCS 3400 -
1	UNSCS 2710	- SSCS 3410
2	UNSCS 2720	- SSCS 3420
3	UNSCS 2730	- SSCS 3430

D:O IMPLANT

Формирователь десны Компоненты

- Использовать Hex 1.2 драйвер
- Использовать 0.5 Слот-драйвер
- Момент затяжки : 5~8Ncm

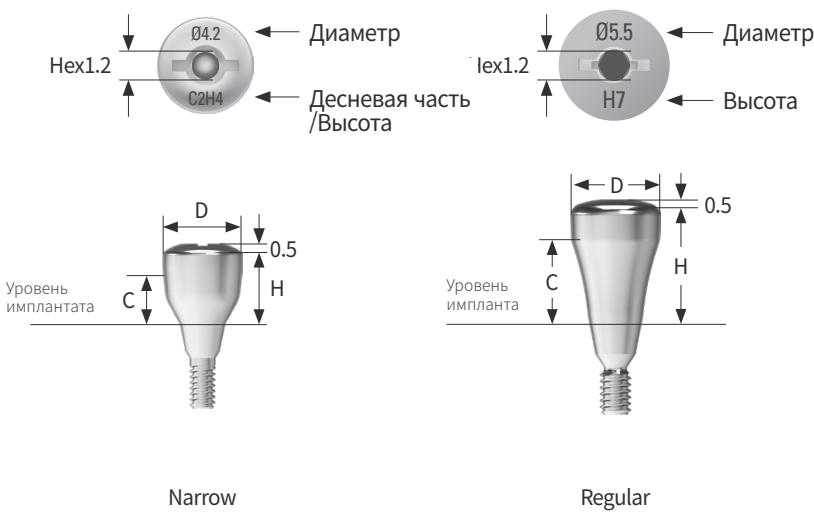

Ед.изм.мм

N


Размер		Narrow	
Диаметр		Ø4.2	Ø4.7
Высота 2	Десневая часть 2	UNSHA 4020	UNSHA 4520
4	2	UNSHA 4024	UNSHA 4524
5.5	3	UNSHA 4035	UNSHA 4535
7	4	UNSHA 4047	UNSHA 4547
8.5	5	UNSHA 4058	UNSHA 4558
10	6	UNSHA 4060	UNSHA 4560

R

Размер		Regular			
Диаметр		Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Высота 2	Десневая часть 2	SSHA 4520	SSHA 5520	SSHA 6520	SSHA 7520
4	2	SSHA 4524	SSHA 5524	SSHA 6524	SSHA 7524
5.5	3	SSHA 4535	SSHA 5535	SSHA 6535	SSHA 7535
7	4	SSHA 4547	SSHA 5547	SSHA 6547	SSHA 7547
8	6	SSHA 4568	SSHA 5568	SSHA 6568	-
9	7	SSHA 4579	SSHA 5579	SSHA 6579	-

Используется с абатментами малого диаметра, такими как абатмент шаровидный. Применяется также в случаях, когда имплантат установлен на значительную глубину.

- Используется Отвертка Нех 1.2
- Используется 0.5 Слот-драйвер
- Момент затяжки: 5~8Ncm

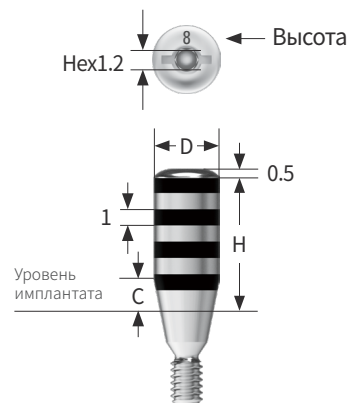

R

D Ø4.0

Ед. изм. мм				
Размер	Regular			
Высота	2	4	6	8
Десневая часть 2	SSHA 4020	SSHA 4040	SSHA 4060	SSHA 4080

Формирование десны при установке в жевательной зоне / Индивидуальный абатмент

- Предупреждение
 - ① Закрутить вручную с помощью отвертки Нех 1.2 с усилием 5-8Нсм
 - ② Высоту формирователя следует подбирать в соответствии с высотой десны пациента и типом используемого абатмента.
 - Компонент формирует контур придесневой области и снижает давление на мягкие ткани, минимизируя риск воспаления.
 - Рекомендуется нанести антибактериальную мазь (Миноклин, Периоклин) для облегчения снятия винта.
- Используется Отвертка Нех 1.2 / Слот-драйвер 0.5
- Момент затяжки: 5~8Ncm




R

			Ед.изм.мм	
Размер		Regular		
Диаметр		Ø8.2	Ø9.2	
				
Высота 2	Десневая часть 1	SSHA 8212	SSHA 9212	
3	2	SSHA 8223	SSHA 9223	
4	3	SSHA 8234	SSHA 9234	
5	4	SSHA 8245	SSHA 9245	

Цементируемый | Обтачиваемый | Угловой | UCLA | Временный | Двойной абатмент


Схема протезирования

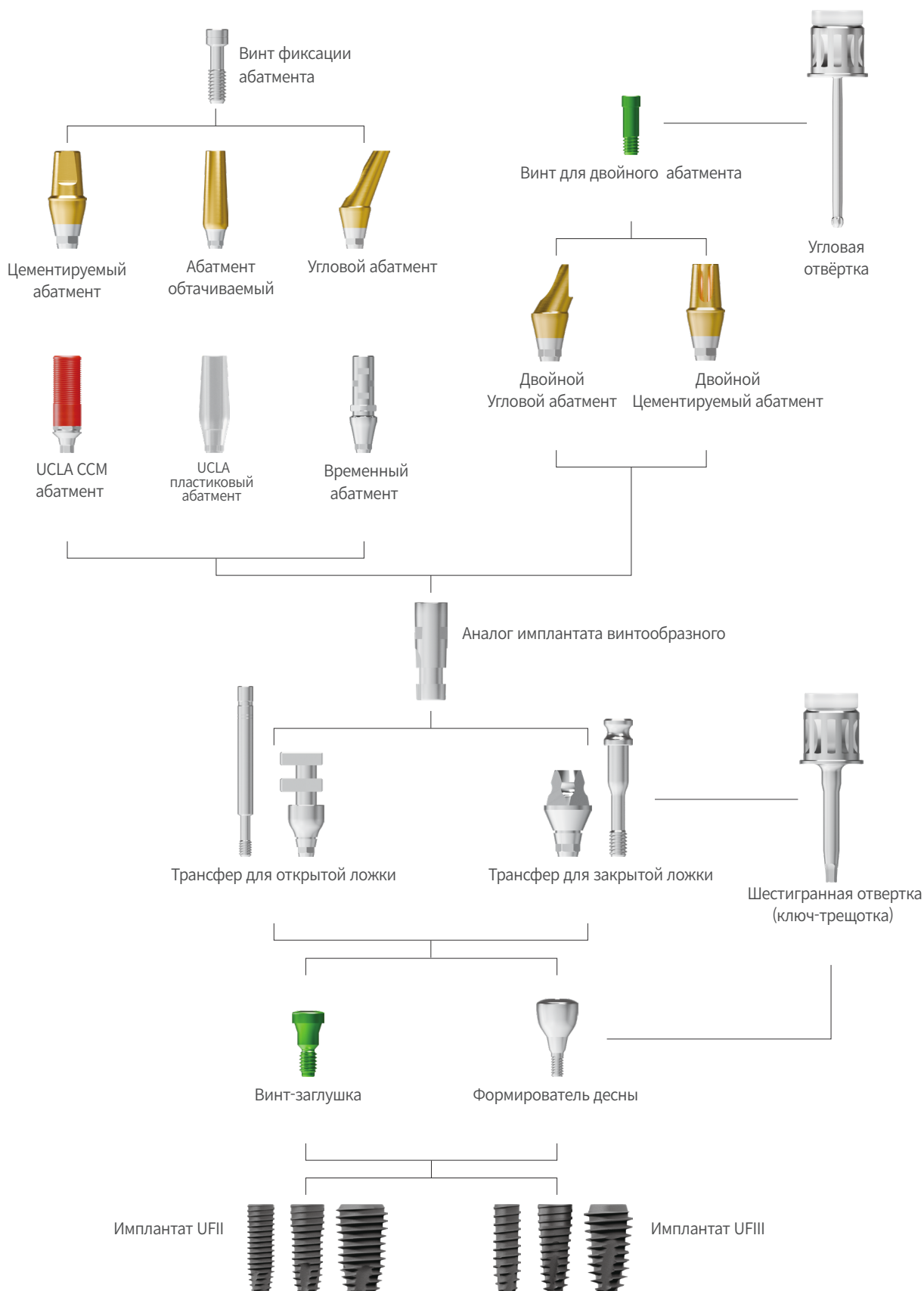


Цементируемый абатмент

Предназначен для цементной и винтовой фиксации

- Для улучшения эстетики верхняя часть соединения покрыта золотым цветом (Золотое покрытие).
- В зависимости от типа соединения с имплантатом различают Hex и Non-Hex варианты.
- Имеет форму против вращения для предотвращения поворота протеза.
- Используется Отвертка Hex 1.2
- Совместимо с монолитным абатментом и трансфером.
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента
- Момент затяжки : N 20Ncm / R 30~35Ncm

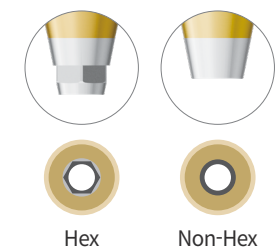

Hex

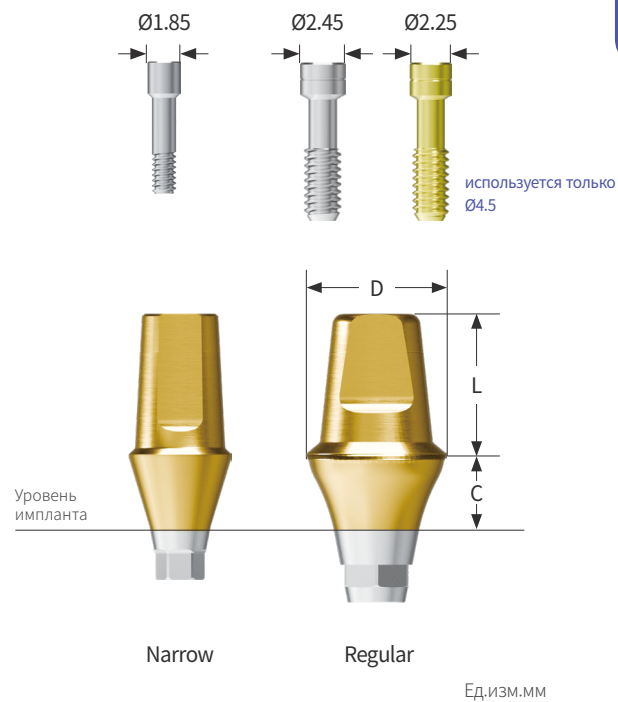

Размер		Regular				
Диаметр		Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Винт		UNSAS 1407H	SSC 2008YH	SSC 2008H	SSC 2008H	SSC 2008H
Длина	Десневая часть 1	-	SSCA 45104H(Y)	SSCA 55104H(II)(H)	SSCA 65104H(II)(H)	SSCA 75104H(II)(H)
	2	-	SSCA 45204H(Y)	SSCA 55204H(II)(H)	SSCA 65204H(II)(H)	SSCA 75204H(II)(H)
	3	-	SSCA 45304H(Y)	SSCA 55304H(II)(H)	SSCA 65304H(II)(H)	SSCA 75304H(II)(H)
	4	-	SSCA 45404H(Y)	SSCA 55404H(II)(H)	SSCA 65404H(II)(H)	SSCA 75404H(II)(H)
	5	-	SSCA 45504H(Y)	SSCA 55504H(II)(H)	SSCA 65504H(II)(H)	SSCA 75504H(II)(H)
	6	-	SSCA 45604H(Y)	SSCA 55604H(II)(H)	-	-
	7	-	SSCA 45704H(Y)	SSCA 55704H(II)(H)	-	-
Длина 5.5	Десневая часть 1	UNSCA 40105H	SSCA 45105H(Y)	SSCA 55105H(II)(H)	SSCA 65105H(II)(H)	SSCA 75105H(II)(H)
	2	UNSCA 40205H	SSCA 45205H(Y)	SSCA 55205H(II)(H)	SSCA 65205H(II)(H)	SSCA 75205H(II)(H)
	3	UNSCA 40305H	SSCA 45305H(Y)	SSCA 55305H(II)(H)	SSCA 65305H(II)(H)	SSCA 75305H(II)(H)
	4	UNSCA 40405H	SSCA 45405H(Y)	SSCA 55405H(II)(H)	SSCA 65405H(II)(H)	SSCA 75405H(II)(H)
	5	UNSCA 40505H	SSCA 45505H(Y)	SSCA 55505H(II)(H)	SSCA 65505H(II)(H)	SSCA 75505H(II)(H)
	6	UNSCA 40605H	SSCA 45605H(Y)	SSCA 55605H(II)(H)	-	-
	7	UNSCA 40705H	SSCA 45705H(Y)	SSCA 55705H(II)(H)	-	-
Длина 7	Десневая часть 1	UNSCA 40107H	SSCA 45107H(Y)	SSCA 55107H(II)(H)	SSCA 65107H(II)(H)	SSCA 75107H(II)(H)
	2	UNSCA 40207H	SSCA 45207H(Y)	SSCA 55207H(II)(H)	SSCA 65207H(II)(H)	SSCA 75207H(II)(H)
	3	UNSCA 40307H	SSCA 45307H(Y)	SSCA 55307H(II)(H)	SSCA 65307H(II)(H)	SSCA 75307H(II)(H)
	4	UNSCA 40407H	SSCA 45407H(Y)	SSCA 55407H(II)(H)	SSCA 65407H(II)(H)	SSCA 75407H(II)(H)
	5	UNSCA 40507H	SSCA 45507H(Y)	SSCA 55507H(II)(H)	SSCA 65507H(II)(H)	SSCA 75507H(II)(H)
	6	UNSCA 40607H	SSCA 45607H(Y)	SSCA 55607H(II)(H)	-	-
	7	UNSCA 40707H	SSCA 45707H(Y)	SSCA 55707H(II)(H)	-	-

Цементируемый абатмент

Цементный | Фрезерованный | Угловой | UCLA | Временный | Двойной абатмент Система погружного типа

N R
Non-Hex



Ед.изм.мм

Размер		Regular				
Диаметр		Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Винт		UNSA5 1407H	SSC 2008YH	SSC 2008H	SSC 2008H	SSC 2008H
						
Длина 4	Десневая часть 1	-	SSCA 45104N(Y)	SSCA 55104N(II)[H]	SSCA 65104N(II)[H]	SSCA 75104N(II)[H]
	2	-	SSCA 45204N(Y)	SSCA 55204N(II)[H]	SSCA 65204N(II)[H]	SSCA 75204N(II)[H]
	3	-	SSCA 45304N(Y)	SSCA 55304N(II)[H]	SSCA 65304N(II)[H]	SSCA 75304N(II)[H]
	4	-	SSCA 45404N(Y)	SSCA 55404N(II)[H]	SSCA 65404N(II)[H]	SSCA 75404N(II)[H]
	5	-	SSCA 45504N(Y)	SSCA 55504N(II)[H]	SSCA 65504N(II)[H]	SSCA 75504N(II)[H]
	6	-	SSCA 45604N(Y)	SSCA 55604N(II)[H]		
	7	-	SSCA 45704N(Y)	SSCA 55704N(II)[H]		
Длина 5.5	Десневая часть 1	UNSCA 40105N	SSCA 45105N(Y)	SSCA 55105N(II)[H]	SSCA 65105N(II)[H]	SSCA 75105N(II)[H]
	2	UNSCA 40205N	SSCA 45205N(Y)	SSCA 55205N(II)[H]	SSCA 65205N(II)[H]	SSCA 75205N(II)[H]
	3	UNSCA 40305N	SSCA 45305N(Y)	SSCA 55305N(II)[H]	SSCA 65305N(II)[H]	SSCA 75305N(II)[H]
	4	UNSCA 40405N	SSCA 45405N(Y)	SSCA 55405N(II)[H]	SSCA 65405N(II)[H]	SSCA 75405N(II)[H]
	5	UNSCA 40505N	SSCA 45505N(Y)	SSCA 55505N(II)[H]	SSCA 65505N(II)[H]	SSCA 75505N(II)[H]
	6	UNSCA 40605N	SSCA 45605N(Y)	SSCA 55605N(II)[H]		-
	7	UNSCA 40705N	SSCA 45705N(Y)	SSCA 55705N(II)[H]		-
Длина 7	Десневая часть 1	UNSCA 40107N	SSCA 45107N(Y)	SSCA 55107N(II)[H]	SSCA 65107N(II)[H]	SSCA 75107N(II)[H]
	2	UNSCA 40207N	SSCA 45207N(Y)	SSCA 55207N(II)[H]	SSCA 65207N(II)[H]	SSCA 75207N(II)[H]
	3	UNSCA 40307N	SSCA 45307N(Y)	SSCA 55307N(II)[H]	SSCA 65307N(II)[H]	SSCA 75307N(II)[H]
	4	UNSCA 40407N	SSCA 45407N(Y)	SSCA 55407N(II)[H]	SSCA 65407N(II)[H]	SSCA 75407N(II)[H]
	5	UNSCA 40507N	SSCA 45507N(Y)	SSCA 55507N(II)[H]	SSCA 65507N(II)[H]	SSCA 75507N(II)[H]
	6	UNSCA 40607N	SSCA 45607N(Y)	SSCA 55607N(II)[H]		-
	7	UNSCA 40707N	SSCA 45707N(Y)	SSCA 55707N(II)[H]		-

Абатмент обрачиваемый

Для корректировки пути введения абатмента и для значительной индивидуализации контура абатмента и области границ ортопедической конструкции.

- Абатмент типа CRP / SCRP
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (SSC 2008H)
- Момент затяжки : 30~35Ncm

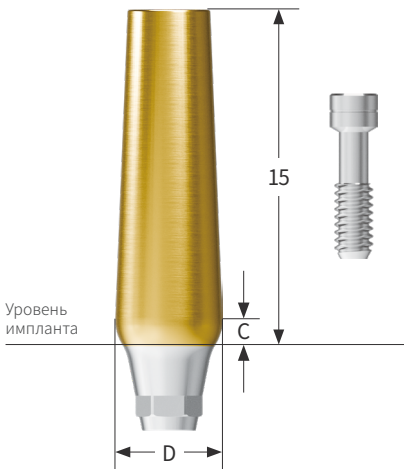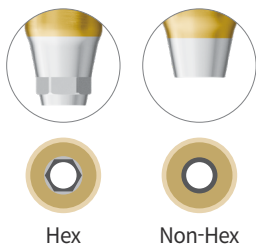

R

Hex

Ед.изм.мм

Размер	Regular				
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Десневая часть	1.5	2	2.5	3	3

Длина 15	SSMA 4015H[H]	SSMA 4520H[H]	SSMA 5525H[H]	SSMA 6530H[H]	SSMA 7530H[H]
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

R

Non-Hex



Размер	Regular				
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Десневая часть	1.5	2	2.5	3	3

Длина 15	SSMA 4015N[H]	SSMA 4520N[H]	SSMA 5525N[H]	SSMA 6530N[H]	SSMA 7530N[H]
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Угловой абатмент

Используется для коррекции угла установки имплантата, преимущественно в области фронтальных зубов.

- Тип: стандартный абатмент для протеза с цементной фиксацией
- В зависимости от угла наклона шейки абатмента различают угловые абатменты 15 и 25
- Шестигранная часть типов А и В устраняет ограничения по направлению абатмента.
- Верхняя часть соединения покрыта золотым напылением для эстетики.
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (N UNSAS 1407H / R SSC 2008H)
- Момент затяжки : N 20Ncm / R 30~35Ncm

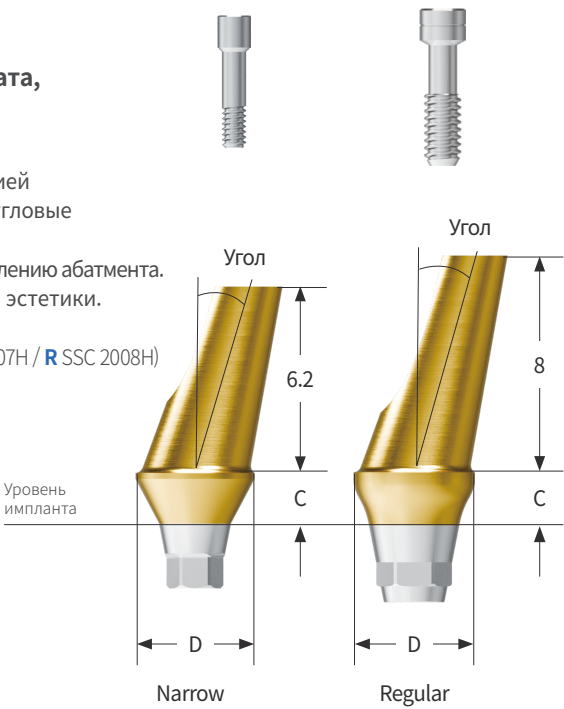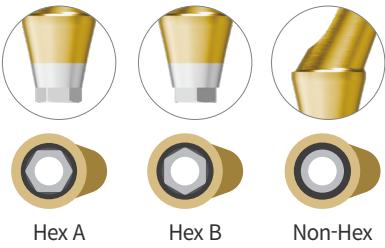

Ед.изм.мм

N R

Hex A

Размер	Narrow	Regular			
Длина	6.2	8			
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5		Ø5.5	
Угол	15°	15°	25°	15°	25°
Десневая часть	-	SSAA 451515AH[H]	SSAA 451525AH[H]	SSAA 551515AH[H]	SSAA 551525AH[H]
1.5	-				
2	UNSAA 402015AH[H]	SSAA 452015AH[H]	SSAA 452025AH[H]	SSAA 552015AH[H]	SSAA 552025AH[H]
3	-	SSAA 453015AH[H]	SSAA 453025AH[H]	SSAA 553015AH[H]	SSAA 553025AH[H]
4	UNSAA 404015AH[H]	SSAA 454015AH[H]	SSAA 454025AH[H]	SSAA 554015AH[H]	SSAA 554025AH[H]
5	-	SSAA 455015AH[H]	SSAA 455025AH[H]	SSAA 555015AH[H]	SSAA 555025AH[H]

N R

Hex B

Размер	Narrow	Regular			
Длина	6.2	8			
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5		Ø5.5	
Угол	15°	15°	25°	15°	25°
Десневая часть	-	SSAA 451515BH[H]	SSAA 451525BH[H]	SSAA 551515BH[H]	SSAA 551525BH[H]
1.5	-				
2	UNSAA 402015BH[H]	SSAA 452015BH[H]	SSAA 452025BH[H]	SSAA 552015BH[H]	SSAA 552025BH[H]
3	-	SSAA 453015BH[H]	SSAA 453025BH[H]	SSAA 553015BH[H]	SSAA 553025BH[H]
4	UNSAA 404015BH[H]	SSAA 454015BH[H]	SSAA 454025BH[H]	SSAA 554015BH[H]	SSAA 554025BH[H]
5	-	SSAA 455015BH[H]	SSAA 455025BH[H]	SSAA 555015BH[H]	SSAA 555025BH[H]

N R

Non-Hex


Размер	Narrow	Regular			
Длина	6.2	8			
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5		Ø5.5	
Угол	15°	15°	25°	15°	25°
Десневая часть	-	SSAA 451515N[H]	SSAA 451525N[H]	SSAA 551515N[H]	SSAA 551525N[H]
1.5	-				
2	UNSAA 402015N[H]	SSAA 452015N[H]	SSAA 452025N[H]	SSAA 552015N[H]	SSAA 552025N[H]
3	-	SSAA 453015N[H]	SSAA 453025N[H]	SSAA 553015N[H]	SSAA 553025N[H]
4	UNSAA 404015N[H]	SSAA 454015N[H]	SSAA 454025N[H]	SSAA 554015N[H]	SSAA 554025N[H]
5	-	SSAA 455015N[H]	SSAA 455025N[H]	SSAA 555015N[H]	SSAA 555025N[H]

UCLA Абатмент

UCLA CCM-абатмент

После индивидуализации отливается из стоматологического недорогоценного сплава.

- Hex / Non-Hex Тип
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (N UNSAS 1407H / R SSC 2008H)
- Момент затяжки : N 20Ncm / R 30~35Ncm

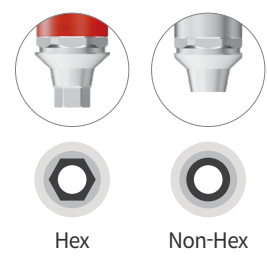

		N		R		Ед.изм.мм	
Размер		Narrow		Regular			
Диаметр		Ø4.0		Ø4.0		Ø4.5	
Тип		Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
							
Длина 10	Десневая часть 1	UNSCCA 4010H	UNSCCA 4010N	CCSS 4010H[H]	CCSS 4010N[H]	CCSS 4510H[H]	CCSS 4510N[H]
	3	UNSCCA 4030H	UNSCCA 4030N	-	-	CCSS 4530H[H]	CCSS 4530N[H]


UCLA Абатмент

UCLA пластиковый абатмент

Аналогичен золотым отливным абатментам, но изготавливается из пластика. После индивидуализации отливается из стоматологического драгоценного или недорогоценного сплава.

- Hex / Non-Hex Тип
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (SSC 2008H)
- Момент затяжки: перед литьём — слегка затянуть; после литья — затянуть с моментом 30–35 Н·см.

※ Не является медицинским изделием.

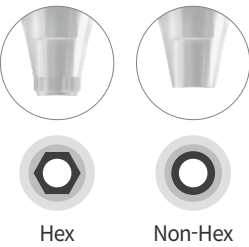

Ед.изм.мм



R

Regular				
Размер				
Диаметр	Ø4.5		Ø5.5	
Тип	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
Длина 12	SSPA 4512H[H]	SSPA 4512N[H]	SSPA 5512H[H]	SSPA 5512N[H]

Временный абатмент

Используется для изготовления временного протеза.

- Hex / Non-Hex Тип
- Используется Шестигранная отвертка (ключ-трещотка)
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента
- Момент затяжки : **N** 20Ncm / **R** 30~35Ncm

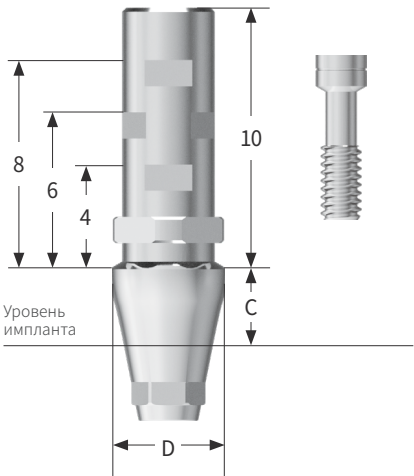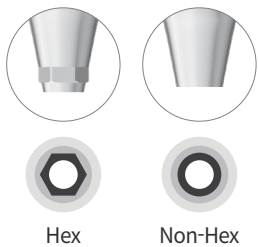

N **R**

Размер		Narrow		Regular	
Диаметр		Ø4.0		Ø4.5	
Тип		Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
Длина 10	Десневая часть 1	UNSTA 4010H[H]	UNSTA 4010N[H]	SSTA 4510H[H]	SSTA 4510N[H]
	3	UNSTA 4030H[H]	UNSTA 4030N[H]	SSTA 4530H[H]	SSTA 4530N[H]
	Винт	UNSAS 1407H		SSC 2008H	

Ед.изм.мм

Двойной абатмент

Двойной абатмент обеспечивает эстетическое протезирование винто-цементной фиксации независимо от направления имплантата.

Для коррекции направления имплантата (фронтальная часть)

Абатмент с регулируемым углом 0°-25°.

- Верхняя часть соединения покрыта золотым напылением для эстетики.
- Момент затяжки : 30~35Ncm
- Используется угловая отвёртка (ATD 1700)
- Комплектация : Абатмент + Винт для двойного абатмента (2HSC 2007T)




Двойной Абат.
Видео-презентация



Двойной угловой абатмент

В зависимости от типа соединения с имплантатом различают варианты Hex A и Hex B.

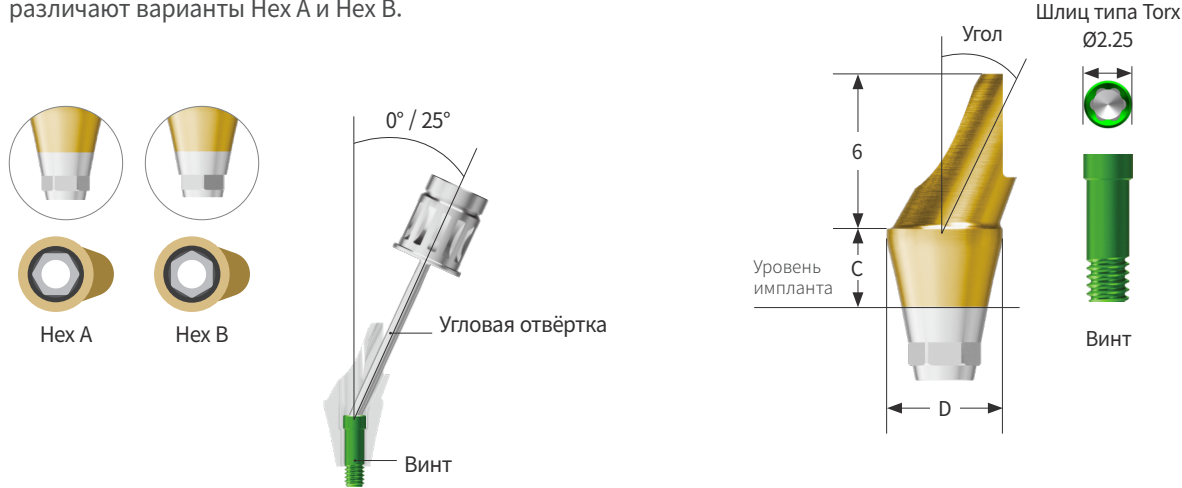


Ед.изм.мм

R
D Ø4.5

Размер		Regular			
Угол		15°	25°	15°	25°
Тип		Hex A		Hex B	
Длина 6	Десневая часть 1.5				
	2	2HAA 452015AH	2HAA 452025AH	2HAA 452015BH	2HAA 452025BH
	3	2HAA 453015AH	2HAA 453025AH	2HAA 453015BH	2HAA 453025BH
	4	2HAA 454015AH	2HAA 454025AH	2HAA 454015BH	2HAA 454025BH

Двойной Цементируемый абатмент

Тип соединения с имплантатом определяет вариант Hex или Non-Hex.

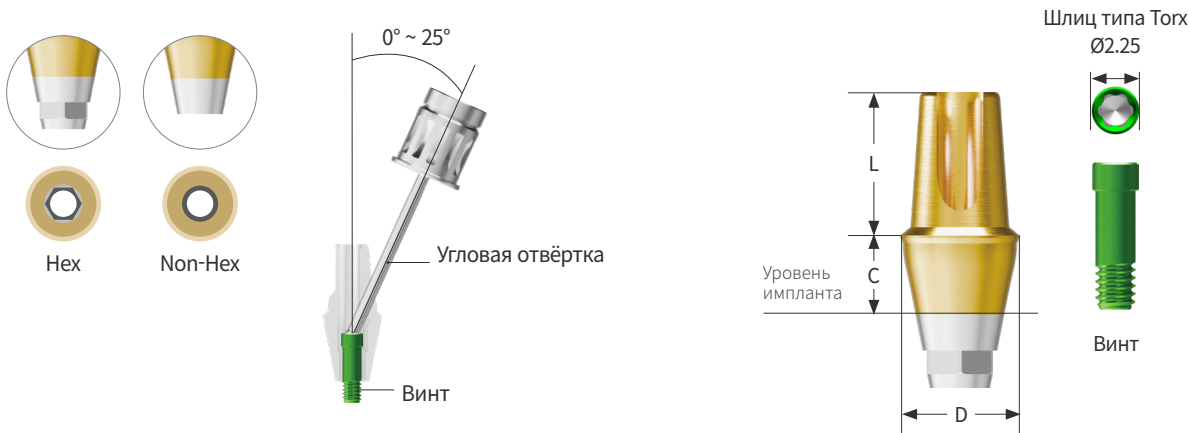

Ед.изм.мм



R

Размер		Regular			
Диаметр		Ø4.5		Ø5.5	
Тип		Hex	Non Hex	Hex	Non-Hex
Длина 4	Десневая часть 1	2HCA 45104H	2HCA 45104N	2HCA 55104H	2HCA 55104N
	2	2HCA 45204H	2HCA 45204N	2HCA 55204H	2HCA 55204N
	3	2HCA 45304H	2HCA 45304N	2HCA 55304H	2HCA 55304N
	4	2HCA 45404H	2HCA 45404N	2HCA 55404H	2HCA 55404N
Длина 5.5	Десневая часть 1	2HCA 45105H	2HCA 45105N	2HCA 55105H	2HCA 55105N
	2	2HCA 45205H	2HCA 45205N	2HCA 55205H	2HCA 55205N
	3	2HCA 45305H	2HCA 45305N	2HCA 55305H	2HCA 55305N
	4	2HCA 45405H	2HCA 45405N	2HCA 55405H	2HCA 55405N
Длина 7	Десневая часть 1	2HCA 45107H	2HCA 45107N	2HCA 55107H	2HCA 55107N
	2	2HCA 45207H	2HCA 45207N	2HCA 55207H	2HCA 55207N
	3	2HCA 45307H	2HCA 45307N	2HCA 55307H	2HCA 55307N
	4	2HCA 45407H	2HCA 45407N	2HCA 55407H	2HCA 55407N

Трансфер для открытой ложки

Используется для снятия слепка с открытой ложкой.

- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Трансфер для открытой ложки + Направляющий пин

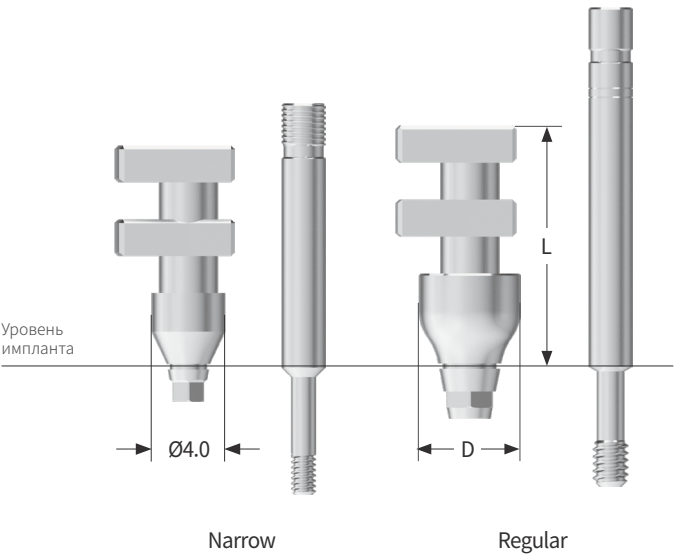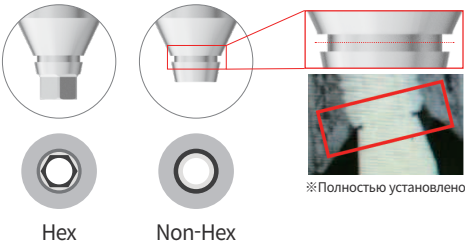

N R

Hex

Размер		Regular				
Диаметр	Ø4.0	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	
Длина 9	-	-	SSPI 4009H	SSPI 4509H	SSPI 5509H	SSPI 6509H SSG 2021
12	UNSPI 4012H	UNSSG 1422	-	-	-	-
13	-	-	SSPI 4013H	SSPI 4513H	SSPI 5513H	SSPI 6513H SSG 2026
14	UNSPI 4014H	UNSSG 1422	-	-	-	-
16	UNSPI 4016H	UNSSG 1425	-	-	-	-
17	-	-	SSPI 4017H	SSPI 4517H	SSPI 5517H	SSPI 6517H SSG 2329
19	-	-	SSPI 4019H	SSPI 4519H	SSPI 5519H	SSPI 6519H SSG 2329

N R



Non-Hex

Размер		Regular				
Диаметр	Ø4.0	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	
Длина 9	-	-	SSPI 4009N	SSPI 4509N	SSPI 5509N	SSPI 6509N SSG 2021
12	UNSPI 4012N	UNSSG 1422	-	-	-	-
13	-	-	SSPI 4013N	SSPI 4513N	SSPI 5513N	SSPI 6513N SSG 2026
14	UNSPI 4014N	UNSSG 1422	-	-	-	-
16	UNSPI 4016N	UNSSG 1425	-	-	-	-
17	-	-	SSPI 4017N	SSPI 4517N	SSPI 5517N	SSPI 6517N SSG 2329
19	-	-	SSPI 4019N	SSPI 4519N	SSPI 5519N	SSPI 6519N SSG 2329

Трансфер для закрытой ложки

Используется для снятия слепка с закрытой ложкой.

- Трёхсекционная конструкция обеспечивает высокую точность позиционирования после снятия оттиска.
- Используется отвертка Hex 1.2
- Hex – 2-компонентный, Non-Hex – 1-компонентный.
- Комплектация : Трансфер для закрытой ложки + Винт для колпачка (Hex)
Трансфер для закрытой ложки (Non-Hex)

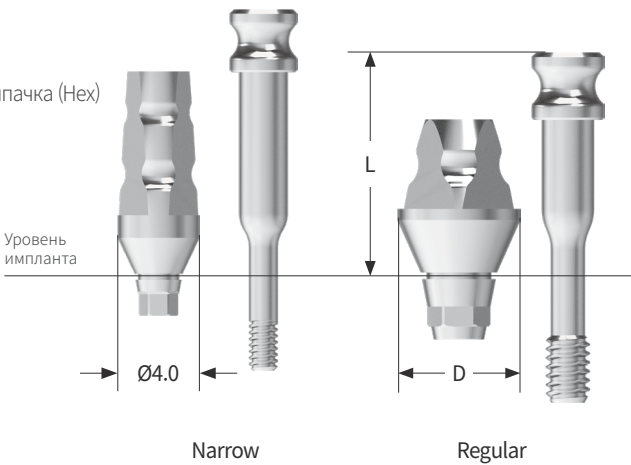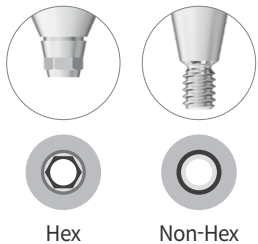

Ед.изм.мм

N R
Hex

Размер	Narrow		Regular					
Диаметр	Ø4.0	Винт	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Винт	Ø6.5	Винт
Длина 10	-	-	SSTI 4010H	SSTI 4510H	SSTI 5010H	SSTI 4015S	SSTI 6510H	SSTI 6515S
13	UNSTI 4013H	UNSTI 4013S	-	-	-	-	-	-
15	UNSTI 4015H	UNSTI 4015S	SSTI 4015H	SSTI 4515H	SSTI 5515H	SSTI 4020S	SSTI 6515H	SSTI 6520S
17	UNSTI 4017H	UNSTI 4017S	-	-	-	-	-	-


N R
Non-Hex

Размер	Narrow	Regular			
Диаметр	Ø4.0	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5
Длина 10	-	SSTI 4010N	SSTI 4510N	SSTI 5510N	SSTI 6510N
13	UNSTI 4013N	-	-	-	-
15	UNSTI 4015N	SSTI 4015N	SSTI 4515N	SSTI 5515N	SSTI 6515N
17	UNSTI 4017N	-	-	-	-

Аналог имплантата винтообразного

Создает положение имплантата на рабочей модели.


※ Не является медицинским изделием.

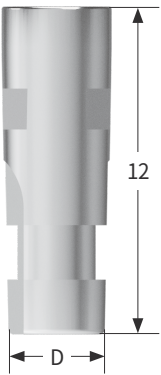

		Ед.изм.мм	
N R	Размер	Narrow	Regular
	Диаметр	Ø3.0	Ø4.0
Длина 12		UNSFA 3012	SSFA 4012

D:O IMPLANT


Абатмент монолитный Схема протезирования

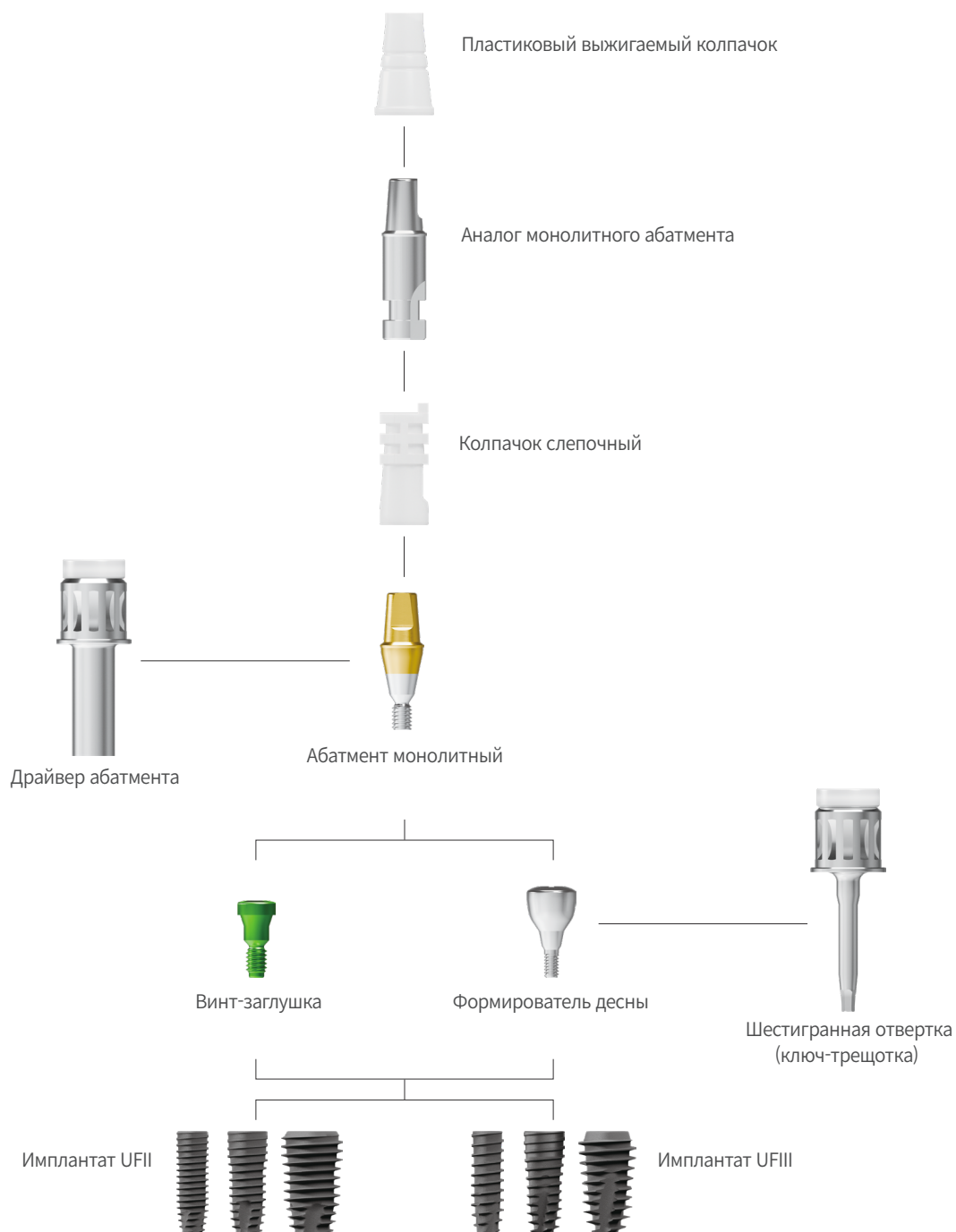

Абатмент монолитный

Абатмент, предназначенный для цементной фиксации.

- Абатмент и винт представляют собой единую (монолитную) конструкцию.
- Снятие оттиска на уровне абатмента.
- Верхняя часть соединения покрыта золотым напылением для эстетики.
- Используется Шестигранная отвертка (ключ-трещотка)/Монолитный Драйвер абатмента
- Комплектация : Абатмент + Колпачок защитный
- Момент затяжки : **N** 20Ncm / **R** 30~35Ncm

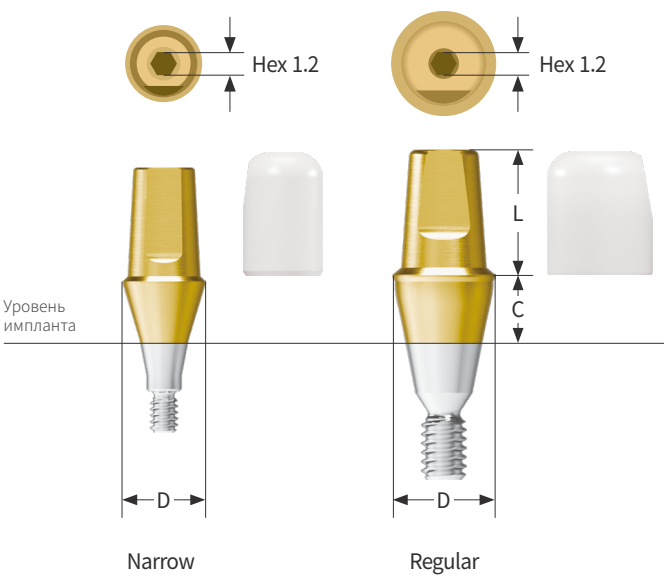

N **R**

Ед.изм.мм


Размер		Regular				
Диаметр		Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Длина 4	Десневая часть 1	-	SSSA 45104	SSSA 55104	SSSA 65104	SSSA 75104
	2	-	SSSA 45204	SSSA 55204	SSSA 65204	SSSA 75204
	3	-	SSSA 45304	SSSA 55304	SSSA 65304	SSSA 75304
	4	-	SSSA 45404	SSSA 55404	SSSA 65404	SSSA 75404
	5	-	SSSA 45504	SSSA 55504	SSSA 65504	SSSA 75504
Длина 5.5	Десневая часть 1	UNSSA 40105	SSSA 45105	SSSA 55105	SSSA 65105	SSSA 75105
	2	UNSSA 40205	SSSA 45205	SSSA 55205	SSSA 65205	SSSA 75205
	3	UNSSA 40305	SSSA 45305	SSSA 55305	SSSA 65305	SSSA 75305
	4	UNSSA 40405	SSSA 45405	SSSA 55405	SSSA 65405	SSSA 75405
	5	UNSSA 40505	SSSA 45505	SSSA 55505	SSSA 65505	SSSA 75505
	6	UNSSA 40605	-	-	-	-
	7	UNSSA 40705	-	-	-	-
Длина 7	Десневая часть 1	UNSSA 40107	SSSA 45107	SSSA 55107	SSSA 65107	SSSA 75107
	2	UNSSA 40207	SSSA 45207	SSSA 55207	SSSA 65207	SSSA 75207
	3	UNSSA 40307	SSSA 45307	SSSA 55307	SSSA 65307	SSSA 75307
	4	UNSSA 40407	SSSA 45407	SSSA 55407	SSSA 65407	SSSA 75407
	5	UNSSA 40507	SSSA 45507	SSSA 55507	SSSA 65507	SSSA 75507
	6	UNSSA 40607	-	-	-	-
	7	UNSSA 40707	-	-	-	-

Абатмент монолитный Компоненты

Колпачок защитный

Используется для защиты абатмента в полости рта и минимизации дискомфорта пациента.

- Может применяться как основание для временного протеза.
- Обеспечивает удобную фиксацию.

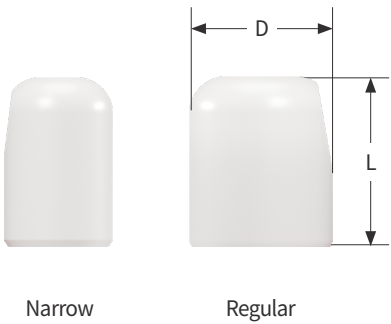

Ед.изм.мм

N **R**

Размер	Narrow	Regular				
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5	
Длина 4	-	SSAC 4504	SSAC 5504	SSAC 6504	SSAC 7504	
5.5	UNSAC 4005	SSAC 4505	SSAC 5505	SSAC 6505	SSAC 7505	
7	UNSAC 4007	SSAC 4507	SSAC 5507	SSAC 6507	SSAC 7507	

Колпачок слепочный

Для снятия оттиска с монолитного абатмента.

- Цветовая маркировка по диаметру для удобной идентификации.
- Обеспечивает удобную фиксацию.



Ед.изм.мм

N **R**

Размер	Narrow	Regular				
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5	
Длина 11	UNSAI 4011	SSAI 4511	SSAI 5511	SSAI 6511	SSAI 7511	

Аналог монолитного абатмента

- Создание монолитного абатмента на рабочей модели.
 - Цветовая маркировка по диаметру для удобной идентификации.
- ※ Не является медицинским изделием.



Ед.изм.мм

N R

Размер		Regular				
Диаметр		Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
						
Длина	4	-	SSAA 4504	SSAA 5504	SSAA 6504	SSAA 7504
	5.5	UNSSAA 4005	SSAA 4505	SSAA 5505	SSAA 6505	SSAA 7505
	7	UNSSAA 4007	SSAA 4507	SSAA 5507	SSAA 6507	SSAA 7507

Пластиковый колпачок абатмента

Закрепляется на аналоге монолитного абатмента и служит каркасом протеза.

- Цветовая маркировка для лёгкой идентификации по клиническому случаю

※ Не является медицинским изделием.



Одиночный



Мостовидный


Ед.изм.мм

N R

Размер		Regular				
Диаметр		Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Длина	Одиночный	UNSA P 4010S	SSAP 4510S	SSAP 5510S	SSAP 6510S	SSAP 7510S
	Мостовидный	UNSA P 4010B	SSAP 4510B	SSAP 5510B	SSAP 6510B	SSAP 7510B

Multi-unit Абатмент Система погружного типа

Схема протезирования

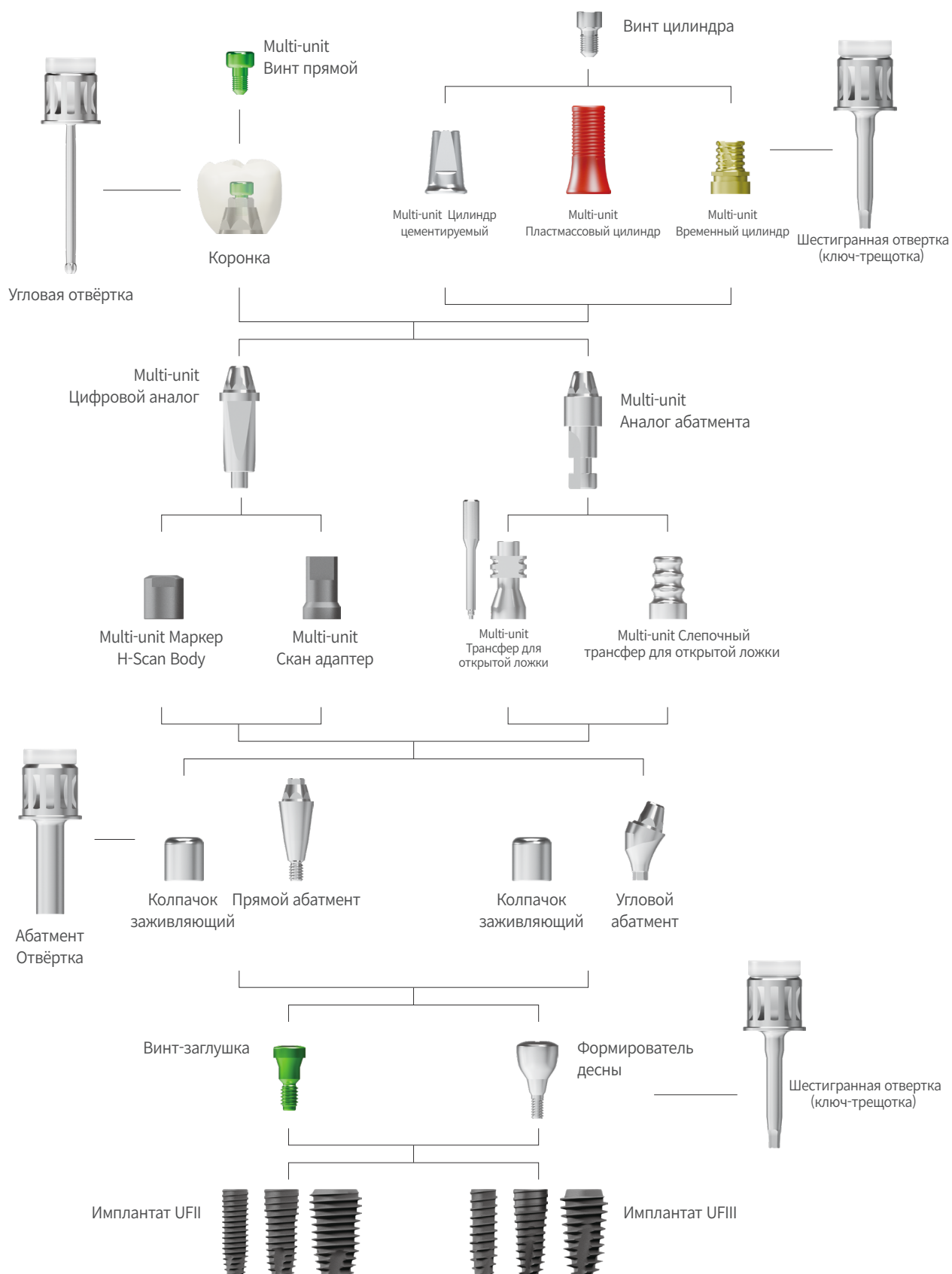


Multi-unit Прямой абатмент

Применяется при изготовлении мостовидных конструкций в случаях отклонения оси имплантатов во фронтальном отделе.

(С использованием цилиндра и прямого винта)

- N Только для фронтального отдела.
- Используется Ø2.0, Ø3.3 Multi-unit Ключ прямого абатмента (HD 2006A, HD 2012A, HD 3306A, HD 3312A)
- Комплектация : Multi-unit Прямой абатмент + Multi-unit Держатель прямого абатмента (MSAH 4820)
- Момент затяжки : N 20Ncm / R 30~35Ncm

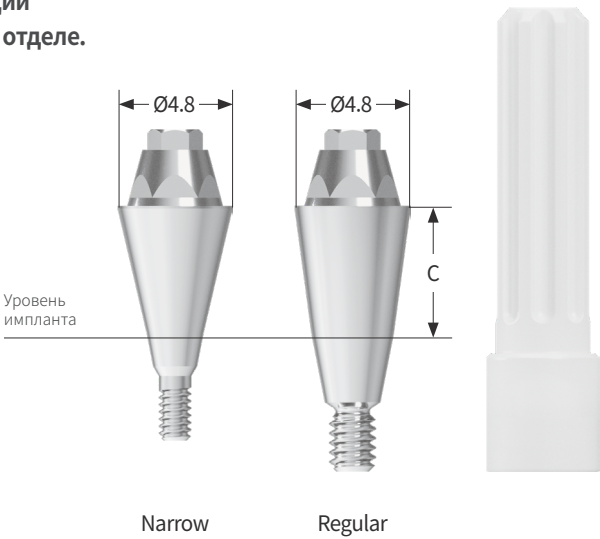

N R

D Ø4.8



Размер	Narrow	Regular
Диаметр	Ø4.8	Ø4.8
Десневая часть 1.5	MSAN 4801	MSA 4801
2.5	MSAN 4802	MSA 4802
3.5	MSAN 4803	MSA 4803
4.5	MSAN 4804	MSA 4804
5.5	MSAN 4805	MSA 4805
6.5	-	MSA 4806
7.5	-	MSA 4807

Ед.изм.мм

Multi-unit Угловой абатмент

Используется в системе Narrow Implant при изготовлении мостовидного протеза в случае непараллельной установки имплантатов

- N Только для фронтального отдела.
- Соединяется с имплантатом с помощью винта Multi-unit углового абатмента (UNSAS 1407H).
- Используется отвёртка Multi-unit углового абатмента: MHD 1155A (для ключ-трещотки), MMD 1224 (для машины)
- Комплектация : Multi-unit Угловой абатмент + Винт + Multi-unit Держатель углового абатмента (MAH 1629)
- Момент затяжки : N 20Ncm

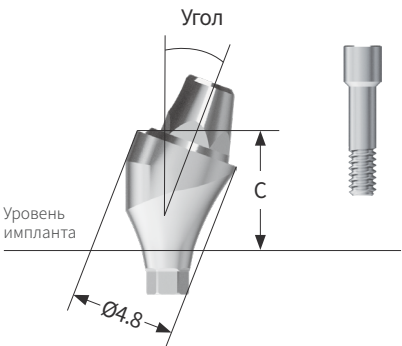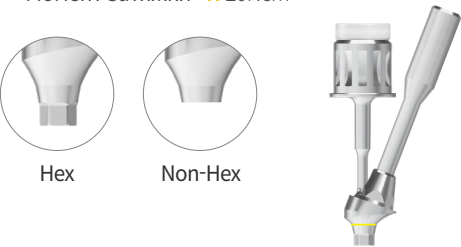

Ед.изм.мм

N


D Ø4.8

Размер		Narrow			
Винт		Hex		Non-Hex	
Диаметр		Ø4.8		Ø4.8	
Угол		20°	30°	20°	30°
Десневая часть 3.0	MAAN 483020H	-		MAAN 483020N	-
3.5	MAAN 483520H	MAAN 483530H		MAAN 483520N	MAAN 483530N
4.5	MAAN 484520H	MAAN 484530H		MAAN 484520N	MAAN 484530N
5.5	MAAN 485520H	MAAN 485530H		MAAN 485520N	MAAN 485530N
Винт		UNSAS 1407H			

Используется в системе Regular Implant при изготовлении мостовидного протеза в случае непараллельной установки имплантатов

(С использованием цилиндра и прямого винта)

- Манжета 6.5 / 7.5 мм — только для имплантатов Ø 4.5 мм и более.
- Соединяется с имплантатом с помощью винта Multi-unit углового абатмента (MASC 2006).
- Используется ключ Multi-unit углового абатмента :
MHD 1155A (для ключ-трещотки), MMD 1224 (для машины)
- Комплектация : Multi-unit Угловой абатмент + Multi Винт угловой абатмент +
Multi-unit Держатель углового абатмента (МАН 1629)
- Момент затяжки : R 30~35Ncm

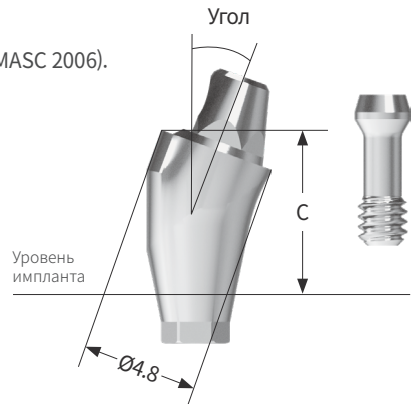

R

D Ø4.8

Regular				
Размер	Hex		Non-Hex	
Винт	Hex		Non-Hex	
Диаметр	Ø4.8		Ø4.8	
Угол	20°	30°	20°	30°
Десневая часть 2.5	MAA 482520H	-	MAA 482520N	-
3.5	MAA 483520H	MAA 483530H	MAA 483520N	MAA 483530N
4.5	MAA 484520H	MAA 484530H	MAA 484520N	MAA 484530N
5.5	MAA 485520H	MAA 485530H	MAA 485520N	MAA 485530N
6.5	MAA 486520H	MAA 486530H	MAA 486520N	MAA 486530N
7.5	MAA 483520H	MAA 483530H	MAA 483520N	MAA 483530N
Винт	MASC 2006			


Ед.изм.мм

Multi-unit Абатмент Компоненты

Multi-unit Колпачок заживляющий

Обеспечивает защиту абатмента в полости рта и минимизирует дискомфорт пациента.

- Используется отвертка Hex 1.2
- Момент затяжки : 5~8Ncm

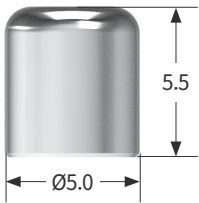


Ед.изм.мм

N R	Размер		Narrow · Regular	
	Диаметр		Ø5.0	
	Длина 5.5		MHC 5005	

Multi-unit Трансфер для открытой ложки

Используется для снятия оттиска на уровне абатмента

- Метод — Open Tray (открытая ложка)
- Предназначен только для Multi-unit абатмента.
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Трансфер для открытой ложки + Направляющий пин (MGP 1615)

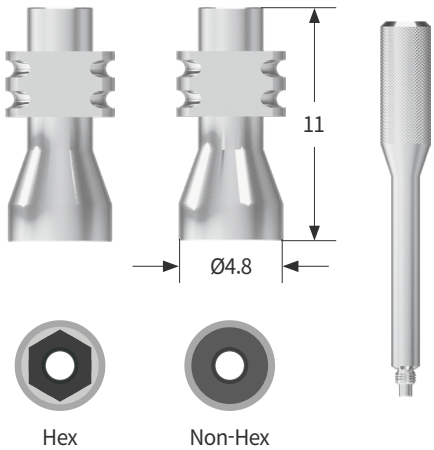


Ед.изм.мм

N R	Размер		Narrow · Regular	
	Тип		Hex Non-Hex	
	Диаметр		Ø4.8	
	Длина 11		MPI 4811H MPI 4811N	

Multi-unit Трансфер для открытой ложки

Трансфер для закрытой ложки для снятия оттиска на уровне абатмента.

- Метод — Closed Tray (закрытая ложка)
- Предназначен только для Multi-unit абатмента
- Используется отвертка Hex 1.2

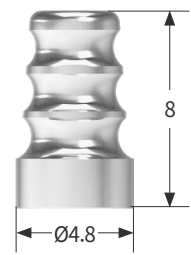

Ед.изм.мм


N R

Размер	Narrow · Regular
Диаметр	Ø4.8
Длина 8	MTI 4808N

Multi-unit Маркер H-Scanbody

Для снятия цифрового оттиска (уровень Healing / Abutment)

- Предназначен только для Multi-unit абатмента
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : H-Scanbody + H-Scanbody Винт (MHSBSC 1603)
- Момент затяжки : 5~8Ncm

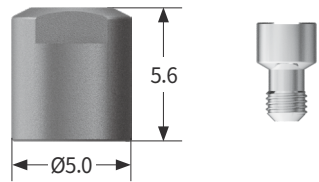

Ед.изм.мм


N R

Размер	Narrow · Regular
Диаметр	Ø5.0
Длина 5.6	MHSB 5005H

Multi-unit Адаптер для сканера

Используется на уровне абатмента при цифровом сканировании

- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Адаптер для сканера + Винт для колпачка (MCSC 1606)
- Момент затяжки : 5~8Ncm

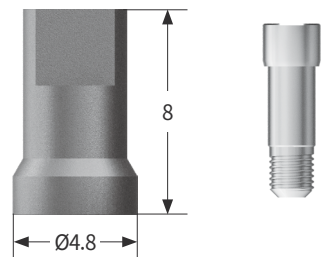

Ед.изм.мм

N R

Размер	Narrow · Regular
Диаметр	Ø4.8
Длина 8	MSCAN 4808H

Multi-unit Абатмент Компоненты

Multi-unit Угловой абатмент Jig

Предназначен для удобной и точной установки multi-unit углового абатмента в полости рта.

- Используется совместно с мультиюнит угловым абатментом и драйвером Ключ-трещотка (MHD 1155A), монтируясь на Jig.
- Применяется только для multi-unit углового абатмента.
- Комплектация : Multi-unit угловой абатмент Jig + Винт (MAJS 1604)




N R	Размер	Narrow · Regular
	Код	MAJ 02

Multi-unit Винт прямой

Предназначен для коронки,изготовленной прямым методом

- Тогх-винт круглого типа обеспечивает распределение нагрузки и стабильность соединения.
- Обычное использование : Отвёртка HD 17**
- Для компенсации угла доступа используется специальная угловая отвёртка (ATD 17**)

※ Осторожно: винт может выпасть из отвёртки.

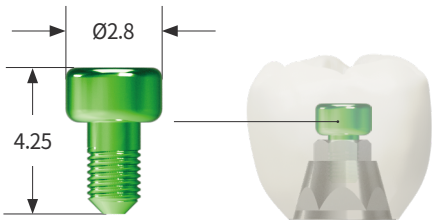


N R	Размер	Narrow · Regular
	Диаметр	Ø2.8
	Длина 4.25	MDSC 1604T

Ед.изм.мм

Multi-unit Аналог абатмента

Применяется для имитации multi-unit абатмента на гипсовой модели.

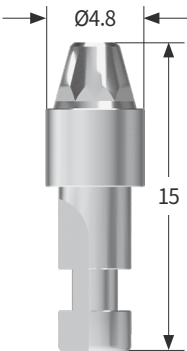

Ед.изм.мм

N R	Размер	Narrow · Regular
	Диаметр	Ø4.8
	Длина 15	MLA 4815H

Multi-unit Цифровой аналог

Используется для воспроизведения мультиюнит-абатмента на 3D-печатной модели.



Ед.изм.мм


N R	Размер	Narrow · Regular
	Диаметр	Ø4.8
	Длина 14.7	MDAR 4814

Multi-unit Абатмент Компоненты

Multi-unit Цилиндр цементируемый

Используется при изготовлении протезов с цементной фиксацией

- Предназначен только для Multi-unit абатмента
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Цилиндр цементируемый + Винт цилиндра (MSC 1604)
- Момент затяжки : 20Ncm

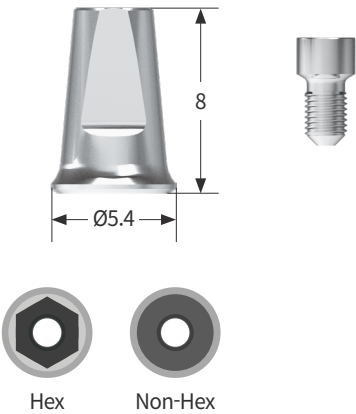


Ед.изм.мм

N R	Размер		Narrow · Regular	
	Тип	Hex	Non-Hex	
	Диаметр	Ø5.4	Ø5.4	
	Длина 8	MCEM 5408H	MCEM 5408N	

Multi-unit Цилиндр пластмассовый

Используется при изготовлении протезов с винтовой фиксацией методом литья из неблагородного сплава.

- Цветовая маркировка: Нех тип — красный, Non-Нех тип — белый.
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Цилиндр пластмассовый + Винт цилиндра (MSC 1604)
- Момент затяжки : 20Ncm

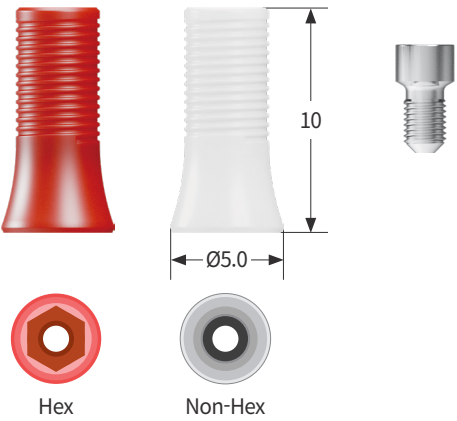


Ед.изм.мм

N R	Размер		Narrow · Regular	
	Тип	Hex ●	Non-Hex ○	
	Диаметр	Ø5.0	Ø5.0	
	Длина 10	MPLA 5010H	MPLA 5010N	

Multi-unit Временный цилиндр

Используется при изготовлении временных конструкций на уровне абатмента


- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Временный цилиндр + Винт цилиндра (MSC 1604)
- Момент затяжки : 20Ncm

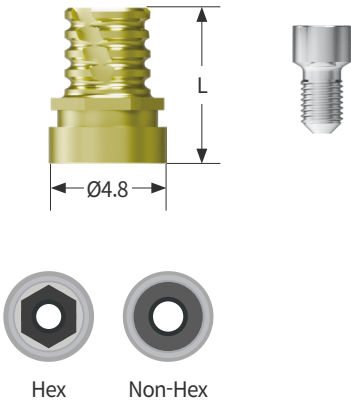

N R

Ед.изм.мм		
Размер	Narrow · Regular	
Тип	Hex	Non-Hex
Диаметр	Ø4.8	Ø4.8
Длина 6	MTEM 4806H	MTEM 4806N
12	MTEM 4812H	MTEM 4812N


DeSR Абатмент Система протезирования

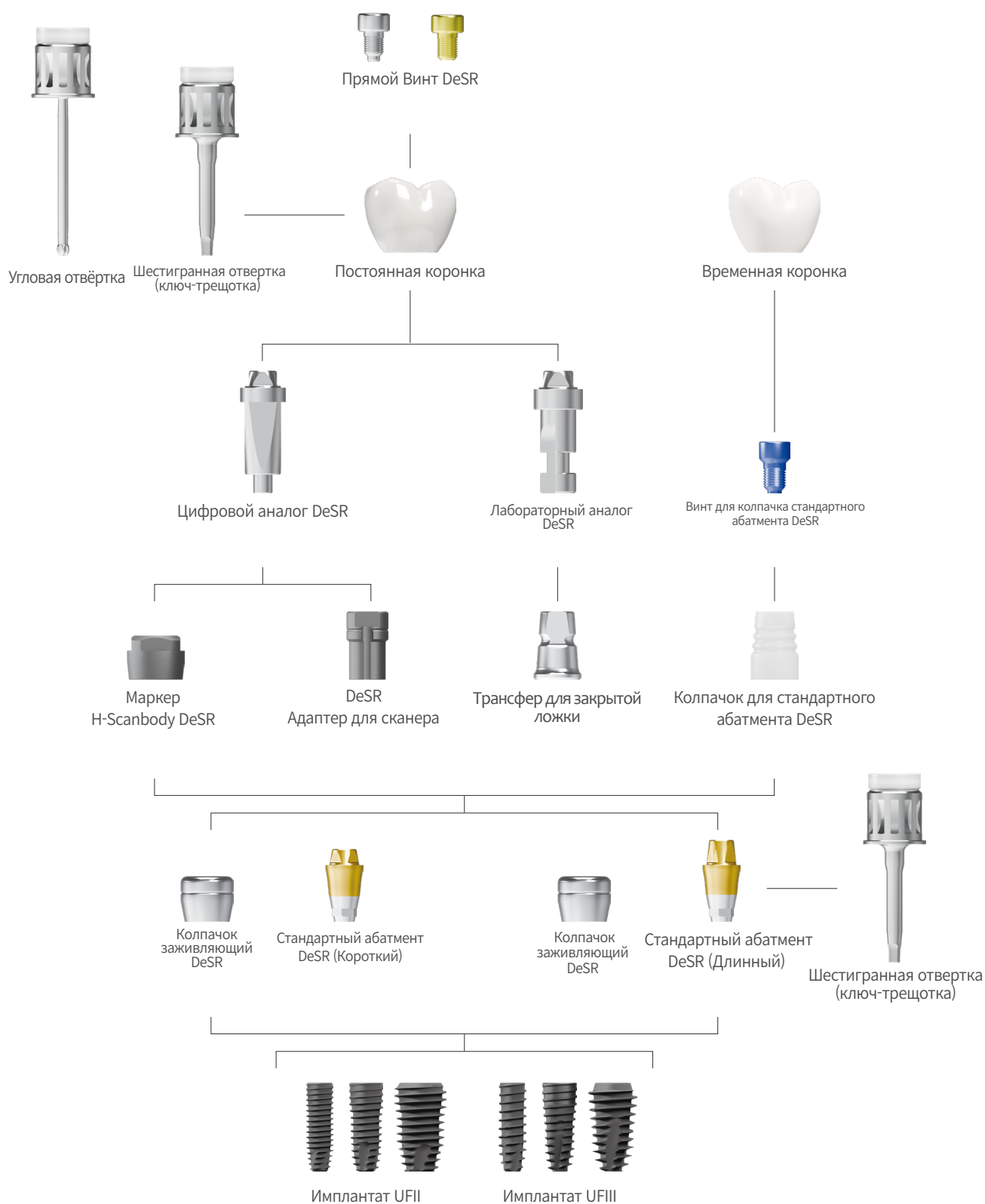

Стандартный абатмент DeSR (Короткий)

Используется для изготовления циркониевых протезов с винтовой фиксацией.

- Компенсация угла : **N** 20° / **R** 30°
- Комплектация :
Hex (Стандартный Абатмент + Винт + Держатель)
/ Non-Hex (Стандартный Абатмент)
- Момент затяжки : **N** 20Ncm / **R** 30~35Ncm

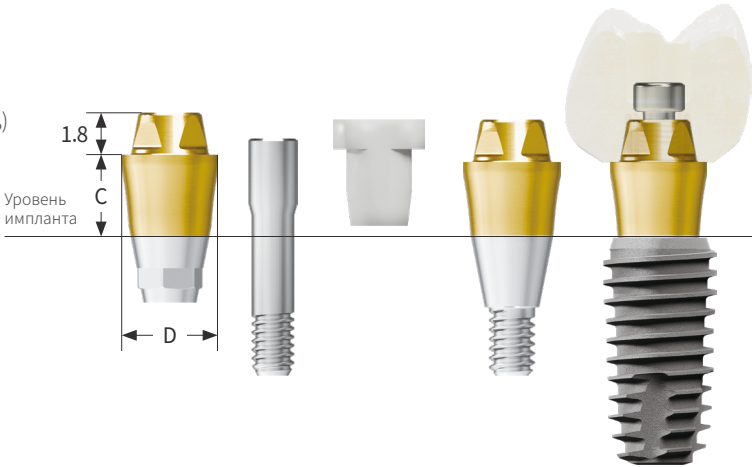

Ед.изм.мм


N R		Размер	Narrow	Regular		
Hex		Диаметр	Ø4.2	Ø4.2	Ø4.8	Ø5.5
Длина 1.8	Десневая часть 1.5		-	-	DSRBA 4801H	DSRBA 5501H
	2.5	DSRNBA 4202H		DSRBA 4202H	DSRBA 4802H	DSRBA 5502H
	3.5	DSRNBA 4203H		DSRBA 4203H	DSRBA 4803H	DSRBA 5503H
	4.5	DSRNBA 4204H		DSRBA 4204H	DSRBA 4804H	DSRBA 5504H
	5.5	DSRNBA 4205H		DSRBA 4205H	DSRBA 4805H	DSRBA 5505H
	6.5	DSRNBA 4206H		DSRBA 4206H	DSRBA 4806H	DSRBA 5506H
	7.5	DSRNBA 4207H		DSRBA 4207H	DSRBA 4807H	DSRBA 5507H

N R		Размер	Narrow	Regular		
Non-Hex		Диаметр	Ø4.2	Ø4.2	Ø4.8	Ø5.5
Длина 1.8	Десневая часть 1.5		-	-	DSRBA 4801N	DSRBA 5501N
	2.5	DSRNBA 4202N		DSRBA 4202N	DSRBA 4802N	DSRBA 5502N
	3.5	DSRNBA 4203N		DSRBA 4203N	DSRBA 4803N	DSRBA 5503N
	4.5	DSRNBA 4204N		DSRBA 4204N	DSRBA 4804N	DSRBA 5504N
	5.5	DSRNBA 4205N		DSRBA 4205N	DSRBA 4805N	DSRBA 5505N
	6.5	DSRNBA 4206N		DSRBA 4206N	DSRBA 4806N	DSRBA 5506N
	7.5	DSRNBA 4207N		DSRBA 4207N	DSRBA 4807N	DSRBA 5507N

Стандартный абатмент DeSR (Длинный)

Используется для изготовления циркониевых протезов с винтовой фиксацией.

- Компенсация угла : **N** 12° / **R** 20°
- Комплектация : Hex (Стандартный Абатмент + Винт + Держатель)
/ Non-Hex (Стандартный Абатмент)
- Момент затяжки : **N** 20Ncm / **R** 30~35Ncm

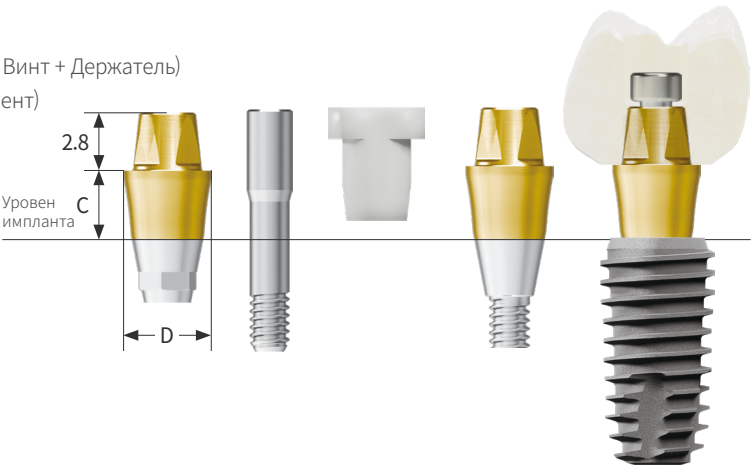

Ед.изм.мм

N R
Hex

Размер		Narrow				Regular			
Диаметр		Ø4.2				Ø4.2 Ø4.8 Ø5.5			
Длина	Десневая часть 1.5	-				- DSRBAL 4801H DSRBAL 5501H			
	2.5	DSRNBAL 4202H	DSRBAL 4202H	DSRBAL 4802H	DSRBAL 5502H				
	3.5	DSRNBAL 4203H	DSRBAL 4203H	DSRBAL 4803H	DSRBAL 5503H				
	4.5	DSRNBAL 4204H	DSRBAL 4204H	DSRBAL 4804H	DSRBAL 5504H				
	5.5	DSRNBAL 4205H	DSRBAL 4205H	DSRBAL 4805H	DSRBAL 5505H				
	6.5	DSRNBAL 4206H	DSRBAL 4206H	DSRBAL 4806H	DSRBAL 5506H				
	7.5	DSRNBAL 4207H	DSRBAL 4207H	DSRBAL 4807H	DSRBAL 5507H				

N R
Non-Hex

Размер		Narrow				Regular			
Диаметр		Ø4.2				Ø4.2 Ø4.8 Ø5.5			
Длина	Десневая часть 1.5	-				- DSRBAL 4801N DSRBAL 5501N			
	2.5	DSRNBAL 4202N	DSRBAL 4202N	DSRBAL 4802N	DSRBAL 5502N				
	3.5	DSRNBAL 4203N	DSRBAL 4203N	DSRBAL 4803N	DSRBAL 5503N				
	4.5	DSRNBAL 4204N	DSRBAL 4204N	DSRBAL 4804N	DSRBAL 5504N				
	5.5	DSRNBAL 4205N	DSRBAL 4205N	DSRBAL 4805N	DSRBAL 5505N				
	6.5	DSRNBAL 4206N	DSRBAL 4206N	DSRBAL 4806N	DSRBAL 5506N				
	7.5	DSRNBAL 4207N	DSRBAL 4207N	DSRBAL 4807N	DSRBAL 5507N				

Колпачок заживляющий DeSR

Применяется при низкой первичной стабильности имплантата для защиты абатмента и снижения дискомфорта у пациента.

- Момент затяжки : 5~8Ncm



Ед.изм.мм

N	R	Размер		Narrow		Regular		
		Диаметр		Ø4.2		Ø4.8 Ø5.5		
Короткий		Длина 4.5		DSRNHC 4204		DSRHC 4804	DSRHC 5504	
Длинный		Длина 5.5		DSRNHCL 4205		DSRHCL 4805	DSRHCL 5505	

Использовать только компоненты, подходящие для стандартного абатмента типа Короткий / Длинный.

DeSR H-Scanbody

Предназначен для цифрового снятия оттиска на уровне формирователя десны и абатмента.

- Момент затяжки : 5~8Ncm



Ед.изм.мм

N	R	Размер			
		Narrow		Regular	
		Диаметр		Ø4.2	Ø4.8 Ø5.5
		Короткий	Длина 4.5	DSRNHSB 4204	DSRHSB 4804 DSRHSB 5504
		Длинный	Длина 5.5	DSRNHSBL 4205	DSRHSBL 4805 DSRHSBL 5505
Jig		JIG 501	JIG 1551 JIG 602		


Использовать только компоненты, подходящие для стандартного абатмента типа Короткий / Длинный.

DeSR Абатмент Компоненты

DeSR Адаптер для сканера

Используется для цифрового снятия оттиска на уровне абатмента.

- Момент затяжки : 5~8Ncm

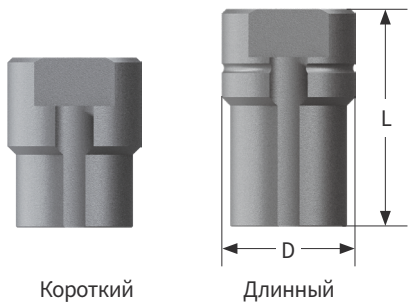

N R


Размер		Narrow		Regular	
Диаметр		Ø4.2		Ø4.8	Ø5.5
Короткий	Длина 7	DSRNSA 4207		DSRSA 4807	DSRSA 5507
Длинный	Длина 9	DSRNSAL 4209		DSRSAL 4809	DSRSAL 5509

Использовать только компоненты, подходящие для стандартного абатмента типа Короткий / Длинный.

Цифровой аналог DeSR

Используется для воспроизведения абатмента DeSR на 3D-печатной модели.

- Момент затяжки : 5~8Ncm

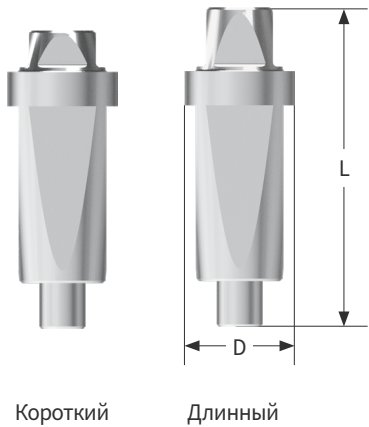

N R

Размер		Narrow		Regular	
Диаметр		Ø4.2		Ø4.8	
Короткий	Длина 13	DSRNDА 42		DSRDA 48	
Длинный	Длина 14	DSRNDAL 42		DSRDAL 48	

Использовать только компоненты, подходящие для стандартного абатмента типа Короткий / Длинный.

Колпачок для стандартного абатмента DeSR

Используется для изготовления временной коронки, соединяется со стандартным абатментом непосредственно в полости рта.

- Комплектация : Колпачок для стандартного абатмента + Винт (DSRBACS 1804H)
- Момент затяжки : 20Ncm



Короткий Длинный Винт

Ед.изм.мм

N R


Размер		Narrow			Regular	
Диаметр		Ø4.2		Ø4.2	Ø4.8	Ø5.5
Короткий	Hex	DSRNBAC 4205H			DSRBAC 4805H	DSRBAC 5505H
	Non-Hex	DSRNBAC 4205N			DSRBAC 4805N	DSRBAC 5505N
Длинный	Hex	DSRNACL 4207H			DSRBACL 4807H	DSRBACL 5507H
	Non-Hex	DSRNACL 4207N			DSRBACL 4807N	DSRBACL 5507N

Использовать только компоненты, подходящие для стандартного абатмента типа Короткий / Длинный.

Трансфер для закрытой ложки DeSR

Слепок, получаемый с помощью трансфера на уровне абатмента.

- Комплектация : Трансфер для открытой ложки + Винт для колпачка (DSRTIS 05)
- Момент затяжки : 5~8Ncm

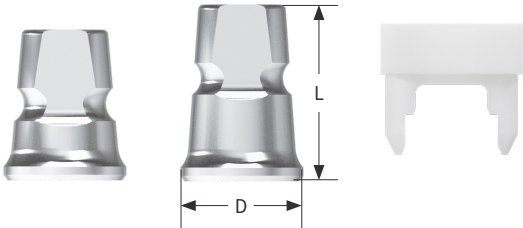

Короткий Длинный Держатель трансфера

Ед.изм.мм

N R


Размер		Narrow			Regular	
Диаметр		Ø4.2		Ø4.2	Ø4.8	Ø5.5
Короткий	5.5mm	DSRNTI 4205H			DSRTI 4805H	DSRTI 5505H
Длинный	6.5mm	DSRNTIL 4206H			DSRTIL 4806H	DSRTIL 5506H
Держатель трансфера				DSRTIH 4248		DSRTIH 5565

Использовать только компоненты, подходящие для стандартного абатмента типа Короткий / Длинный.

DeSR Абатмент Компоненты

Лабораторный аналог DeSR

Используется для воспроизведения абатмента DeSR на рабочей (гипсовой) модели.

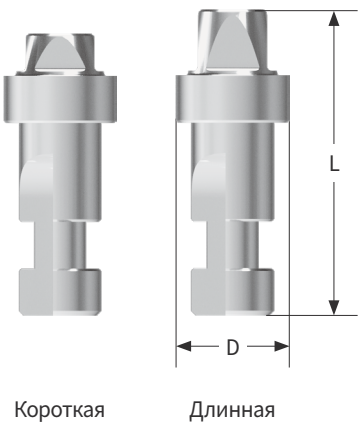

Ед.изм.мм

Размер		Narrow		Regular	
Диаметр		Ø4.2		Ø4.2	Ø4.8 Ø5.5
Короткий	Длина 12	DSRNLА 42		DSRLA 48	DSRLA 55
Длинный	Длина 13	DSRNLAL 42		DSRLAL 48	DSRLAL 55

Использовать только компоненты, подходящие для стандартного абатмента типа Короткий / Длинный.

Прямой Винт DeSR

Предназначен для фиксации прямой коронки.

- Прямой тип : DSRDS 1804H / Угловой тип: DSRDS 1804T
- Инструмент: HD 1200A Нех отвёртка / ATD 1700 Torx отвёртка
- Момент затяжки : N 20Ncm / R 25Ncm




N R

Ед.изм.мм

Размер			Narrow · Regular	
Тип	Hex 1.2		Torx	
	DSRDS 1804H		DSRDS 1804T	



Octa абатмент Схема протезирования

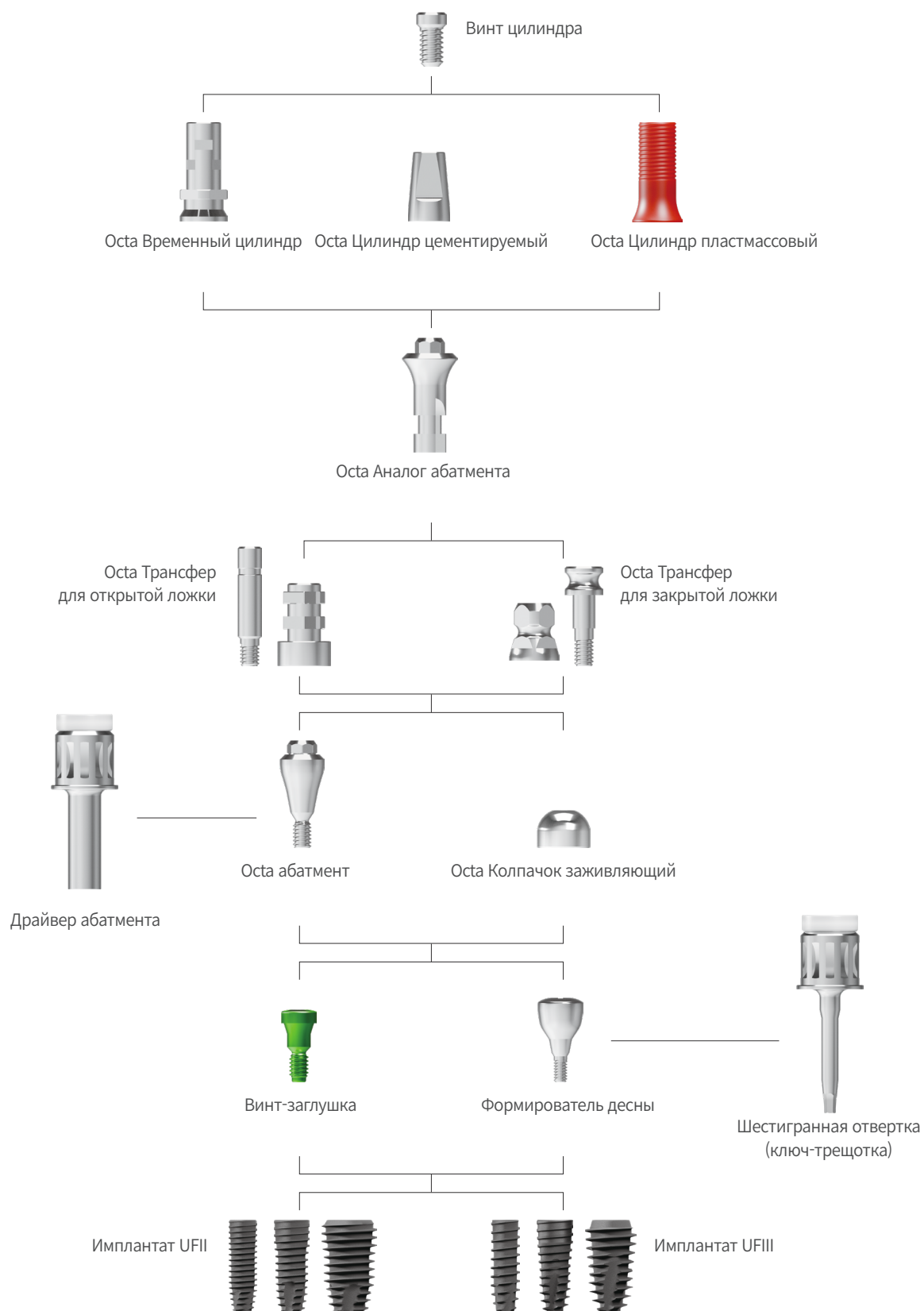

Octa абатмент

Применяется при изготовлении мостовидных протезов в случаях непаралельно установленных имплантатов.

- Гибридная платформа: внутреннее соединение имплантата с абатментом внешнего типа. Стандартизированный протокол работы с цилиндрическими компонентами.
- Используется Драйвер абатмента (HD 3006A-Короткий / HD 3012A-Длинный)
- Комплектация : Octa абатмент
+ Octa абатмент Держатель
(SSOAH 4020 — удобно для фиксации в полости рта)

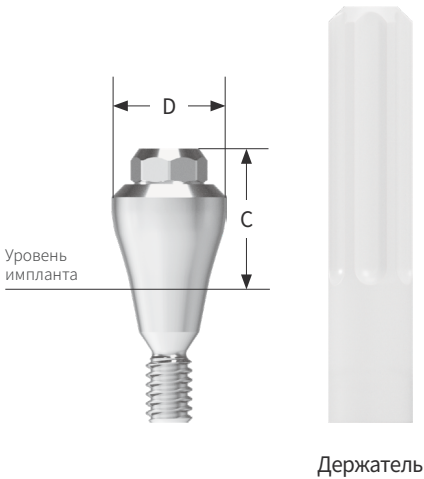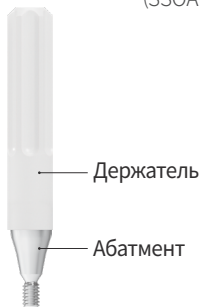

R

Размер		Regular	
Диаметр	Ø4.8	Ø6.0	Ø6.5
Десневая часть 1.5	SSOA 4815	SSOA 6015	SSOA 6515
2.5	SSOA 4825	SSOA 6025	SSOA 6525
3.5	SSOA 4835	SSOA 6035	SSOA 6535
4.5	SSOA 4845	SSOA 6045	SSOA 6545
5.5	SSOA 4855	SSOA 6055	SSOA 6555


Ед.изм.мм

Оста абатмент Компоненты

Оста Колпачок заживляющий

Используется для защиты абатмента Оста в полости рта и минимизации дискомфорта пациента.

- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Колпачок заживляющий + Винт цилиндра (STI 2004H)
- Момент затяжки : 5~8Ncm

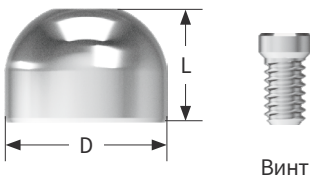

R


Размер		Regular	
Диаметр	Ø4.8	Ø6.0	Ø6.5
	HCI 48504	HCI 60704	HCI 65704

Ед.изм.мм

Оста Трансфер для открытой ложки

Прямой метод переноса трансфера с помощью открытой ложки (Open Tray).

- Асимметричная конструкция для минимизации межзубных контактов
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Трансфер для открытой ложки + Направляющий пин (POI 2610)

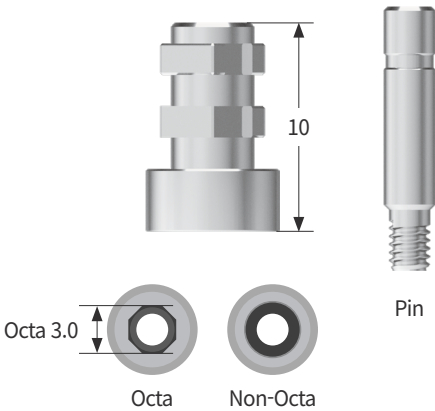

R


Размер		Regular	
Диаметр	Ø4.8	Ø6.0	Ø6.5
	IPI 48610	IPI 60710	IPI 65710
Длина 10	Octa	IPI 60710N	IPI 65710N
	Non-Octa	IPI 48610N	IPI 65710N

Ед.изм.мм

Оста Трансфер для закрытой ложки

Трансферный тип для снятия оттиска методом закрытой ложки.

- Двухгранная конструкция обеспечивает лучшую позиционную стабильность после снятия оттиска.
- Используется отвертка Нех 1.2
- Комплектация : Трансфер для закрытой ложки
+ Винт для колпачка (ЮТИ 48010S)

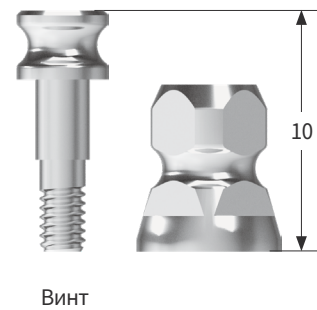

R

Размер		Regular	
Диаметр	Ø4.8	Ø6.0	Ø6.5
Длина 10	ЮТИ 48010	ЮТИ 60010	ЮТИ 65010

Ед.изм.мм

Оста Аналог абатмента

Используется для моделирования абатмента Оста на рабочей модели.

※ Не является медицинским изделием.



R

Размер		Regular	
Диаметр	Ø4.8	Ø6.0	Ø6.5
Длина 10	-	RCI 60014	-
12	RCI 48014	-	RCI 65014


Ед.изм.мм

Оcta абатмент Компоненты

Оcta Цилиндр цементируемый

Используется при изготовлении протезов с цементной фиксацией

- Используется отвертка Нех 1.2
- Комплектация : Цилиндр цементируемый + Винт цилиндра (STI 2004Н)
- Момент затяжки : 20Ncm

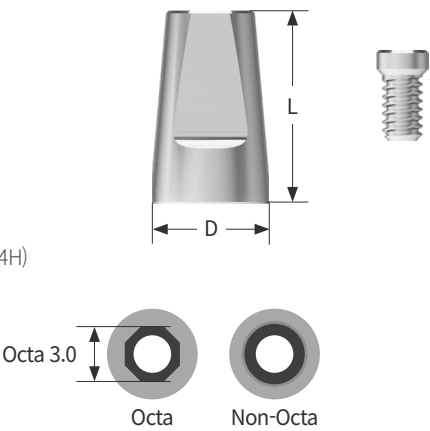

R

Ед.изм.мм


Размер		Regular			
Диаметр абатмента	Ø4.8	Ø4.8	Ø6.0	Ø6.5	
Диаметр цилиндра	Ø5.0	Ø5.8	Ø6.4	Ø6.9	
Длина	8		9		
Octa	ICC 48508[H]	ICC 48588[H]	ICC 60649[H]	ICC 65309[H]	
Non-Octa	ICC 48508N[H]	ICC 48588N[H]	ICC 60649N[H]	ICC 65309N[H]	

Оcta Цилиндр пластмассовый

Изготовление одиночной коронки с винтовой фиксацией методом литья из неблагородного стоматологического сплава по индивидуальным параметрам

- Используется отвертка Нех 1.2
- Комплектация : Цилиндр пластмассовый + Винт цилиндра (STI 2004Н)
- Момент затяжки : 20Ncm

※ Не является медицинским изделием.

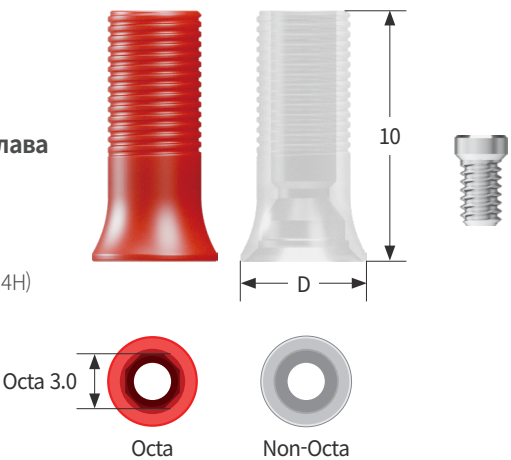


R

Ед.изм.мм

Размер		Regular		
Диаметр	Ø4.8	Ø6.0	Ø6.5	
Длина	Octa ●	API 60714[H]	API 65714[H]	
10	Non-Octa ○	API 60714N[H]	API 65714N[H]	

Оста Временный цилиндр

- Используется отвертка Нех 1.2
- Комплектация : Временный цилиндр + Винт цилиндра (STI 2004H)
- Момент затяжки : 20Ncm

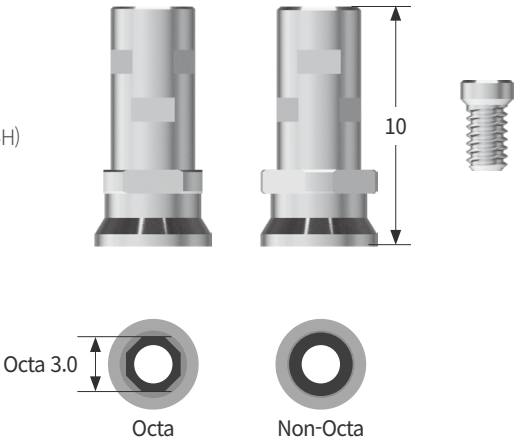


R

Ед.изм.мм

Размер		Regular	
Диаметр		Ø4.8	Ø6.0
Длина	Octa	ИТС 48010[Н]	ИТС 60010[Н]
	Non-Octa	ИТС 48010N[Н]	ИТС 60010N[Н]

Ортопедическая конструкция с опорой на шаровидные аттачменты

Схема протезирования

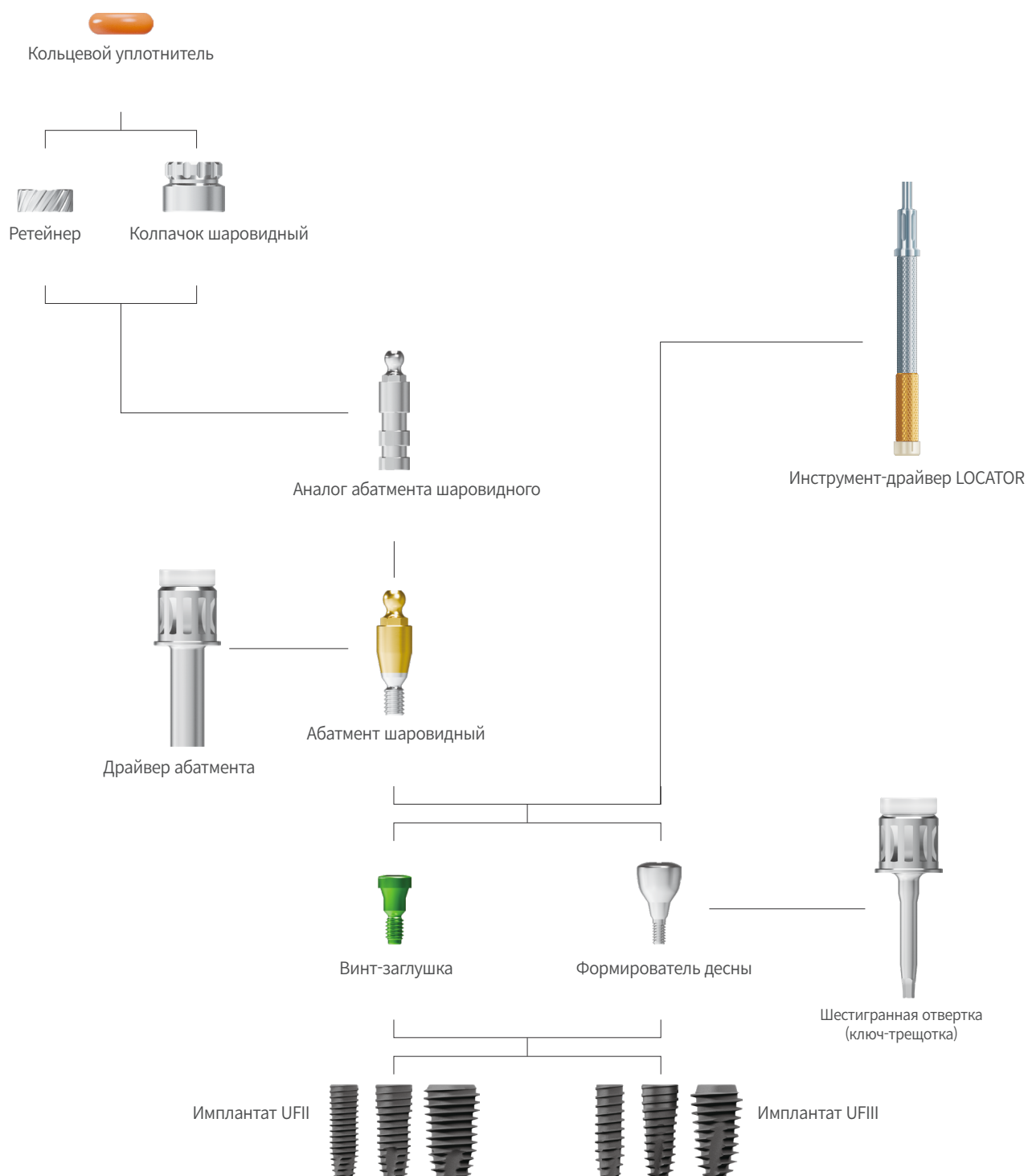

Абатмент шаровидный


Используется для создания условно-съёмного протеза с шаровидной системой фиксации.

- Для повышения эстетики придесневая часть покрыта золотым напылением (Золотое покрытие)
- Компенсация угла наклона имплантата — до 20°
- Используется Драйвер абатмента(HD 2406A, HD 2412A)
- Комплектация :

N Абатмент шаровидный + Держатель абатмента шаровидного (удобно при интраоральной фиксации)

R Абатмент шаровидный + Держатель абатмента шаровидного (удобно при интраоральной фиксации) + Кольцевой уплотнитель (Оранжевый : OR 0450O)

- Момент затяжки : N 20Ncm / R 30~35Ncm

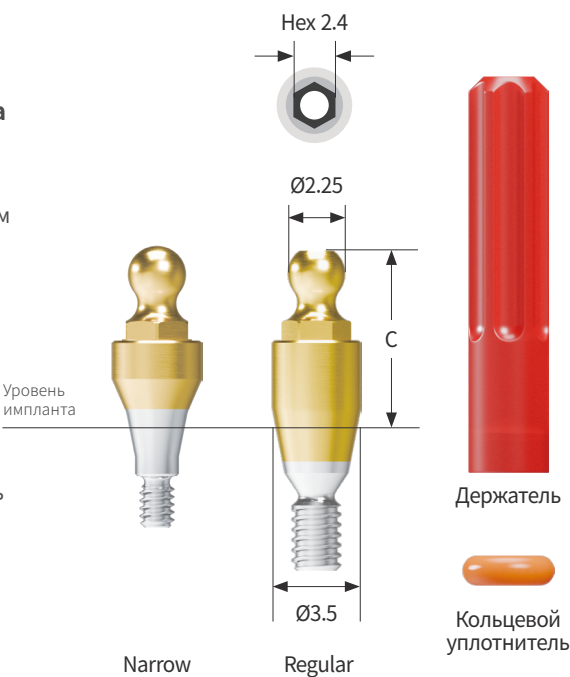

Ед.изм.мм


N R	Размер	
	Narrow	Regular
Диаметр	Ø3.5	Ø3.5
Десневая часть 1	UNSBA 3510	SSBA 3510
2	UNSBA 3520	SSBA 3520
3	UNSBA 3530	SSBA 3530
4	UNSBA 3540	SSBA 3540
5	UNSBA 3550	SSBA 3550
6	UNSBA 3560	SSBA 3560
7	UNSBA 3570	-

Абатмент шаровидный Компоненты

Аналог абатмента шаровидного

Используется для воспроизведения формы шаровидного абатмента на рабочей модели.

※ Не является медицинским изделием.

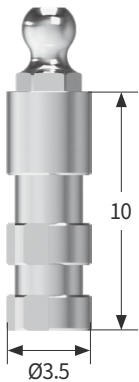

Ед.изм.мм

N R	Размер	
	Narrow	Regular
Диаметр абатмента	Ø3.5	Ø3.5
Длина 10	UNSBAА 3510	SABA 3510

Абатмент шаровидный Компоненты

Кольцевой уплотнитель

Черный: уплотнительное кольцо для лабораторного изготовления условно- съёмных протезов (используется в зуботехнической лаборатории).
Оранжевый: уплотнительное кольцо для интраорального применения, с повышенной удерживающей силой (около 6 Н).



- Комплектация : Кольцевой уплотнитель (OR 0450B : 1ea + OR 0450O : 1ea)


N R

Размер		Narrow · Regular	
Диаметр		Ø4.5	Ø4.5
Цвет		Черный ●	Оранжевый ●
		OR 0450B	OR 0450O

Ед.изм.мм

Набор кольцевого уплотнителя с ретейнером

Предпочтителен в случаях с ограниченным межокклюзионным пространством по сравнению с шаровидным колпачком.

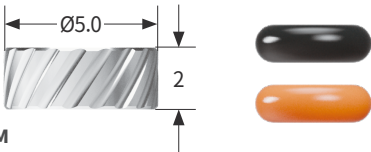

- Комплектация : Ретейнер + Кольцевой уплотнитель (OR 0450B + OR 0450O)


N R

Размер		Narrow · Regular	
Диаметр		Ø5.0	
Длина 2		RT 0502	

Ед.изм.мм

Набор кольцевого уплотнителя с колпачком шаровидным

Обеспечивает отличную ретенцию и комфорт при снятии и установке протеза.

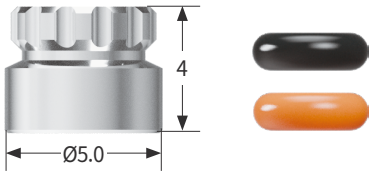

- Комплектация : Колпачок шаровидный + Кольцевой уплотнитель (OR 0450B + OR 0450O)

N R

Размер		Narrow · Regular	
Диаметр		Ø5.0	
Длина 4		BC 5004	

Ед.изм.мм

Инструмент-драйвер LOCATOR

используется для установки/снятия матрицы.


Состоит из трёх частей и также применяется как ручной ключ для работы с абатментами системы Locator.



N R

Размер	Narrow · Regular
	08393

Цифровой абатмент Схема протезирования

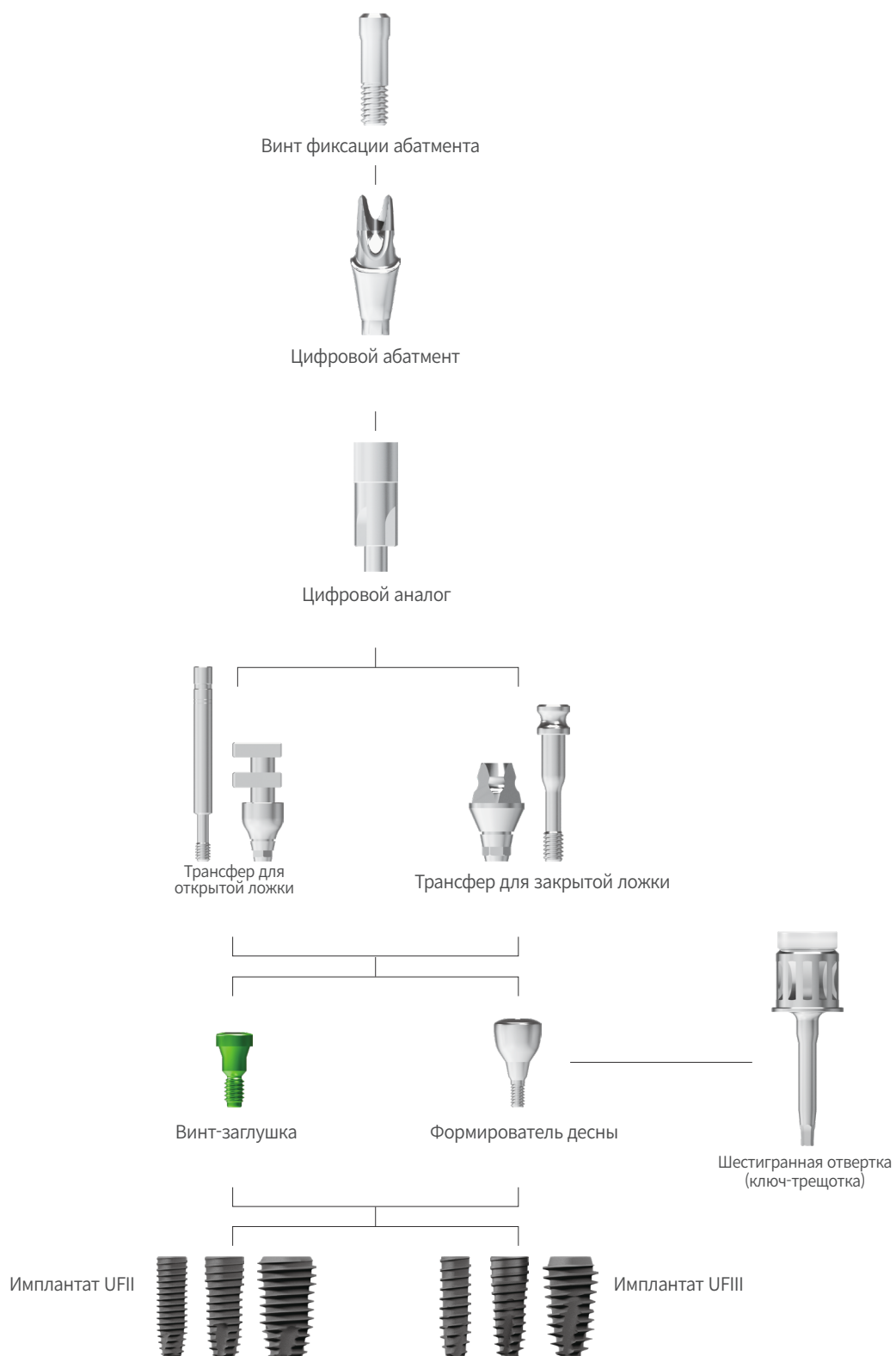

Цифровой абатмент

Цифровой абатмент — сочетает точность индивидуальных решений и простоту стандартных конструкций.

Маркировка

- L 25 · Нижний резец 2 Cuff 5 Post
- U 25 · Верхний резец 2 Cuff 5 Post
- C 25 · Клык 2 Cuff 5 Post
- P 25 · Премоляр 2 Cuff 5 Post
- M 25 · Моляр 2 Cuff 5 Post

ex) Cuff 2.5 = 2 / Post 5.5 = 5

Соединение UFII



	Ед.изм.мм				
	Нижний резец	Верхний резец	Клык	Премоляр	Моляр
Поперечное сечение					
Поперечное сечение в области шейки					
Фронтальная сторона					
Соединение	Narrow	Narrow / Regular	Regular	Regular	Regular
Размер края шейки (мезиодистальный X вестибуло-лингвальный)	5 X 5.2	6.1 X 5.7	5.3 X 6.3	5.8 X 6.8	7.3 X 7.8
Соотношение (%)	70%	70% / 85%	85%	85%	85%

Цифровой абатмент Компоненты

Колпачок защитный




1. Функция ретракции десневого края.

- Предотвращает перекрытие маргинальной области тканями десны.
- Обеспечивает точное получение оттиска благодаря сохранению формы и высоты десневого края (без ретракции).

2. Функция защиты языка пациента

- Минимизирует ощущение инородного тела и предотвращает травмирование мягких тканей абатментом.


※ Во время жевания (особенно липких продуктов) возможно выпадение защитного колпачка (Protect Cap). В таком случае следует обратить внимание, чтобы пациент не проглотил его.

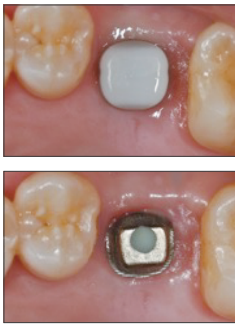


Как проверить траекторию установки имплантата

Безлоскутная операция

- Хирургический шаблон для фиксации штифтом (Позволяет проверить высоту десны)

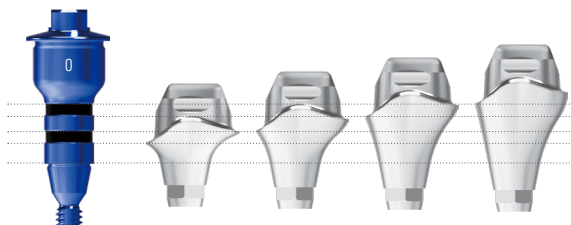


- При использовании цифрового абатмента ориентируйте Hex в направлении вестибулярной стороны.
- Поверните направляющую втулку, чтобы убедиться в правильной ориентации Hex.

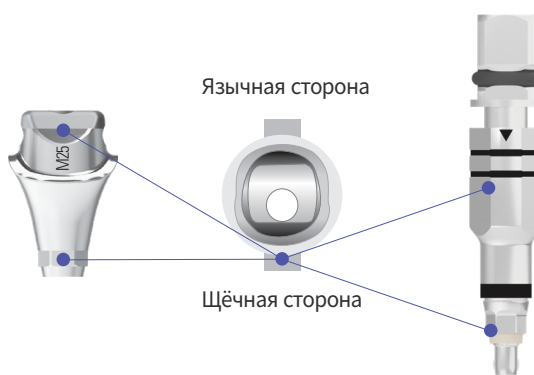


Лоскутная операция

- При использовании цифрового абатмента: Шестигранник должен быть обращён в вестибулярную сторону.
- С помощью драйвера имплантата: Вставляется в паз шестигранного соединения.

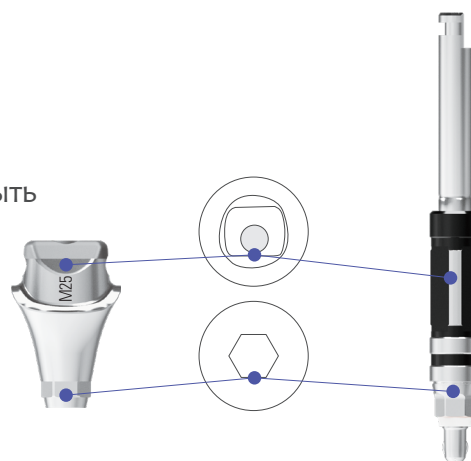

Narrow Угловой абатмент

- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации (при наличии — с защитным колпачком [C])
- Винт фиксации абатмента : UNSAS 1407H (совместим только с комплектным винтом)

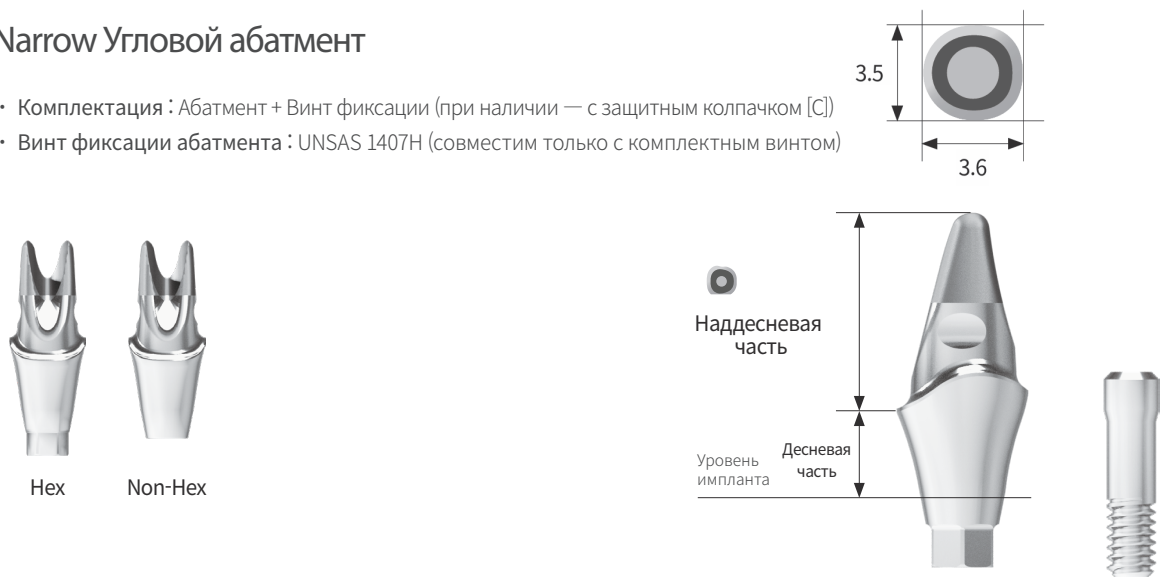


N

Размер						Ед.изм.мм
Narrow						
Десневая часть		2.5	3.5	4.5	5.5	DA Колпачок защитный
Наддесневая часть 5.5	Hex	DLN 2555H	DLN 3555H	DLN 4555H	DLN 5555H	DCLN 55
	Non-Hex	DLN 2555N	DLN 3555N	DLN 4555N	DLN 5555N	DCLN 55
	Маркировка	L 25	L 35	L 45	L 55	-
Наддесневая часть 7	Hex	DLN 2570H	DLN 3570H	DLN 4570H	DLN 5570H	DCLN 70
	Non-Hex	DLN 2570N	DLN 3570N	DLN 4570N	DLN 5570N	DCLN 70
	Маркировка	L 27	L 37	L 47	L 57	-

Цифровой абатмент Верхний резец

Narrow Угловой абатмент

- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации (в моделях с защитным колпачком — [C])
- Винт фиксации абатмента : UNSAS 1407H (совместим только с комплектным винтом)

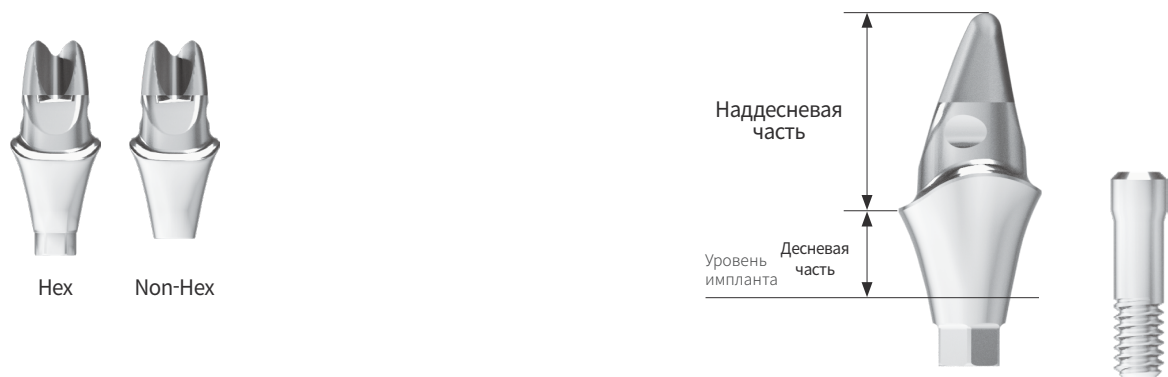


N

Ед.изм.мм

Размер		Narrow				
Десневая часть		2.5	3.5	4.5	5.5	DA Колпачок защитный
Наддесневая часть 5.5	Hex	DUN 2555H	DUN 3555H	DUN 4555H	DUN 5555H	DCUN 55
	Non-Hex	DUN 2555N	DUN 3555N	DUN 4555N	DUN 5555N	DCUN 55
	Маркировка	U 25	U 35	U 45	U 55	-
Наддесневая часть 7	Hex	DUN 2570H	DUN 3570H	DUN 4570H	DUN 5570H	DCUN 70
	Non-Hex	DUN 2570N	DUN 3570N	DUN 4570N	DUN 5570N	DCUN 70
	Маркировка	U 27	U 37	U 47	U 57	-

Угловой абатмент

- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации (в моделях с защитным колпачком — [C])
- Винт фиксации абатмента : DASC 2008H (совместим только с комплектным винтом)

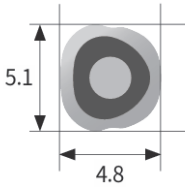

R



Ед.изм.мм

Размер		Regular				Ед.изм.мм
Десневая часть		2.5	3.5	4.5	5.5	DA Колпачок защитный
Наддесневая часть 5.5	Hex	DUR 2555H	DUR 3555H	DUR 4555H	DUR 5555H	DCUR 55
	Non-Hex	DUR 2555N	DUR 3555N	DUR 4555N	DUR 5555N	DCUR 55
	Маркировка	U 25	U 35	U 45	U 55	-
Наддесневая часть 7	Hex	DUR 2570H	DUR 3570H	DUR 4570H	DUR 5570H	DCUR 70
	Non-Hex	DUR 2570N	DUR 3570N	DUR 4570N	DUR 5570N	DCUR 70
	Маркировка	U 27	U 37	U 47	U 57	-

Цифровой абатмент Клык

Угловой абатмент

- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации (в моделях с защитным колпачком — [C])
- Винт фиксации абатмента : DASC 2008H (совместим только с комплектным винтом)

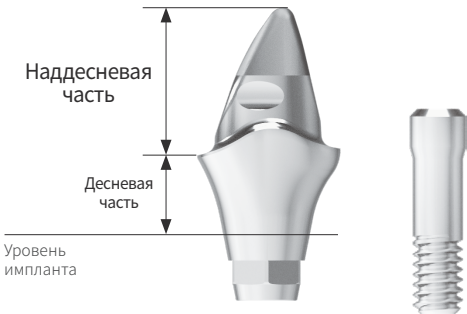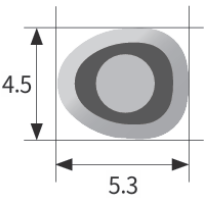


R

Ед.изм.мм

Размер		Regular		
Десневая часть		2.5	3.5	DA Колпачок защитный
Наддесневая часть 5.5	Hex	DCR 2555H	DCR 3555H	DCCR 55
	Non-Hex	DCR 2555N	DCR 3555N	DCCR 55
	Маркировка	C 25	C 35	-
Наддесневая часть 7	Hex	DCR 2570H	DCR 3570H	DCCR 70
	Non-Hex	DCR 2570N	DCR 3570N	DCCR 70
	Маркировка	C 27	C 37	-

Угловой абатмент

- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации (в моделях с защитным колпачком — [C])
- Винт фиксации абатмента : DASC 2008H (совместим только с комплектным винтом)

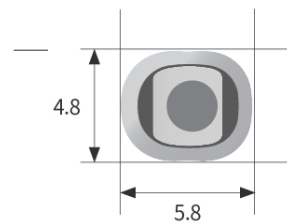

R

Ед.изм.мм

Размер		Regular				
Десневая часть		1.5	2.5	3.5	4.5	DA Колпачок защитный
Наддесневая часть 4.0	Hex	DPR 1540H	DPR 2540H	DPR 3540H	DPR 4540H	DCPR 40
	Non-Hex	DPR 1540N	DPR 2540N	DPR 3540N	DPR 4540N	DCPR 40
	Маркировка	P 14	P 24	P 34	P 44	-
Наддесневая часть 4.0	Hex	DPR 1555H	DPR 2555H	DPR 3555H	DPR 4555H	DCPR 55
	Non-Hex	DPR 1555N	DPR 2555N	DPR 3555N	DPR 4555N	DCPR 55
	Маркировка	P 15	P 25	P 35	P 45	-
Наддесневая часть 7	Hex	DPR 1570H	DPR 2570H	DPR 3570H	DPR 4570H	DCPR 70
	Non-Hex	DPR 1570N	DPR 2570N	DPR 3570N	DPR 4570N	DCPR 70
	Маркировка	P 17	P 27	P 37	P 47	-

Угловой абатмент

- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации (в моделях с защитным колпачком — [C])
- Винт фиксации абатмента : DASC 2008H (совместим только с комплектным винтом)



R

Ед.изм.мм

Размер		Regular				
Десневая часть		1.5	2.5	3.5	4.5	DA Колпачок защитный
Наддесневая часть 4.0	Hex	DMR 1540H	DMR 2540H	DMR 3540H	DMR 4540H	DCMR 40
	Non-Hex	DMR 1540N	DMR 2540N	DMR 3540N	DMR 4540N	DCMR 40
	Маркировка	M 14	M 24	M 34	M 44	-
Наддесневая часть 5.5	Hex	DMR 1555H	DMR 2555H	DMR 3555H	DMR 4555H	DCMR 55
	Non-Hex	DMR 1555N	DMR 2555N	DMR 3555N	DMR 4555N	DCMR 55
	Маркировка	M 15	M 25	M 35	M 45	-
Наддесневая часть 5.5	Hex	DMR 1570H	DMR 2570H	DMR 3570H	DMR 4570H	DCMR 70
	Non-Hex	DMR 1570N	DMR 2570N	DMR 3570N	DMR 4570N	DCMR 70
	Маркировка	M 17	M 27	M 37	M 47	-


Процесс работы с цифровым абатментом

DIO NAVI + Цифровой абатмент (Полностью цифровой процесс)


Немедленное протезирование



Сбор данных

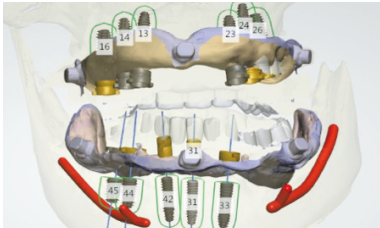

Моделирование операции

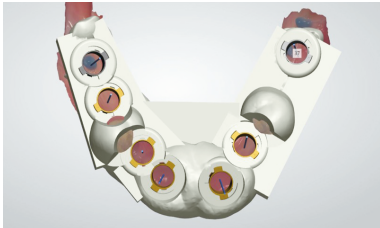

Дизайн и проектирование



Хирургический этап DIO NAVI



Фиксация цифровых абатментов




Фиксация временной конструкции

Этапы внутриротового сканирования

Метод сопоставления с библиотекой (3Shape Dental System)




Формирование десны после установки имплантатов

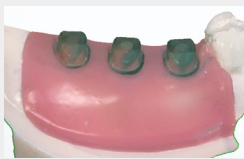


Установка цифровых абатментов и интраоральное сканирование



Фиксация защитных колпачков или временных коронок (по показаниям)

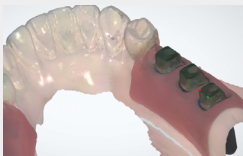

Сопоставление с библиотекой

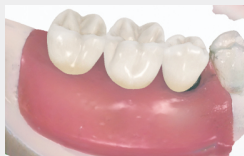


Дизайн окончательной коронки



Изготовление окончательной коронки

Этапы сканирования модели после её изготовления

Метод сопоставления с библиотекой (3Shape Dental System)

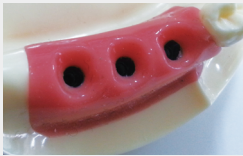


Формирование десны после установки имплантатов



Снятие слепка на уровне абатмента (DA) -> Изготовление гипсовой модели



Сканирование модели (Oral & Desk Scanner)

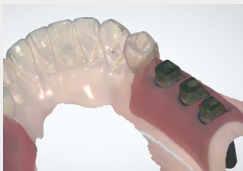

Сопоставление с библиотекой




Дизайн окончательной коронки



Изготовление окончательной коронки

Маркер H-Scanbody / Jig

- Комплектация : H-Scanbody + Scan Винт
- Момент затяжки : 5~8Ncm
- Jig приобретается отдельно

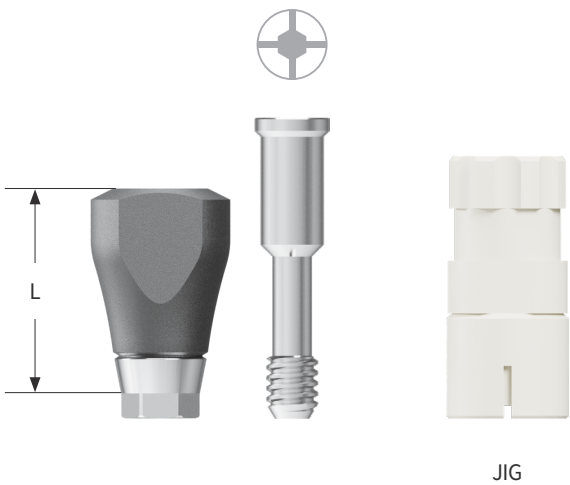

N

D Ø4.0

*Приобретается отдельно						Ед.изм.мм
Размер	Narrow					
Длина	4	6	8	10	12	Jig
						-
Вид сверху						
	UNHSB 404H	UNHSB 406H	UNHSB 408H	UNHSB 410H	UNHSB 412H	JIG 401
Винт	UNSCAN 1408H	UNSCAN 1410H	UNSCAN 1412H	UNSCAN 1414H	UNSCAN 1416H	

*Приобретается отдельно Ед.изм.мм

R
D Ø5.0

Regular				
Размер	4	6	8	Jig
Длина				-
 Вид сверху				
	HSCAN 541H SSCAN 2009H	HSCAN 561H SSCAN 2011H	HSCAN 581H SSCAN 2013H	JIG 501
Винт				

R
D Ø6.0

 Вид сверху				
	HSCAN 641H SSCAN 2009H	HSCAN 661H SSCAN 2011H	HSCAN 681H SSCAN 2013H	JIG 601
	Винт			

R
D Ø6.0

 Вид сверху				
	HSCAN 642H SSCAN 2009H	HSCAN 662H SSCAN 2011H	HSCAN 682H SSCAN 2013H	JIG 602
	Винт			

R
D Ø7.0


 Вид сверху				
	HSCAN 741H SSCAN 2009H	HSCAN 761H SSCAN 2011H	HSCAN 781H SSCAN 2013H	JIG 701
	Винт			

Цифровые компоненты

Адаптер для сканера

Фиксируется на имплантате или лабораторном аналоге, сканируется интраоральным или настольным сканером для изготовления индивидуального абатмента.

- Комплектация : Адаптер для сканера + Винт
- Момент затяжки : 5~8Ncm

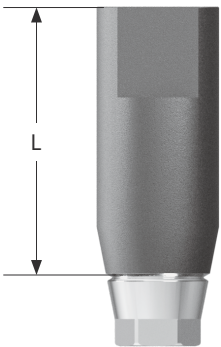

Ед.изм.мм

N

Размер	Narrow		
Длина	9	15	Винт
	SCAN 41	SCAN 41-15	UNSAS 1407H

R


Размер	Regular		
Длина	9	15	Винт
	SCAN 01[H]	SCAN 01-15[H]	SSC 2008H

D:O IMPLANT

Цифровые компоненты

Балка предварительно отшлифованная

- Комплектация :
 - N** Балка предварительно отшлифованная + Винт (UNSAS 1407H) (2ea)
 - R** Балка предварительно отшлифованная + Винт (SSC 2008H) (2ea)
- Момент затяжки : **N** 20Ncm / **R** 30~35Ncm

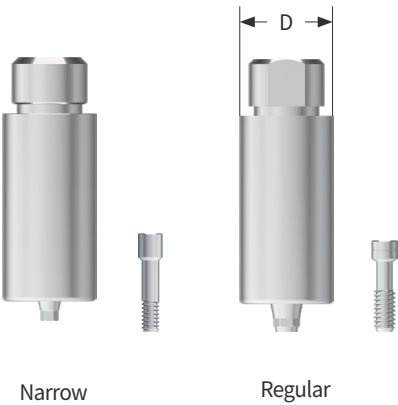


Ед.изм.мм

Narrow				
Размер				
Тип	Hex		Non-Hex	
Диаметр	Ø10	Ø12	Ø10	Ø12
	CBUN 01	CBUN 02	CBUN 01N	CBUN 02N

Regular				
Размер				
Тип	Hex		Non-Hex	
Диаметр	Ø10	Ø12	Ø10	Ø12
	CBSS 01[H]	CBSS 02[H]	CBSS 01N[H]	CBSS 02N[H]

Цифровой аналог

Используется для воспроизведения абатмента на 3D-печатной модели.

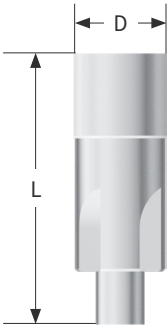


Ед.изм.мм

N R		Narrow	Regular
Размер			
Диаметр		Ø3.0	Ø4.5
Hex		1.7	2.5
Длина		9	11
			
		DAU 3009	DAU 4509

Гибридный абатмент

Изготовлен из титана в области соединения с имплантатом, а наддесневая часть выполнена из диоксида циркония, что делает абатмент идеальным для протезирования в переднем отделе.

- Комплектация : **N** Гибридный абатмент + Винт (UNSAS 1407H)
R Гибридный абатмент + Винт (SSC 2008H)
- Момент затяжки : **N** 20Ncm / **R** 30~35Ncm

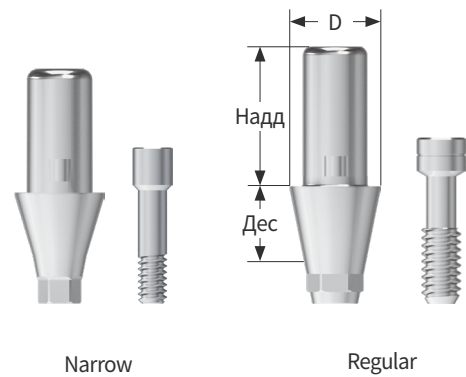

Ед.изм.мм

N

Размер		Narrow
Диаметр		Ø4.0
Тип		Hex
Наддесневая часть 4	Десневая часть 1	UNHL 40401H
	Десневая часть 2	UNHL 40402H
	Десневая часть 3	UNHL 40403H
Наддесневая часть 5.5	Десневая часть 1	UNHL 40551H
	Десневая часть 2	UNHL 40552H
	Десневая часть 3	UNHL 40553H

R



Размер		Regular			
Диаметр		Ø4.5		Ø5.5	
Тип		Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
Наддесневая часть 4	Десневая часть 1	UFHL 45401H[H]	UFHL 45401N[H]	UFHL 55401H[H]	UFHL 55401N[H]
	Десневая часть 2	UFHL 45402H[H]	UFHL 45402N[H]	UFHL 55402H[H]	UFHL 55402N[H]
	Десневая часть 3	UFHL 45403H[H]	UFHL 45403N[H]	UFHL 55403H[H]	UFHL 55403N[H]
Наддесневая часть 5.5	Десневая часть 1	UFHL 45501H[H]	UFHL 45501N[H]	UFHL 55501H[H]	UFHL 55501N[H]
	Десневая часть 2	UFHL 45502H[H]	UFHL 45502N[H]	UFHL 55502H[H]	UFHL 55502N[H]
	Десневая часть 3	UFHL 45503H[H]	UFHL 45503N[H]	UFHL 55503H[H]	UFHL 55503N[H]
Наддесневая часть 7	Десневая часть 1	UFHL 45701H[H]	UFHL 45701N[H]	UFHL 55701H[H]	UFHL 55701N[H]
	Десневая часть 2	UFHL 45702H[H]	UFHL 45702N[H]	UFHL 55702H[H]	UFHL 55702N[H]
	Десневая часть 3	UFHL 45703H[H]	UFHL 45703N[H]	UFHL 55703H[H]	UFHL 55703N[H]

02

Система непогружного типа

103	Имплантаты UFII Internal	114	Временный абатмент
106	Имплантовод	119	Абатмент монолитный
106	Винт-заглушка	122	Excellent Абатмент монолитный
106	Винт закрывающий	125	Оcta абатмент
107	Формирователь десны	123	Абатмент шаровидный
109	Цементируемый абатмент	125	Цифровые компоненты
110	Удлинённый Цементируемый абатмент		
111	Угловой абатмент		
106	UCLA Абатмент		

Имплантаты UFl Internal

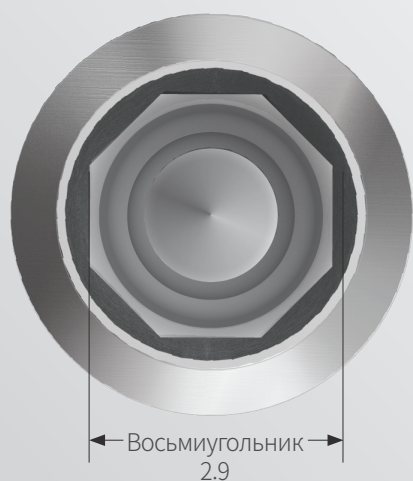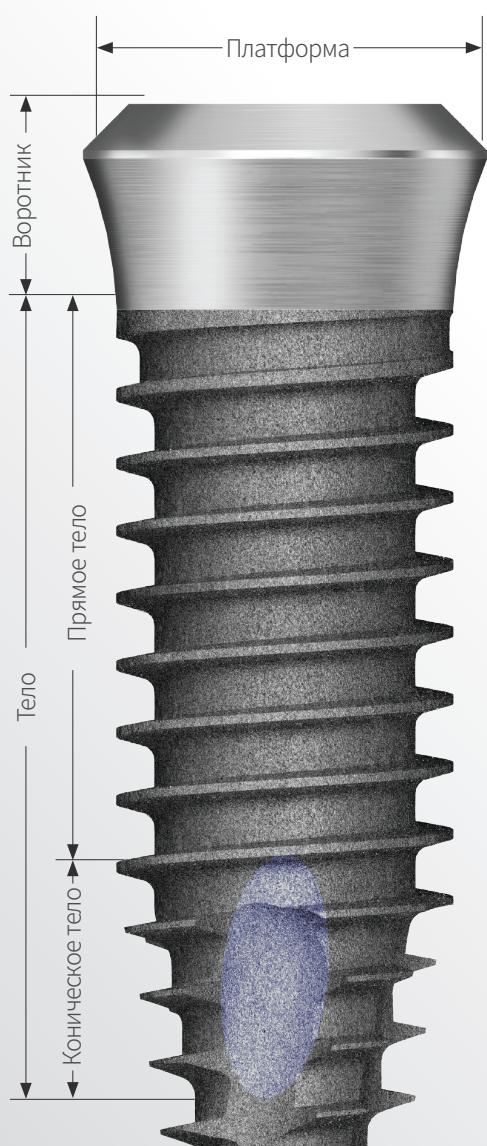

Коническая резьба

Равномерно распределяет нагрузку, улучшает кровоснабжение кортикальной кости и ускоряет остеоинтеграцию.

Конус Морзе 8°

Обеспечивает плотное соединение имплантата и абатмента, снижает нагрузку и предотвращает потерю костной ткани.

Прямое тело

Обеспечивает стабильную установку и минимальное воздействие на костную ткань.

Апикальная часть

Апикальная часть имеет угол 12°, что позволяет установить имплантат даже в ложе меньшего диаметра.

Режущий край

Остро заточенный край увеличивает эффективность самонарезающей конструкции.

UFII Internal непогружного типа Имплантат

- Платформа - Ø4.8 | Ø6.0
- Диаметр - Ø3.6 | Ø4.0 | Ø4.5 | Ø5.0 | Ø5.5
- Длина - 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 15
- HSA / Комплектация : UF(II)I 000000SF (ex : UF(II)I 362007SF)
Имплантат + Винт-заглушка | Код заказа : UF(II)I 000000S (ex : UF(II)I 362007S)
- VUV / Комплектация : Имплантат | Код заказа : UF(II)I 000000UV3 (ex : UF(II)I 362007UV3)



P Ø4.8
D Ø3.6

Ед.изм.мм							
Длина	5.5	7	8.5	10	11.5	13	15
Воротник 2.0	VUV UF(II)I 362005UV3	UF(II)I 362007UV3	UF(II)I 362008UV3	UF(II)I 362010UV3	UF(II)I 362011UV3	UF(II)I 362013UV3	-
Воротник 2.8	VUV UF(II)I 362805UV3	UF(II)I 362807UV3	UF(II)I 362808UV3	UF(II)I 362810UV3	UF(II)I 362811UV3	UF(II)I 362813UV3	-

P Ø4.8
D Ø4.0

Длина	5.5	7	8.5	10	11.5	13	15
Воротник 1.8	VUV UF(II)I 401805UV3	UF(II)I 401807UV3	UF(II)I 401808UV3	UF(II)I 401810UV3	UF(II)I 401811UV3	UF(II)I 401813UV3	-
Воротник 2.8	VUV UF(II)I 402805UV3	UF(II)I 402807UV3	UF(II)I 402808UV3	UF(II)I 402810UV3	UF(II)I 402811UV3	UF(II)I 402813UV3	-

UFII непогружного типа Имплантат

- HSA / Комплектация : UF(II)I 000000SF (ex : UF(II)I 451807SF)
Имплантат + Винт-заглушка | Код заказа : UF(II)I 000000S (ex : UF(II)I 451807S)
- VUV / Комплектация : Имплантат | Код заказа : UF(II)I 000000UV3 (ex : UF(II)I 451807UV3)

P Ø4.8 D Ø4.5	Ед.изм.мм							
	Длина	5.5	7	8.5	10	11.5	13	15
								

Воротник 1.8	VUV	UF(II)I 451805UV3	UF(II)I 451807UV3	UF(II)I 451808UV3	UF(II)I 451810UV3	UF(II)I 451811UV3	UF(II)I 451813UV3	-
								

Воротник 1.8	VUV	UF(II)I 452805UV3	UF(II)I 452807UV3	UF(II)I 452808UV3	UF(II)I 452810UV3	UF(II)I 452811UV3	UF(II)I 452813UV3	-
-----------------	-----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

P Ø6.0 D Ø4.5	Длина						
	5.5	7	8.5	10	11.5	13	15
							

Воротник 1.8	VUV	UF(II)IW 451805UV3	UF(II)IW 451807UV3	UF(II)IW 451808UV3	UF(II)IW 451810UV3	UF(II)IW 451811UV3	UF(II)IW 451813UV3	-
								

Воротник 2.8	VUV	UF(II)IW 452805UV3	UF(II)IW 452807UV3	UF(II)IW 452808UV3	UF(II)IW 452810UV3	UF(II)IW 452811UV3	UF(II)IW 452813UV3	-
-----------------	-----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

P Ø6.0
D Ø5.0

		Ед.изм.мм						
Длина		5.5	7	8.5	10	11.5	13	15
								
Воротник 1.8	VUV	UF(II)IW 501805UV3	UF(II)IW 501807UV3	UF(II)IW 501808UV3	UF(II)IW 501810UV3	UF(II)IW 501811UV3	UF(II)IW 501813UV3	-
								
Воротник 2.8	VUV	UF(II)IW 502805UV3	UF(II)IW 502807UV3	UF(II)IW 502808UV3	UF(II)IW 502810UV3	UF(II)IW 502811UV3	UF(II)IW 502813UV3	-
								

P Ø6.0
D Ø5.5

		5.5	7	8.5	10	11.5	13	15
Длина								
								
Воротник 1.8	VUV	UF(II)IW 551805UV3	UF(II)IW 551807UV3	UF(II)IW 551808UV3	UF(II)IW 551810UV3	UF(II)IW 551811UV3	UF(II)IW 551813UV3	-
								
Воротник 2.8	VUV	UF(II)IW 552805UV3	UF(II)IW 552807UV3	UF(II)IW 552808UV3	UF(II)IW 552810UV3	UF(II)IW 552811UV3	UF(II)IW 552813UV3	-
								

Имплантовод Компоненты

- Комплектация : Имплантовод + Винт фиксации абатмента (STN 2008H)
- Используется Драйвер для имплантовода (MHDC 2520, MHDR 2513A)




Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8	Ø6.0
	ITI 48014Y[H]	ITI 60014Y[H]

Винт-заглушка Компоненты

- Используется отвертка Hex 1.2
- Момент затяжки : 5~8Ncm

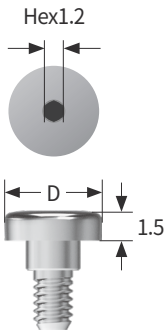


Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8	Ø6.0
Диаметр	Ø5.0	Ø6.5
	ANI 48601H	ANI 60651H

Винт закрывающий Компоненты

Используется в случаях ограниченного межзубного пространства или недостаточной толщины десны в зоне шва.


- Используется отвертка Hex 1.2

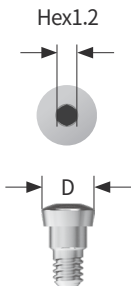

Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8	Ø6.0
Диаметр	Ø3.5	
	CHI 4800NH	


- Используется отвертка Hex 1.2
- Момент затяжки : 5~8Ncm

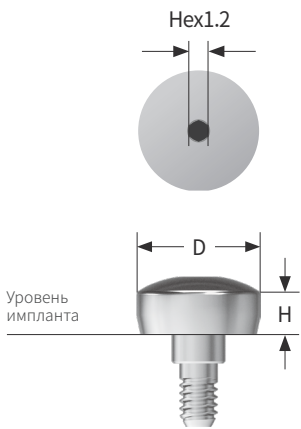

		Ед.изм.мм	
Платформа	Ø4.8	Ø6.0	
Диаметр	Ø5.5	Ø6.5	
Высота 2	АНИ 48602Н	АНИ 60652Н	
3	АНИ 48603Н	АНИ 60653Н	
4	АНИ 48604Н	АНИ 60654Н	

Цементируемый | Удлиненный Цементируемый | Угловой | UCLA | Временный



Схема протезирования

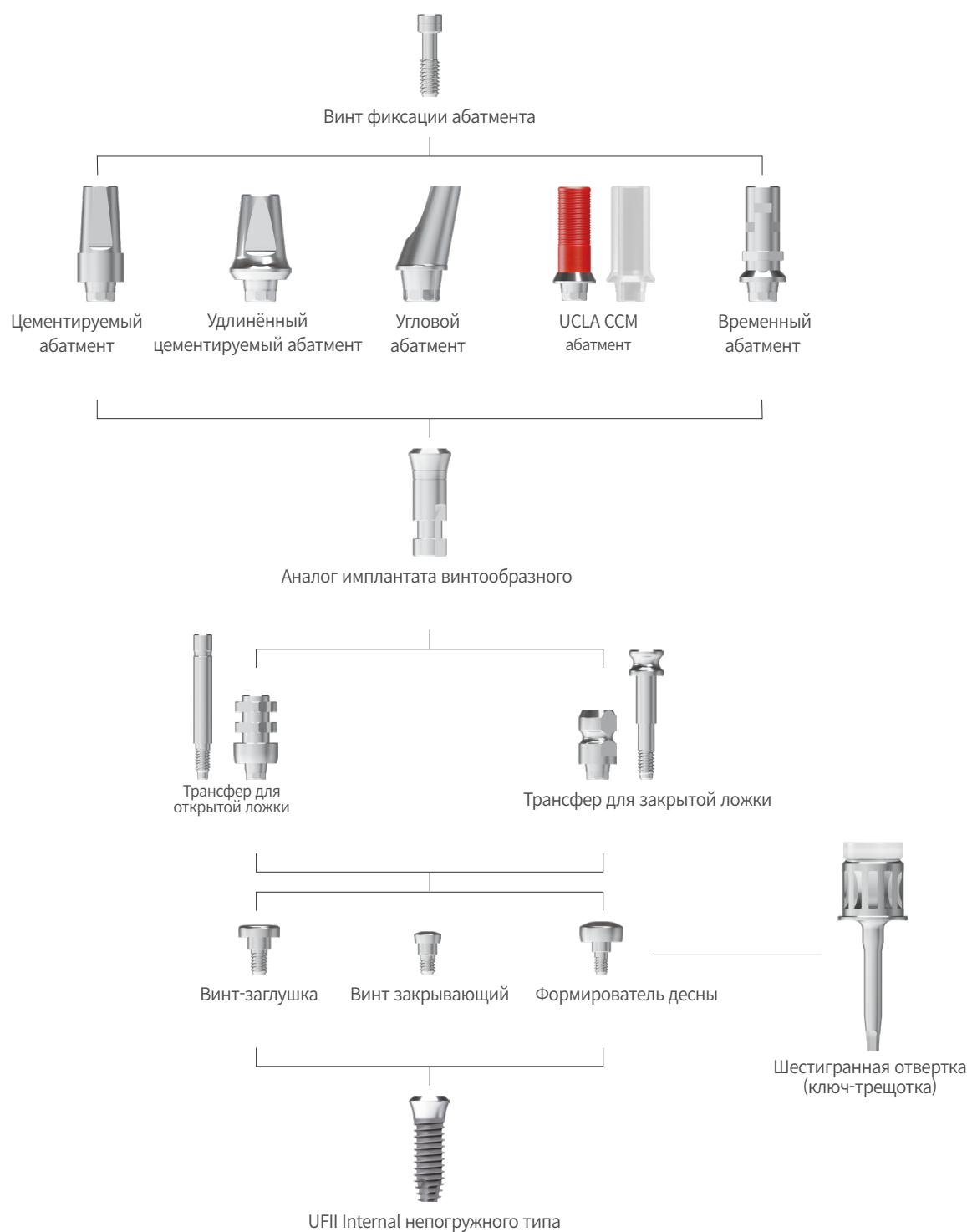

Цементируемый абатмент

Для настройки параметра протезов с цементной и винтовой фиксацией

- В зависимости от типа соединения с имплантатом абатменты разделяются на Octa и Non-Octa
- Антиротационная форма обеспечивает точное позиционирование и предотвращает вращение протеза.
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (STN 2008H)
- Момент затяжки : 30~35Ncm
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (STN 2008H)
- Момент затяжки : 30~35Ncm

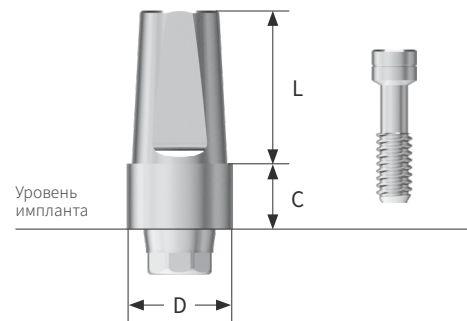
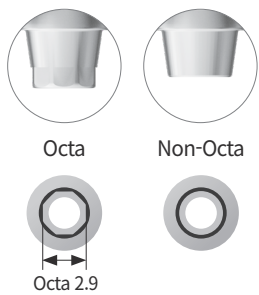


Ед.изм.мм					
Платформа		Ø4.8		Ø6.0	
Диаметр		Ø4.8		Ø5.3	
Тип		Octa	Non-Octa	Octa	Non-Octa
					
Десневая часть 0	Длина 4	-	-	AMI 60004Y[H]	AMI 60004N[H]
	5.5	AMI 48005Y[H]	AMI 48005N[H]	AMI 60005Y[H]	AMI 60005N[H]
	7	AMI 48007Y[H]	AMI 48007N[H]	-	-
Десневая часть 0	Длина 7	AMI 48017Y[H]	AMI 48017N[H]	-	-
	2	AMI 48027Y[H]	AMI 48027N[H]	-	-
	3	AMI 48037Y[H]	AMI 48037N[H]	-	-

Удлиненный цементируемый абатмент

Предназначен для припасовки пути введения и коррекции контуров абатмента

- В зависимости от типа соединения с имплантатом абатменты делятся на Octa и Non-Octa
- Антиротационная конструкция предотвращает вращение и обеспечивает точное позиционирование протеза.
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (STN 2008H)
- Момент затяжки : 30~35Ncm

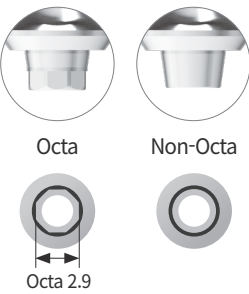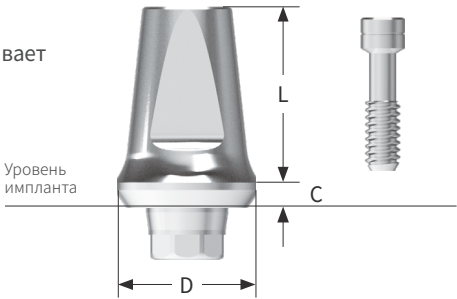



Ед.изм.мм

Платформа		Ø4.8		Ø6.0	
Диаметр		Ø5.0		Ø5.8	
Тип		Octa	Non-Octa	Octa	Non-Octa
Десневая часть 0	AEI 48007Y[H]	AEI 48007N[H]	-	-	-
1	-	-	AEI 48017Y[H]	AEI 48017N[H]	AEI 60017Y[H]
2	-	-	AEI 48027Y[H]	AEI 48027N[H]	-
3	-	-	AEI 48037Y[H]	AEI 48037N[H]	AEI 60037Y[H]

Угловой абатмент

Используется для коррекции угла установки имплантата, преимущественно в переднем отделе.

- Относится к стандартному абатменту цементного типа.
- В зависимости от угла наклона шейки абатменты делятся на 15°, 20° и 25°.
- Часть Octa имеет А-Тип и В-Тип, что позволяет устранить ограничение по направлению установки абатмента.
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (STN 2008H)
- Момент затяжки : 30~35Ncm

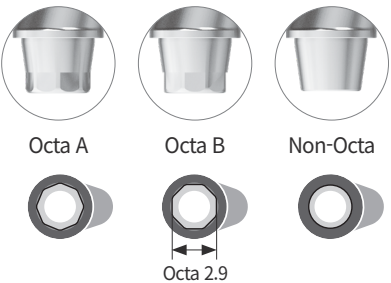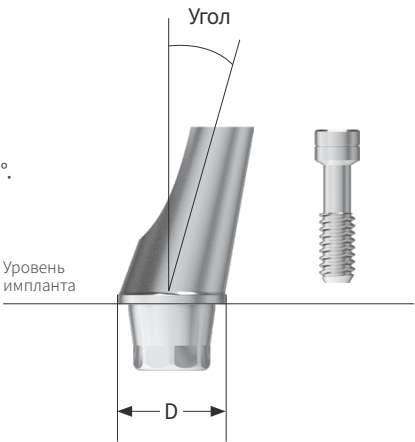



Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8			Ø6.0		
Диаметр	Ø3.6			Ø4.3		
Тип	Octa A	Octa B	Non-Octa	Octa A	Octa B	Non-Octa
Угол 15°	AAI 35015YA[H]	AAI 35015YB[H]	AAI 35015[H]	AAI 43015YA[H]	AAI 43015YB[H]	AAI 43015[H]
20°	-	-	-	AAI 43020YA[H]	AAI 43020YB[H]	AAI 43020[H]
25°	AAI 35025YA[H]	AAI 35025YB[H]	AAI 35025[H]	-	-	-

UCLA Абатмент

UCLA CCM абатмент

- Изготавливается методом литья из неблагородного стоматологического сплава по индивидуальным параметрам для протезов с винтовой фиксацией.
- Octa / Non-Octa Тип
- Используется отвертка Нех 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (STN 2008H)
- Момент затяжки : 30~35Ncm

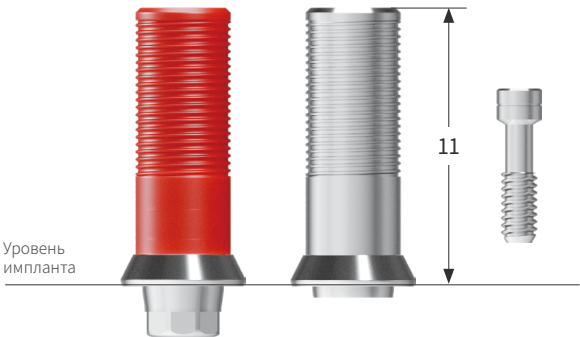
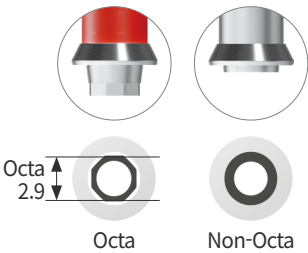


Ед.изм.мм

Платформа		Ø4.8		Ø6.0	
Тип		Octa	Non-Octa	Octa	Non-Octa
Длина 11		CCSI 4850Y	CCSI 4850N	CCSI 6061Y	CCSI 6061N
Цвет		●	○	●	○

UCLA пластиковый абатмент

- Изготавливается методом литья из неблагородного стоматологического сплава по индивидуальным параметрам для протезов с винтовой фиксацией.
 - Octa / Non-Octa Тип
 - Используется отвертка Hex 1.2
 - Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (STN 2008H)
 - Момент затяжки: перед литьём — слегка затянуть; после литья — затянуть с моментом 30–35 Н·см.
- ※ Не является медицинским изделием.

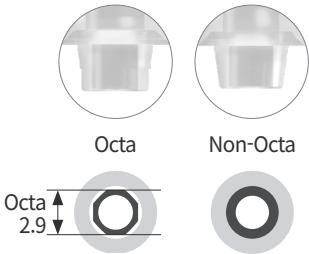
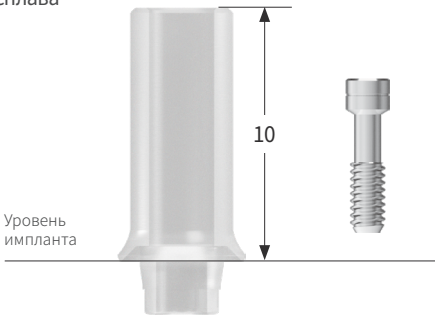


Ед.изм.мм

Платформа		Ø4.8	Ø6.0	
Тип	Octa	Non-Octa	Octa	Non-Octa
Длина 10	CAI 4812Y[H]	CAI 4812N[H]	CAI 6012Y[H]	CAI 6012N[H]

Используется для изготовления временного протеза.

- Выступающие участки и поднутрения абатмента обеспечивают улучшенную фиксацию с акриловым материалом.
- Временная реставрация может изготавливаться непосредственно во рту пациента (прямой метод) или на рабочей модели (непрямой метод).
- Octa / Non-Octa Тип
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Абатмент + Винт фиксации абатмента (STN 2008H)
- Момент затяжки : 30~35Ncm

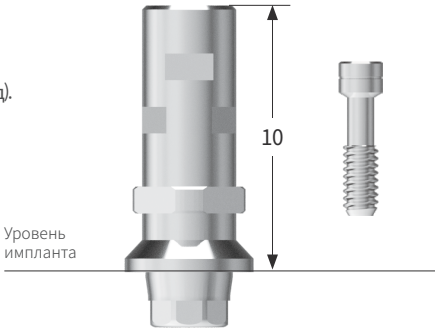
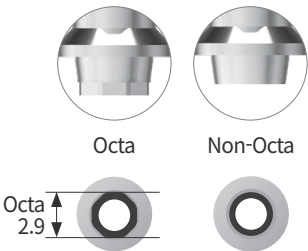


			Ед.изм.мм	
Платформа	Ø4.8		Ø6.0	
Тип	Octa	Non-Octa	Octa	Non-Octa
				
Длина 10	ITA 48010Y[H]	ITA 48010N[H]	ITA 60010Y[H]	ITA 60010N[H]

Трансфер для открытой ложки

Используется для снятия слепка с открытой ложкой.

- Одиночная реставрация для типа Octa / Мостовидный протез для типа Non-Octa
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация :Трансфер для открытой ложки + Направляющий пин

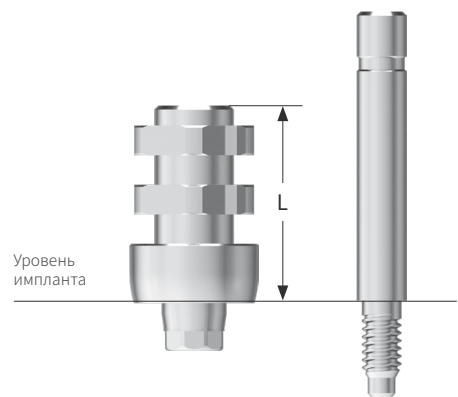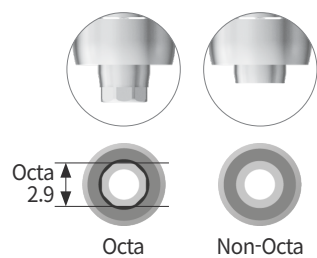



Ед.изм.мм					
Платформа		Ø4.8		Ø6.0	
Тип	Octa	Non-Octa	Octa	Non-Octa	Направляющий пин
Длина 6	IPI 48008Y	IPI 48008N	IPI 60008Y	IPI 60008N	PMN 40310
10	IPI 48012Y	IPI 48012N	IPI 60012Y	IPI 60012N	PMN 40315

Цементируемый | Удлиненный цементируемый | Упловый | UCLA | Временный Абатмент Система непогружного типа

Трансфер для закрытой ложки

Используется для снятия слепка с закрытой ложкой

- Треугольно-дуговая конструкция обеспечивает повышенную ретенцию после снятия оттиска.
 - Octa — двухкомпонентная, Non-Octa — однокомпонентная конструкция.
 - Используется отвертка Hex 1.2
 - Комплектация : Octa Тип - Трансфер для закрытой ложки + Винт для колпачка (ITI 48010S)
- Non-Octa Тип -Трансфер для закрытой ложки

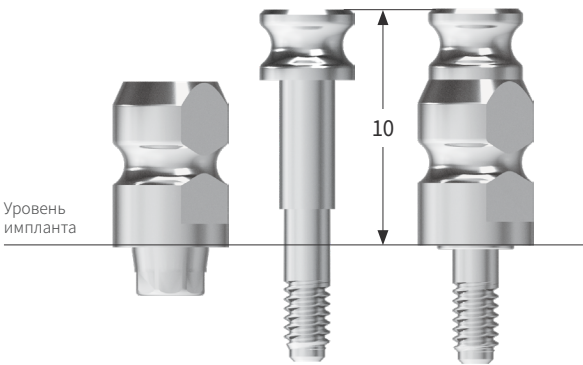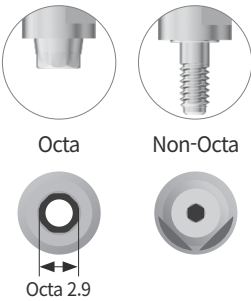


Ед.изм.мм

Платформа			Ø4.8		Ø6.0	
Тип			Octa	Non-Octa	Octa	Non-Octa
Длина 10			ITI 48010Y	ITI 48010N	ITI 60010Y	ITI 60010N

Аналог имплантата винтообразного

Создает положение имплантата в полости рта на рабочей модели.

※ Не является медицинским изделием.

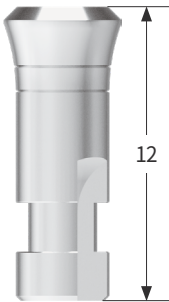


Ед.изм.мм

Платформа			Ø4.8	Ø6.0
Тип			Octa	
Длина 12			RMI 48012Y	RMI 60012Y

D:O IMPLANT


Абатмент монолитный Схема протезирования

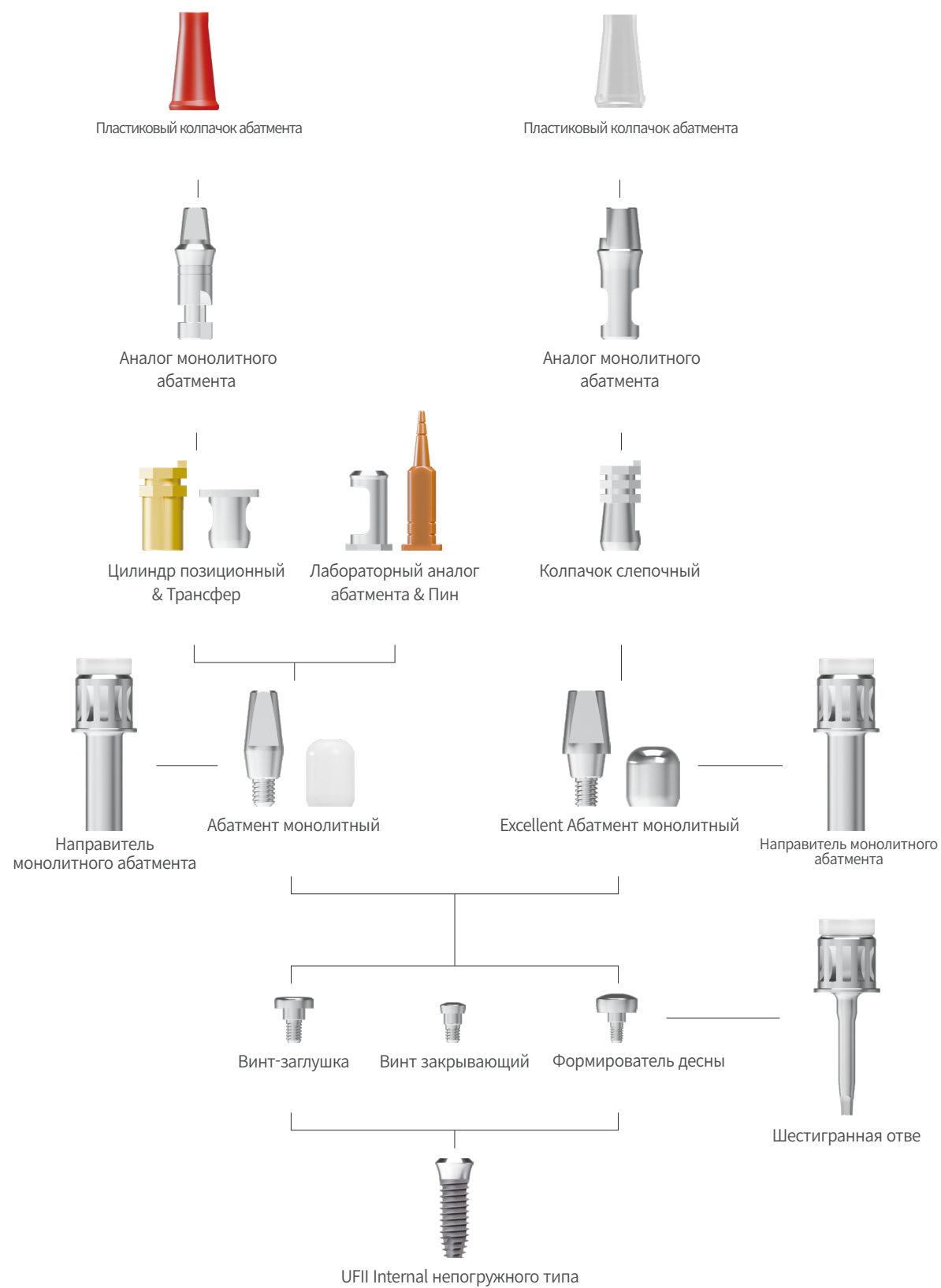

Абатмент монолитный

Абатмент для цементной фиксации ортопедических конструкций с использованием стоматологического цемента.

- Абатмент и винт представляют собой единую (монолитную) конструкцию.
- Используйте драйвер монолитного абатмента (HD 3512A)
- Комплектация : Абатмент + Колпачок защитный
- Момент затяжки : 30~35Ncm

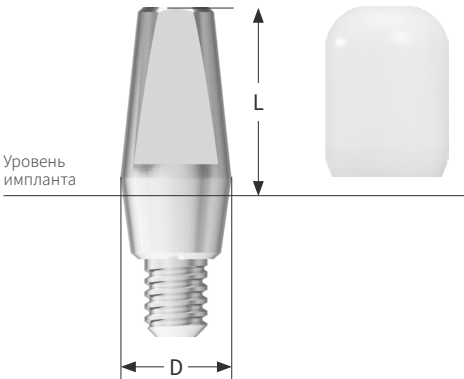

Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8	Ø6.0
Диаметр	Ø3.5	Ø4.3
Длина 4	AMI 48354	AMI 60434
5.5	AMI 48355	AMI 60435
7	AMI 48357	AMI 60437

Абатмент монолитный Компоненты

Колпачок защитный

Используется для защиты абатмента и обеспечения комфорта пациента, минимизируя ощущение инородного тела.

- Может применяться как основание для временного протеза.
- Обеспечивает удобную фиксацию (Locking).



Ед.изм.мм


Платформа	Ø4.8	Ø6.0
Диаметр	Ø3.5	Ø4.3
Длина 4	HMI 48554	HMI 60704
5.5	HMI 48555	HMI 60705
7	HMI 48557	HMI 60707

Абатмент монолитный Компоненты

Колпачок слепочный

Для снятия оттиска с монолитного абатмента

- Цветовая маркировка по диаметру для удобной идентификации.
- Используется с позиционным цилиндром, фиксируемым на абатменте для точного позиционирования.
- Обеспечивает удобную фиксацию (Locking).

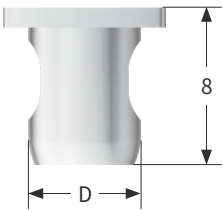


Ед.изм.мм		
Платформа	Ø4.8	Ø6.0
Диаметр	Ø5.7	Ø7.0
Длина 8	IPI 48001	IPI 60001

Цилиндр позиционный

Для снятия оттиска с монолитного абатмента

- Позиционный цилиндр фиксируется на монолитном абатменте
- Обеспечивает удобную фиксацию (Locking).

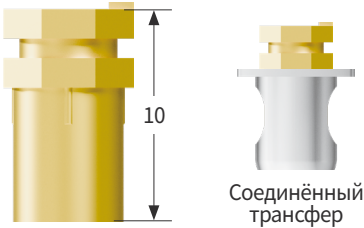

Ед.изм.мм		
Платформа	Ø4.8	Ø6.5
Длина абатм. 4 ●	IPI 48002Y	IPI 65002Y
5.5 ●	IPI 48002G	IPI 65002G
7 ●	IPI 48002B	IPI 65002B

Лабораторный аналог абатмента & Пин

Импрессионный комплект для модификации монолитного абатмента

- Позволяет воссоздать платформу имплантата на рабочей модели с высокой точностью.
 - Для предотвращения повреждения модели фиксируется штифт, соединённый с аналогом плеча (Shoulder Analog).
 - Комплектация : Shoulder Analog + Shoulder Analog Pin
- ※ Не является медицинским изделием.



Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8	Ø6.0
	RMI 48001	RMI 60001

Аналог монолитного абатмента

Планирование геометрии монолитного абатмента на этапе выбора составной модели

※ Не является медицинским изделием.




Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8	Ø6.0
Длина 4	RMI 48004N	RMI 60004N
5.5	RMI 48005N	RMI 60005N
7	RMI 48007N	RMI 60007N

Пластиковый колпачок абатмента

Фиксируется на аналоге монолитного имплантата и используется как каркас для изготовления протеза.

- Цветовая маркировка для лёгкой идентификации по клиническому случаю.
- ※ Не является медицинским изделием.

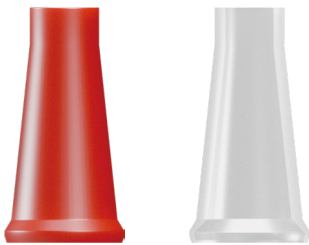

Одиночный Мостовидный


Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8		Ø6.0	
Тип	Octa	Non-Octa	Octa	Non-Octa
	IPI 48004	IPI 48004N	IPI 60004	IPI 60004N
Цвет	●	○	●	○

Excellent Абатмент монолитный

Абатмент для цементной фиксации ортопедических конструкций с использованием стоматологического цемента

- Абатмент и винт представляют собой единую (монолитную) конструкцию.
- Use Отвёртка монолитного абатмента (HD 4312A)
- Комплектация : Абатмент + Колпачок защитный
- Момент затяжки : 30~35Ncm

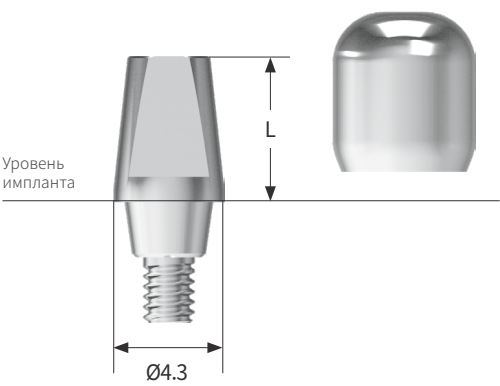

Ед.изм.мм

Платформа		Ø4.8		
Длина	4	5.5	7	
				
	AMI 48434EX	AMI 48435EX	AMI 48437EX	

Excellent Абатмент монолитный Компоненты

Excellent Колпачок защитный

Используется для защиты абатмента и обеспечения комфорта пациента, минимизируя ощущение инородного тела.

- Может применяться как основание для временного протеза.
- Обеспечивает удобную фиксацию (Locking).



Ед.изм.мм

Платформа		Ø4.8		
Длина	4	5.5	7	
	HMI 48554EX	HMI 48555EX	HMI 48557EX	

Excellent Колпачок слепочный

Предназначен для получения слепка с монолитного абатмента

- Обеспечивает удобную фиксацию (Locking).




Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8		
Длина	4 ●	5.5 ●	7 ●
	IPI 48002YEX	IPI 48002GEX	IPI 48002BEX

Аналог монолитного абатмента

Предназначен для воспроизведения формы Excellent монолитного абатмента на рабочей модели при изготовлении протеза.

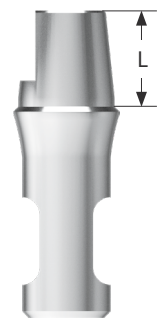

Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8		
Длина	4	5.5	7
	RMI 48004EX	RMI 48005EX	RMI 48007EX

Excellent Пластиковый колпачок абатмента

Фиксируется на Excellent аналоге монолитного имплантата и используется как каркас для изготовления протеза.

- Компоненты имеют цветовую маркировку для лёгкой идентификации (Одиночный – красный, Мостовидный – белый)


※ Не является медицинским изделием.



Ед.изм.мм

Платформа	Ø4.8	
Тип	Одиночный ●	Мостовидный ○
Длина 10	IPI 48004EX	IPI 48004NEX


Оcta абатмент Схема протезирования

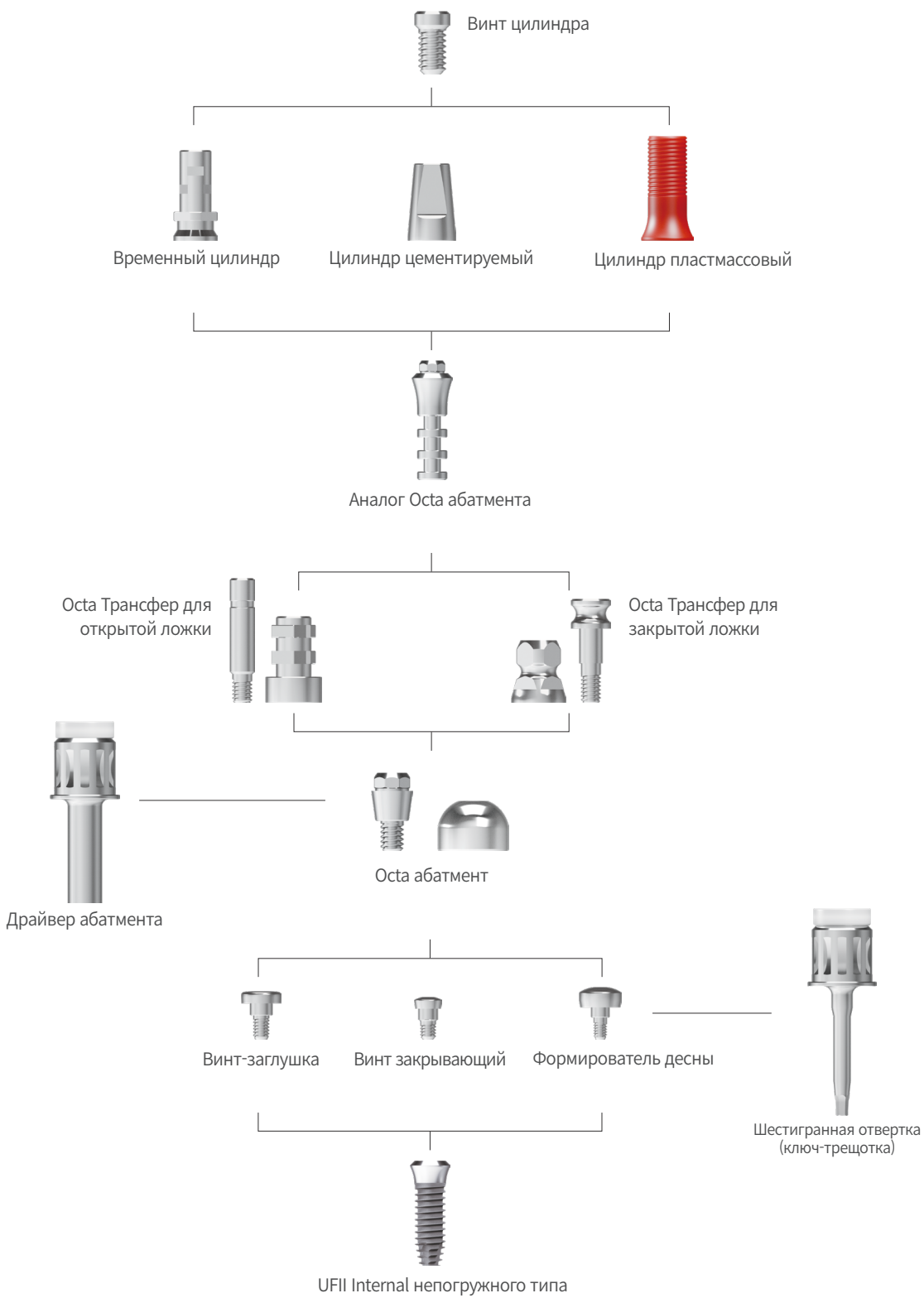

Оcta абатмент

Применение в случаях изготовления мостовидных протезов со сложным путем введения

- Конструкция позволяет выполнить переход на внешний тип соединения с установкой цилиндрического абатмента для последующего протезирования
- Используется Драйвер абатмента (HD 3012A)
- Комплектация : Абатмент + Держатель octa абатмента (удобно при интраоральной фиксации)
- Момент затяжки : 30~35Ncm

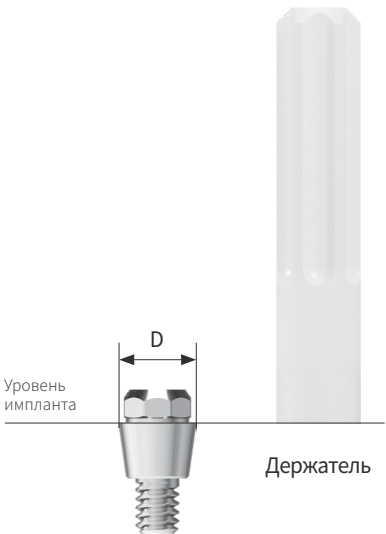


Ед.изм.мм		
Платформа	Ø4.8	Ø6.0
Диаметр	Ø3.5	Ø4.3
ACI 48302		
ACI 65302		

Оcta абатмент Компоненты

Оcta Колпачок заживляющий

Используется для защиты абатмента Оcta в полости рта и минимизации дискомфорта пациента.

- Используется отвертка Нех 1.2
- Комплектация : Колпачок заживляющий + Винт цилиндра (STI 2004H)
- Момент затяжки : 5~8Ncm

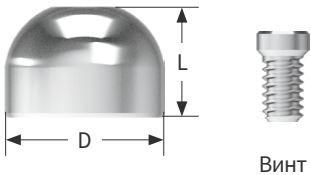


Ед.изм.мм		
Платформа	Ø4.8	Ø6.0
Длина	4	4.5
HCl 48504[H]		
HCl 60704[H]		

Оcta абатмент Компоненты

Оcta Трансфер для открытой ложки

Pick-up трансфер для получения слепка с помощью индивидуальной ложки.

- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Трансфер для открытой ложки
+ Направляющий пин (POI 2610)

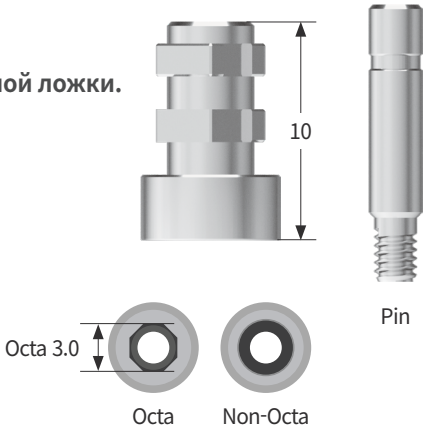


		Ед.изм.мм		
Платформа	Ø4.8	Ø6.0		
Тип	Octa	Non-Octa	Octa	Non-Octa
Длина 10	IPI 48610	IPI 48610N	IPI 60710	IPI 60710N

Оcta Трансфер для закрытой ложки

Используется для получения слепка с помощью стандартной ложки.

- Двойная фасонная конструкция обеспечивает лучшую ретенцию и точность позиционирования после снятия слепка.
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Трансфер для закрытой ложки + Винт для колпачка (IOTI 48010S)

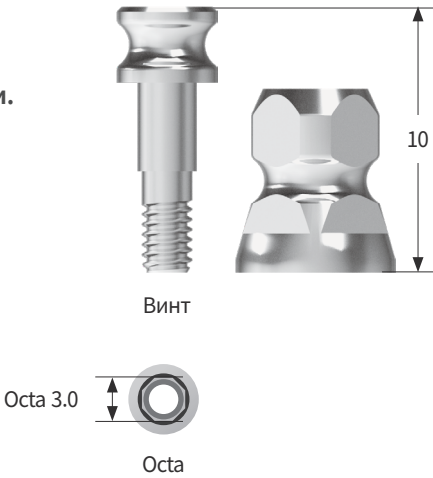

		Ед.изм.мм	
Платформа	Ø4.8	Ø6.0	
Длина 10	IOTI 48010	IOTI 60010	

Аналог Octa абатмента

Используется для моделирования абатмента Octa на рабочей модели.

※ Не является медицинским изделием.

		Ед.изм.мм	
Платформа	Ø4.8	Ø6.0	
Длина	14	12	
			
RCI 48014		RCI 60014	




Окта Временный цилиндр

Цилиндр для изготовления временной реставрации.


- В зависимости от типа соединения с Окта абатментом различают два варианта: Окта и Non-Octa типы.
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Временный цилиндр + Винт цилиндра (STI 2004H)
- Момент затяжки : 20Ncm

		Ед.изм.мм	
Диаметр		Ø4.8	Ø6.0
Длина 10	Окта	ИТС 48010[H]	ИТС 60010[H]
	Non-Octa	ИТС 48010N[H]	ИТС 60010N[H]

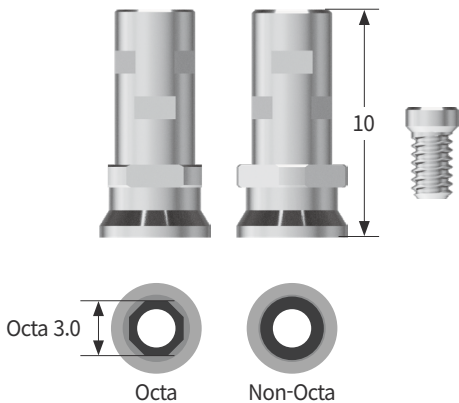

Окта Цилиндр с цементной фиксацией

- Для одиночных реставраций — тип Окта
/ Для мостовидных конструкций — тип Non-Octa
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Цилиндр цементируемый + Винт цилиндра (STI 2004H)
- Момент затяжки : 20Ncm

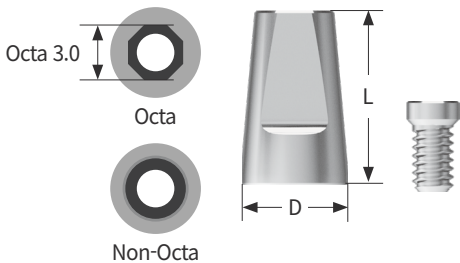


		Ед.изм.мм			
Платформа		Ø4.8		Ø6.0	
Диаметр		Ø5.0	Ø5.8	Ø6.4	
Тип	Окта	Non-Octa	Окта	Non-Octa	Окта Non-Octa
Длина 8	ICC 48508[H]	ICC 48508N[H]	ICC 48588[H]	ICC 48588N[H]	-
	9	-	-	-	ICC 60649[H] ICC 60649N[H]

Окта Цилиндр пластмассовый

Изготовление одиночной коронки с винтовой фиксацией методом литья из неблагородного стоматологического сплава по индивидуальным параметрам

- В зависимости от типа соединения с Окта абатментом различают два варианта: Окта и Non-Octa типы.
- Одиночный Case for Окта Тип / Мостовидный Case for Non-Octa Тип
- Используется отвертка Hex 1.2
- Комплектация : Цилиндр цементируемый + Винт цилиндра (STI 2004H)
- Момент затяжки : 20Ncm


※ Не является медицинским изделием.

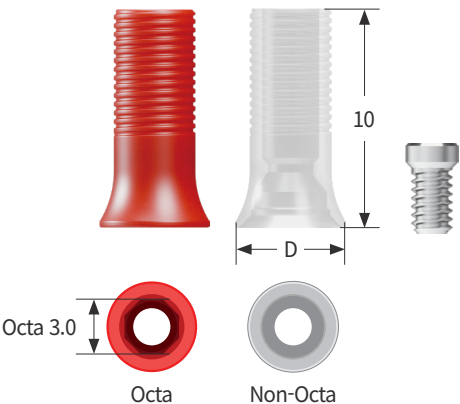

		Ед.изм.мм	
Платформа		Ø4.8	Ø6.0
Диаметр		Ø5.0	Ø6.3
Тип	Окта ●	Non-Octa ○	Окта ● Non-Octa ○
Длина 10	API 48514[H]	API 48514N[H]	API 60714[H] API 60714N[H]

Шаровидный абатмент для условно-съемного протеза

Схема протезирования

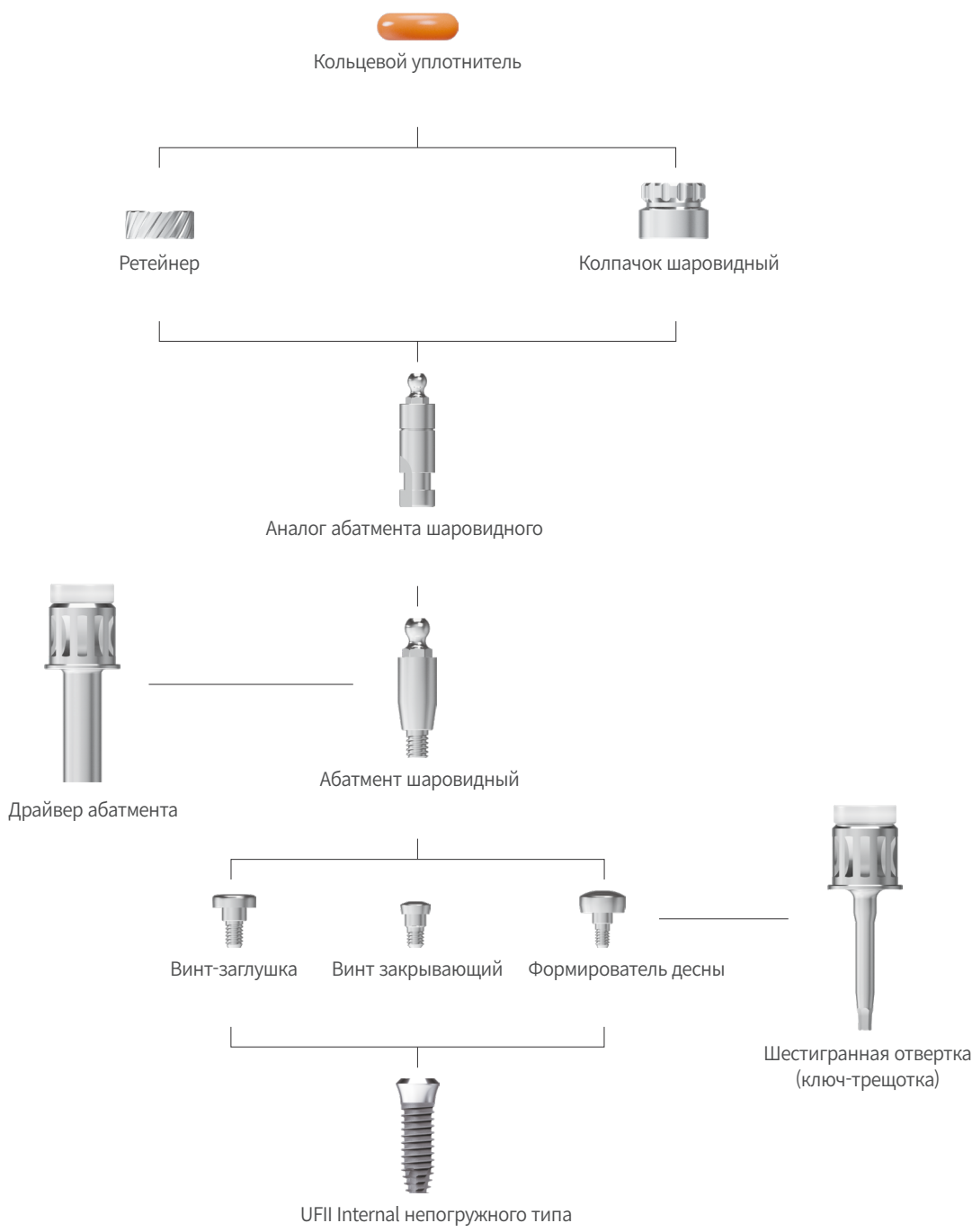

Абатмент шаровидный

Используется для изготовления условно-съёмного протеза с шаровидными аттачментами.

- Сила удержания регулируется заменой кольцевого уплотнителя (O-ring)
- Компенсация угла — до 20°
- Используется Драйвер абатмента(HD 2406A, HD 2412A)
- Комплектация : Абатмент + Фиксатор шаровидного абатмента
(При установке в полости рта: удобно использовать держатель)
+ Кольцевой уплотнитель (OR 04500)
- Момент затяжки : 30~35Ncm



Ед.изм.мм

Платформа		Ø4.8		
Диаметр		Ø3.5		
Десневая часть	0	2	4	
	ABI 48350	ABI 48352	ABI 48354	

Абатмент шаровидный Компоненты

Аналог абатмента шаровидного

Служит для создания формы шаровидного абатмента на рабочей модели.

※ Не является медицинским изделием.

Ед.изм.мм	
Платформа	Ø4.8
Диаметр	Ø4.1
RBN 40412	





Кольцевой уплотнитель

Черный : используется в лаборатории при изготовлении условно-съемный протезов.

Оранжевый : предназначен для интраорального применения и обладает повышенной силой удержания (≈6 N).

- Комплектация : Кольцевой уплотнитель (OR 0450B : 1ea + OR 0450O : 1ea)

Ед.изм.мм		
Диаметр	Ø4.5	
Цвет	Черный ●	Оранжевый ●
	OR 0450B	OR 0450O

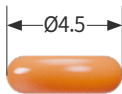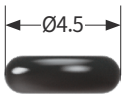


Набор кольцевого уплотнителя с ретейнером

Предпочтителен при ограниченном межокклюзионном пространстве по сравнению с шаровидным колпачком.

- Комплектация : Ретейнер + Кольцевой уплотнитель (OR 0450B + OR 0450O)

Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø5.0
Длина 2	RT 0502

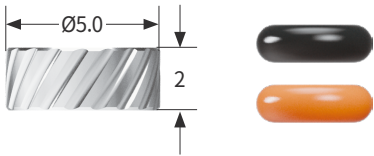


Набор кольцевого уплотнителя с колпачком шаровидным (O-ring Set)

Обеспечивает отличную ретенцию и комфорт при снятии и установке протеза.


- Комплектация : Колпачок шаровидный + Кольцевой уплотнитель (OR 0450B + OR 0450O)

Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø5.0
Длина 4	BC 5004

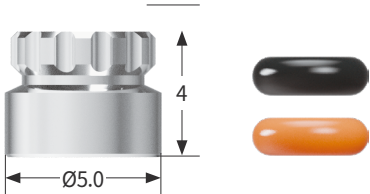

H-Scanbody / Jig


- Фиксируется в соответствии с ориентацией Osta-соединения.

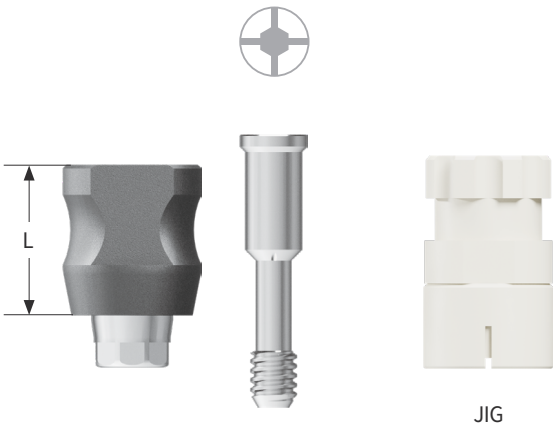

*Приобретается отдельно				Ед.изм.мм
Диаметр	Ø5.0			
Длина	4	6	8	Jig
				-
Вид сверху				
	IHSB 541P	IHSB 561P	IHSB 581P	JIG 1551
Винт	SSCAN 2009H	SSCAN 2011H	SSCAN 2013H	

Адаптер для сканера

- Комплектация : Адаптер для сканера + Адаптер для сканера Винт
- Момент затяжки : 5~8Ncm

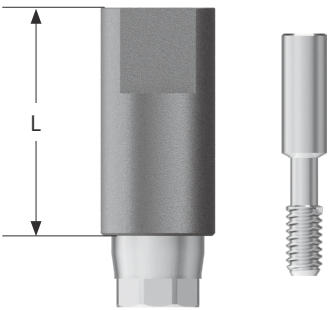

		Ед.изм.мм	
Длина	9	15	
			
	SCAN 12A	SCAN 12-15A	
Винт	SSC 2013H	SSC 2020H	

Балка предварительно отшлифованная



- Комплектация : Балка предварительно отшлифованная
+ Винт фиксации абатмента (STN 2008H) 2ea
- Момент затяжки : 30~35Ncm



			Ед.изм.мм
Тип	Octa		
Диаметр	Ø10		Ø12
CBUN 01[H]		CBUN 02[H]	

Гибридный абатмент

- Комплектация : Адаптер для сканера + Адаптер для сканера Винт
- Момент затяжки : 5~8Ncm

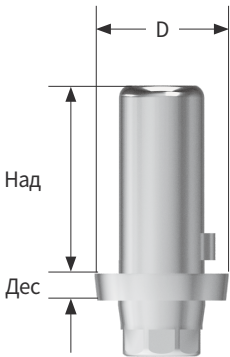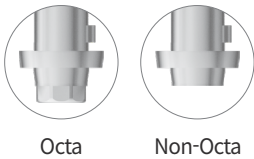


Ед.изм.мм

Диаметр		Ø5.0	
Платформа		Ø4.8	
Тип		Octa	Non-Octa
Десневая часть 1	Наддесневая часть 4	SIHL 50401 O[H]	SIHL 50401 N[H]
	5.5	SIHL 50501 O[H]	SIHL 50501 N[H]
	7	SIHL 50701 O[H]	SIHL 50701 N[H]

Цифровой аналог

Используется для воспроизведения геометрии абатмента на 3D-печатной модели.

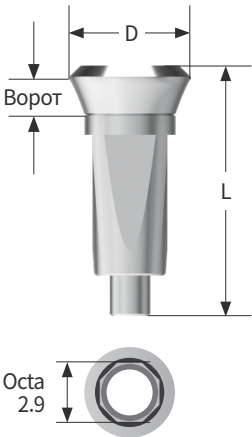

Ед.изм.мм

Платформа		Ø4.8	Ø6.0
Воротник	Длина 12.45	DAUIR 4818	DAUIR 6018
	2.0 12.65	DAUIR 4820	-


03

Односоставная Система Protem

142	Post Type имплантат
144	Ball Type имплантат
147	Компоненты Post Type
149	Компоненты Ball Type

Односоставная система Protem

Имплантат Односоставная система Protem

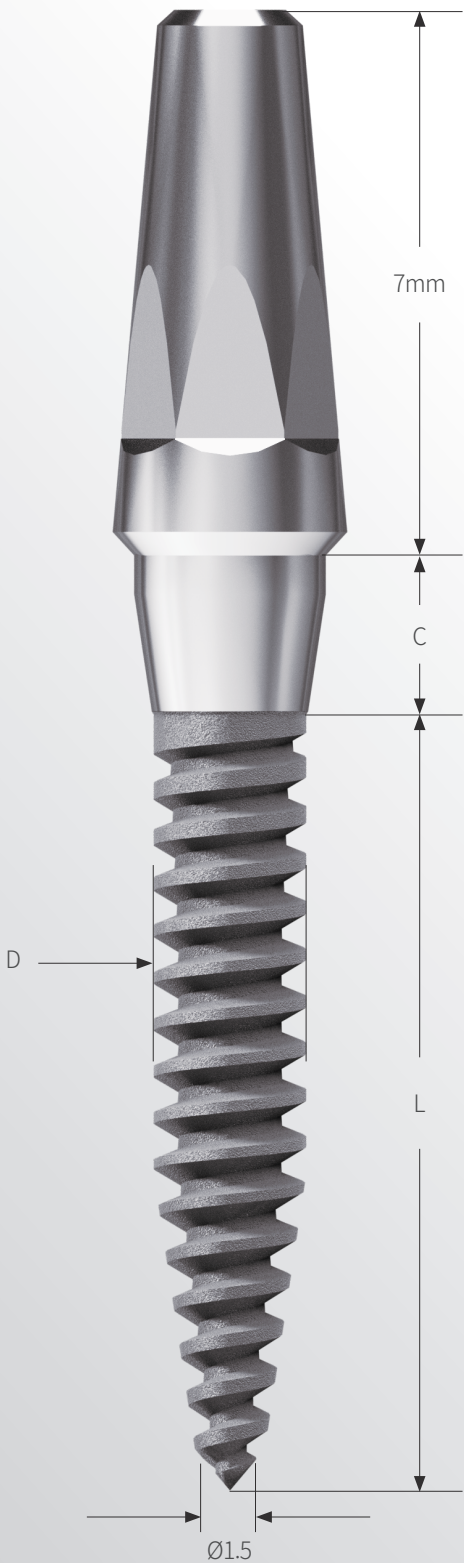

Post Type

Предназначен для использования в условиях ограниченного пространства фронтальных отделов верхней и нижней челюстей

Односоставной Имплантат

Имплантат и абатмент выполнены как единая конструкция односоставного имплантата, обеспечивая устойчивость к жевательным нагрузкам и возможность одноэтапной имплантации.

Временный Имплантат


Используется в качестве временного имплантата для немедленного восстановления эстетики и функции после установки с повышением ретенционных свойств временного протеза.

Самонарезающаяся форма

Профиль резьбы и её шаг разработаны для обеспечения максимальной прочности. Конусное тело и острая резьба создают выраженный эффект самонарезания, а режущий край в имплантатах Ø3.0 усиливает данную функцию.

Поверхность имплантата 'RBM'


Разработана для ускоренной остеоинтеграции и прочного соединения с костью.

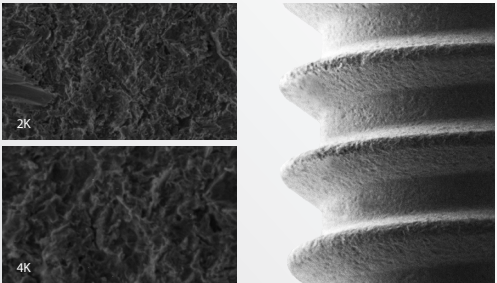

*RBM : Поверхность формируется методом бластинга резорбируемыми частицами, состоящими из гидроксиапатита, β -трикальцийфосфата (β -TCP), α -трикальцийфосфата (α -TCP), ТТСП и кальцийпирофосфата (СРР). Средняя шероховатость поверхности составляет Ra 1.2-1.5 μ m.

Односоставная система Protem

Имплантат Односоставная система Protem

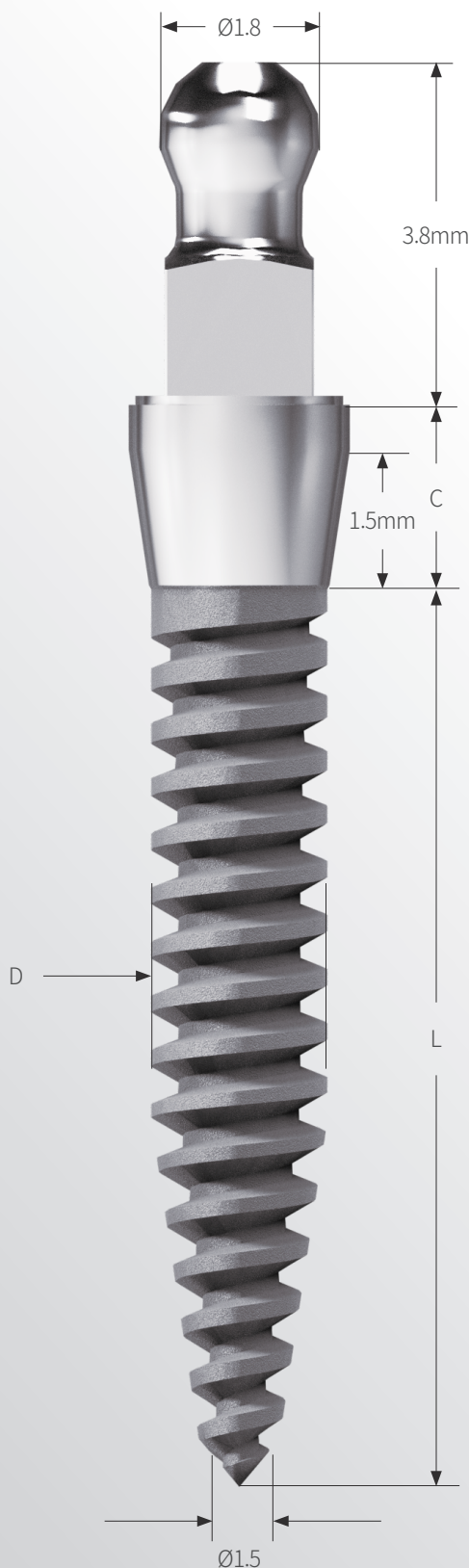

Ball Type

Применяется у пациентов с полной или частичной адентией для фиксации временных протезов сразу после установки имплантата.

Аттачмент кольцевого типа

Применяется при необходимости повышения ретенции съемного протеза. Для усиления фиксации установлен кольцевой аттачмент

Цементируемый абатмент


Возможно использовать цементируемый и UCLA абатмент для различных типов ортопедических конструкций

Самонарезающаяся форма

Профиль и шаг резьбы разработаны для обеспечения максимальной прочности в односоставной системе. На прямой конус конструкции корпуса нанесена режущая кромка, а глубина и шаг резьбы обеспечивают надёжную первоначальную стабильность.

RBM поверхность имплантата

Разработана для ускоренной остеоинтеграции и прочного соединения с костью.

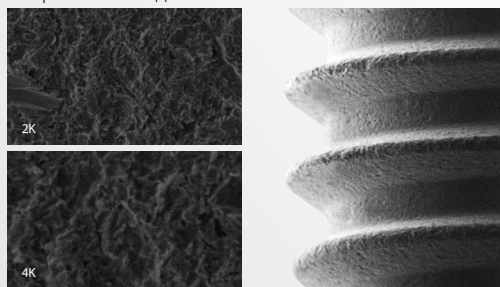

*RBM : Поверхность формируется методом бластинга резорбируемыми частицами, состоящими из гидроксиапатита, β -трикальцийфосфата (β -TCP), α -трикальцийфосфата (α -TCP), TTCP и кальцийпирофосфата (CPP). Средняя шероховатость поверхности составляет Ra 1.2–1.5 μ m.

Protem Post Type Схема протезирования



Аналог Post абатмента



Трансфер для открытой ложки



Post Type

Трансфер для открытой ложки

Используется для снятия слепка с открытой ложкой.




Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø3.5
Размер	Ø2.0 / Ø2.5 / Ø3.0
Длина 11	MICP 3511

Аналог Post абатмента


Используется для позиционирования и фиксации трансфера наддесневой части имплантата Protém на рабочей модели.

※ Не является медицинским изделием.

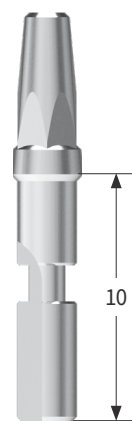

Ед.изм.мм		
Размер	Ø2.0 / Ø2.5	Ø3.0
		
Длина 10	MAP 3010	MAP 3017


Protem Ball Type Схема протезирования

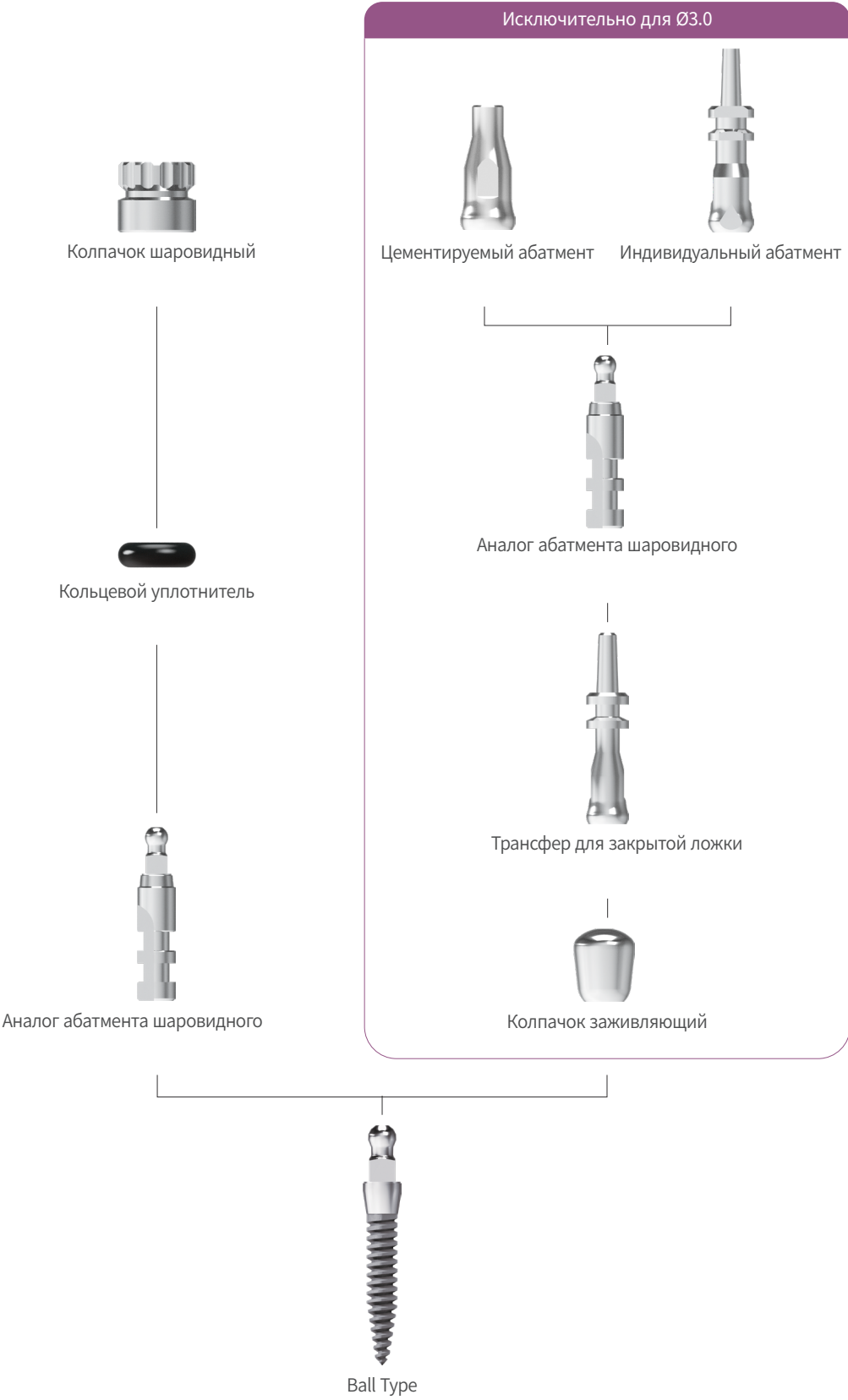

Кольцевой уплотнитель

- Комплектация : Кольцевой уплотнитель 1 шт.

Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø3.2
Цвет	Черный ●
OR 3401	

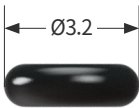


Набор кольцевого уплотнителя с колпачком шаровидным (O-ring Set)

Обеспечивает отличную ретенцию и комфорт при снятии и установке протеза.

- Комплектация : Колпачок шаровидный + Кольцевой уплотнитель (OR 3401 - 2EA)

Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø3.8
Длина 3.4	MBC 3803

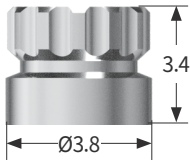


Аналог абатмента шаровидного

Используется для изготовления рабочей модели на имплантатах Protém Implant Ball

※ Не является медицинским изделием.

Ед.изм.мм		
Диаметр	Ø2.0 / Ø2.5	Ø3.0
Длина 10	MAV 2510	MAV 3014

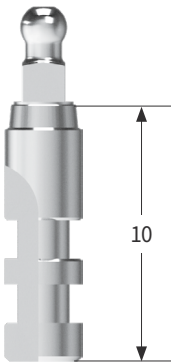

Компоненты Ball Type


Цементируемый абатмент

Применяется для изготовления стандартных конструкций с цементной фиксацией.

- Эксклюзивно для размера Ø3.0

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø3.5	
Длина	8	12
	МСВ 3508	МСВ 3512

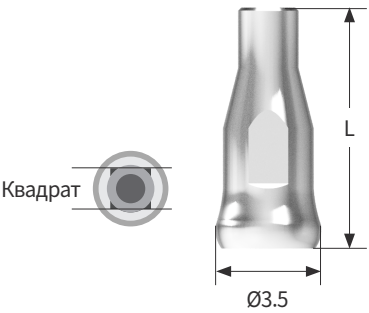


Индивидуальный абатмент

Используется в случаях ограничений по направлению установки, эстетике или пространству.

- Эксклюзивно для размера Ø3.0.
- После индивидуальной адаптации конструкция должна быть отлита из стоматологического сплава (золото или неблагородные сплавы)

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø4.0	
Длина 11	МСА 4011	

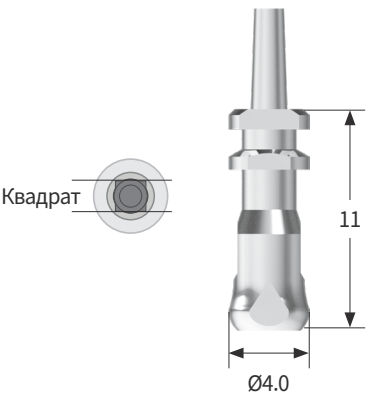


Колпачок заживляющий

- Эксклюзивно для размера Ø3.0

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø5.0	
Длина	6	8
	МНС 5006	МНС 5008

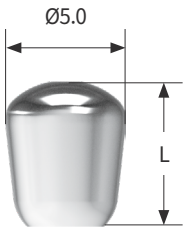


Трансфер для закрытой ложки

- Эксклюзивно для размера Ø3.0

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø3.5	
Длина 16	МІС 3511	

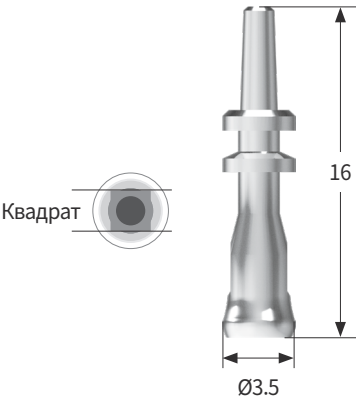

D:O IMPLANT

04

Хирургические наборы

- 148 Хирургический набор (UF 07)
- 149 Хирургический набор (UF 15)
- 150 Набор UFll Narrow (UF 08)
- 151 Набор UFll Wide (UF 09)
- 152 Набор UFll Starter (UFST 00)
- 162 Мастер-набор UFll Internal (UF 12)

Хирургический набор (UF 07) Набор

Хирургический набор в плоском кейсе

- UFII / UFIII Narrow Ø3.0 Ø3.3 | Regular Ø3.8 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Имплантат

Динамометрический ключ
DTW 0060



Глубиномер
DPG 2050



*Bottom Panel Компоненты

Сверло Линдерманна
RMH 2014S



Стартовое сверло
SD 1530



Первоначальное сверло
DHF 2015SD



Штифт параллельный
PP 2022
PP 2023



Сверло

DSU 2707D	DSU 3007D	DSU 3207D	DSU 3807D	DSU 4307D
DSU 2708D	DSU 3008D	DSU 3208D	DSU 3808D	DSU 4308D
DSU 2710D	DSU 3010D	DSU 3210D	DSU 3810D	DSU 4310D
DSU 2711D	DSU 3011D	DSU 3211D	DSU 3811D	DSU 4311D
DSU 2713D	DSU 3013D	DSU 3213D	DSU 3813D	DSU 4313D

Набор удлинённых сверл
DECS 15



Ограничитель сверла
ST 2008F
ST 2010F
ST 2011F
ST 2013F



Драйвер имплантата
UNFDC 3012 UNFDW 3012
UNFDC 3018 UNFDW 3018



Шестигранная отвертка
MD 1230
HD 1155A




Драйвер имплантата
FDC 3506 FDW 3512A
FDC 3512 FDW 3518A



Профильное сверло
UPD 3005D
UPD 3305D
UPD 3805D
UPD 4005D
UPD 4505D
UPD 5005D



UF Surgical Kit

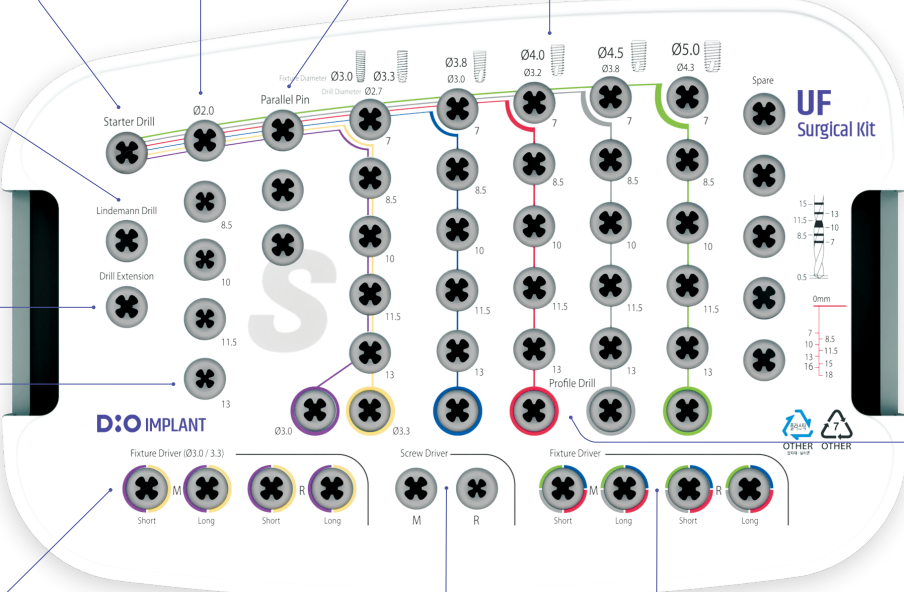

Хирургический набор (UF 15) Набор

Благодаря ограничителю сверла обеспечивается более короткий и безопасный процесс сверления.

- UFII / UFIII Narrow Ø3.0 Ø3.3 | Regular Ø3.8 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Имплантат

Динамометрический ключ

DTW 0060



Глубиномер

DPG 2050



*Bottom Panel Компоненты

Сверло Линдерманна

RMH 2014S



Стартовое сверло

SD 1530



DSU 2007S05
DSU 2010S08
DSU 2013S11



Штифт параллельный

PP 2022
PP 2023



Сверло

DSU 2707S05 DSU 3007S05 DSU 3207S05 DSU 3807S05 DSU 4307S05
DSU 2710S08 DSU 3010S08 DSU 3210S08 DSU 3810S08 DSU 4310S08
DSU 2713S11 DSU 3013S11 DSU 3213S11 DSU 3813S11 DSU 4313S11



Набор удлинённых сверл

DECS 15



Профильное сверло

UPD 3005D
UPD 3305D
UPD 3805D
UPD 4005D
UPD 4505D
UPD 5005D



Ограничитель сверла

USTN 15
USTR 15



Драйвер имплантата

UNFDC 3012 UNFDW 3012
UNFDC 3018 UNFDW 3018



Шестигранная отвертка

MD 1230
HD 1155A




Драйвер имплантата

FDC 3506 FDW 3512A
FDC 3512 FDW 3518A



UF Surgical Kit

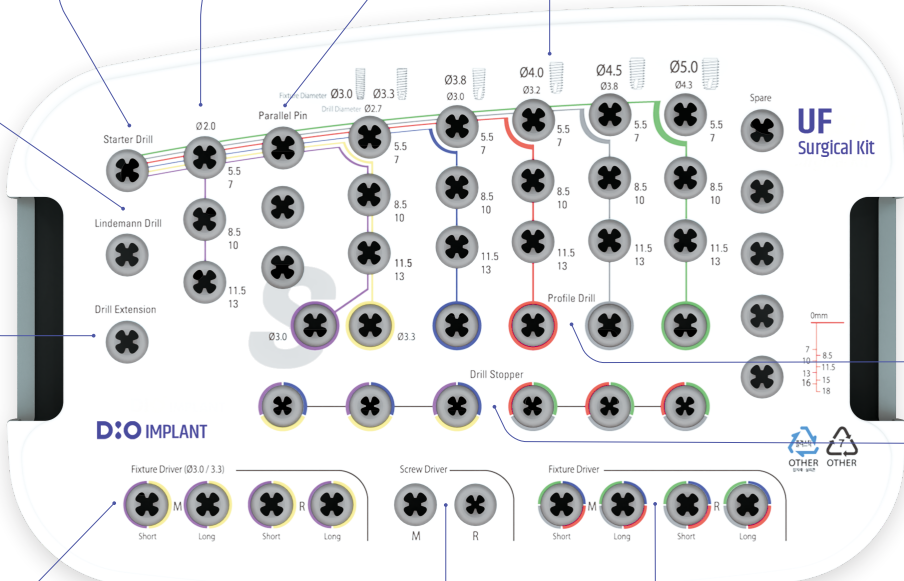

Набор UFII Narrow (UF 08) Набор


Сверла с высокой режущей способностью и прочностью.

- Подходит для установки имплантатов UFII / UFIII Narrow Ø3.0 Ø3.3.

Динамометрический ключ
DTW 0060

Глубиномер
DPG 2050


*Bottom Panel Компоненты

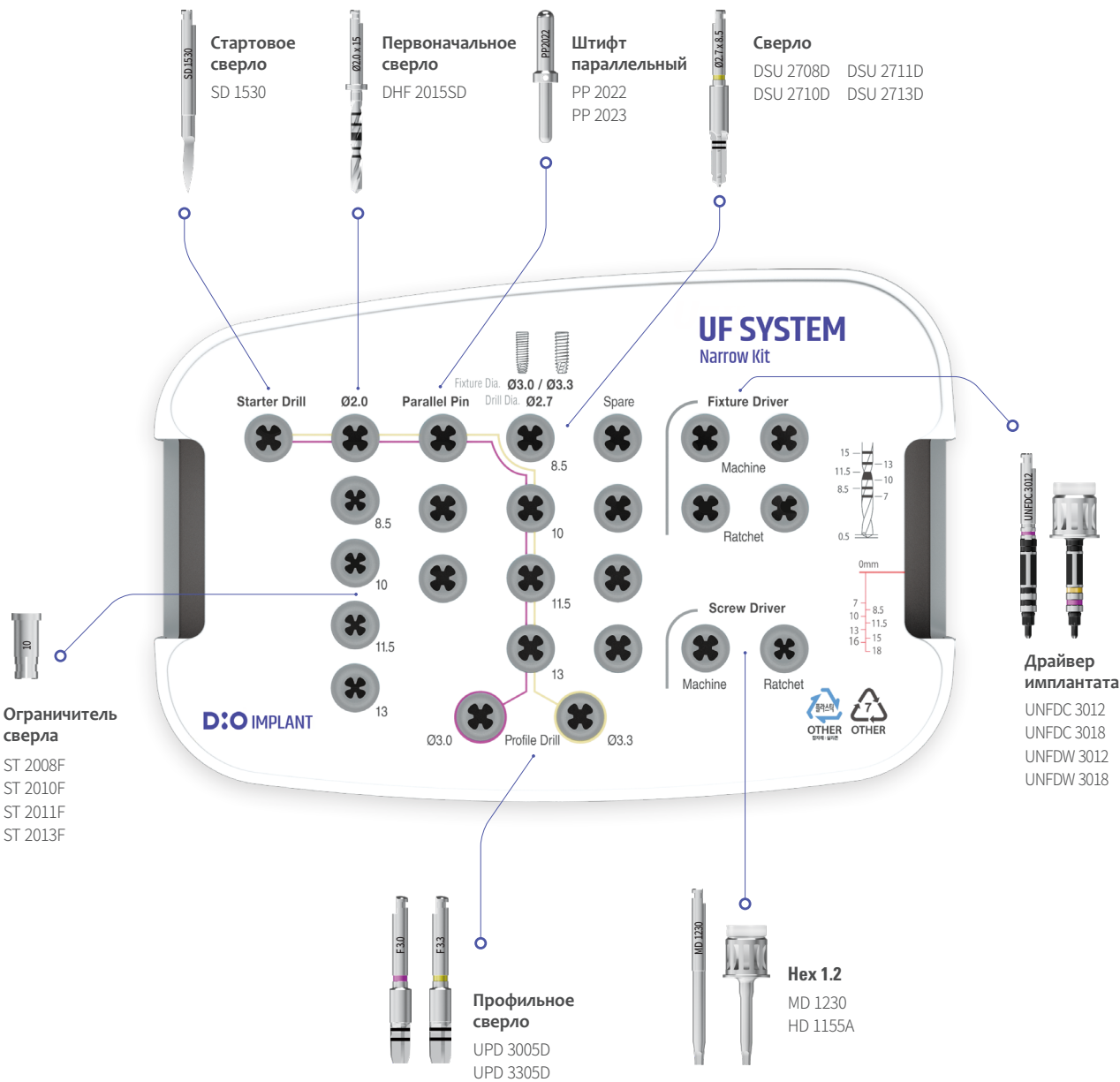

Набор UFII Wide (UF 09) Набор

Сверла с высокой режущей способностью и прочностью.


- Подходит для установки имплантатов UFII / UFIII Ø5.9 Ø6.4 Ø6.9.

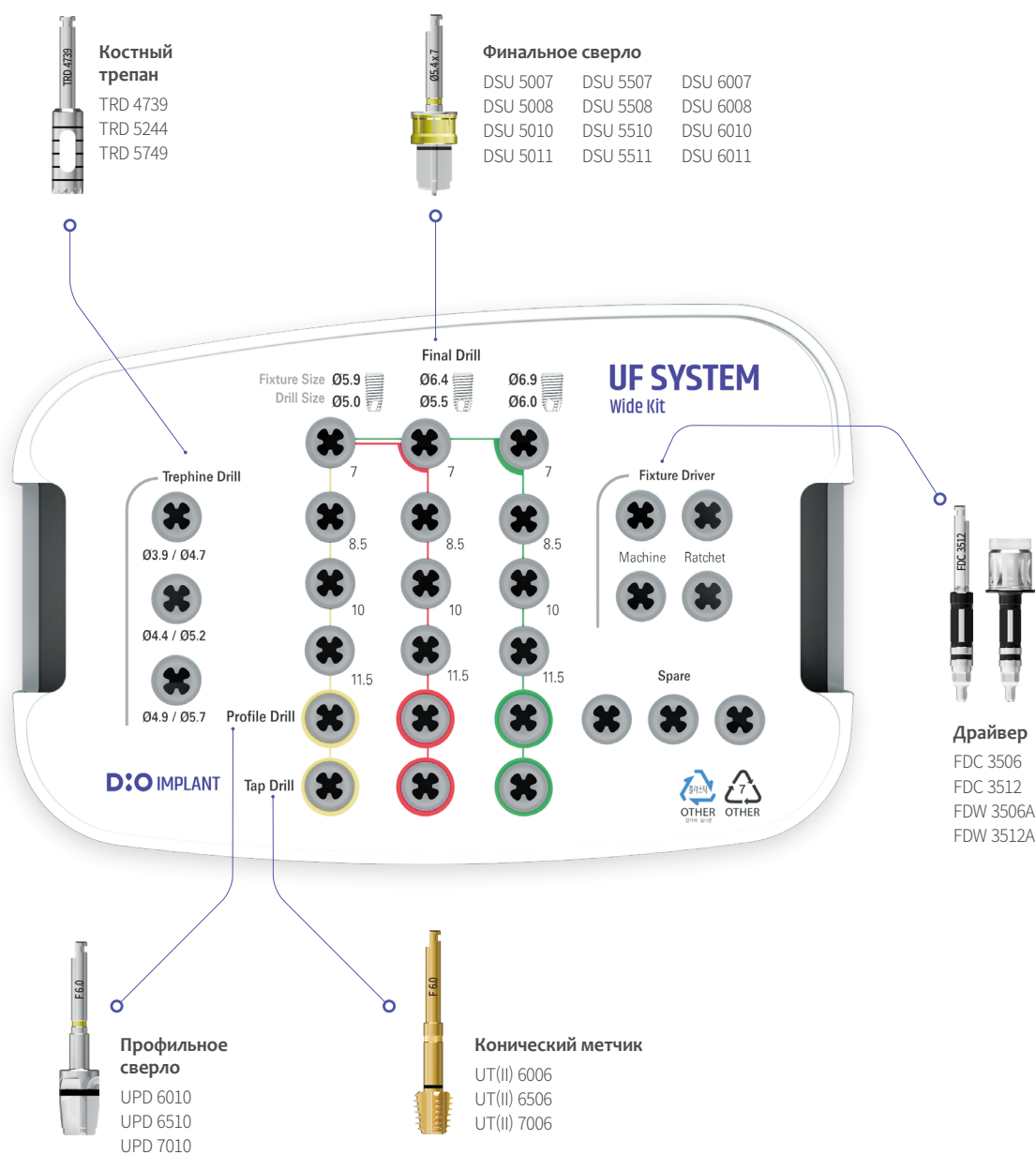

Набор UFII Starter (UFST 00) Набор

Сверла с высокой режущей способностью и прочностью.

- UFII / UFIII Regular Ø3.8 Ø4.0 Ø4.5 Имплантат (10, 11.5mm)

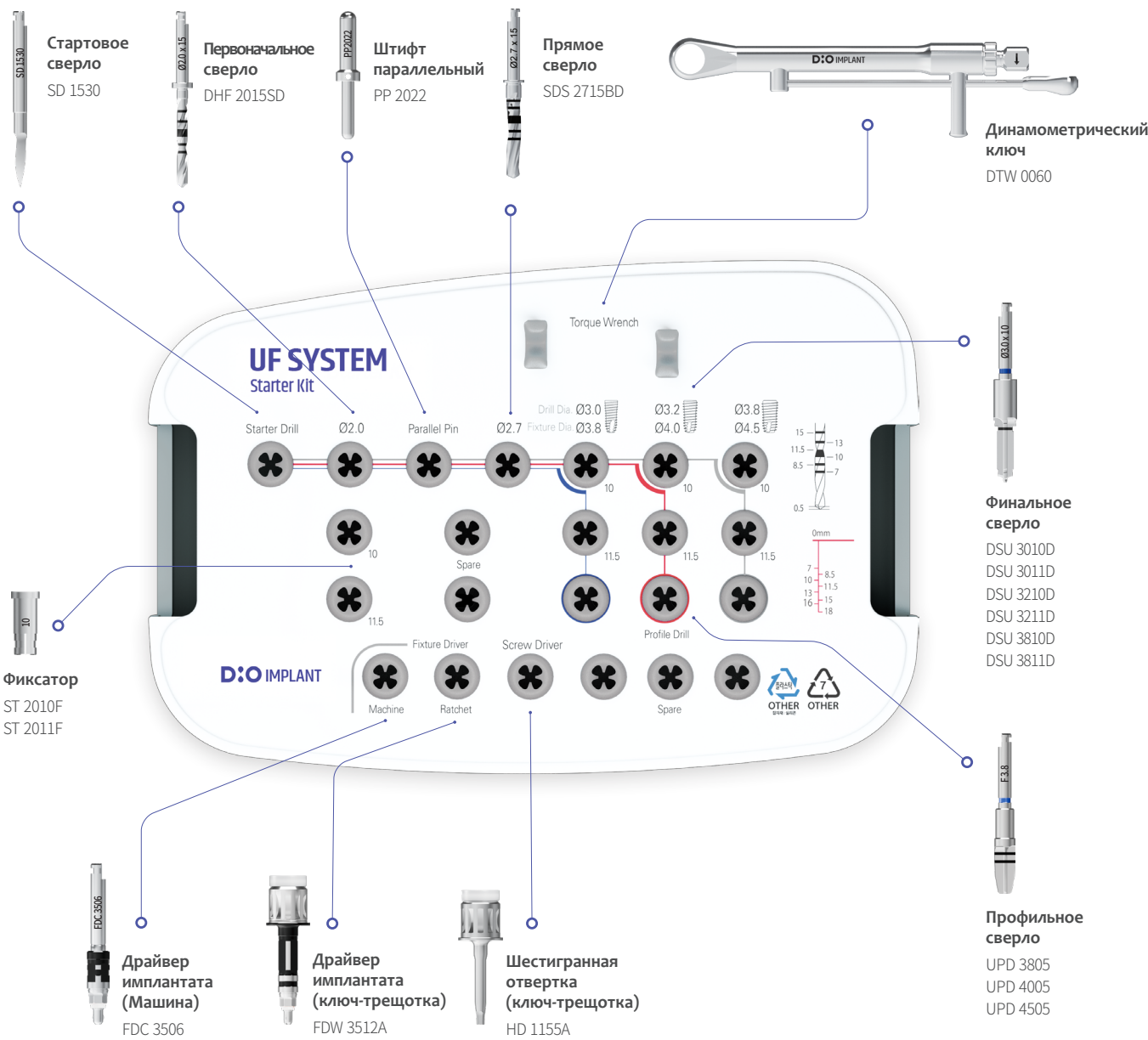


Набор UFII Master (UF 06) Набор




153

Хирургические наборы Хирургические наборы


- Сверла с исключительной режущей силой и долговечностью
 - Для имплантатов UFII Narrow Ø3.0 Ø3.3
- UFII Regular Ø3.8 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5

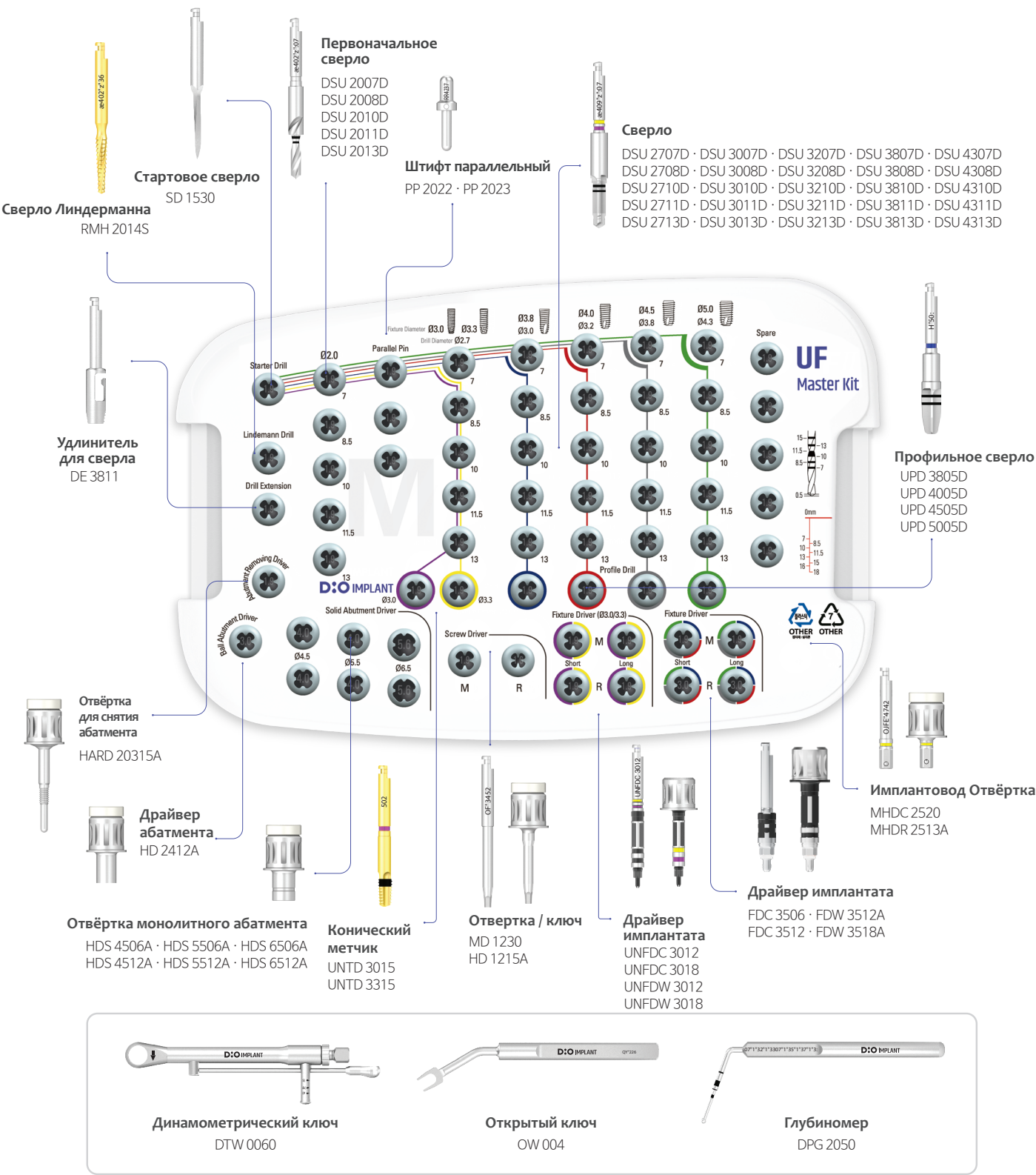


Хирургический протокол для имплантатов UFII Набор

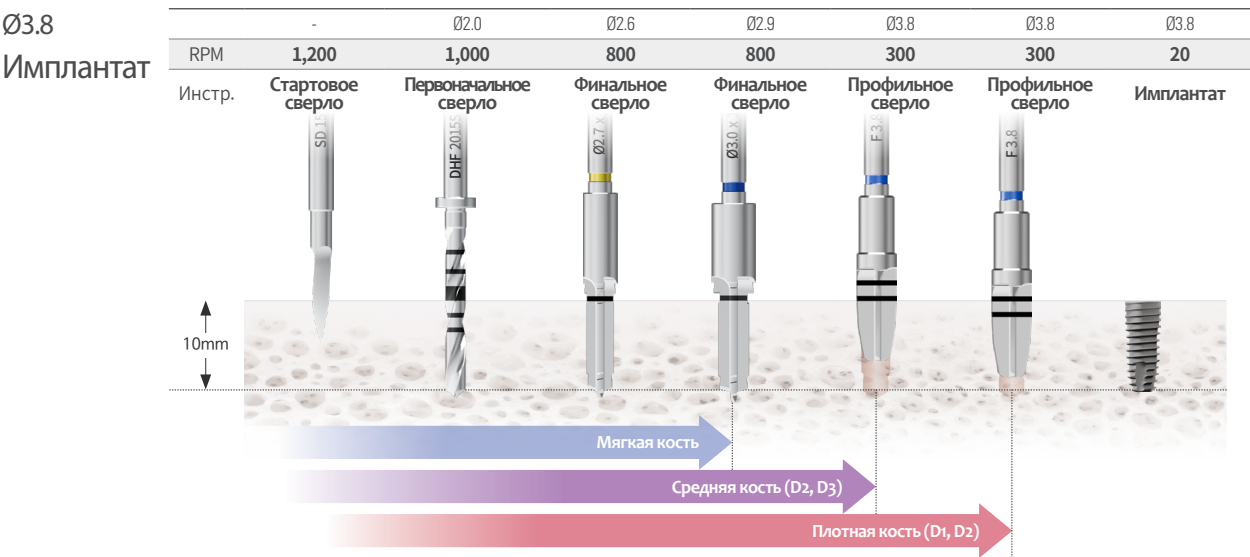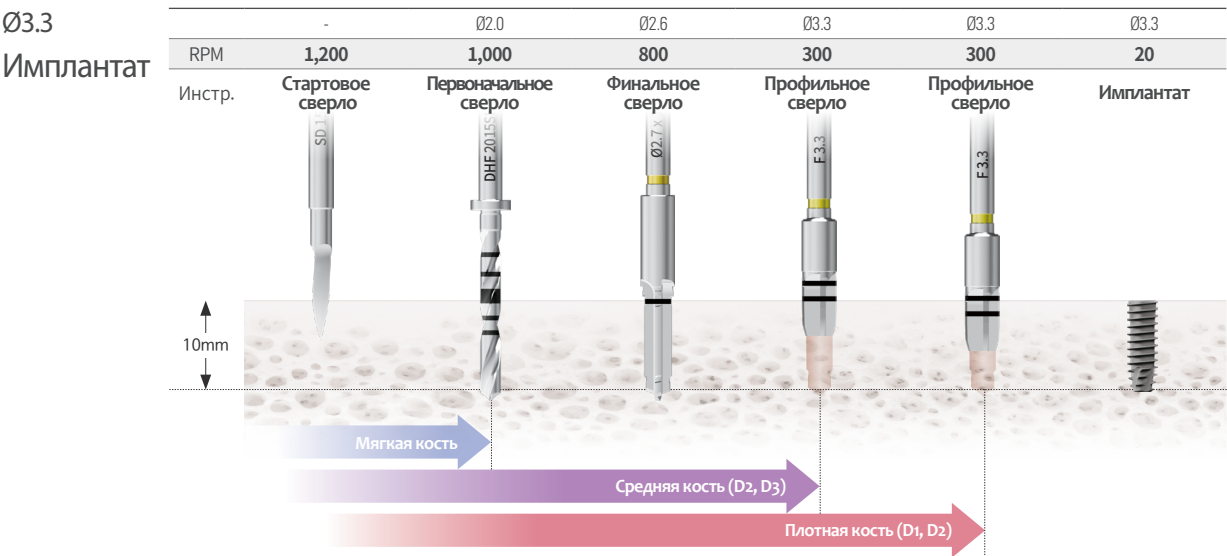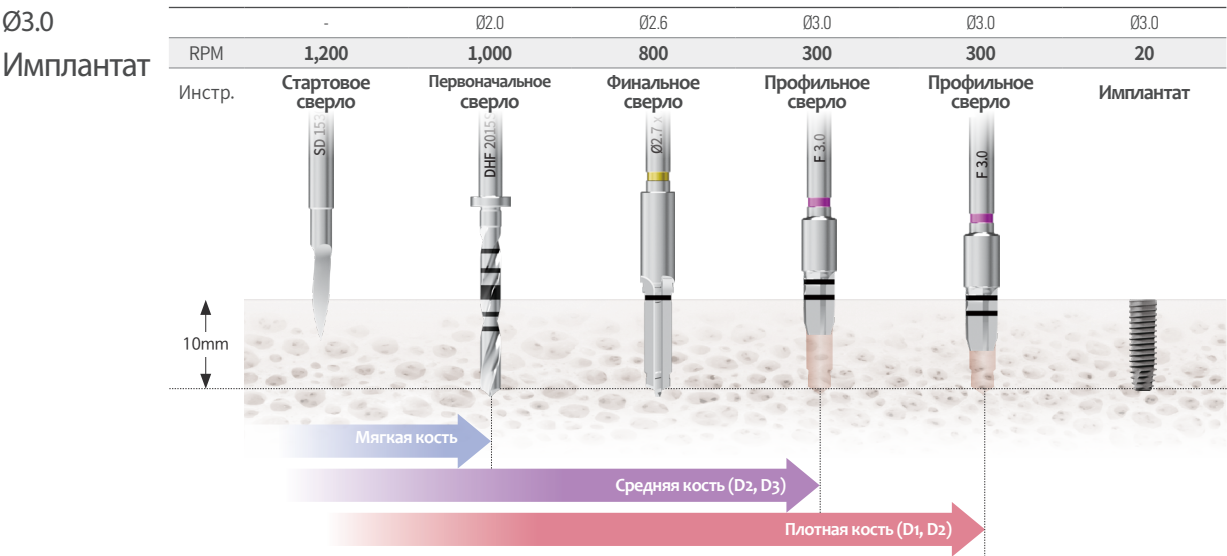


Ø4.0

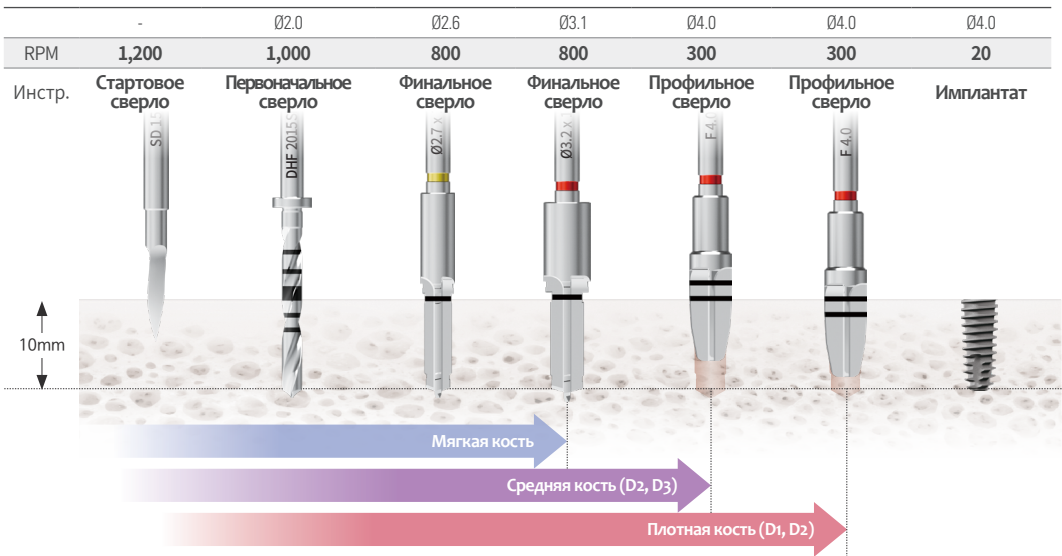

Ø4.5

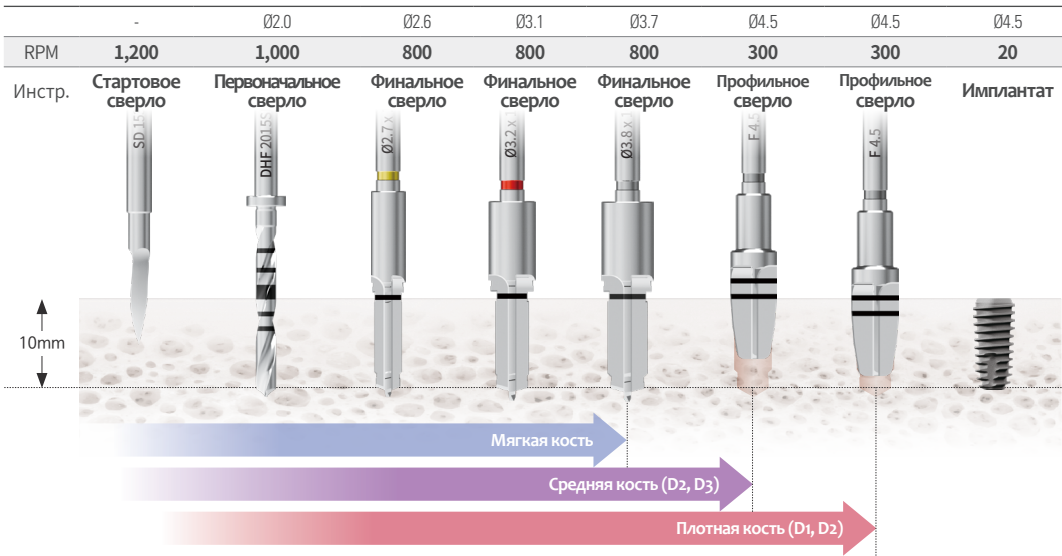


Ø5.0

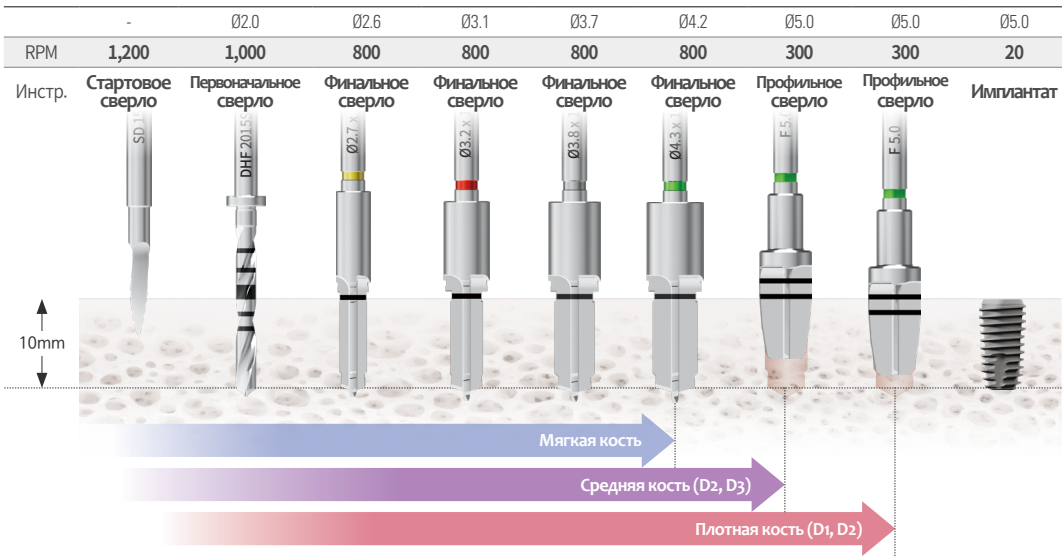


Хирургический протокол для имплантатов UFII Набор


Ø5.5

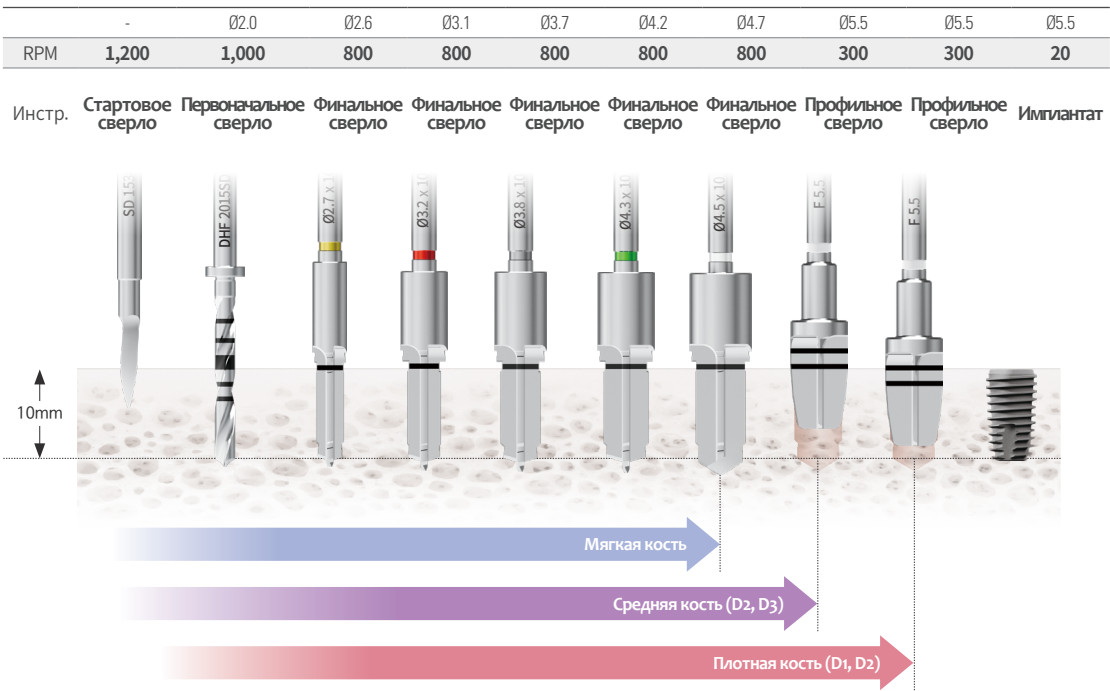


Ø5.9

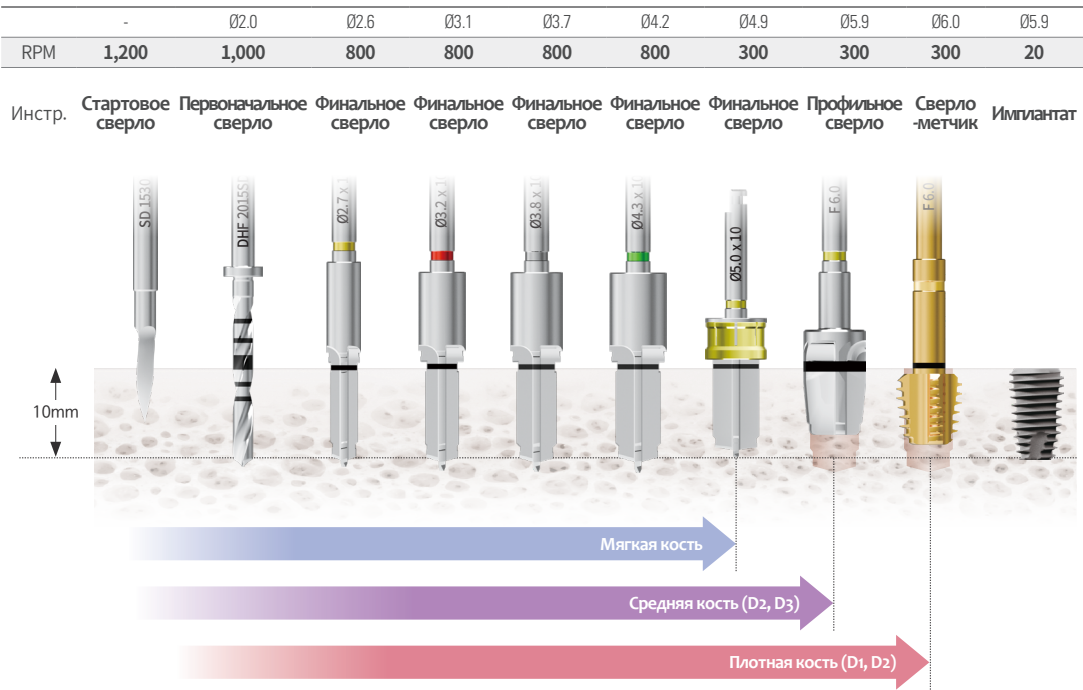




Ø6.4
Имплантат

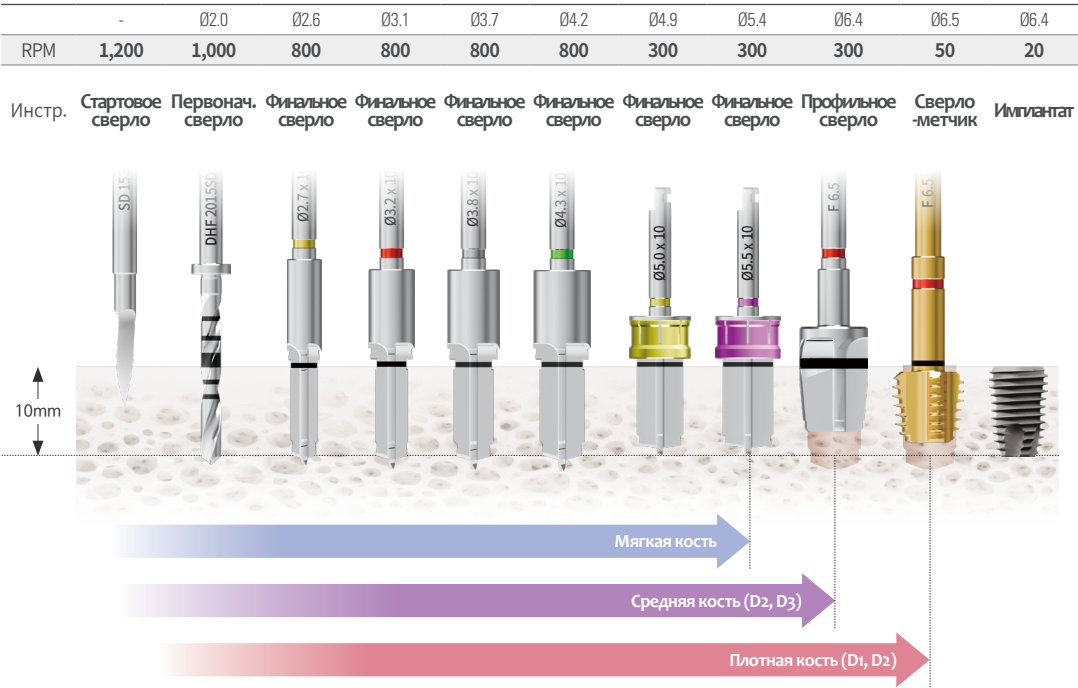


Ø6.9

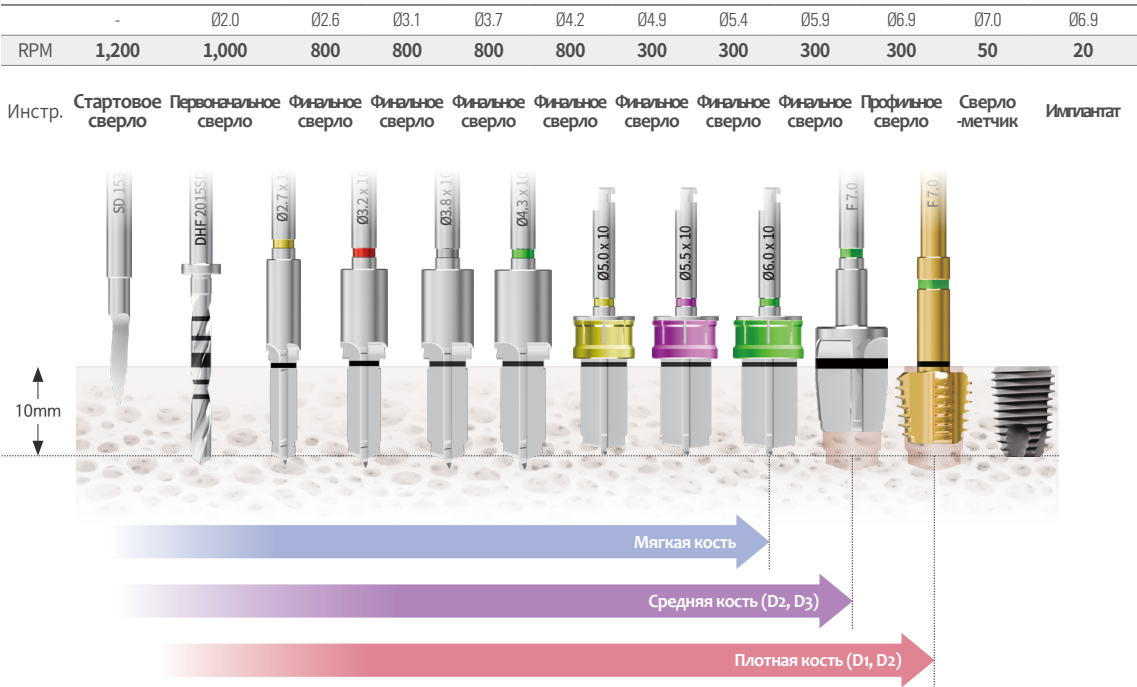


Хирургический протокол для имплантатов UFIII Набор

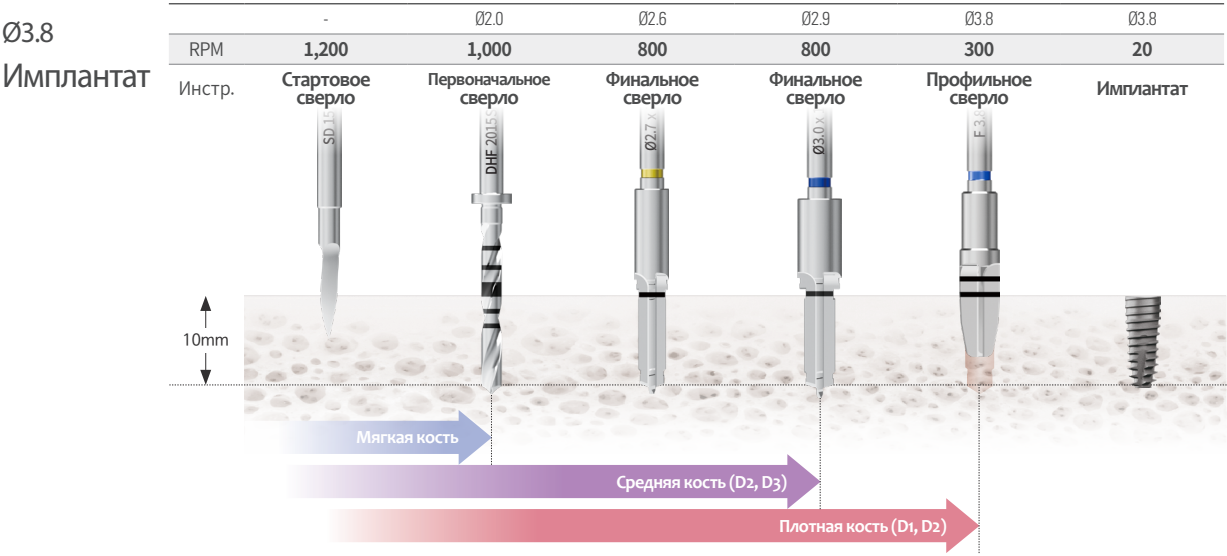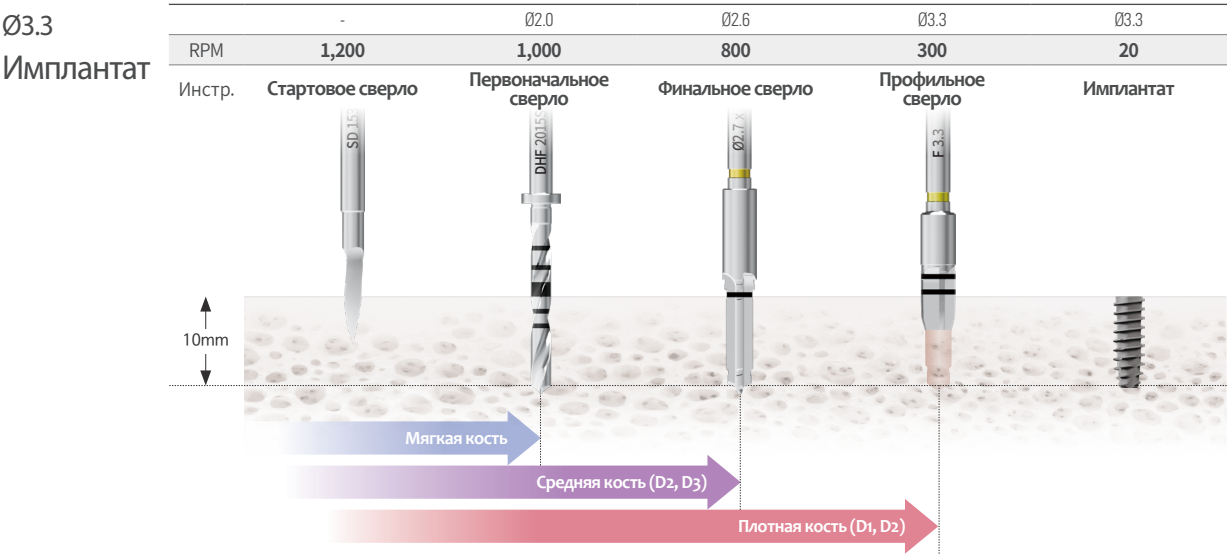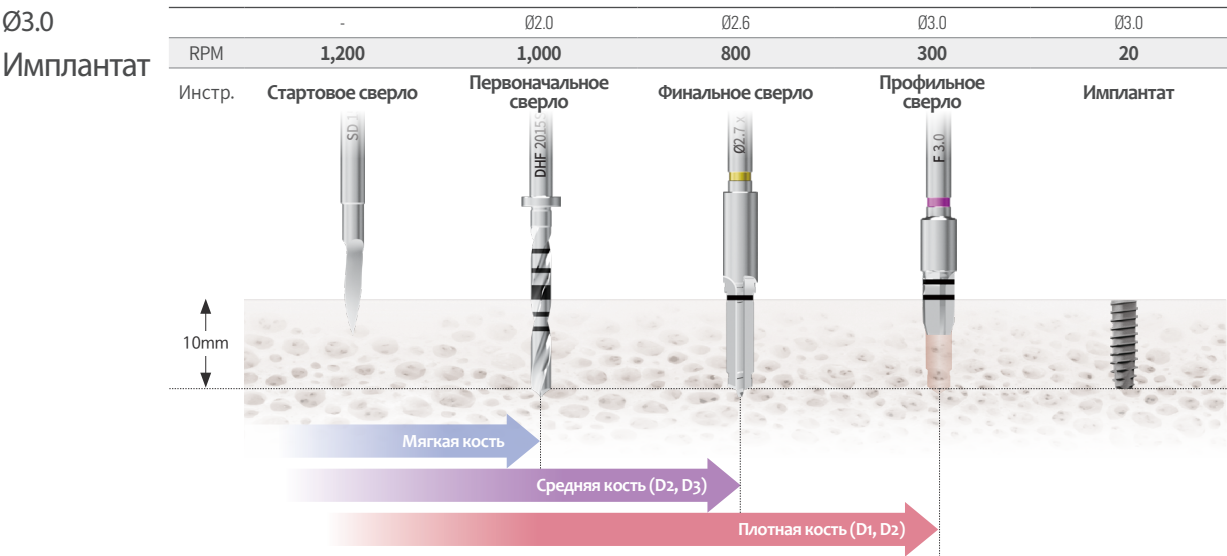


Ø4.0
Имплантат

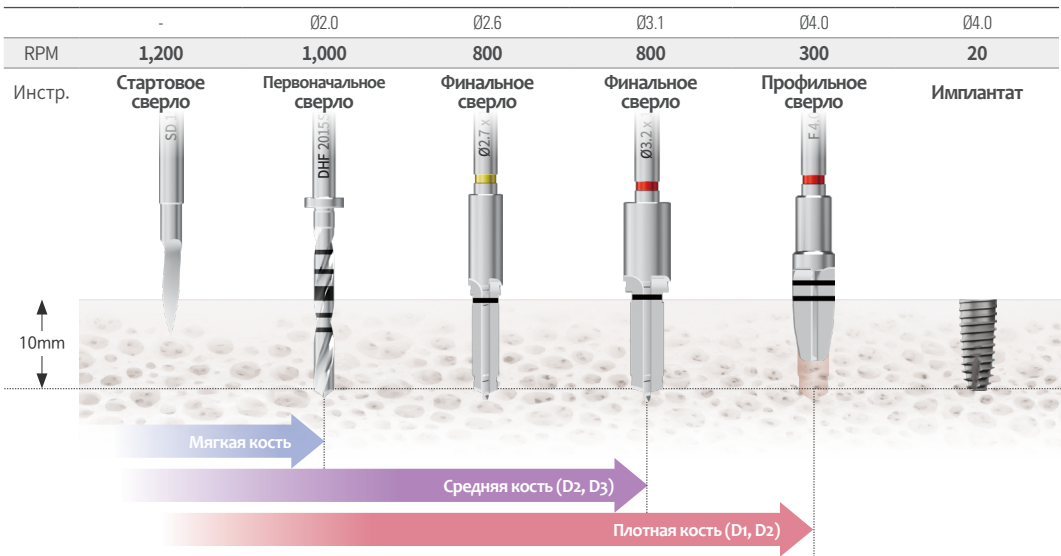

Ø4.5
Имплантат

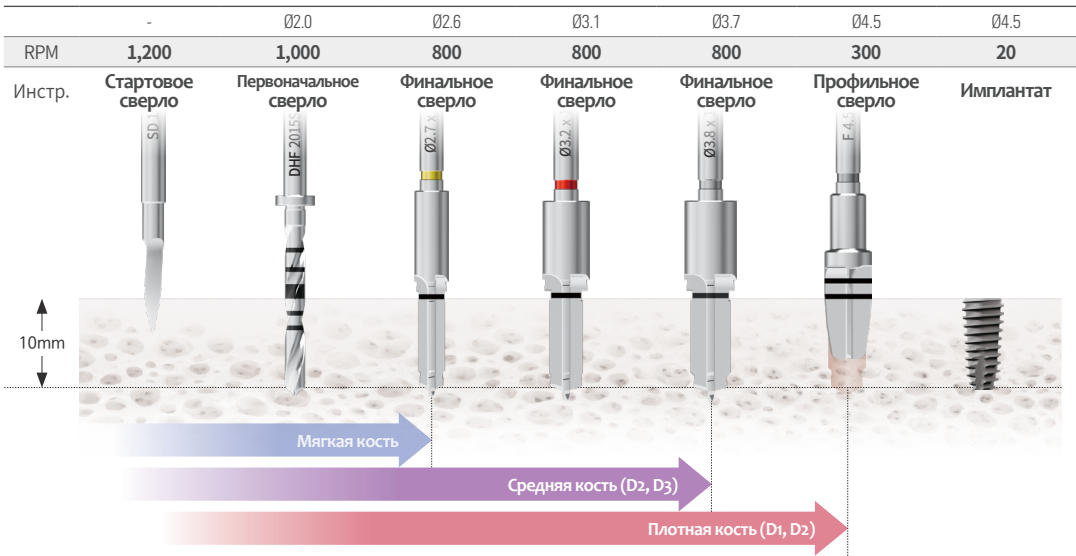

Ø5.0
Имплантат

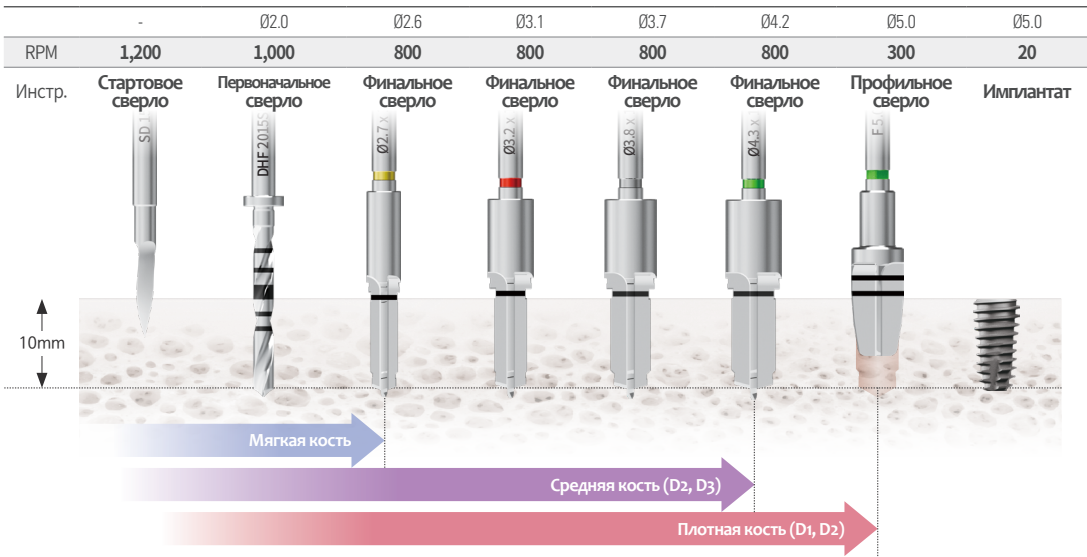

Хирургический протокол для имплантатов UFIII Набор


Ø5.5
Имплантат

	-	Ø2.0	Ø2.6	Ø3.1	Ø3.7	Ø4.2	Ø4.7	Ø5.5	Ø5.5
RPM	1,200	1,000	800	800	800	800	800	300	20
Инстр.	Стартовое сверло	Первоначальное сверло	Финальное сверло	Финальное сверло	Финальное сверло	Финальное сверло	Финальное сверло	Профильное сверло	Имплантат


Ø5.9
Имплантат

	-	Ø2.0	Ø2.6	Ø3.1	Ø3.7	Ø4.2	Ø4.9	Ø5.9	Ø5.9
RPM	1,200	1,000	800	800	800	800	800	300	20
Инстр.	Стартовое сверло	Первоначальное сверло	Финальное сверло	Финальное сверло	Финальное сверло	Финальное сверло	Финальное сверло	Профильное сверло	Имплантат

Ø6.4
Имплантат

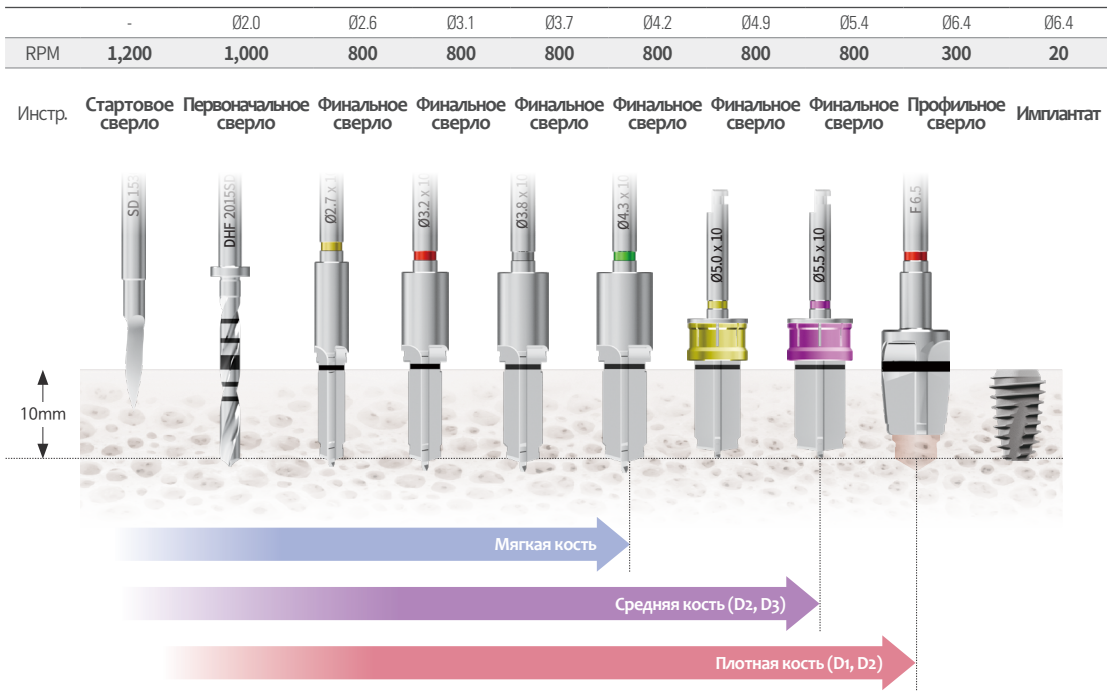

Ø6.9
Имплантат

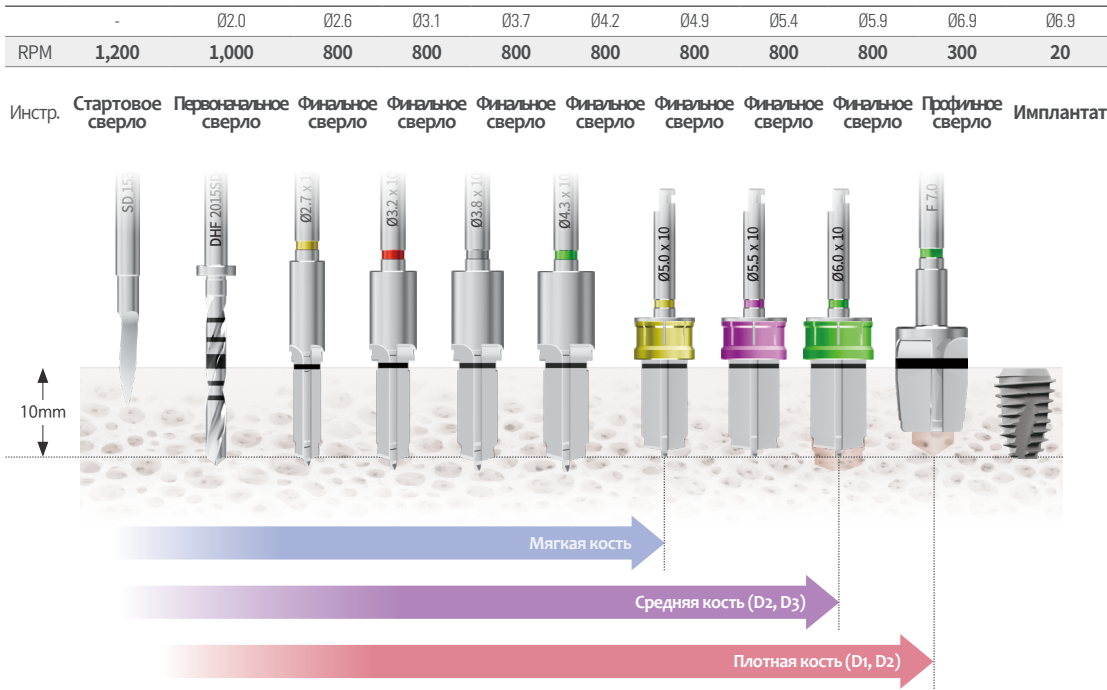

Мастер-набор UFI Internal (UF 12) Набор

Набор для системы UFI Internal Non-Submerged.
Сверла с высокой режущей способностью и прочностью.

- Подходит для имплантатов Ø3.6 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0.

Динамометрический
ключ

DTW 0060



Глубиномер

DPG 2050



*Bottom Panel Компоненты

Стартовое сверло

SD 1530



Первоначальное сверло

DHF 2015SD



Штифт параллельный

PP 2022
PP 2023



Прямое сверло

SDS 2715BD



Пилотное сверло

PS 3512



Сверло

DSU 3008D DSU 3010D DSU 3011D DSU 3013D DSU 3208D DSU 3210D DSU 3211D DSU 3213D DSU 3808D DSU 3810D DSU 3811D DSU 3813D DSU 4308D DSU 4310D DSU 4311D DSU 4313D



Ограничитель сверла

ST 2008F ST 2010F ST 2011F ST 2013F



Сверло Линдерманна

RMH 2014S



Набор удлинённых сверл

DECS 15



Отвёртка для снятия абатмента

HARD 21520A



Драйвер абатмента

HD 2406A



Оста абатмент Отвёртка

HD 3012A



Отвёртка монолитного абатмента

HD 3512A HD 4312A



Шестигранная отвёртка

MD 1222 HD 1155A



Драйвер имплантата

OFDC 4806 OFDC 4812 OFDW 4812A OFDW 4818A



Конический метчик

UITD 3615 UITD 4015 UITD 4515 UITD 5015




Расширитель

CSUI 3625 CSUI 4025 CSUI 4525 CSUI 5025




UF SYSTEM

Internal Master Kit

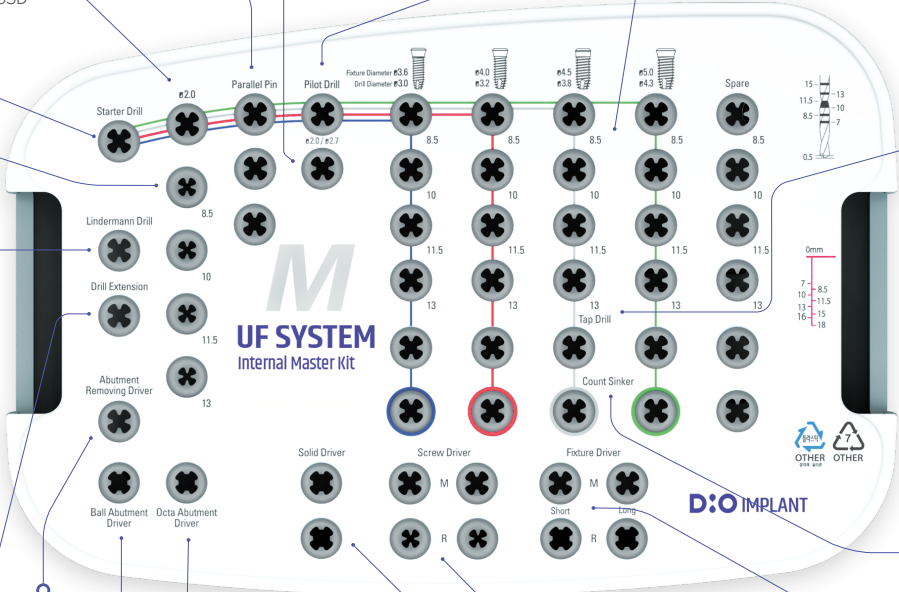

D:O IMPLANT



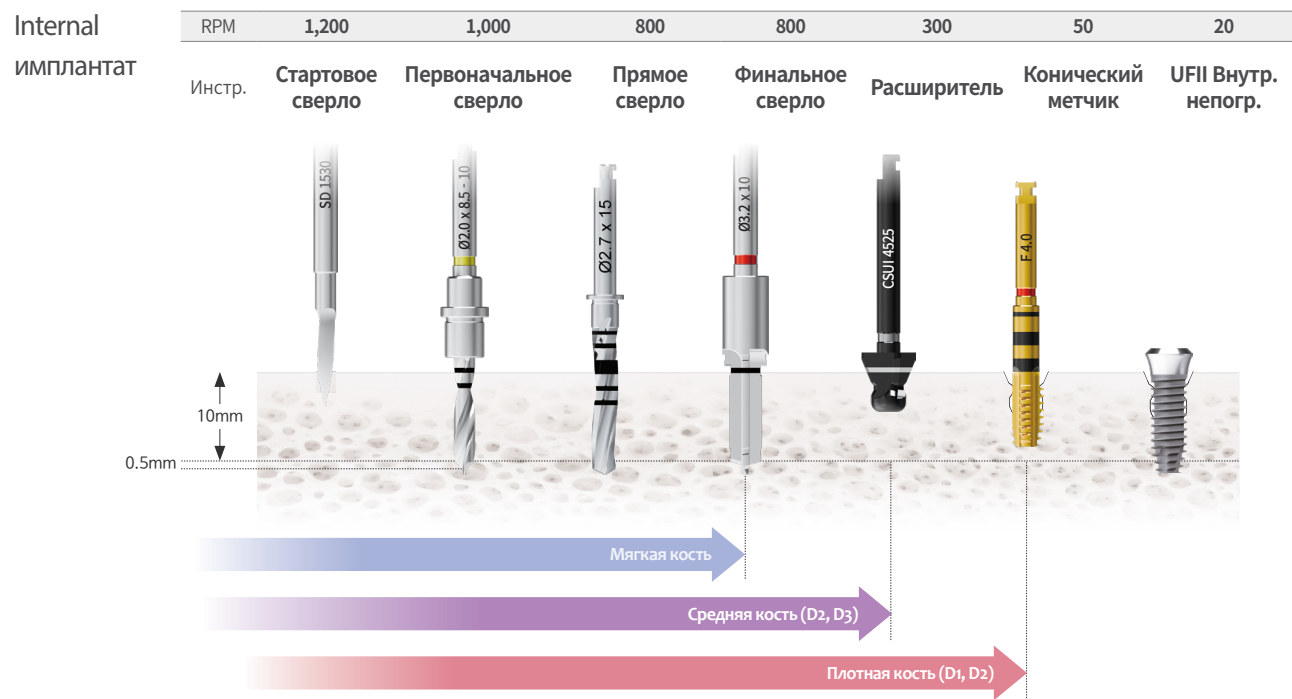


Хирургические инструменты Набор

Стартовое сверло

Используется для маркировки начального положения имплантата.


Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø2.0
Код	SD 1530

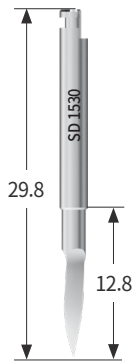

Первоначальное сверло


Используется для формирования начального отверстия под имплантат.

Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø2.0
Код	DHF 2015SD

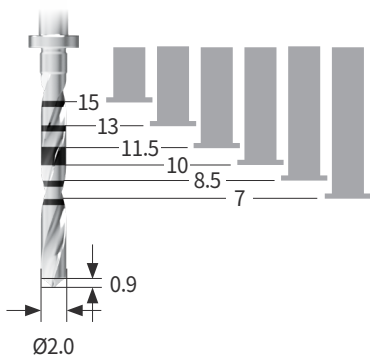

※ Состав набора UF 15

Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø2.0
D1	7 10 13
D2	5.5 8.5 11.5
	DSU 2007S05 DSU 2010S08 DSU 2013S11

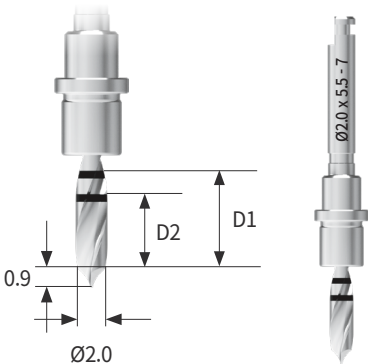

Ограничитель сверла

Используется для контроля глубины сверления.



*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø2.0
Код	ST 2015F ST 2013F ST 2011F ST 2010F ST 2008F ST 2007F ST 2005F

Хирургические инструменты Набор

Финальное сверло

Используется для окончательного сверления в зависимости от диаметра имплантата.

※ Входит в состав набора UF 15

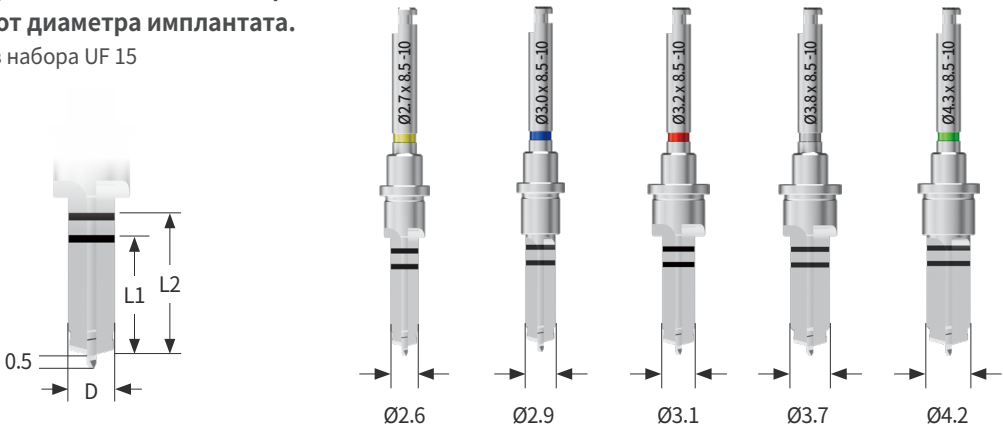

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø2.6	Ø2.9	Ø3.1	Ø3.7	Ø4.2
Длина 5.5 / 7	DSU 2707S05	DSU 3007S05	DSU 3207S05	DSU 3807S05	DSU 4307S05
8.5 / 10	DSU 2710S08	DSU 3010S08	DSU 3210S08	DSU 3810S08	DSU 4310S08
11.5 / 13	DSU 2713S11	DSU 3013S11	DSU 3213S11	DSU 3813S11	DSU 4313S11
Цвет	Жёлтый	Синий	Красный	Серый	Зеленый

Прямой ограничитель сверла

Для имплантатов 5.5 мм

- Используется при установке коротких имплантатов длиной 5.5 мм.
- Доступен для диаметров сверла: Ø2.0, Ø2.2, Ø2.7, Ø3.0, Ø3.2, Ø3.8, Ø4.3, Ø5.5, Ø6.0, Ø6.5.



*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Код	ST 2005F	XST 2705	XST 3005	XST 3205	XST 3805

Код	XST 4305	XST 5505	XST 6005	XST 6505	

Ограничитель сверла

Используется с фиксатором для регулировки глубины сверления.

- Позволяет безопасно выполнять сверление с применением стопора (например: при работе сверлом 8.5–10 мм).
- При установке имплантата 8.5 мм используется с фиксатором.
- При установке имплантата 10 мм используется без фиксатора.

※ Состав набора UF 15




Ед.изм.мм

Сверло Size		Narrow			Regular		
Диаметр	Ø2.0	Ø2.7	Ø3.0		Ø3.2	Ø3.8	Ø4.3
USTN 15					USTR 15		
							


Установка на уровне кости

Препарирование костного ложа до достижения стоп-ограничителя сверла

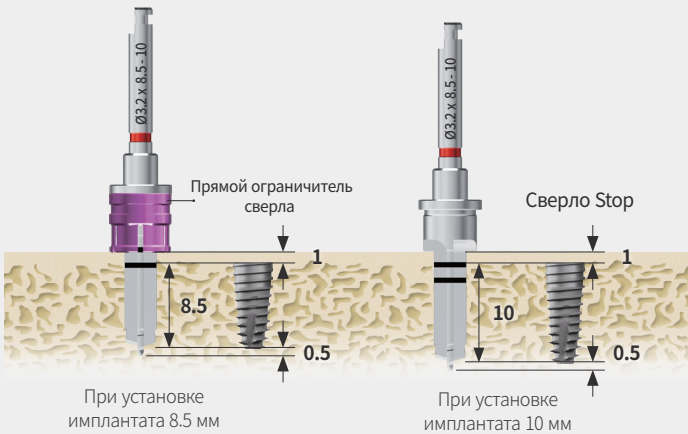


Установка на уровне кости

Препарирование костной ткани выполняется до метки лазерной гравировки на сверле.

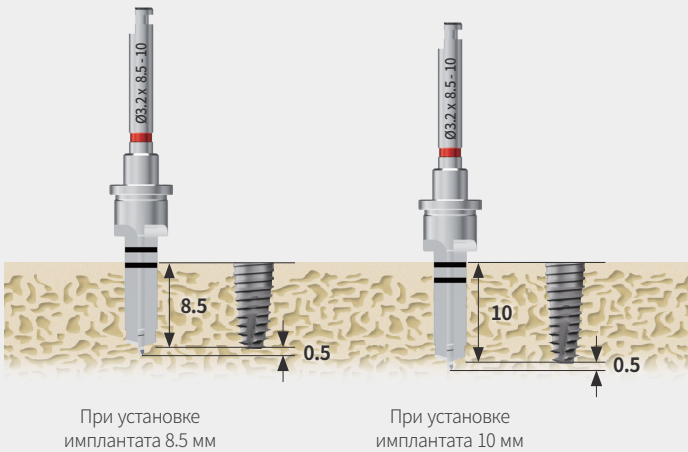

Профильное сверло

Используется для расширения кортикальной кости в плотных участках (D1, D2), чтобы предотвратить избыточный крутящий момент при установке имплантата.

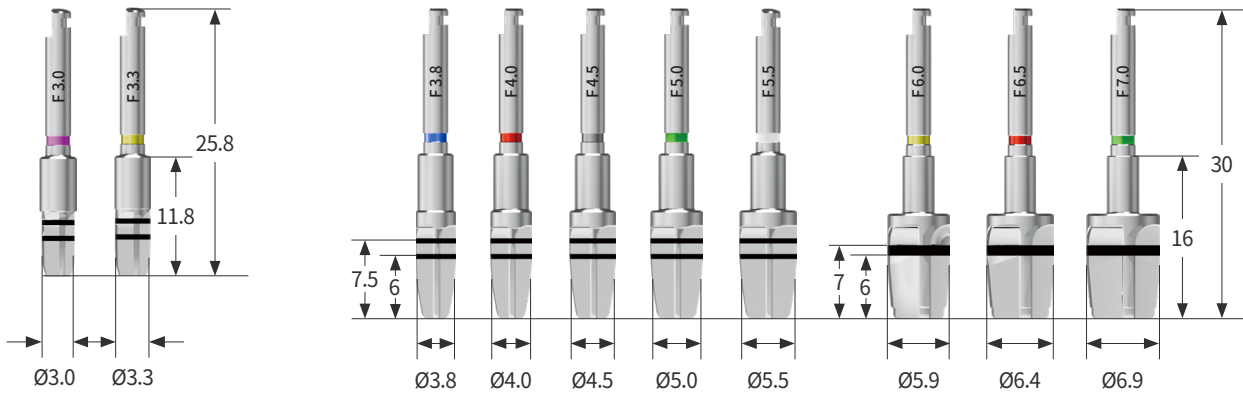

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Диаметр	Ø3.0	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø5.9	Ø6.4	Ø6.9
	UPD 3005D	UPD 3305D	UPD 3805D	UPD 4005D	UPD 4505D	UPD 5005D	UPD 5505D	UPD 6010	UPD 6510	UPD 7010
Цвет	Фиолетовый	Жёлтый	Синий	Красный	Серый	Зеленый	Белый	Жёлтый	Красный	Зеленый

Расширитель

Используется для расширения кортикальной кости в плотных участках (D1, D2), чтобы предотвратить избыточный крутящий момент при установке имплантата.

※ Состав набора UF 12

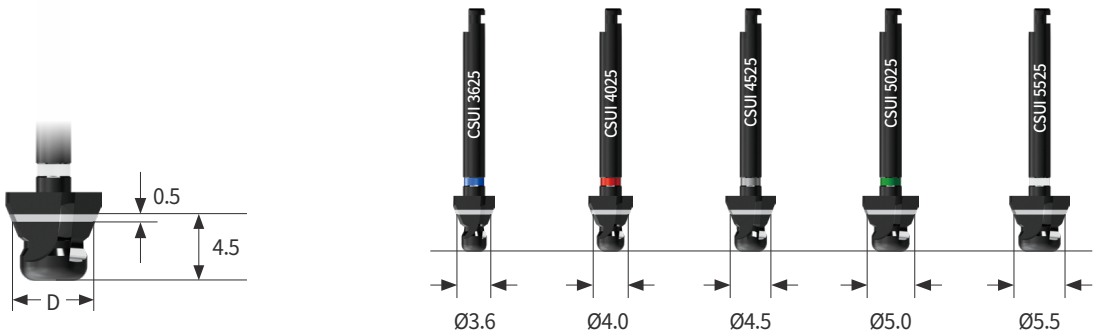

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Диаметр	Ø3.6	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5
	CSUI 3625	CSUI 4025	CSUI 4525	CSUI 5025	CSUI 5525
Цвет	Синий	Красный	Серый	Зеленый	Белый

Конический метчик

Используется для нарезания резьбы в плотной кости (D1, D2), чтобы предотвратить избыточный крутящий момент при установке имплантата.

※ Состав набора UF 09 / 12

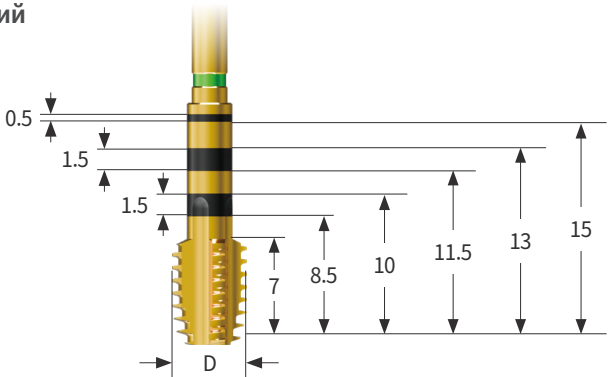

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø3.0	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.0	Ø6.5	Ø7.0
	UNTD 3015	UNTD 3315	UT(III) 3815	UT(III) 4015	UT(III) 4515	UT(III) 5015	UT(III) 5515	UT(III) 6006	UT(III) 6506	UT(III) 7006
Цвет	Фиолетовый	Жёлтый	Синий	Красный	Серый	Зеленый	Белый	Жёлтый	Красный	Зеленый
										

• Состав набора *Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø3.6	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5
	UITD 3615	UITD 4015	UITD 4515	UITD 5015	UITD 5515
Цвет	Синий	Красный	Серый	Зеленый	Белый
					

Хирургические инструменты Набор

Штифт параллельный

Используется для проверки направления сверления и окклюзионных соотношений, вставляется в отверстие, подготовленное начальным сверлом или сверлом Ø2.7.



*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Код	PP 1223	PP 1523	PP 2015	PP 2022	PP 2023

Направляющий штифт

Используется для проверки направления сверления, окклюзионных соотношений и расстояния до соседних зубов, вставляется в отверстие, подготовленное начальным сверлом.



*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø2.0
Код	PG 0060


Пилотное сверло

Используется для выравнивания направления предварительного и последующего сверления, чтобы обеспечить их параллельность.

※ Состав набора UF 12

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø2.7
Код	PS 3512

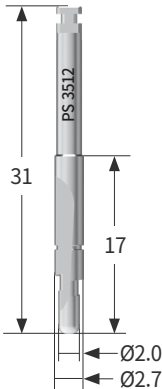


Штифт направляющий

Используется для проверки направления и параллельности, вкручивается в установленный имплантат.

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

	Narrow	Regular
Длина 10	DPPN 2710	DPP 3512

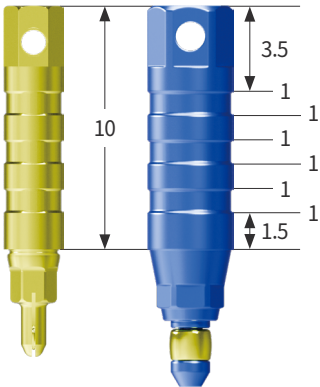

Штифт наклонный направляющий

Используется для проверки угла и направления, вкручивается в установленный имплантат.

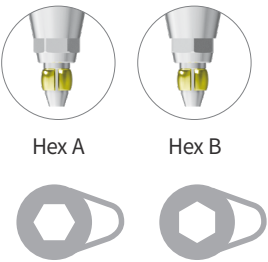

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Тип	Hex A	Hex B
	DAP 4515A	DAP 4515B



Драйвер имплантата

Используется для безопасного извлечения имплантата из упаковки и установки его в кость с максимальной стабильностью.

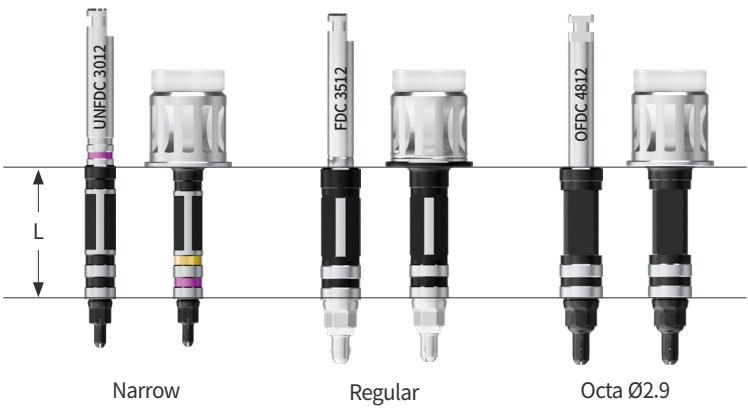

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

N

Размер		Narrow					
Тип	Машина			Ключ-трещотка			
Длина	6	12	18	6	12	18	
	UNFDC 3006	UNFDC 3012	UNFDC 3018	UNFDW 3006	UNFDW 3012	UNFDW 3018	
							

R

Размер		Regular					
Тип	Машина			Ключ-трещотка			
Длина	6	12	18	6	12	18	
	FDC 3506	FDC 3512	FDC 3518	FDW 3506A	FDW 3512A	FDW 3518A	
							

Octa Ø2.9

*Состав набора UF 12

Тип	Машина			Ключ-трещотка			
Длина	6	12	18	6	12	18	
	OFDC 4806	OFDC 4812	OFDC 4818	OFDW 4806A	OFDW 4812A	OFDW 4818A	
							

Набор удлинителя для сверла

- Используется для удлинения сверла на 15.5 мм и удобства работы во время хирургической процедуры.
 - Комплектация : Сверло Extension (DE 15) + Cover (DEC 07)
- ※ Возможна покупка отдельных компонентов.


Код	DECS 15
-----	---------



Имплантовод Отвёртка (Машина)

Используется для установки и извлечения имплантата при помощи хирургического мотора.

※ Применяется с имплантологическим мотором.

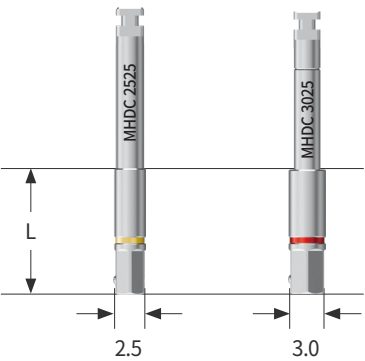

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Hex	2.5	3.0
Длина 6	MHDC 2520	MHDC 3020
11	MHDC 2525	MHDC 3025
Цвет	Жёлтый	Красный

Имплантовод Отвёртка (ключ-трещотка)

Используется для установки и извлечения имплантата при помощи хирургического мотора.

※ Для ручного и ключевого использования

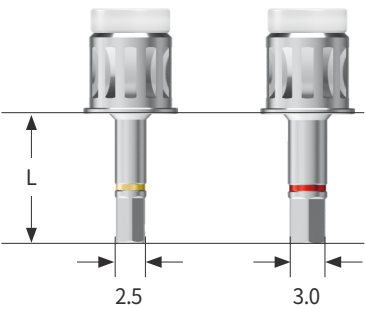

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Hex	2.5	3.0
Длина 6	MHDR 2513A	MHDR 3013A
11	MHDR 2518A	MHDR 3018A
Цвет	Жёлтый	Красный

Шестигранная отвертка (Машина)

Используется для фиксации супраструктуры или винта.

※ Применяется с имплантологическим мотором.

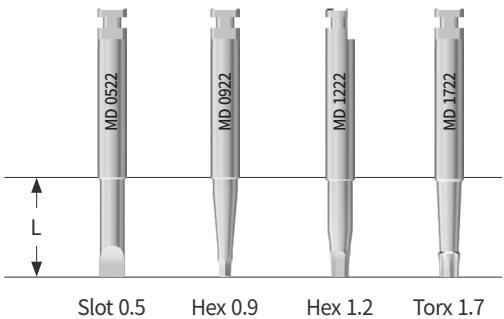

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Тип	Slot 0.5	Hex 0.9	Hex 1.2	Torx 1.7
Длина 5	-	-	-	MD 1719
5.5	-	-	MD 1159	-
8	MD 0522	MD 0922	-	MD 1722
8.5	-	-	MD 1222	-
16	MD 0530	MD 0930	-	MD 1730
16.5	-	-	MD 1230	-
20.5	-	-	MD 1234	-
25.5	-	-	MD 1239	-

Шестигранная отвертка (ключ-трещотка)

Используется для фиксации супраструктуры или винта.

※ Для ручного и ключевого использования

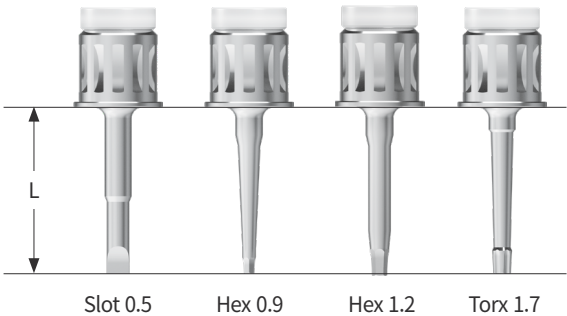

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм


Тип	Slot 0.5	Hex 0.9	Hex 1.2	Torx 1.7
Длина 5	-	-	HD 1205A	HD 1705A
10	HD 0510A	HD 0910A	HD 1150A	HD 1710A
15	HD 0515A	HD 0915A	HD 1155A	HD 1715A
20	-	HD 0920A	HD 1220A	HD 1720A
25	-	-	HD 1225A	HD 1725A
30	-	-	HD 1230A	HD 1730A

Хирургические инструменты Набор

Драйвер абатмента

Используется для фиксации абатмента к имплантату.

- Состав набора UF 12

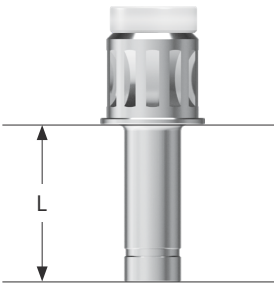

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Тип	Монолитный драйвер (Narrow)	Монолитный драйвер	Excellent Монолитный драйвер	Шаровидный драйвер	Драйвер Octa
Длина 6	UNHDS 4006A	HD 3506A	HD 4306A	HD 2406A	HD 3006A
12	UNHDS 4012A	HD 3512A	HD 4312A	HD 2412A	HD 3012A
					

Тип	Multi-unit драйвер		Multi-unit угловой драйвер	
	Ключ-трещотка	Ключ-трещотка	Ключ-трещотка	Машина
Длина 6	HD 2006A	HD 3306A	-	-
11	-	-	-	MMD 1224
12	HD 2012A	HD 3312A	-	-
15	-	-	MHD 1155A	-
				

Угловая отвёртка


Инструмент, используемый для фиксации винта Torx.

- При превышении рекомендуемого крутящего момента сначала ломается не соединительная часть, а рабочая.
- ※ Рекомендуемый крутящий момент: 30~30 N·см

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Размер		Regular		
Диаметр		1.7		
Длина	12	15	20	
	ATD 1712	ATD 1715	ATD 1720	

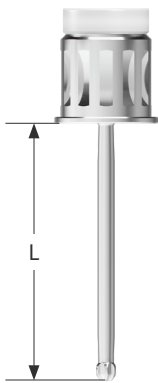


Отвёртка для снятия абатмента

Используется для удаления повреждённой части шестигранного абатмента, соединённой с имплантатом, установленным в полости рта.

- Состав набора UF 12

Ед.изм.мм

Код	HARD 21520A
-----	-------------

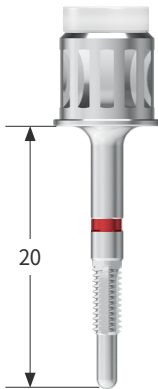

Костный трепан

Используется для удаления имплантата, который не обладает первичной стабильностью.

- В случаях плотной кости или хорошо остеоинтегрированного имплантата применяется костный трепан. После удаления 2~3 мм кортикальной кости имплантат можно извлечь с помощью Universal Driver.
- Состав набора UF 09

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Narrow			Regular			
Диаметр 1	Ø3.2	Ø3.7	Ø3.9	Ø4.0	Ø4.3	Ø4.4
2	Ø4.0	Ø4.5	Ø4.7	Ø4.8	Ø5.1	Ø5.2
	TRD 4032	TRD 4537	TRD 4739	TRD 4840	TRD 5143	TRD 5244

Regular

Диаметр 1	Ø4.7	Ø4.9	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.2	Ø6.7
2	Ø5.5	Ø5.7	Ø5.8	Ø6.3	Ø7.0	Ø7.5
	TRD 5547	TRD 5749	TRD 5850	TRD 6355	TRD 7062	TRD 7567



Хирургические инструменты Набор

Динамометрический ключ

Используется для регулировки положения имплантата, а также для затяжки абатмента и винта.

- При установке бара необходимо затянуть до линии, соответствующей требуемому значению крутящего момента.



Код	DTW 0060
-----	----------

Глубиномер

Используется для измерения глубины отверстия после сверления.



Код	DPG 2050
-----	----------

Открытый ключ

Используется для демонтажа трансферного ключа при работе с низкоплотной костной тканью.

- Угол шейки 30° обеспечивает удобство работы в полости рта.



*Приобретается отдельно

Код	OW 004
-----	--------

D:O IMPLANT

05

DIO NAVI Наборы

- 192 Набор DIO NAVI Master S (UF 77)
- 193 Набор DIO NAVI Narrow (UF 14)
- 194 Набор DIO NAVI Wide (UF 11)
- 195 Набор DIO NAVI Starter (UFST 01)
- 214 Набор DIO NAVI Flapless Crestal Sinus (SMK 02)
- 218 Набор DIO NAVI Special (SGF 02)

- Стандартный Offset: 9mm
- Направляющая втулка: GS 53BL




Master S Набор
Видео-презента

Динамометрический
ключ

DTW 0080




*Bottom Panel Компоненты

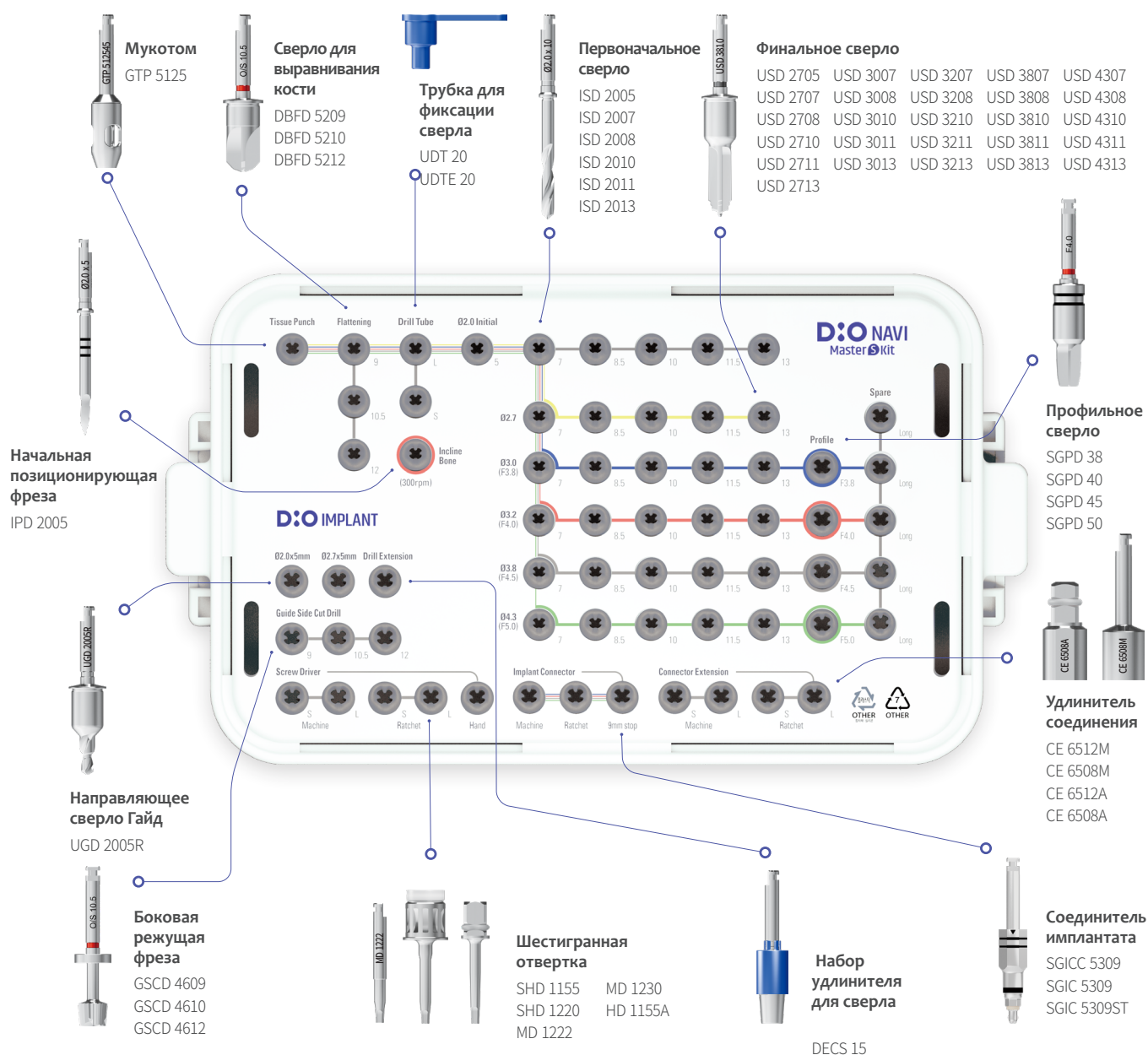

**Хирургический набор DIO Navi для имплантатов
UFII / UFIII Ø3.0-Ø3.3**

- Направляющая втулка: GSL 36YE, GS 36YE

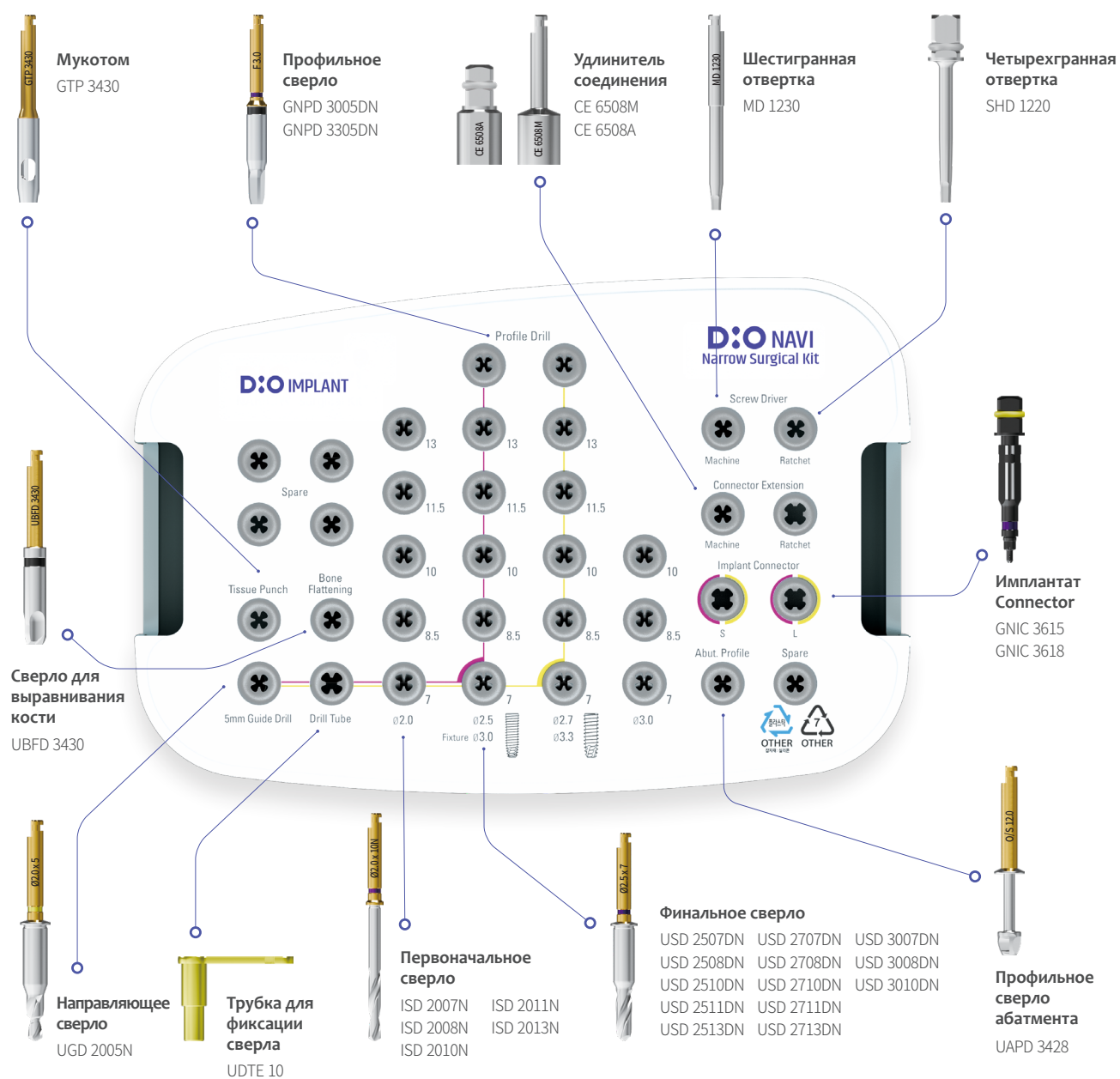

Набор DIO NAVI Wide (UF 11) Набор

DIO NAVI Наборы DIO NAVI Наборы


Хирургический набор DIO Navi для имплантатов UFII / UFIII Ø5.5-Ø6.4

- Стандартный Offset: 8.0mm
- Направляющая втулка: GS 68GN

Динамометрический
ключ
DTW 0080




*Bottom Panel Компоненты

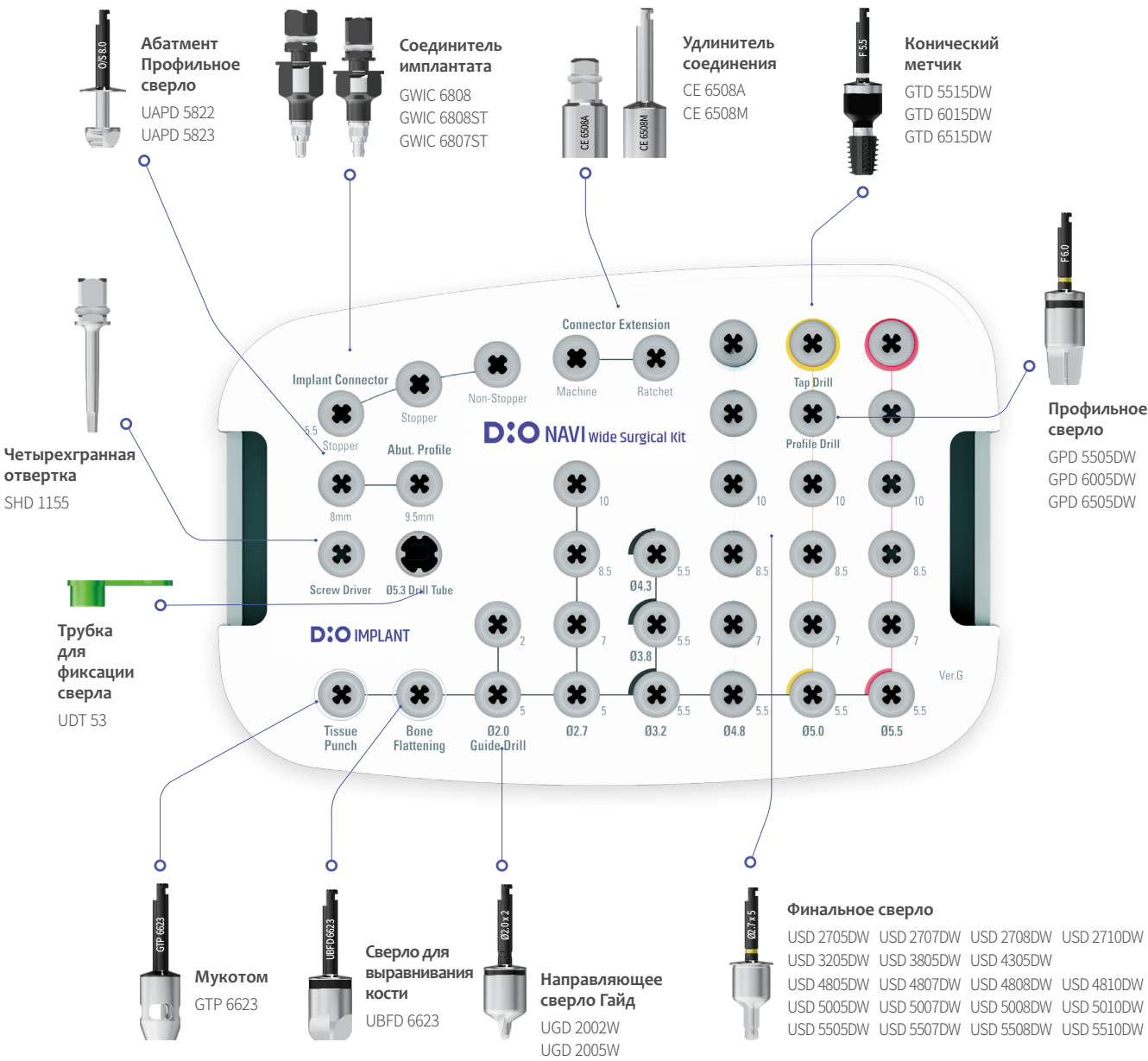

Набор DIO NAVI Starter (UFST 01) Набор


Хирургический набор DIO Navi для имплантатов UFII / UFIII Ø3.8–Ø4.5

- Стандартный Offset: 9.0mm
- Направляющая втулка: GS 53BL

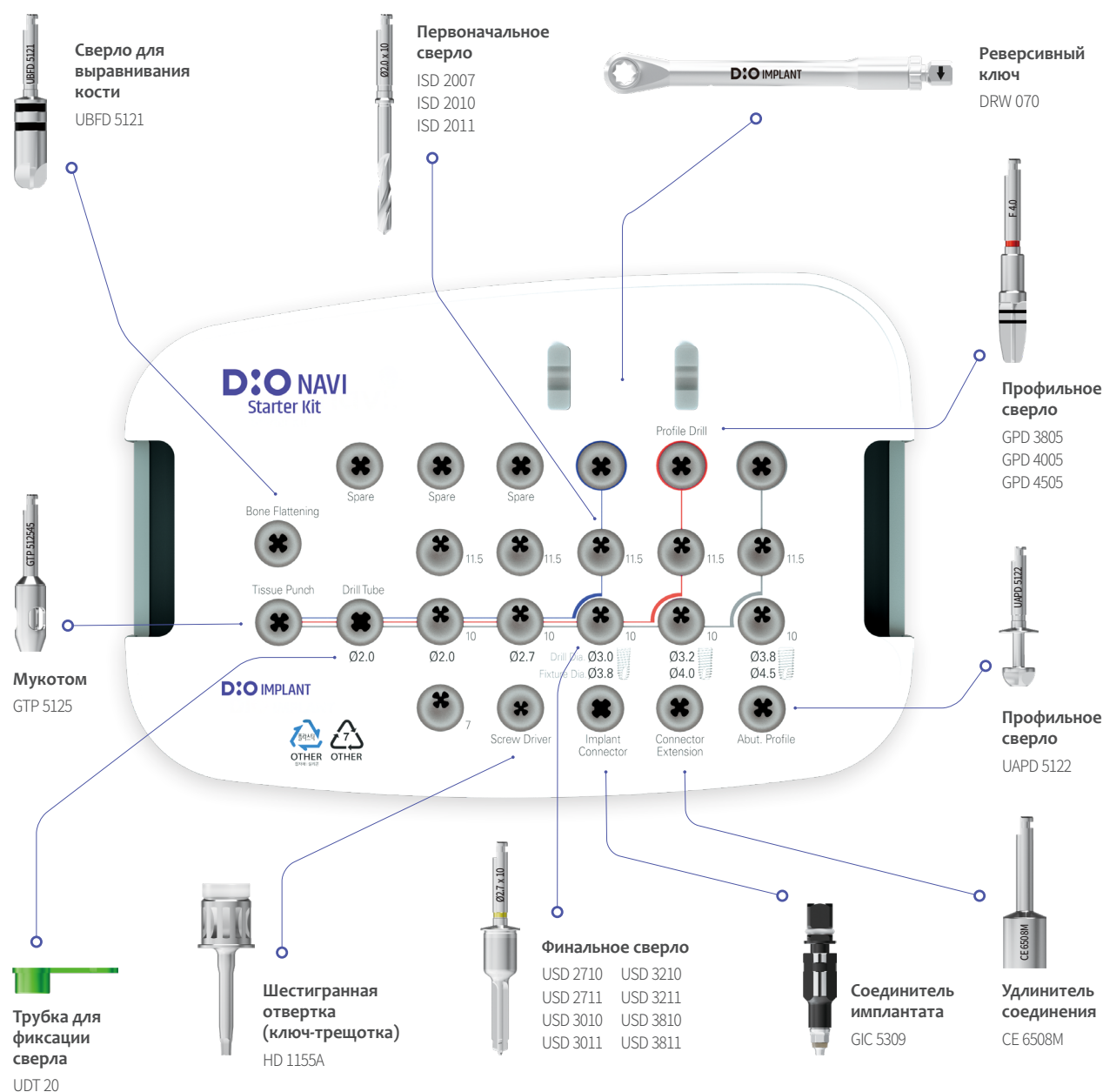


UF(II) Имплантат DIO NAVI Хирургический протокол Набор


Ø3.0
Имплантат

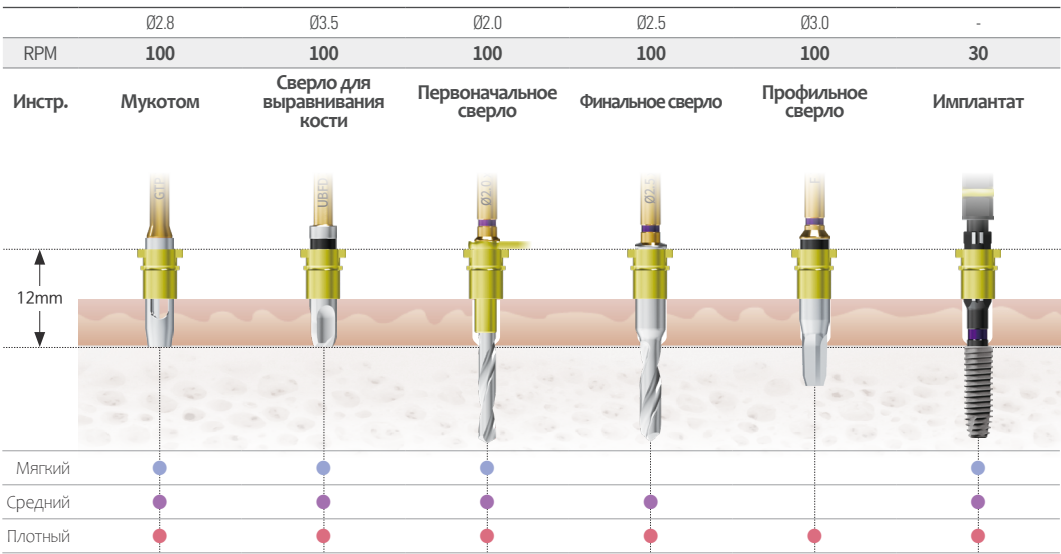


Ø3.3
Имплантат

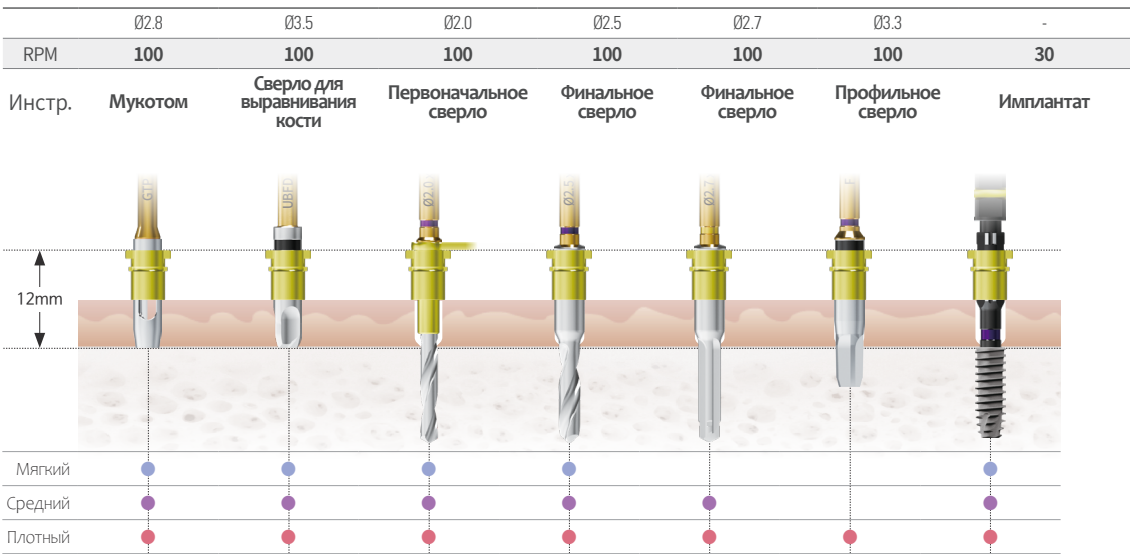


Ø3.8
Имплантат

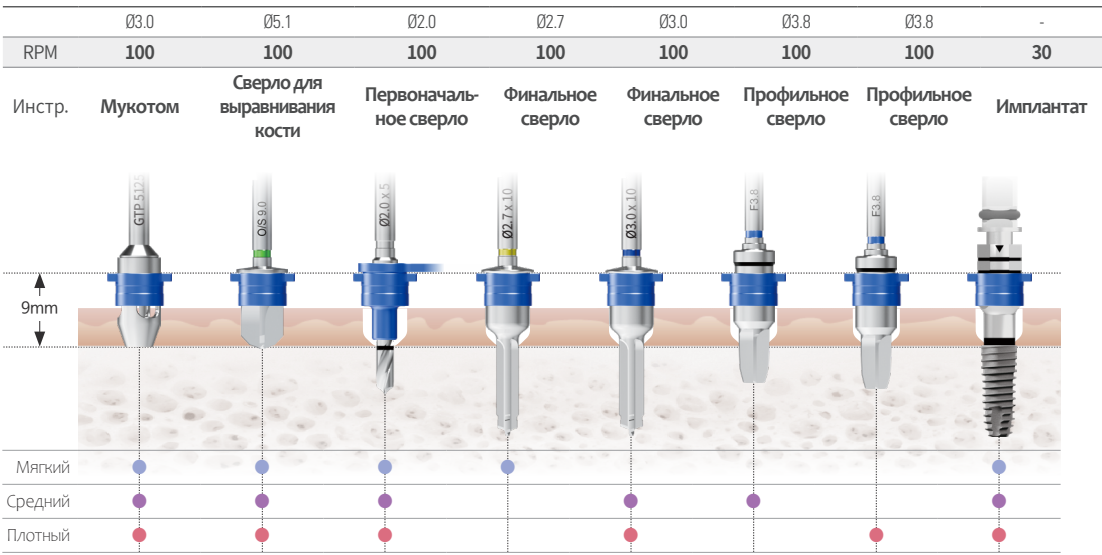


Ø4.0
Имплантат

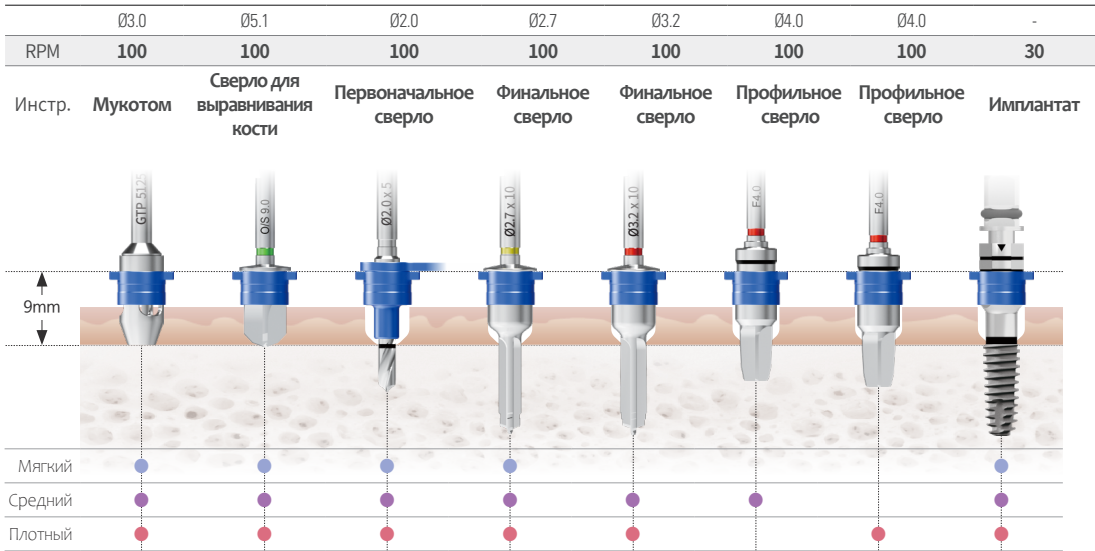

Ø4.5
Имплантат

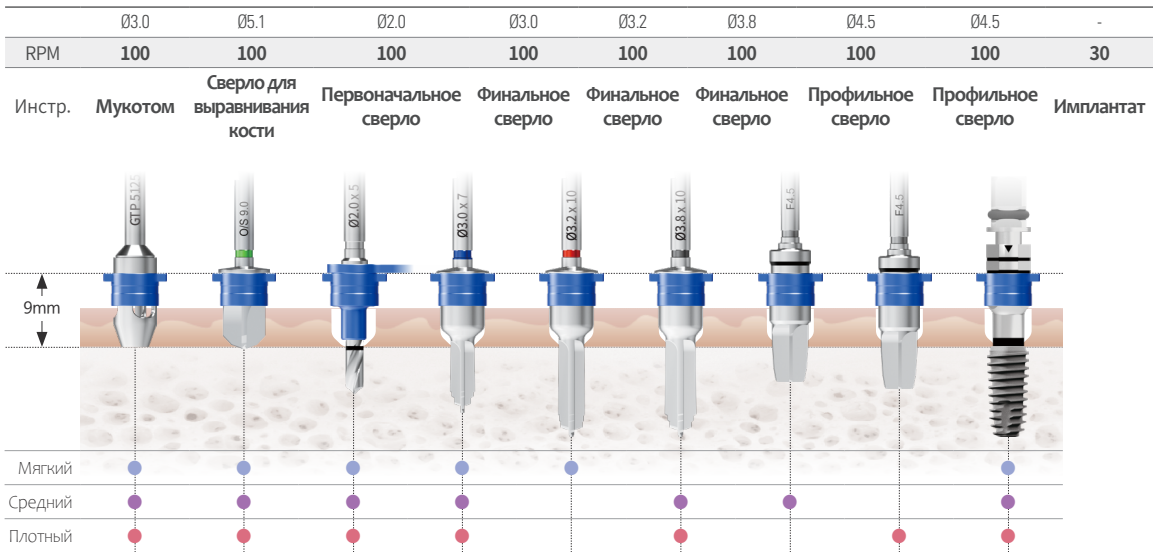


Ø5.0
Имплантат

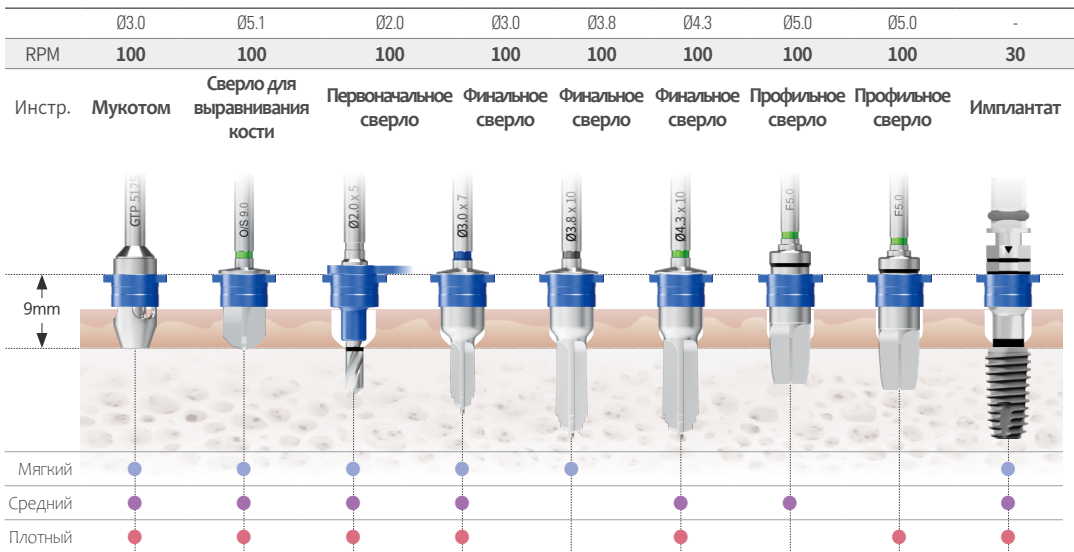


UF(II) Имплантат DIO NAVI Хирургический протокол Набор


Ø5.5 Имплантат

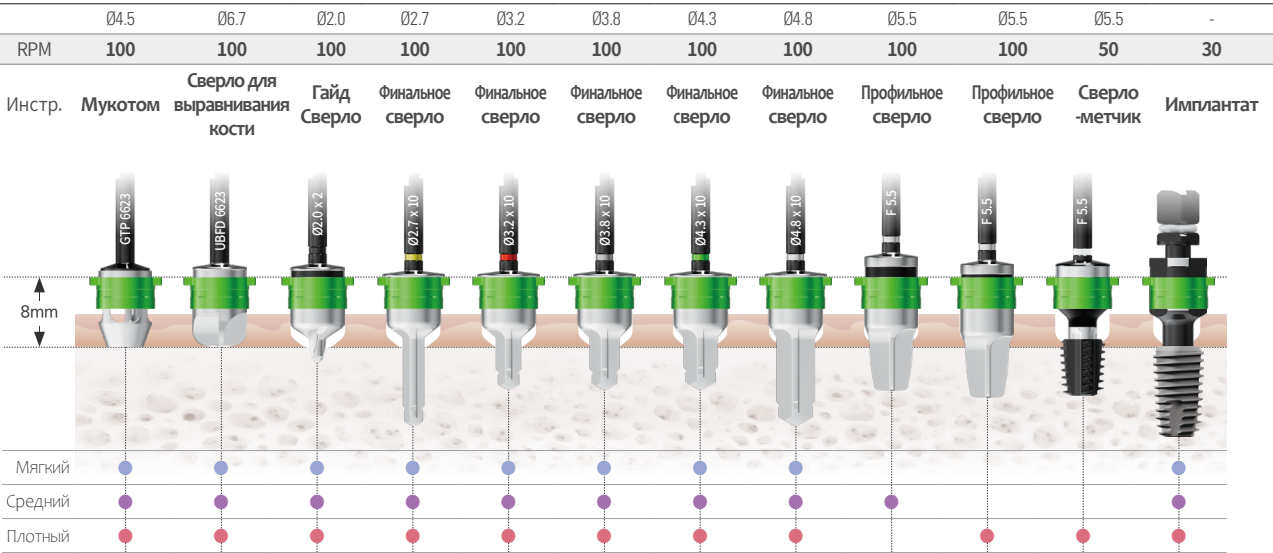

Ø6.0 Имплантат

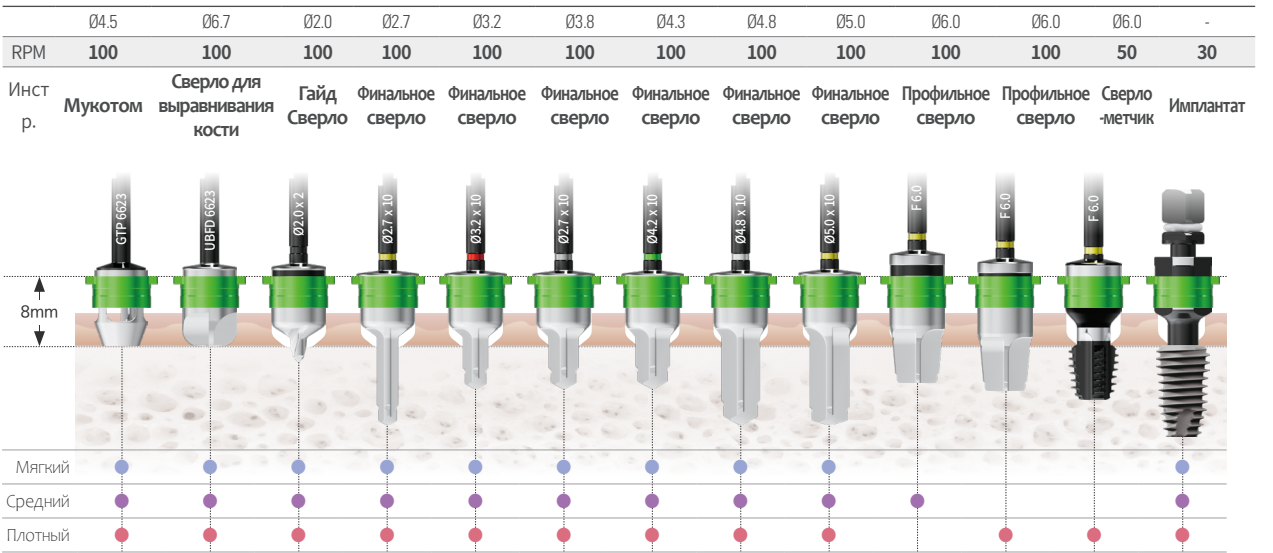


Ø6.5 Имплантат

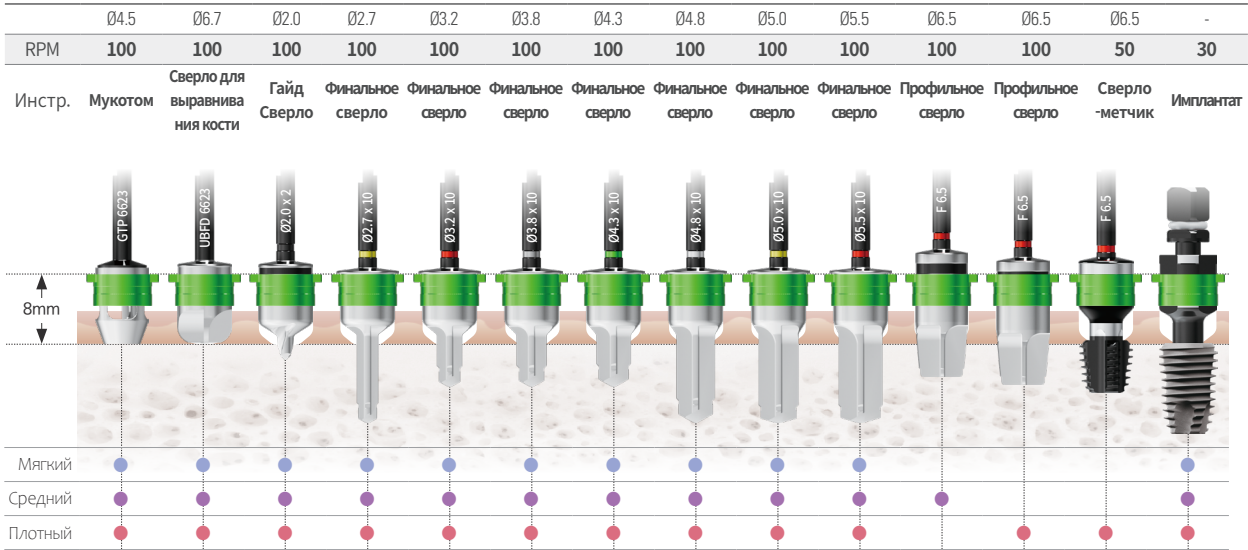


UFIII Имплантат DIO NAVI Хирургический протокол Набор


Ø3.0
Имплантат

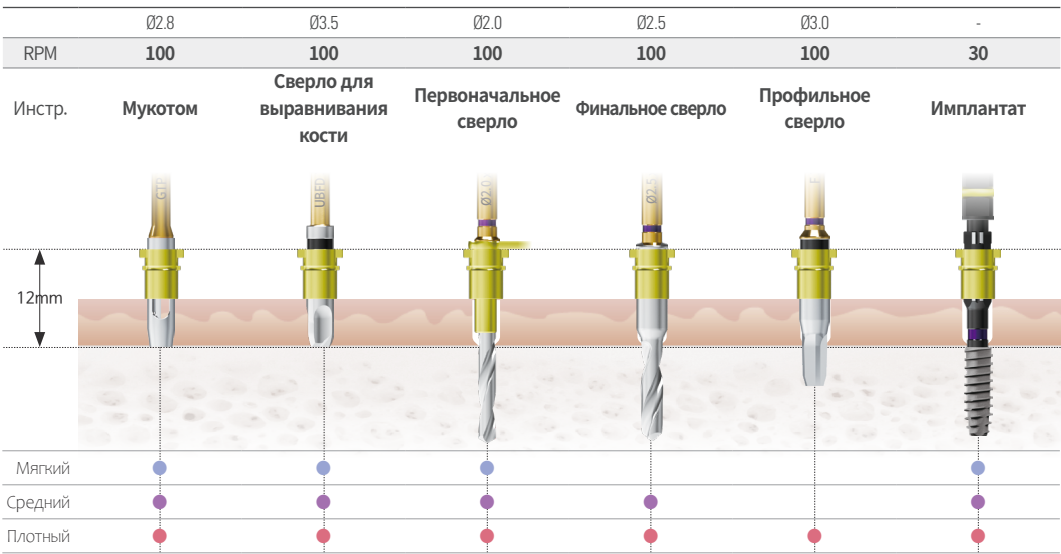


Ø3.3
Имплантат

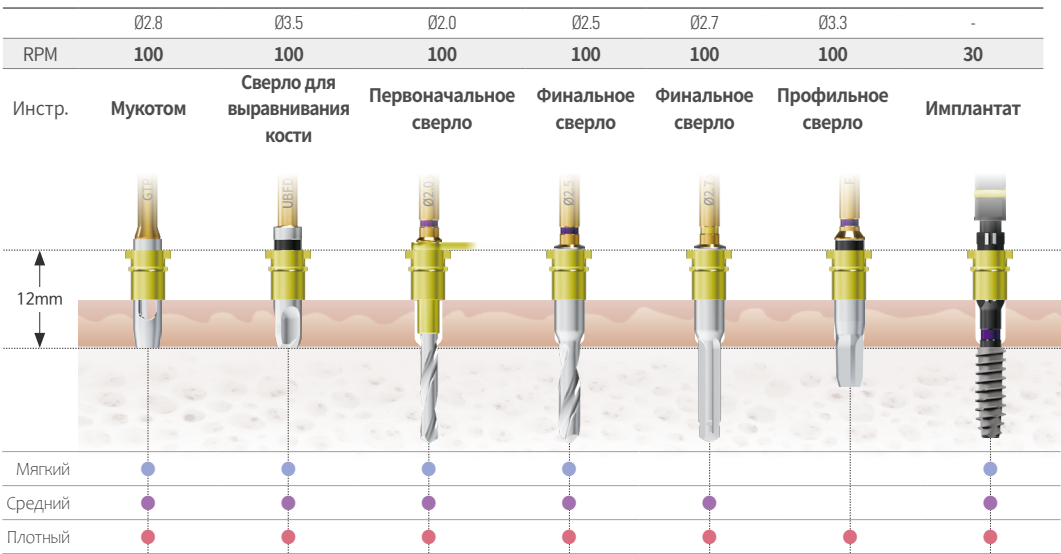


Ø3.8
Имплантат

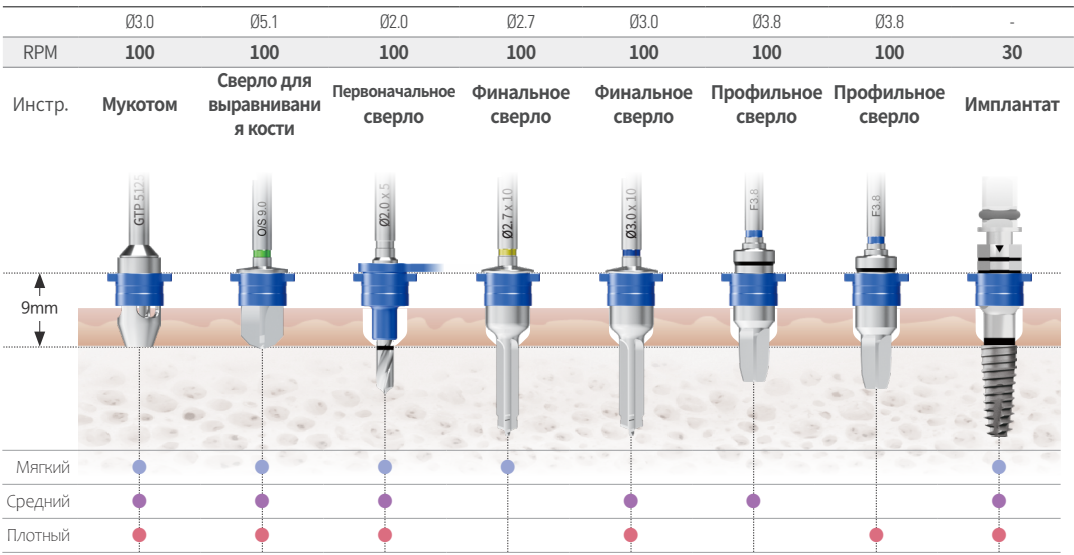


Ø4.0
Имплантат

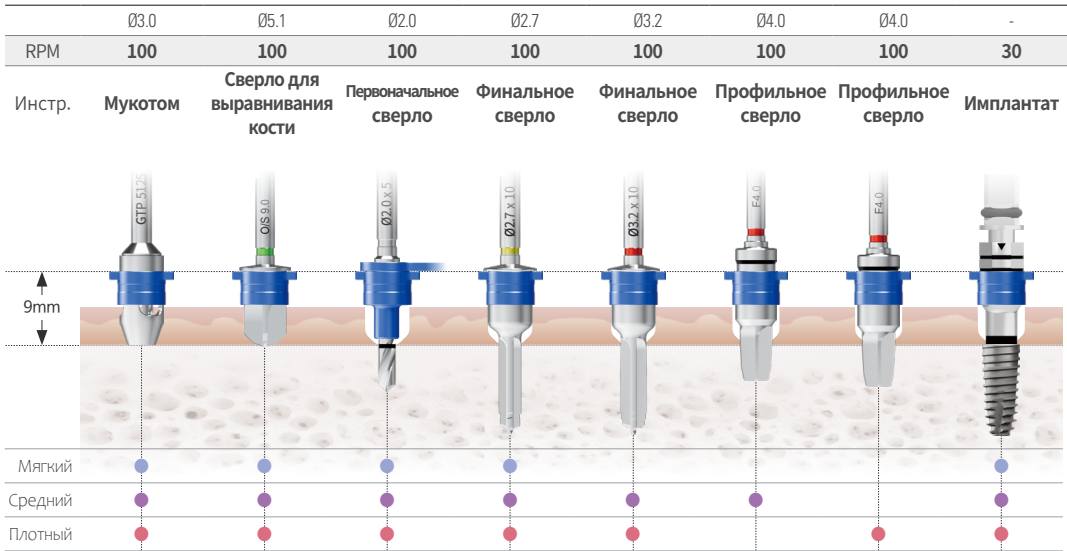

Ø4.5
Имплантат

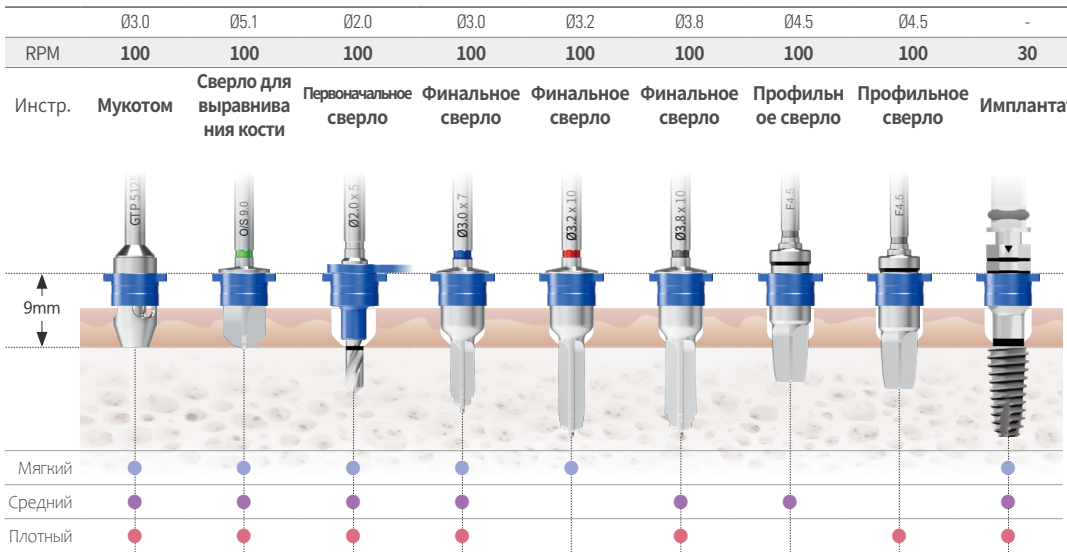


Ø5.0
Имплантат

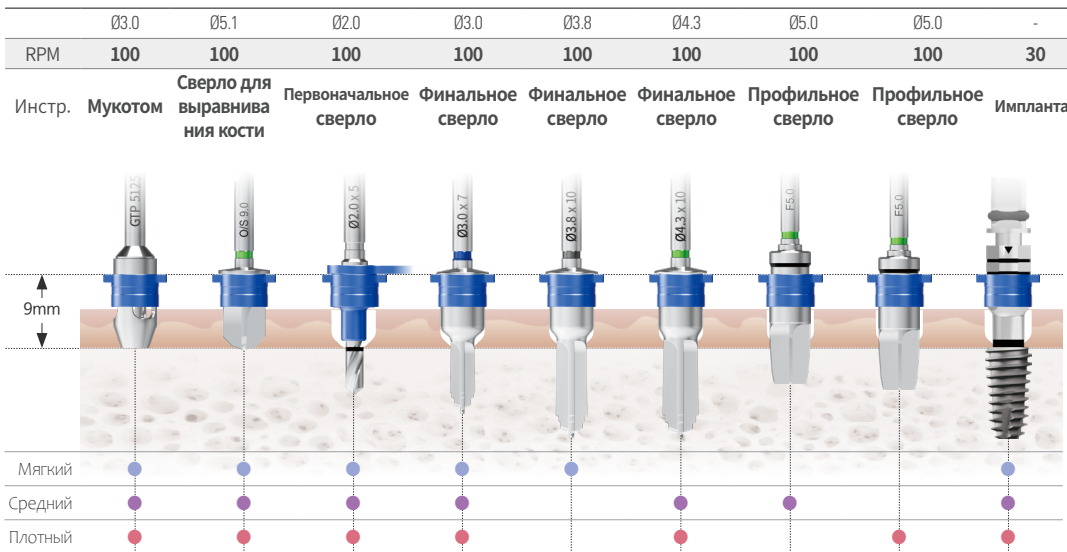


UFIII Имплантат DIO NAVI Хирургический протокол Набор


Ø5.5 Имплантат

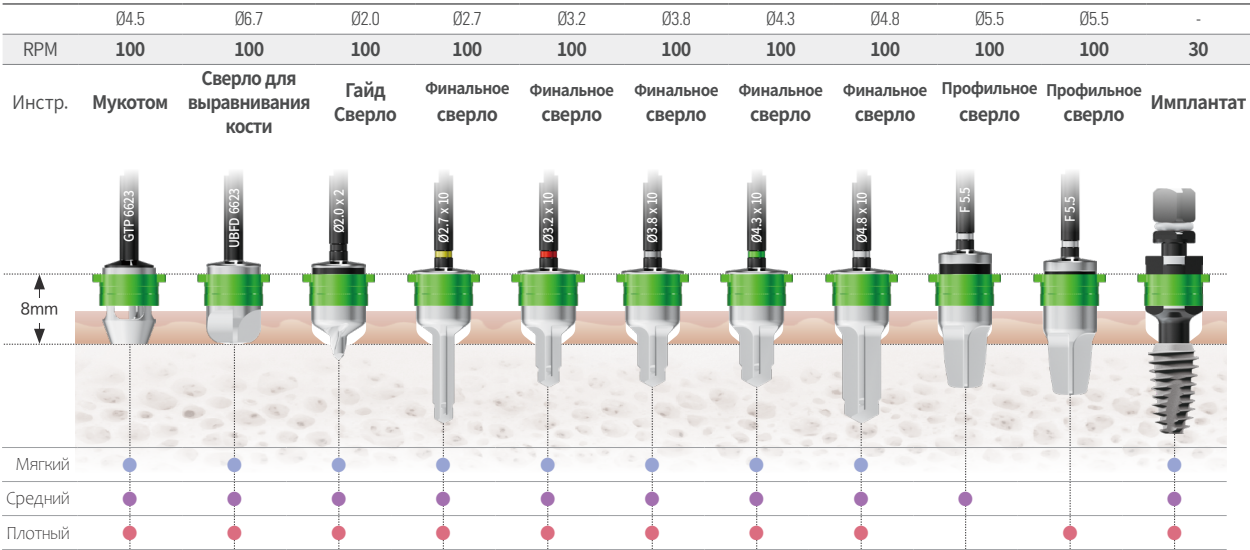

Ø6.0 Имплантат

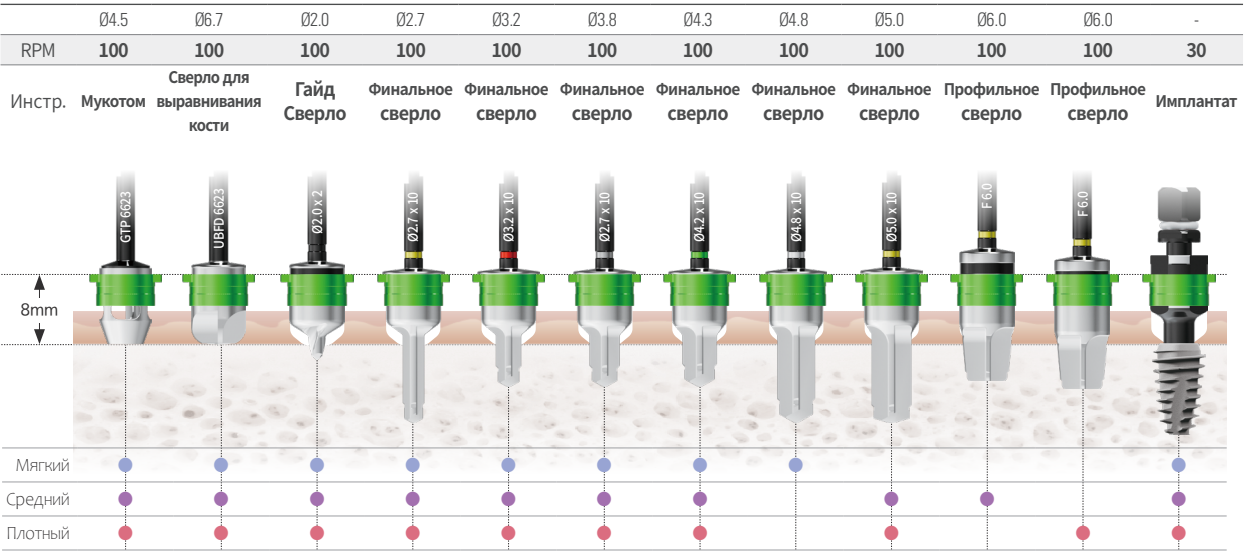

Ø6.5 Имплантат

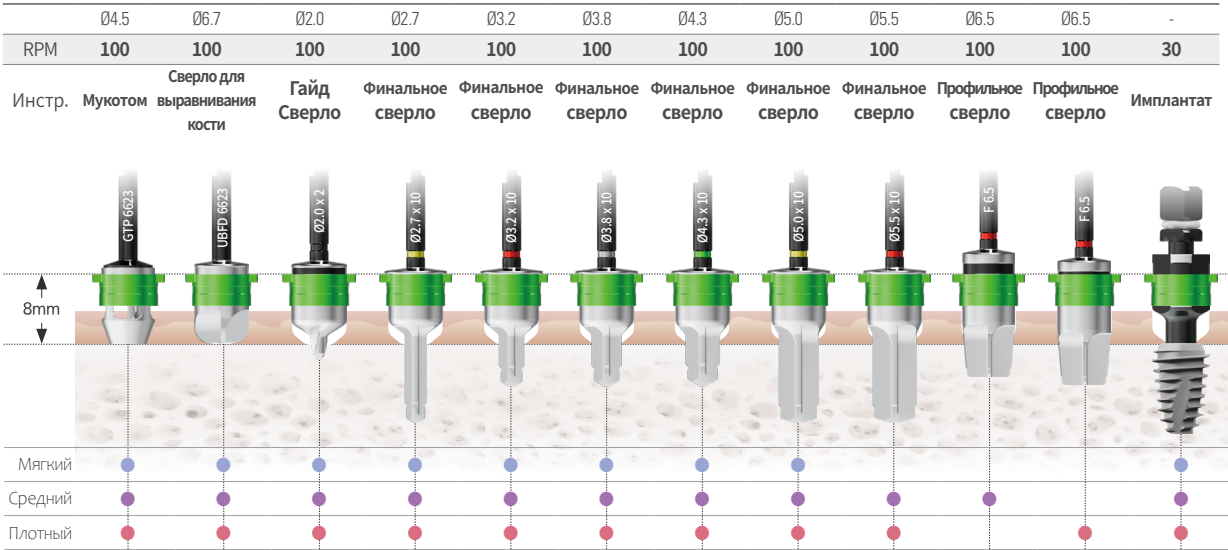


Хирургические инструменты Набор

Мукотом

Используется для разреза десны и удаления мягких тканей в области установки имплантата.

※ Рекомендуемая скорость вращения: 100

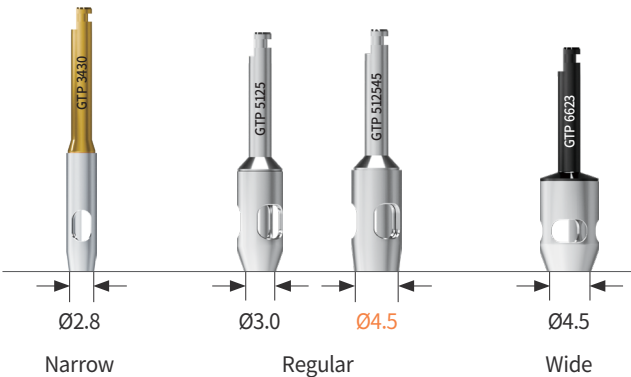

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Тип	Narrow	Regular		Wide
Диаметр	Ø2.8	Ø3.0	Ø4.5	Ø4.5
	GTP 3430	GTP 5125	GTP 512545	GTP 6623

Сверло для выравнивания кости

Используется для выравнивания неровной или наклонной альвеолярной кости, а также для удаления участка кости на необходимую глубину для обеспечения достаточной ширины вокруг имплантата.

※ Рекомендуемая скорость вращения: 100

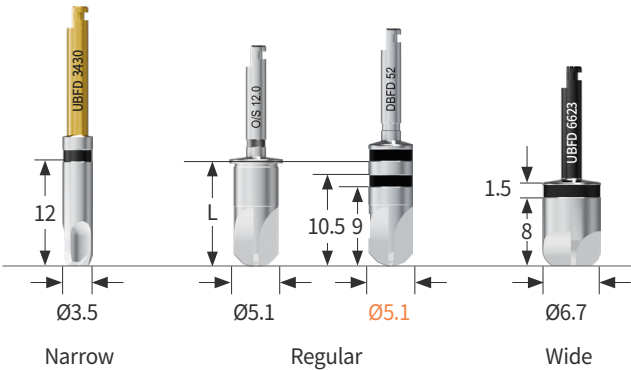

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Тип	Narrow	Regular				Wide
Диаметр	Ø3.5	Ø5.1				Ø6.7
Длина	12	9	10.5	12	12	8
	UBFD 3430	DBFD 5209	DBFD 5210	DBFD 5212	DBFD 52	UBFD 6623

Направляющее сверло

При ограниченном открывании рта можно использовать первоначальное сверло без трубки для фиксации сверла, возможно сверление только до глубины 5 мм.

※ Рекомендуемая скорость вращения: 100

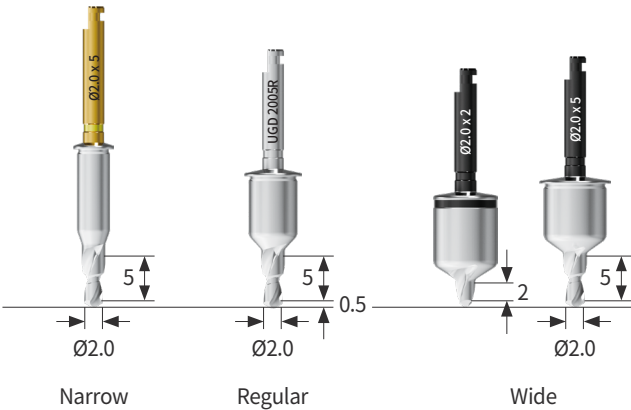


Ед.изм.мм

Тип	Narrow	Regular	Wide	
Диаметр	Ø2.0	Ø2.0	Ø2.0	
	UGD 2005N	UGD 2005R	UGD 2002W	UGD 2005W

Первоначальное сверло

Обеспечение точной пространственной позиции и вектора начального препарирования.

※ Рекомендуемая скорость вращения: 100

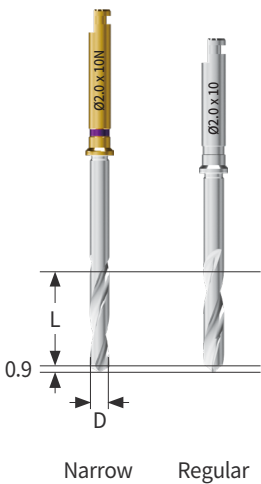

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Диаметр	Ø2.0						
Длина	5	7	8.5	10	11.5	13	15
Narrow		ISD 2007N	ISD 2008N	ISD 2010N	ISD 2011N	ISD 2013N	ISD 2015N
Regular	ISD 2005	ISD 2007	ISD 2008	ISD 2010	ISD 2011	ISD 2013	ISD 2015

Начальная позиционирующая фреза

Используется избирательно при сильно наклонённой альвеолярной кости, например, при немедленной имплантации после удаления зуба.

※ Рекомендуемая скорость вращения: от 300 об/мин и выше
(обязательно использование ирригации и трубки для фиксации сверла)

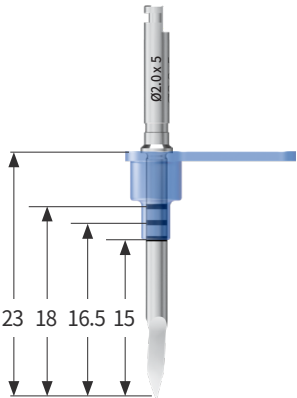

Ед.изм.мм

Диаметр	Ø2.0
Тип	Regular
Длина 10	IPD 2005

Трубка для фиксации сверла

Используется для стабильного и точного сверления начальным сверлом без вибрации и смещения.




*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Тип	Narrow	Regular			Wide
Диаметр	Ø2.0	Ø2.0			Ø2.0
Длина	11	6	8	11	4
	UDTE 10	UDT 20	UDTE 20	UDTL 20	UDT 53
Цвет	>XXXXXXK<	>XXXXXXK<			>XXXXXXK<

Финальное сверло (Narrow)

- Используется без направляющей трубки, постепенно расширяя диаметр в соответствии с размером имплантата, следуя каналу, созданному предыдущим сверлом.

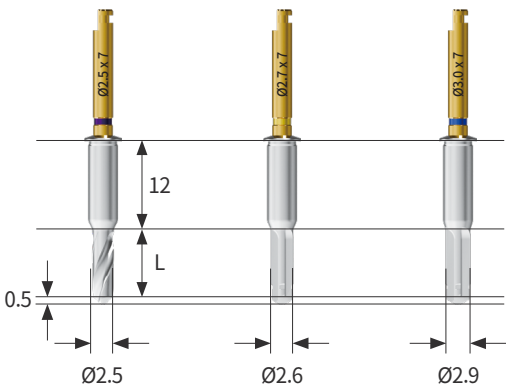

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

N

Narrow			
Диаметр	Ø2.5	Ø2.6	Ø2.9
Длина 7	USD 2507DN	USD 2707DN	USD 3007DN
8.5	USD 2508DN	USD 2708DN	USD 3008DN
10	USD 2510DN	USD 2710DN	USD 3010DN
11.5	USD 2511DN	USD 2711DN	USD 3011DN
13	USD 2513DN	USD 2713DN	USD 3013DN
15	USD 2515DN	USD 2715DN	USD 3015DN
Цвет	Фиолетовый	Жёлтый	Синий

Финальное сверло (Regular)

- Используется без направляющей трубки, постепенно расширяя диаметр в соответствии с размером имплантата, следуя каналу, созданному предыдущим сверлом.

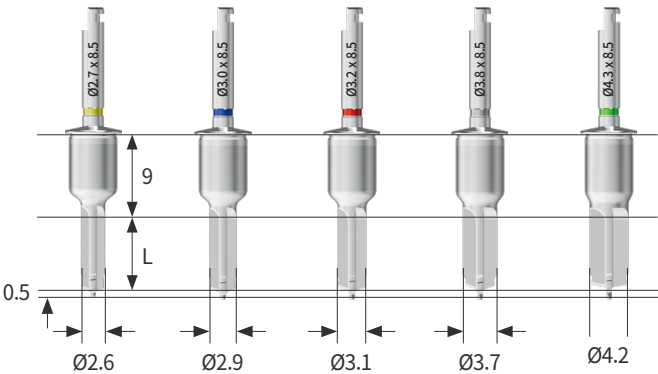

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

R

Regular					
Диаметр	Ø2.6	Ø2.9	Ø3.1	Ø3.7	Ø4.2
Длина 5	USD 2705	USD 3005	USD 3205	USD 3805	USD 4305
7	USD 2707	USD 3007	USD 3207	USD 3807	USD 4307
8.5	USD 2708	USD 3008	USD 3208	USD 3808	USD 4308
10	USD 2710	USD 3010	USD 3210	USD 3810	USD 4310
11.5	USD 2711	USD 3011	USD 3211	USD 3811	USD 4311
13	USD 2713	USD 3013	USD 3213	USD 3813	USD 4313
15	USD 2715	USD 3015	USD 3215	USD 3815	USD 4315
Цвет	Жёлтый	Синий	Красный	Серый	Зеленый

Финальное сверло (Wide)

- Используется без направляющей трубки, постепенно расширяя диаметр в соответствии с размером имплантата, следуя каналу, созданному предыдущим сверлом.

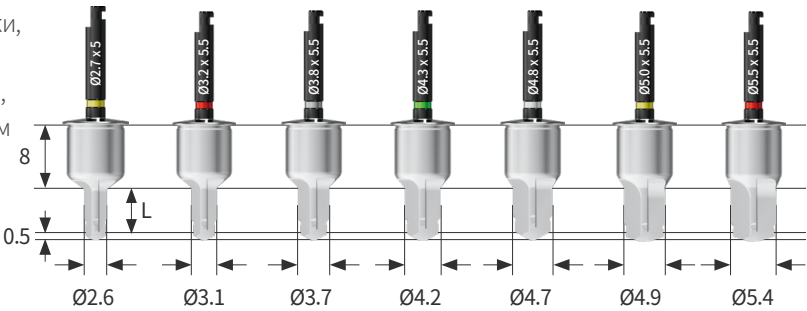

Ед.изм.мм

W


Wide							
Диаметр	Ø2.6	Ø3.1	Ø3.7	Ø4.2	Ø4.7	Ø4.9	Ø5.4
Длина 5.5	USD 2705DW	USD 3205DW	USD 3805DW	USD 4305DW	USD 4805DW	USD 5005DW	USD 5505DW
7	USD 2707DW	-	-	-	USD 4807DW	USD 5007DW	USD 5507DW
8.5	USD 2708DW	-	-	-	USD 4808DW	USD 5008DW	USD 5508DW
10	USD 2710DW	-	-	-	USD 4810DW	USD 5010DW	USD 5510DW
Цвет	Жёлтый	Красный	Серый	Зеленый	Белый	Жёлтый	Красный

Хирургические инструменты Набор

Профильное сверло

Используется для расширения кортикальной кости в плотных участках (D1, D2), чтобы предотвратить избыточный крутящий момент при установке имплантата.

※ Рекомендуемая скорость вращения: 100

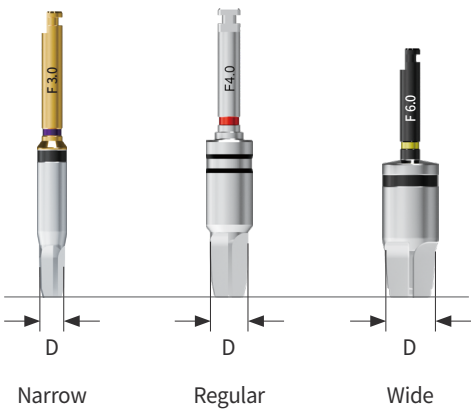


Ед.изм.мм

Тип	Narrow		Regular				Wide		
Диаметр	Ø2.9	Ø3.2	Ø3.8	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø5.9	Ø6.4
	GNPD 3005DW	GNPD 3305DW	SGPD 38	SGPD 40	SGPD 45	SGPD 50	GPD 5505DW	GPD 6005DW	GPD 6505DW
Цвет	Фиолетовый	Жёлтый	Синий	Красный	Серый	Зеленый	Белый	Жёлтый	Красный

Конический метчик

Используется для расширения кортикальной кости в плотных участках (D1, D2), чтобы предотвратить избыточный крутящий момент при установке имплантата.

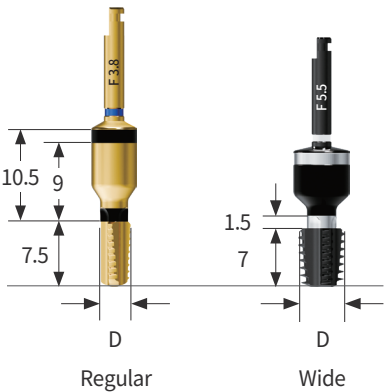

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Тип	Regular				Wide		
Диаметр	Ø3.8	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø5.9	Ø6.4
	GTD 3815	GTD 4015	GTD 4515	GTD 5015	GTD 5515DW	GTD 6015DW	GTD 6515DW
Цвет	Синий	Красный	Фиолетовый	Зеленый	Белый	Жёлтый	Красный

Боковая режущая фреза

Применяется для удаления кости, мешающей установке абатмента (включая заживляющий абатмент).

- ※ Рекомендуемая скорость вращения: 800
- ※ Используется обязательно перед установкой имплантата

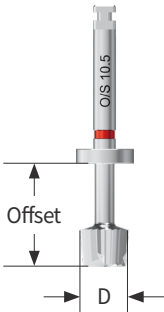

*Приобретается отдельно


Ед.изм.мм

Тип	Narrow	Regular		
Диаметр	Ø3.5	Ø5.15		
Offset	12	9	10.5	12
	GSCD 2912	GSCD 4609	GSCD 4610	GSCD 4612
Цвет	-	Зеленый	Красный	Серый

Сверло для обеспечения профиля

Предназначено для удаления кости, мешающей установке абатмента или H-Scanbody.

- При вращении сверла на 360° формируется профиль под абатмент.

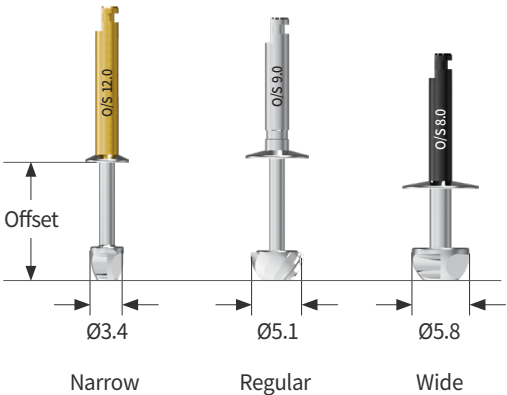

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Тип	Narrow	Regular	Wide
Диаметр	Ø3.4	Ø5.1	Ø5.8
Offset 8	-	-	UAPD 5822
9	-	UAPD 5123	-
9.5	-	-	UAPD 5823
10.5	-	UAPD 5124	-
12	UAPD 3428	UAPD 5126	-


Хирургические инструменты Набор

Удлинитель сверла (Набор)

Используется для удлинения сверла на 15.5 мм и удобства работы во время хирургической процедуры.

- Комплектация : Сверло Extension (DE 15) + Cover (DEC 07)
- ※ Возможна покупка отдельных компонентов.

Код	DECS 15
-----	---------

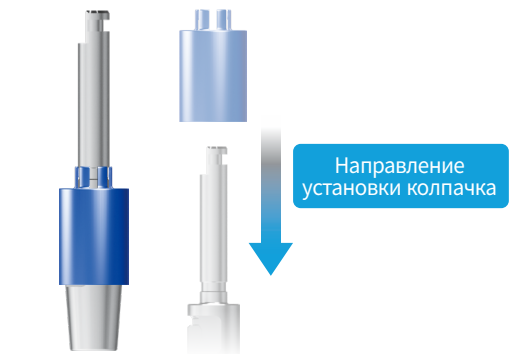

Удлинитель соединения

Предназначен для удлинения коннектора при установке имплантата.


Ед.изм.мм		
Диаметр	Ключ-трещотка	Машина
Длина 8	CE 6508A	CE 6508M
12	CE 6512A	CE 6512M



Коннектор для удаления имплантата

Применяется для разъединения коннектора имплантата и втулки (Sleeve), если они зафиксированы.

- Поверните головку коннектора в направлении окна (Window), затем открутите её в обратную сторону для снятия
- Поставляется в собранном виде: Body / Housing / Handle.
- ※ При использовании поверните треугольный болт по часовой стрелке до конца, оставив окно (Window) открытым.

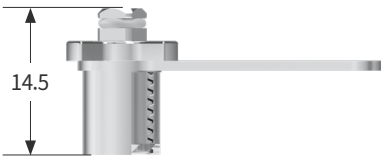

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм	
Код	ICR

Хирургические инструменты Набор

Отвертка/ключ (Машина)

Используется для фиксации винтов с внутренним шестигранником Hex 1.2 при установке верхней конструкции или других компонентов.

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Тип	Hex 1.2
Длина 5.5	MD 1159
8.5	MD 1222
16.5	MD 1230
20.5	MD 1234
25.5	MD 1239




Отвертка/ключ (Ключ -трещотка)

Используется для фиксации винтов с внутренним шестигранником Hex 1.2 при установке верхней конструкции или других компонентов.

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Тип	Hex 1.2	Hex 1.2 (Квадрат)
Длина 5	HD 1205A	-
10	HD 1150A	SHD 1150
15	HD 1155A	SHD 1155
20	HD 1220A	SHD 1220
25	HD 1225A	SHD 1225
30	HD 1230A	SHD 1230

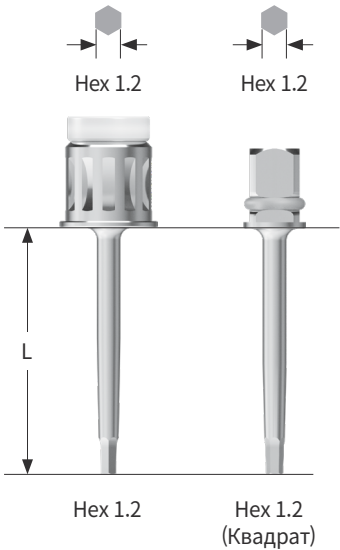

Динамометрический ключ

Используется для фиксации имплантата, а регулировки его позиции, а также для затяжки абатментов и винтов.


- При установке бара необходимо затянуть до линии, соответствующей требуемому значению крутящего момента.



Код	DTW 0080
-----	----------

Набор DIO Master (UF 05) Набор


- Сверла с исключительной режущей силой и долговечностью
- Для имплантатов UFII Narrow Ø3.0 Ø3.3
UFII Regular Ø3.8 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0

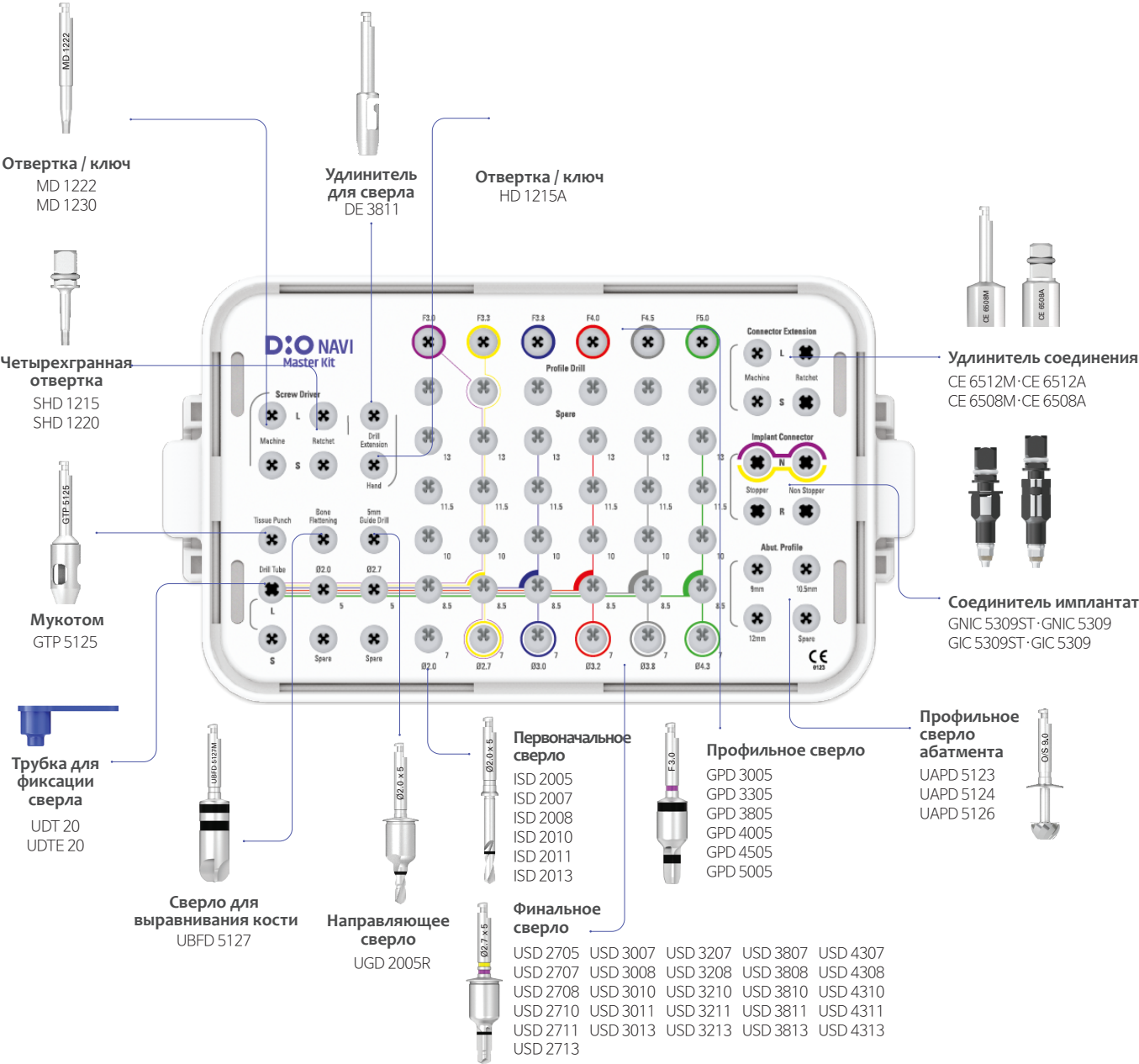

Набор DIO NAVI Flapless Crestal Sinus (SMK 02) Набор

Методика Транскрестального доступа

- На основе низкоскоростного сверления (не более 10 об/мин) с применением фиксатора выполняется безопасное и контролируемое вскрытие нижней кортикальной стенки с последующим поднятием мембраны.
- Применяется для имплантатов UFII / UFIII Regular Ø3.8, 4.0, 4.5, 5.0.

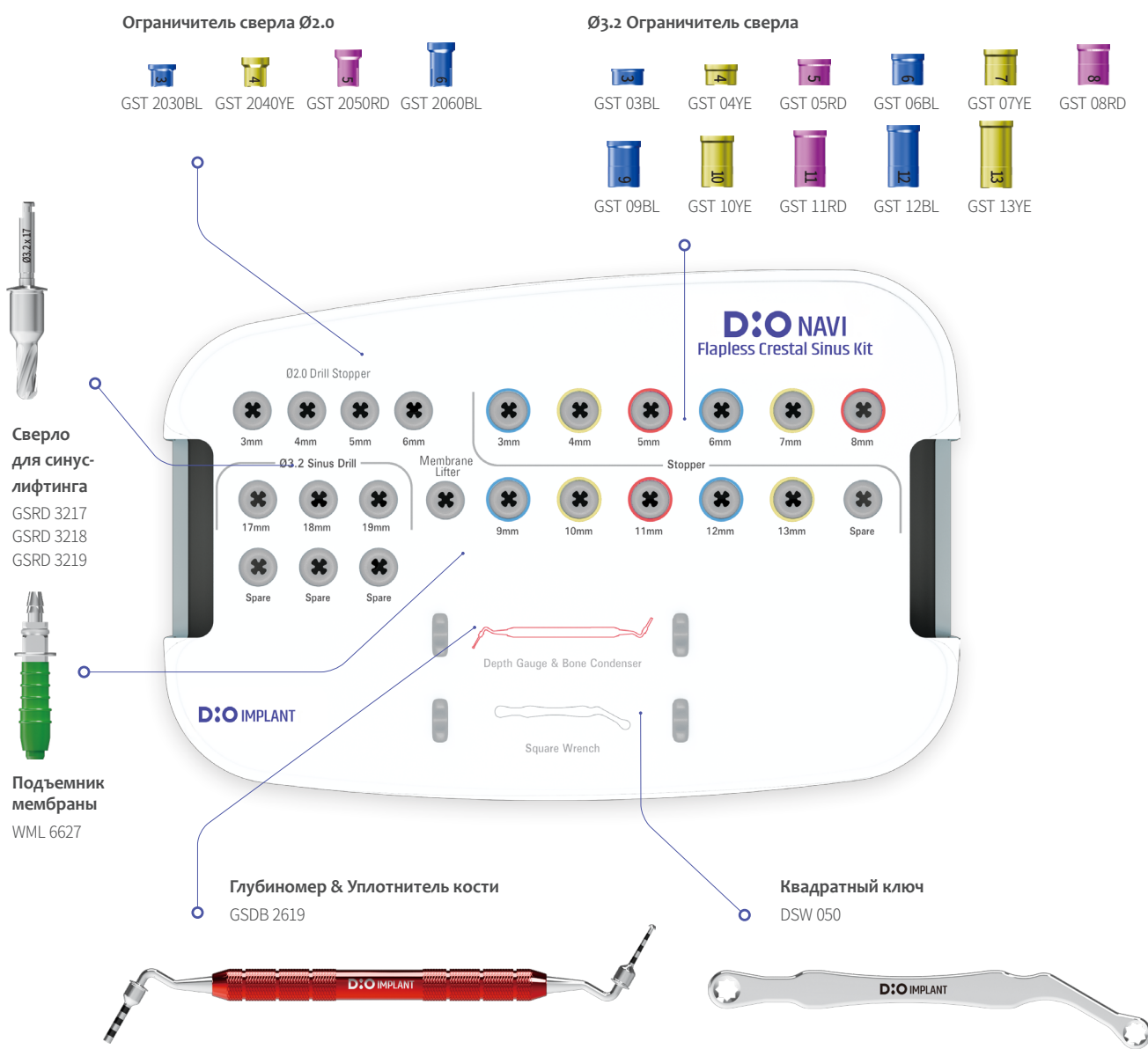

Ограничитель сверла Ø2.0

Используется в наборе DIO NAVI Master S совместно с начальным сверлом Ø2.0 для фиксации и поддержания постоянной глубины во время сверления.

- Сформирован с шагом 1 мм в диапазоне от 3 до 6 мм и имеет анодированное покрытие и лазерную маркировку в зависимости от длины.



Ед.изм.мм				
Код	GST 2030BL	GST 2040YE	GST 2050RD	GST 2060BL
				

Сверло для синус-лифтинга

Во время препарирования аккуратно удаляет костную ткань, а закруглённая форма режущей части предотвращает повреждение мембраны.

- Для контроля глубины необходимо использовать фиксатор.
- Рекомендуется низкоскоростное сверление (не более 10 об/мин).



*Приобретается отдельно			Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø2.8		Ø3.2	
Длина 17	GSRD 2817		GSRD 3217	
18	GSRD 2818		GSRD 3218	
19	GSRD 2819		GSRD 3219	
21	GSRD 2821		GSRD 3221	

Хирургические инструменты Набор

Ø3.2 Ограничитель сверла (Гребневой подход)

Используется в наборе Flapless Crestal Sinus совместно с синусной фрезой для фиксации и поддержания постоянной глубины во время процедуры.

- Сформирован с шагом 1 мм в диапазоне от 3 до 13 мм и имеет анодированное покрытие и лазерную маркировку в зависимости от длины.



Ед.изм.мм						
Код	GST 03BL	GST 04YE	GST 05RD	GST 06BL	GST 07YE	GST 08RD
						
Код	GST 09BL	GST 10YE	GST 11RD	GST 12BL	GST 13YE	
						

Глубиномер & Уплотнитель кости

Используется для проверки толщины остаточной кости и целостности мембраны, а также для введения костного материала в сформированную полость синуса.

- После удаления гида необходимо установить фиксатор.



Код	GSDB 2619
-----	-----------

Подъемник мембраны

Используется для подачи физиологического раствора через соединённую силиконовую трубку в отверстие, сформированное сверлом.



Код	WML 6627
-----	----------

Квадратный ключ


Используется для фиксации подъемника мембраны.



Код	DSW 050
-----	---------

Трубка для ирригации


- Шприц приобретается отдельно.

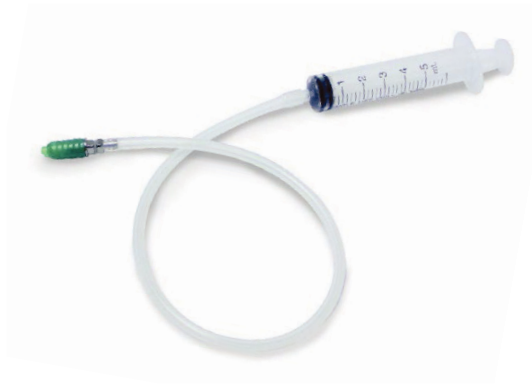

*Приобретается отдельно

Код	MLT 40300
-----	-----------

Хирургический набор для фиксации направляющего шаблона при полной адентии или при обширных дефектах, а также для обеспечения стабильного сверления в сложных клинических случаях.

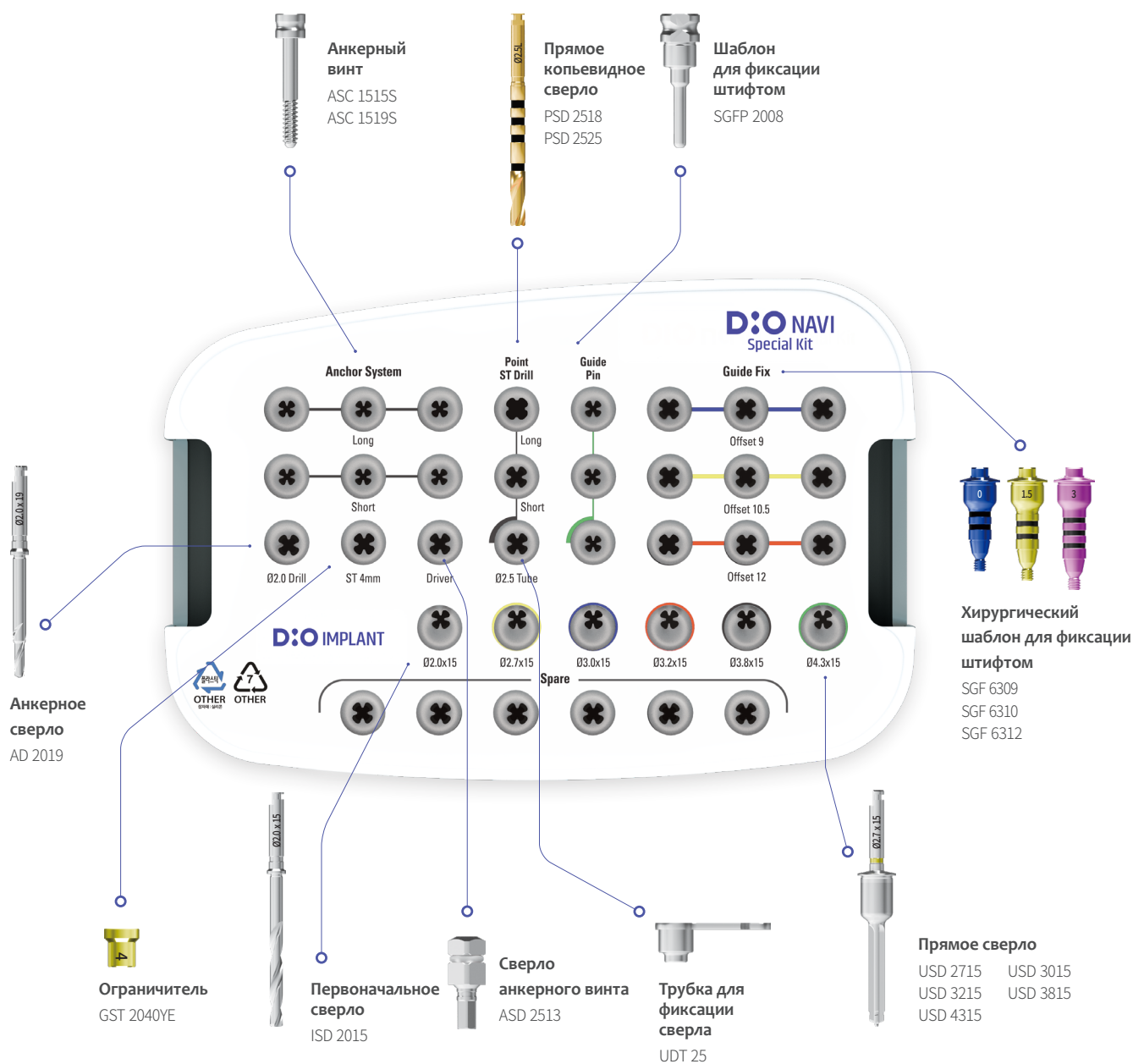

Анкерное сверло

Предназначено для формирования отверстия в кости с целью установки анкерного винта, фиксирующего хирургический шаблон.

Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø2.0
Код	AD 2019



Ограничитель

Устройство, устанавливаемое на стартовое сверло диаметром Ø2.0 для поддержания постоянной глубины препарирования в ходе хирургического вмешательства


• Удерживает глубину во время операции		Ед.изм.мм
Диаметр	Ø2.0	
Код	GST 2040YE	



Анкерный винт

Используется для фиксации хирургического гида.


Ед.изм.мм		
Диаметр	Ø2.0	
Длина	15	19
Код	ASC 1515S	ASC 1519S

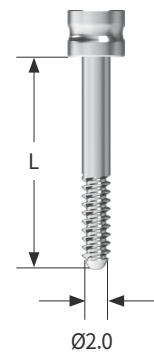

Сверло анкерного винта

Используется в сочетании с анкерным винтом.

Ед.изм.мм	
Код	ASD 2513

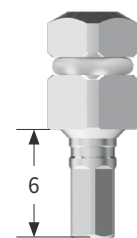

Хирургические инструменты Набор

Первоначальное сверло

Используется для формирования начального отверстия

Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø2.0
Код	ISD 2015




Прямое копьевидное сверло

Предназначено для формирования направляющего отверстия в точном положении (специальная форма предотвращает проскальзывание по поверхности кости).



- Используется с направляющей трубкой для фиксации сверла (UDT 25).

Ед.изм.мм		
Диаметр	Ø2.5	
Длина	10	15
Код	PSD 2518	PSD 2525

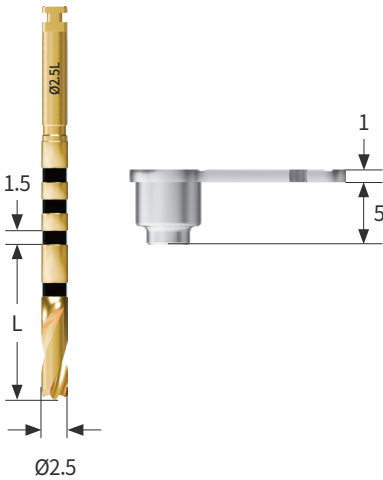

Прямое сверло

- Используется без направляющей трубки, постепенно расширяя диаметр в соответствии с размером имплантата, следуя каналу, созданному предыдущим сверлом.

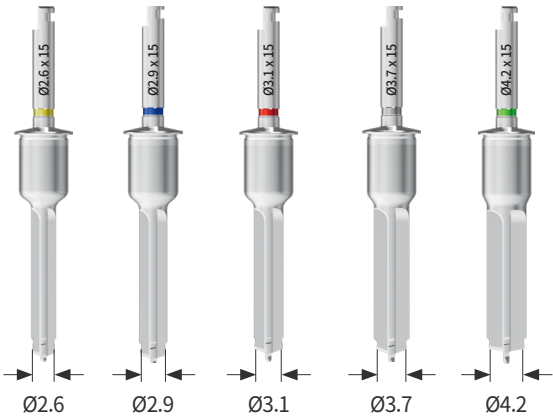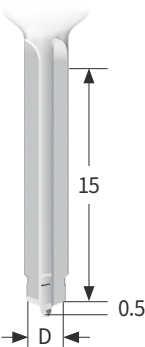


Длина		15			
USD 2715		USD 3015	USD 3215	USD 3815	USD 4315
Цвет		Жёлтый	Синий	Красный	Серый
					Green

Ед.изм.мм

Шаблон для фиксации штифтом

Используется для фиксации хирургического шаблона с помощью штифта, устанавливаемого в отверстие, сформированное после сверления Ø2.0 мм.
Обеспечивает стабильную фиксацию хирургического шаблона и предотвращает его смещение во время операции.

*Приобретается отдельно		Ед.изм.мм
Тип	Narrow	Regular
Код	SGFP 2008N	SGFP 2008

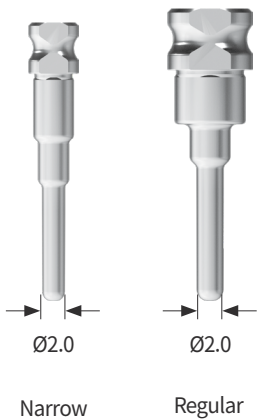

Хирургический шаблон для фиксации штифтом

Используется для фиксации хирургического шаблона, соединяемого с ранее установленным имплантатом, чтобы предотвратить его смещение во время операции.





*Приобретается отдельно		Ед.изм.мм		
Тип	Narrow	Regular		
Offset	12	9	10.5	12
Код	SGF 4412	SGF 6309	SGF 6310	SGF 6312

Металлический игольчатый наконечник

Иглу для ирригации необходимо вводить на всю глубину костной полости для предотвращения термического повреждения кости и полного удаления частиц из альвеолярной лунки.

- При низкоскоростном сверлении (до 50 об/мин) рекомендуется выполнять ирригацию после каждого этапа сверления.

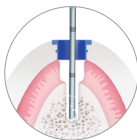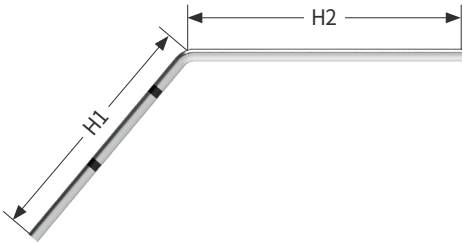

Игла введена до дна полости — подача раствора эффективна.



Игла не достигла дна — подача раствора затруднена.

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Высота 1	30	25
2	50	25
Код	MNTE	MNTL

Сверло для профилирования кости


Используется после установки имплантата для удаления избыточной кости вокруг шейки и обеспечения плотного прилегания абатмента (Healing).

Эффективно при операциях по хирургическому шаблону без разреза, когда уровень кости трудно определить визуально.

- Применяется на втором этапе после удаления винта-заглушки для подготовки ложа под абатмент (Healing).
- Обеспечивает точное прилегание между имплантатом и абатментом без зазора, способствуя восстановлению трансмукозной зоны.

*Приобретается отдельно Ед.изм.мм

Тип	Narrow	Regular		
Диаметр	Ø4.6	Ø5.6	Ø6.6	Ø7.6
Длина 8	-	BPD 5608G	BPD 6608G	BPD 7608G
16	BPD 4616GN	-	-	-

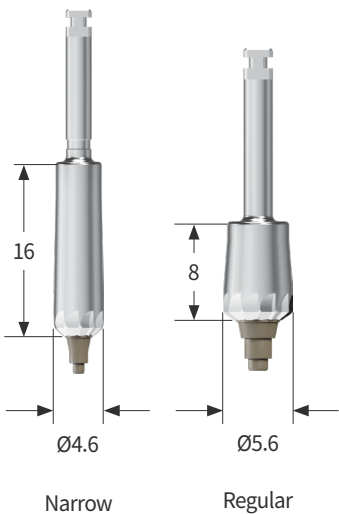


Направляющий винт

Используется для фиксации хирургического шаблона при операциях на беззубых или частично беззубых участках.

- После установки может служить ориентиром для сканирования и планирования по данным КТ.
 - Используется Narrow Соединитель имплантата (Винт Cover - Отвертка Hex 1.2)
 - Момент затяжки : D1 : 10~35Ncm / D2 : 5~25Ncm / D3 : 2~15Ncm
 - Комплектация : Направляющий винт + Направляющий винт Cover
- ※ Рекомендуемый срок установки: до 3 недель.

*Приобретается отдельно Ед.изм.мм

Код	GS 1608
-----	---------

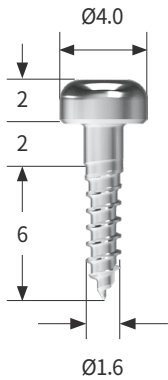


Инструмент для снятия уплотнителя абатмента

Используется для удаления уплотнителя из внутренней полости отверстия абатмента.

- Удаление тефлонового или смолистого материала: нажать инструментом Remover на уплотнитель в отверстии абатмента и, вращая по часовой стрелке, удалить материал.
- Удаление силиконового материала: нажать инструментом Remover и аккуратно извлечь уплотнитель из отверстия абатмента.

*Приобретается отдельно Ед.изм.мм

Код	ASR 18H
-----	---------

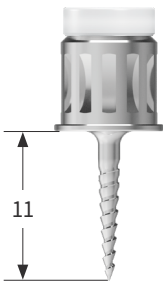


Хирургические инструменты Набор

Направляющая муфта

- Вращающаяся модель: оснащена ребром для предотвращения выпадения, что повышает фиксацию направляющего шаблона.

※ Не взаимозаменяема: используется только с вращающимся шаблоном.

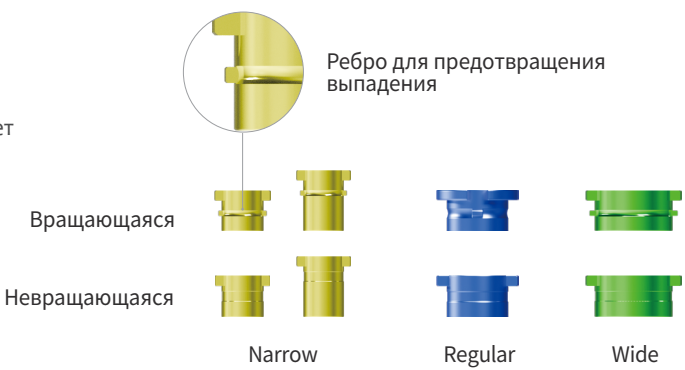

Размер		Narrow		Regular	Wide
Вращающаяся	Одиночный	GS 36YE	GSL 36YE	GS 53BL	GS 68GN
	10 Set	GS 36YE_10	GSL 36YE_10	GS 53BL_10	GS 68GN_10
	50 Set	GS 36YE_50	GSL 36YE_50	GS 53BL_50	GS 68GN_50

Анкерная втулка

- Вращающаяся : оснащена ребром для предотвращения выпадения, что повышает фиксацию направляющего шаблона.

※ Не взаимозаменяема: используется только с вращающимся шаблоном.



Размер	Одиночный	10 Set	50 Set
Вращающаяся	AS 20	AS 20_10	AS 20_50
Вращающаяся (Длинный)	ASL 20	ASL 20_10	ASL 20_50

Фреза для направляющей гильзы

- **Направляющая** : используется для фиксации направляющей втулки в шаблоне.
※ Не взаимозаменяем: вращающаяся Jig применяется только с вращающейся втулкой.
- **Фреза** : после фиксации в гильзе удаляет заусенцы с верхней поверхности вращательным движением




Размер		Narrow	Regular	Wide
Jig для сборки втулки	Вращающаяся	GSJN	GSJR	GSJW
	Невращающаяся	GSJCN	GSJCR	GSJCW
Фреза		GPCN	GPCR	GPCW

06

Остальные Наборы


- 218 Набор New Dr.SOS+ (DRS 05)
- 224 Набор Sinus Master (SMK 01)
- 232 Набор Sinus Lift (SLK 01)
- 233 Набор Osteotome (OST 01)
- 234 Набор Bone Expander (BEP 00)
- 235 Набор UFII Prosthetic (UFP 02)

Обеспечивает безопасное и быстрое устранение проблем, возникающих во время установки имплантата или протезирования, таких как поломка винта из-за чрезмерного Torque, износ соединения или застревание инородных частиц.

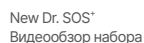


A long, thin, curved surgical implant with a metallic finish. It features four circular holes with cross-shaped cutouts. The text "D:O IMPLANT" is printed in the center. To the left of the center, the dimensions "Ø4.5" and "Ø4.0" are listed. To the right of the center, the dimensions "Ø5.5-Ø7.0" are listed.

*Bottom Panel Компоненты

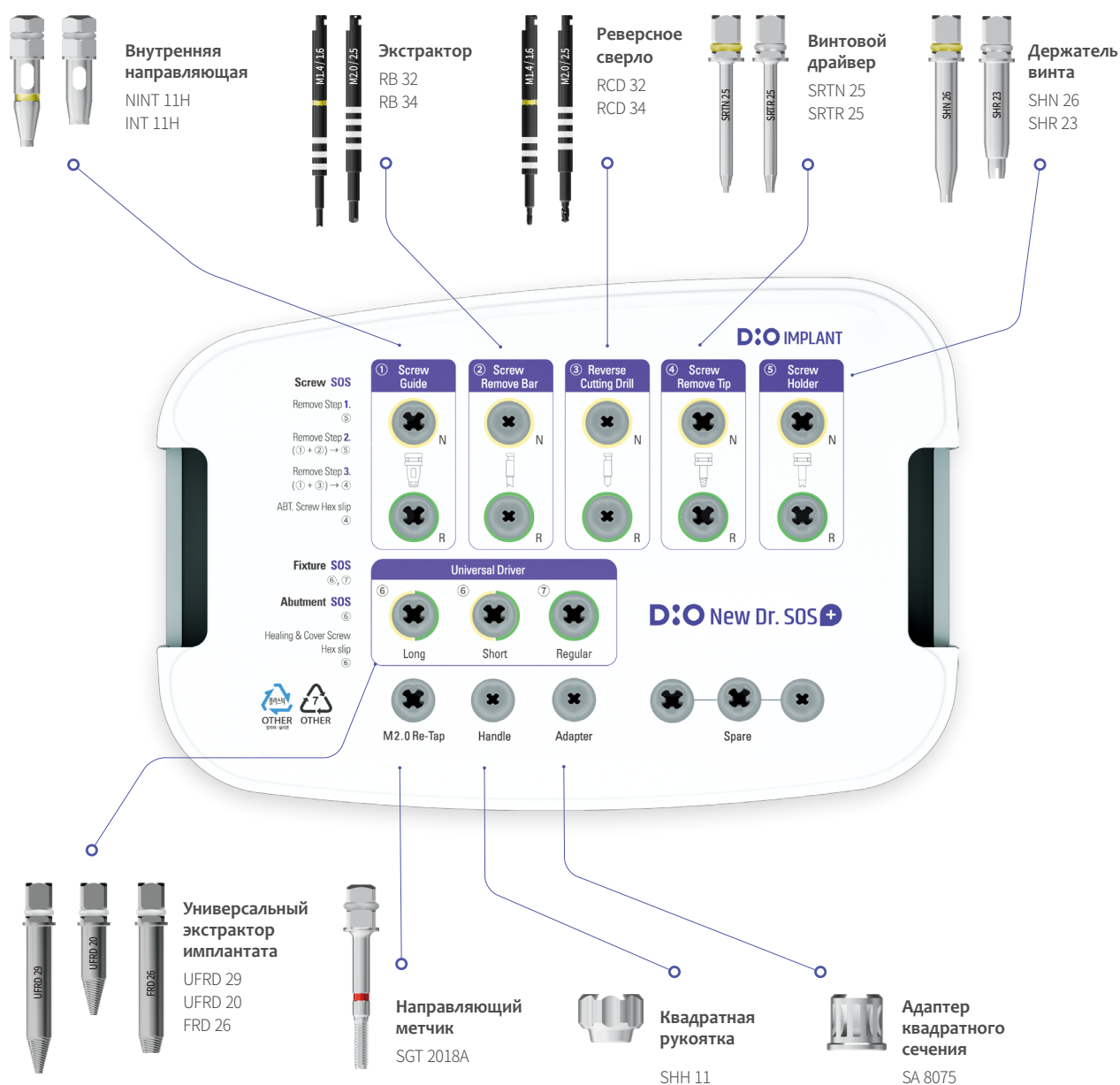

Внутренняя направляющая

Шаблон обеспечивает точное направление экстрактора и реверсного сверла во внутреннюю часть имплантата.

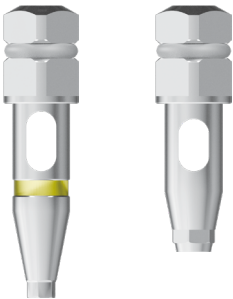

*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Sub. Narrow			Sub. Regular	
Тип	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex
	NINT 11H	NINT 11N	INT 11H	INT 11N
				
Non-Sub. 8°				
Тип	Octa		Non-Octa	
	INT 8Octa		INT 8N	
				

Внешний направлятель

Шаблон обеспечивает точное направление экстрактора и реверсного сверла во внутреннюю часть имплантата.



*Приобретается отдельно

Ед.изм.мм

Тип		Hex		
Hex	2.4	2.7	3.4	
	EXT 24	EXT 27	EXT 34	
				

Хирургические инструменты Набор

Реверсное сверло

После частичного введения кончика сверла в обломок винта остаток удаляется за счёт обратного вращения (при глубине более 1 мм).

- ※ Рекомендуемая скорость вращения: 1,200rpm / обратное вращение
- ※ Рекомендуется однократное использование сверла обратнорежущего.
- ※ Обязательно проводить ирригацию во время работы.

	Ед.изм.мм	
	Narrow	Regular
Тип	M1.4 / 1.6	M2.0 / 2.5
Код	RCD 32	RCD 34
		



Экстрактор

Механизм разблокировки пилот-тонического винта основан на введении шестигранного ключа в торцевое гнездо и передаче контролируемого крутящего момента через фрикционное соединение.

- ※ Рекомендуемая скорость вращения: 20 об/мин, обратное вращение

	Ед.изм.мм	
	Narrow	Regular
Тип	M1.4 / 1.6	M2.0 / 2.5
Код	RB 32	RB 34
		



Съемник винтов

При зафиксированном протезе: удалить винт специальным съемником и снять оттиск методом открытой ложки

※ Ручной / Ключ-трещотка

Ед.изм.мм		
	Narrow	Regular
Код	SRTN 25	SRTR 25
		




Держатель винта

Используйте держатель винта, чтобы надежно зафиксировать винт, и выполните процедуру снятия оттиска методом pick-up (открытой ложки)

※ Ручной режим

Ед.изм.мм		
	Narrow	Regular
Код	SHN 26	SHR 23
		

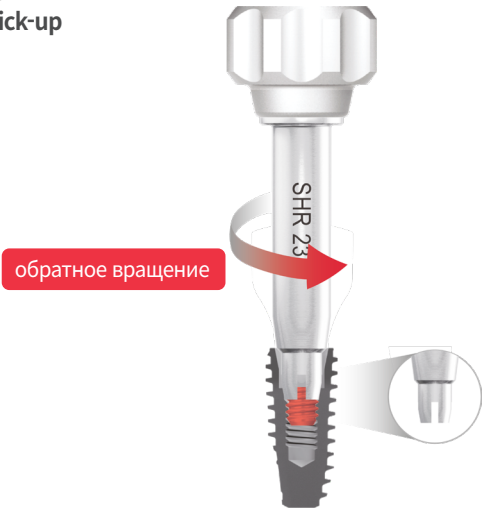

Хирургические инструменты Набор

Универсальный экстрактор имплантата

Позволяет легко удалить различные типы имплантатов одним драйвером.

※ обратное вращение

Код	Ед.изм.мм		
	UFRD 29	UFRD 20	FRD 26
			




Направитель винтового метчика

Используется для восстановления резьбы внутри имплантата в случае деформации, налипания посторонних веществ или повреждения соединения, когда установка винта затруднена.

• Используется вручную с квадратной рукояткой, без применения квадратного ключа.

※ Ручной режим

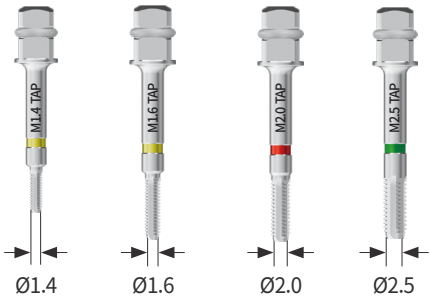

*Приобретается отдельно

Код	Ед.изм.мм			
	SGT 1418A	SGT 1618A	SGT 2018A	SGT 2518A
Цвет	Жёлтый	Жёлтый	Красный	Зеленый

Четырехгранная рукоятка


Используется для фиксации инструмента, применяемого в ручном режиме.



Код	SGH 11
-----	--------

Адаптер

Используется при вращении Universal Driver с помощью динамометрического ключа круглого типа.
(Верхняя часть — круглая, соединяется с головкой отвёртки, нижняя часть — квадратная.)
※ Не требуется при наличии квадратного динамометрического ключ (DTW 0080)

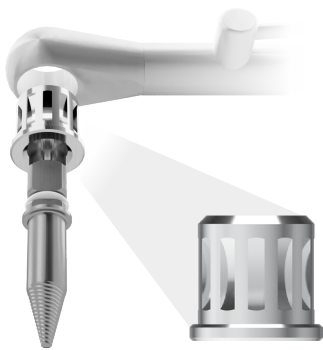

Код	SA 8075
-----	---------

Квадратный ключ

Зафиксируйте удаляемый имплантат в квадратном ключе и, нажимая универсальным драйвером, вращайте по часовой стрелке для извлечения



Код	SSW 050
-----	---------

Костный трепан



Используется для забора аутокости или удаления неудавшегося имплантата.
• В случаях плотной кости или хорошей остеоинтеграции удаление имплантата выполняется с помощью костного трепана, удаляя 2–3 мм кортикальной кости, после чего извлечение возможно с помощью экстрактора.



*Приобретается отдельно										Ед.изм.мм
	Narrow			Regular						
Размер	Ø3.0	Ø3.3		Ø3.8	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø5.9	Ø6.4
Диаметр 1	Ø3.2	Ø3.7		Ø4.0	Ø4.3	Ø4.7	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.2	Ø6.7
2	Ø4.0	Ø4.5		Ø4.8	Ø5.1	Ø5.5	Ø5.8	Ø6.3	Ø7.0	Ø7.5
	TRD 4032	TRD 4537		TRD 4840	TRD 5143	TRD 5547	TRD 5850	TRD 6355	TRD 7062	TRD 7567

Набор Sinus Master (SMK 01) Набор


- Синус-техника со скоростью 50-100 об/мин и установкой стоппера позволяет безопасно и быстро перфорировать нижнюю кортикальную пластину и приподнять мембрану
- Методика латерального доступа (Lateral Approach Technic)
При использовании можно выбрать круглое или трубчатое сверло. Благодаря высокоскоростному сверлению и фиксации фиксатором обеспечивается безопасное и быстрое выполнение отслаивания мембраны.

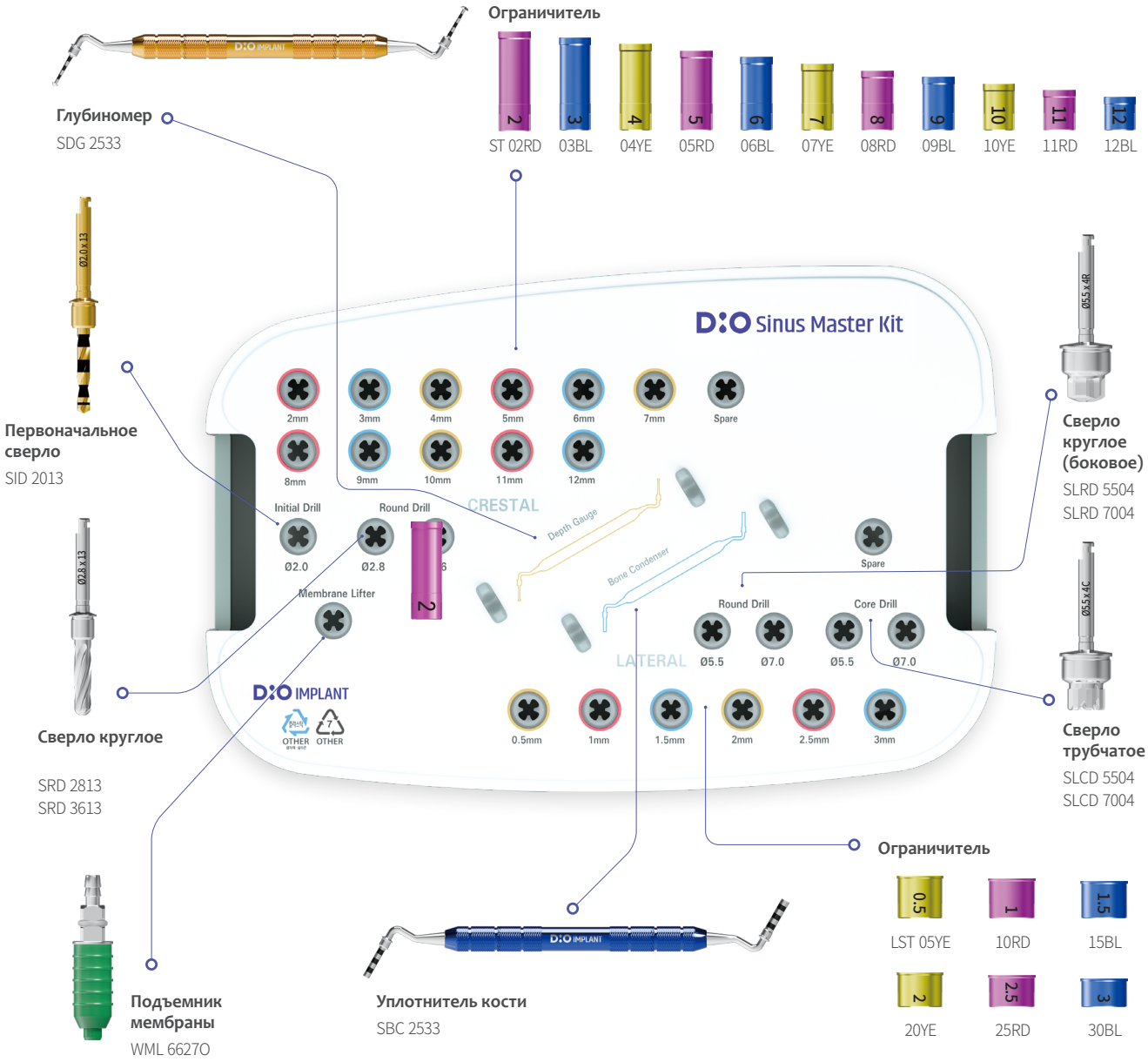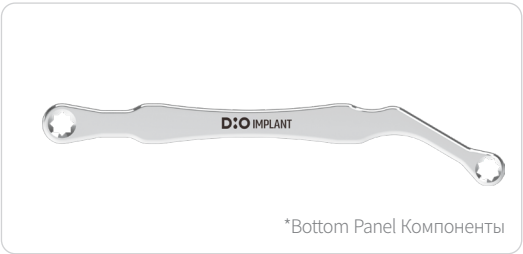

Ø2.0 Первоначальное сверло

Используется для формирования начального отверстия под имплантат.

Ед.изм.мм	
Диаметр	Ø2.0
Код	SID 2013

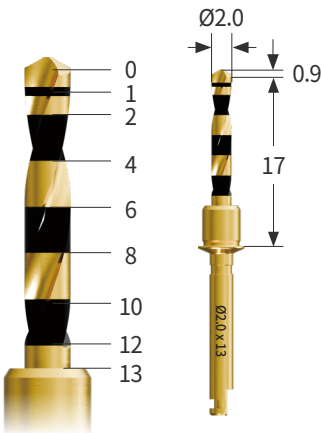


Сверло круглое

Предназначено для методики закрытого синус-лифтинга.

※ Закруглённая форма режущей части сверла защищает мембрану во время сверления.

Ед.изм.мм		
Диаметр	Ø2.8	Ø3.6
Длина 13	SRD 2813	SRD 3613

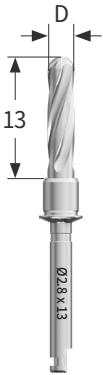

Ограничитель

- Используется для регулировки глубины сверления.
- Имеет анодированное цветное покрытие в зависимости от длины и лазерную маркировку для удобной идентификации.




Ед.изм.мм											
Сверление Длина	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фиксатор Длина	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
	ST02RD	03BL	04YE	05RD	06BL	07YE	08RD	09BL	10YE	11RD	12BL
											

Глубиномер

Используется для измерения толщины оставшейся кости и распределения костного материала в полости.

Ед.изм.мм	
Код	SDG 2533

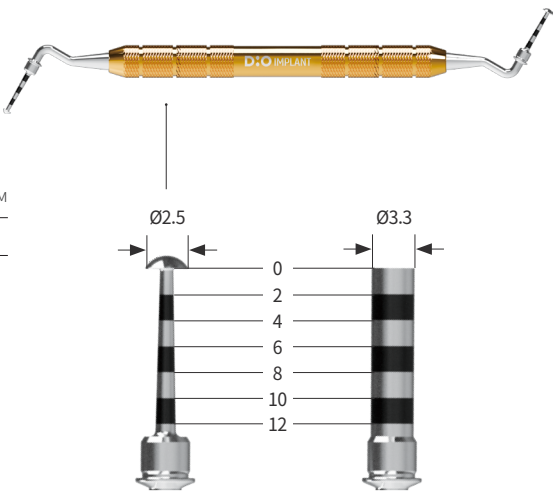

Костный уплотнитель

Используется для измерения толщины оставшейся кости, проверки целостности мембраны и введения костного материала под приподнятую мембрану.

Ед.изм.мм	
Код	SBC 2533



Подъемник мембраны

Используется для подачи физиологического раствора через соединённую силиконовую трубку в отверстие, сформированное сверлом.

Код	WMML 66270
-----	------------



Трубка для ирригации

- Шприц приобретается отдельно.

*Приобретается отдельно	
Код	MLT 40300



Сверло круглое

Специальное сверло для латерального синус-лифтинга.

※ Используется с куполообразным типом (Dome) и фиксатором.

Ед.изм.мм		
Диаметр	Ø5.5	Ø7.0
Длина 8	SLRD 5504	SLRD 7004



Сверло трубчатое

Специальное сверло для латерального синус-лифтинга.

※ Тип Core (используется оставшийся после сверления костный диск)
/ применяется с фиксатором.

Ед.изм.мм		
Диаметр	Ø5.5	Ø7.0
Длина 8	SLCD 5504	SLCD 7004



Ограничитель

- Используется для регулировки глубины сверления.
- Имеет анодированное цветное покрытие в зависимости от длины и лазерную маркировку для удобной идентификации.



Ед.изм.мм						
Сверление Длина	0.5	1	1.5	2	2.5	3
Фиксатор Длина	7.5	7	6.5	6	5.5	5
	LST 05YE	10RD	15BL	20YE	25RD	30BL


Методика открытого
синус-лифтинга

При использовании можно выбрать круглое или трубчатое сверло.
Благодаря высокоскоростному сверлению и фиксации ограничителем
обеспечивается безопасное и быстрое выполнение отслаивания мембраны.

Препарирование Сверло круглое

Способность создавать округлые контуры
при сверлении


Обязательно используйте ограничитель.
Мин. скорость вращения: 1200-1400 об/мин

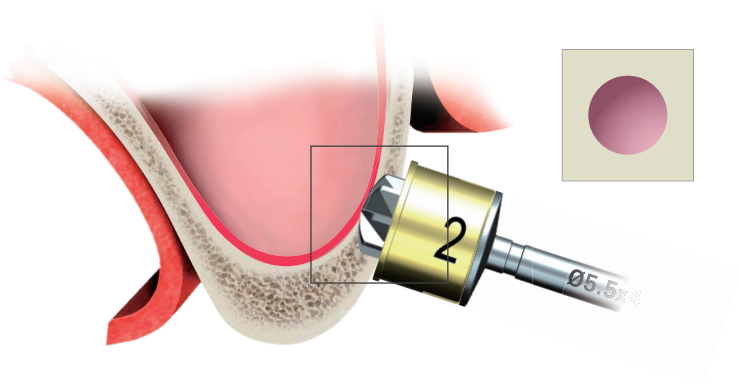

Препарирование Сверло трубчатое


Техника с сохранением костного фрагмента:
препарирование только краёв округлого участка,
поднятие синуса, затем возвращение костного
фрагмента на место

Обязательно используйте ограничитель.
Мин. скорость вращения: 600-800 об/мин.

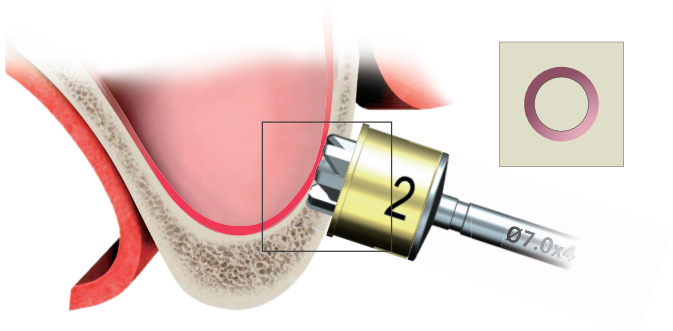

Поднятие мембраны синуса Синус-лифтинг

Отслаивание слизистой оболочки
(мембраны Шнайдера) латеральным доступом.

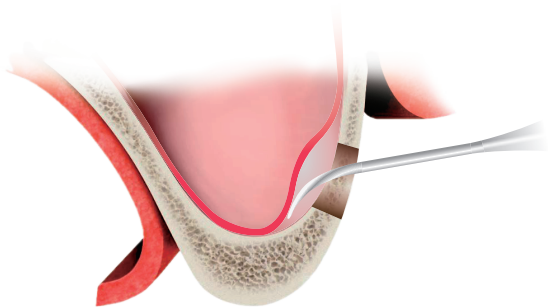


Методика закрытого синус-лифтинга

Техника синус-лифтинга с низкой скоростью сверления (50–100 об/мин) и использованием ограничителя, обеспечивающая безопасное и точное поднятие нижней кортикальной стенки и мембраны.

Препарирование Первоначальное сверло

На основании высоты дна верхнечелюстного синуса, измеренной по КТ, выполняется сверление на 1–2 мм меньше рассчитанной глубины, после чего устанавливается ограничитель. Далее продолжается сверление до нижней стенки синуса.


Для контроля глубины обязательно используйте ограничитель.
Орошение на низких оборотах: 50 об/мин.

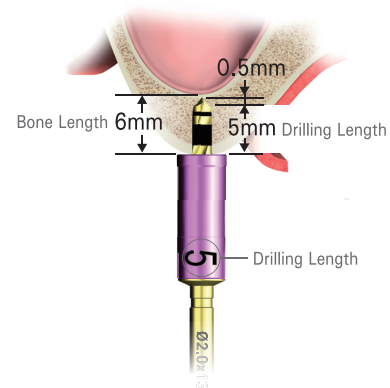

Сверло для синус-лифтинга используется для перфорации кости под гайморовой пазухой

На основании высоты нижней стенки верхнечелюстного синуса, определённой по КТ, выполняется сверление на ту же глубину, после чего устанавливается ограничитель и продолжается сверление.

Для контроля глубины обязательно используйте ограничитель.
Режим препарирования: 50 об/мин.

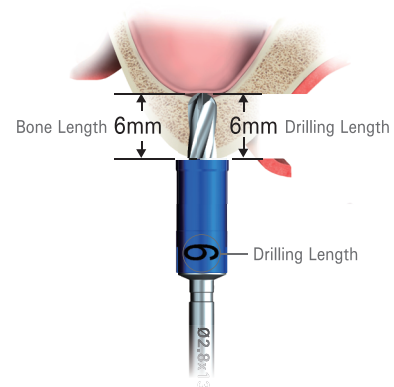

Поднятие мембраны синуса Подъемник

С помощью мембранного лифтера ввести физиологический раствор через сформированное сверлом отверстие.

Перед созданием давления ввести 0.2–0.5 мл раствора до появления лёгкого сопротивления.

※ Объём зависит от анатомии области; подъём мембраны
≈ 1 мм на каждые 0.1 мл раствора.

Если отверстие синуса (A) открыто:


После введения раствора давление постепенно снижается, жидкость свободно поступает под мембрану, обеспечивая её плавное поднятие.

Если отверстие синуса (A) не открыто:

Давление ощущается сразу — в этом случае невозможно продолжать подачу жидкости. Необходимо повторно просверлить синусное отверстие на глубину около 1 мм и повторить процедуру.

Если жидкость попала в отверстие вместе с кровью (Aspiration):

Раствор смешивается с кровью, и после лёгкого отсасывания мембрана поднимается мягко и безопасно.

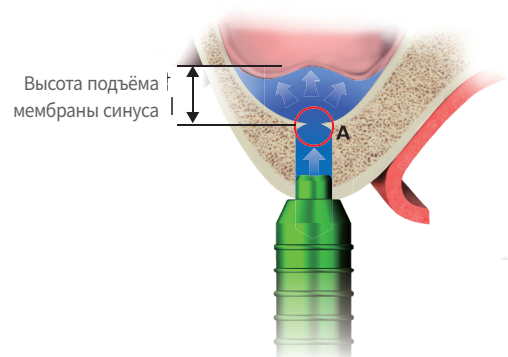

Хирургический протокол Набор


Расширение отверстия в нижнем крае верхнечелюстной пазухи. Сверло для синус-лифтинга (2 этап)

После поднятия мембраны выполнить сверление на 1 мм глубже для расширения отверстия.


Для контроля глубины обязательно используйте ограничитель.



Проверка неполной перфорации

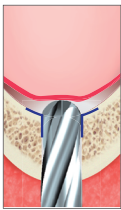


Полная перфорация

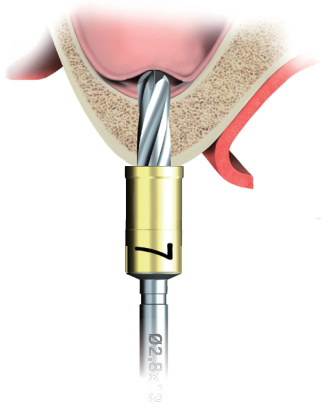

Уплотнитель кости Костный уплотнитель

С помощью костного уплотнителя материал вводится через отверстие сверла до дна гайморовой полости.

Для контроля глубины необходимо использовать ограничитель.
/ Без ирригации, при низких оборотах (50 об/мин).

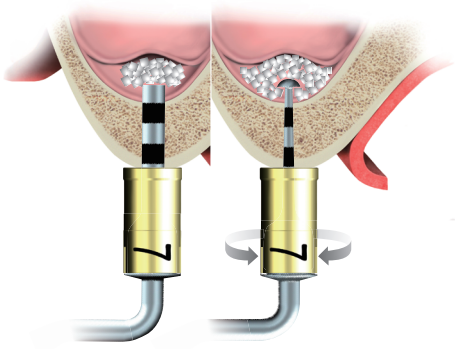

Определение объёма костного материала

Подъём мембраны (мм)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Костный трансплантат НКР (сс)	При установке имплантата	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	Без установки имплантата	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0


Распределение костного материала

С помощью глубиномера материал равномерно распределяется вращательными движениями в области дна синуса.

Финальное сверление Финальное сверло


Выполняется сверление на 2 мм глубже, чем при предыдущем синус-сверлении.

Используйте сверло короче устанавливаемого имплантата.

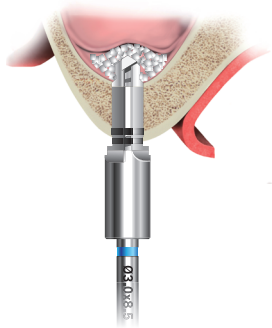

Установка имплантата Коннектор имплантата

Имплантат, установленный в верхнечелюстную пазуху, демонстрирует признаки костной пролиферации, обусловленной контактом с мембраной. При площади костного дефекта ≥ 4 мм следует рассмотреть репозицию имплантата и провести устранение дефекта. Дополнительные вмешательства требуются при визуализации зон костной резорбции в перимплантарной области.

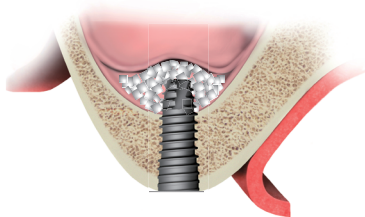

При толщине остаточной кости менее 3 мм и отсутствии достаточной первичной стабилизации имплантат не устанавливают — выполняют только подсадку костного материала.

D:O IMPLANT

Набор Sinus Lift (SLK 01) Набор


Набор для проведения открытого синус-лифтинга.



Инструменты для подъема мембраны синуса	Код	Description
  	DSNK 01	Используется для приподнятия синус-мембраны (Sinus Lift).
  	DSNK 02	Используется для отделения синус-мембраны.
  	DSNK 03	
  	DSNK 04	
  	DSNK 05	
  	DSNK 06	Используется для внесения костного материала в гайморову пазуху и его уплотнения.

Набор Osteotome (OST 01) Набор

Используется для увеличения объёма и уплотнения кости в зоне верхней челюсти.

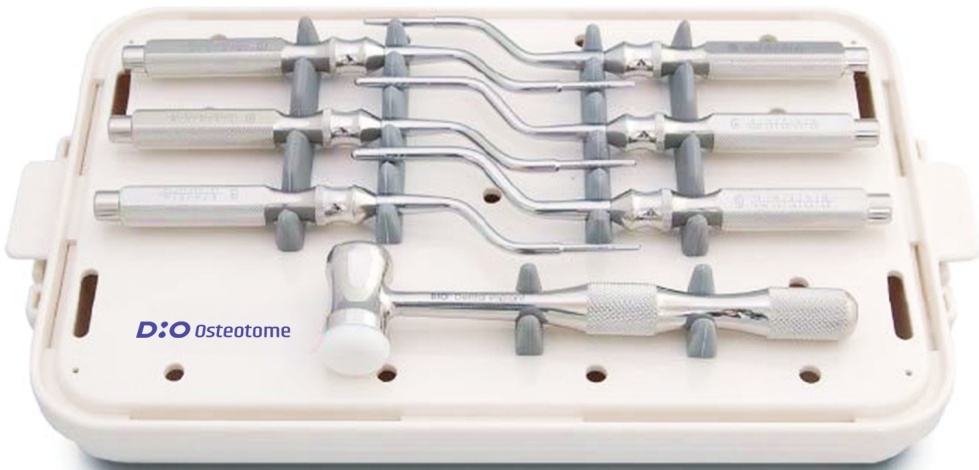


Диаметр(L) / Изображение	Код	Применение
	OSE 2228	Поднятие дна верхнечелюстной пазухи Sinus Elevation
	OSL 2028	SM / IFI / FTN Первоначальное сверло
	OSL 2130	FTN 33xxB Уплотнение кости Compaction
	OSL 2133	SFN 38xx / IFI 35xxPM Уплотнение кости Compaction
	OSL 3039	SFN 45xx / IFI 40xxM Уплотнение кости Compaction
	OSL 3346	SFW 53xx / IFI 48xxM / FTN 50xxB Уплотнение кости Compaction

Набор Bone Expander (BEP 00) Набор

Набор инструментов для расширения альвеолярного гребня


*Используется последовательно в зависимости от диаметра имплантата.

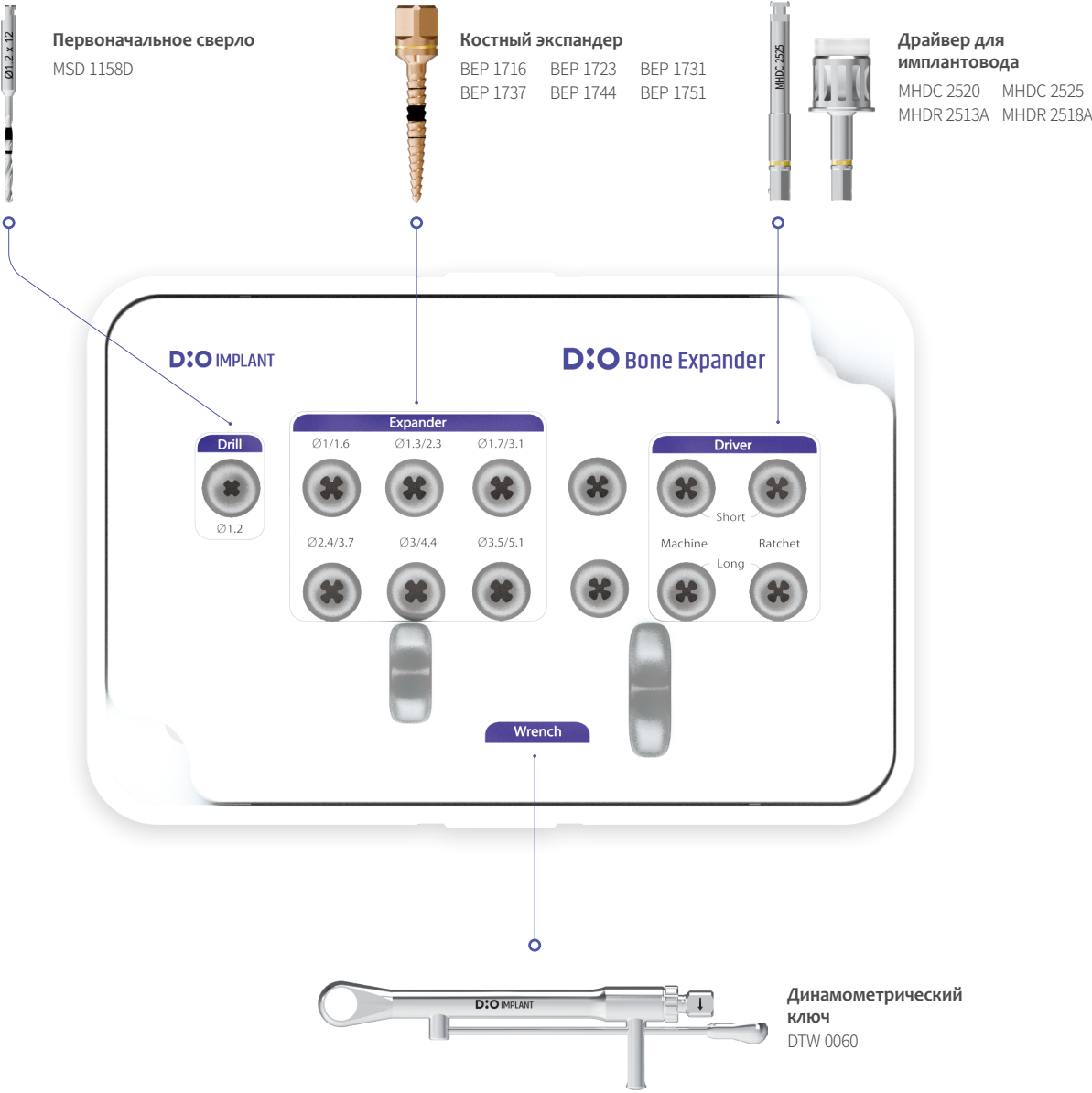

Набор UFII Prosthetic (UFP 02) Набор

Набор для лёгкой фиксации и снятия абатментов UFII / UFIII Regular

- Монолитный, Окта, шаровидный абатмент.

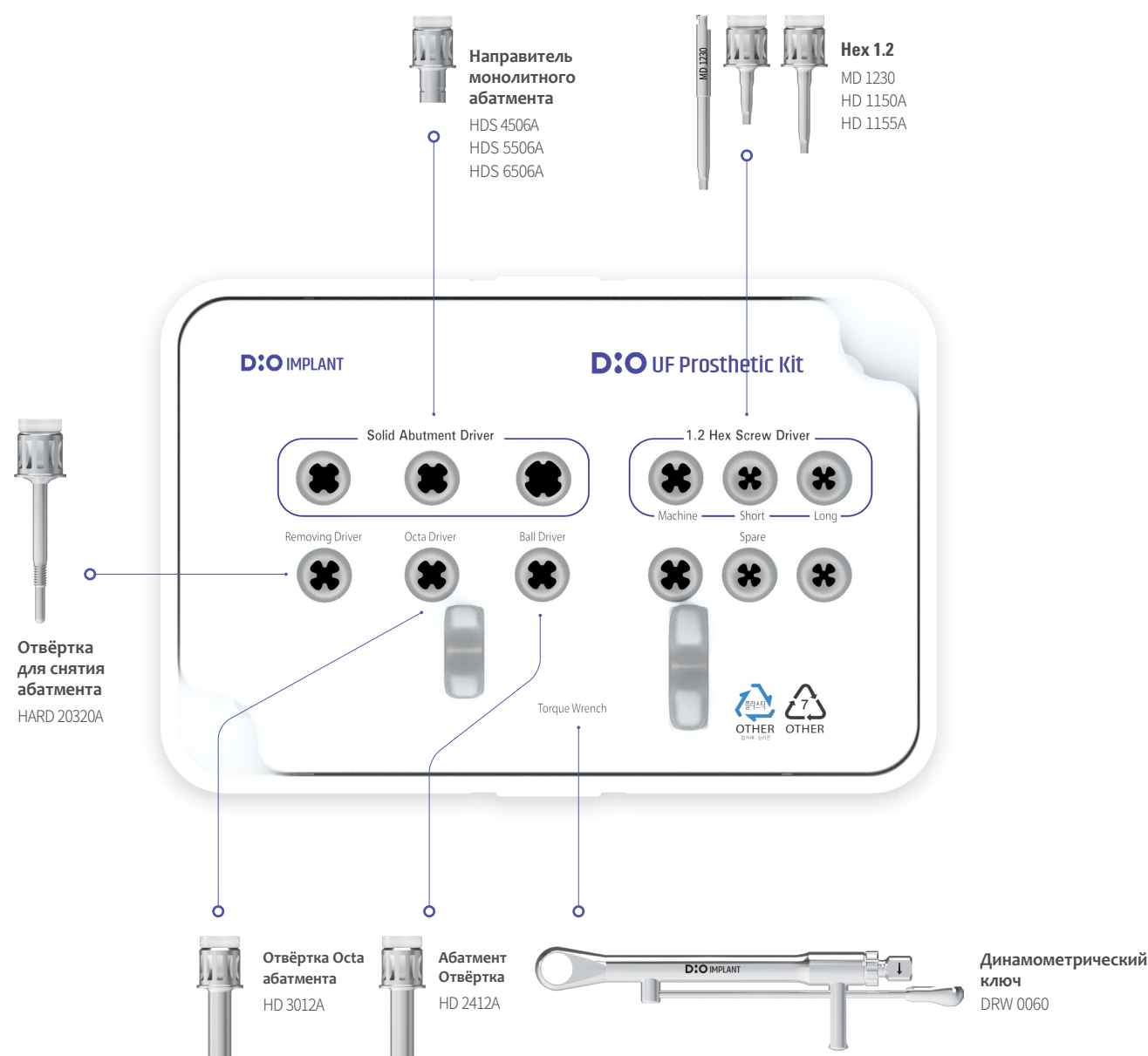

07


НКР & Стоматологические материалы

252 **НКР Винт**
НКР Винт

НКР Винт НКР

Используется при операции НКР для защиты внутренней части имплантата и предотвращения вытекания или рассыпания костного материала наружу.


- Используется отвертка Нех 1.2
- Применяется вместо резорбируемой мембраны
- Десневая часть имеет вогнутую форму (Concave), обеспечивая пространство для костного материала
- В зависимости от расстояния между имплантатом и соседним зубом возможно использование двухкомпонентного типа изделия (Two-piece Тип)

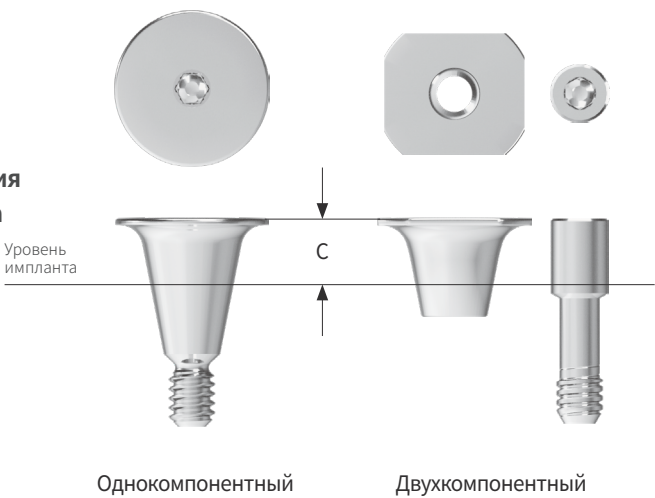


R		Regular				Ед.изм.мм	
Размер							
Тип		Одна - шт.		Две - шт.			
Десневая часть	1.5	BFC 6565S	BFC 8080S	BFC 7060S	BFC 8055S		
	3	BFC 6565L	BFC 8080L	BFC 7060L	BFC 8055L		

R	Лунка после удаления зуба		Оголение резьбы имплантата
	Щель ≤ 1.5 мм	Щель > 1.5 мм	Оголение до 3 витков резьбы
Обычный тип			
Преимущества	1 Удобное открытое ушивание (Open Suture) 2 Сохранение стабильного пространства 3 Минимизация инфильтрации мягких тканей 4 Возможность выбора при необходимости костной пластики	1 Удобное открытое ушивание (Open Suture) 2 Сохранение стабильного пространства 3 Минимизация инфильтрации мягких тканей 4 Возможность применения PRF и мембраны при необходимости	1 Удобное открытое ушивание (Open Suture) 3 Минимизация инфильтрации мягких тканей 4 Возможность применения PRF и мембраны при необходимости
Сложность операции	Низкая → Очень низкая	Средняя → Низкая	Средняя / Высокая → Низкая, Средняя


Case 01.
Лунка после
удаления зуба

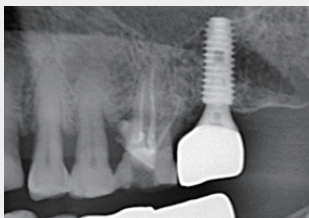


1 #26 До удаления зуба

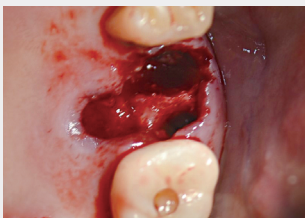

2 Широкая лунка после экстракции

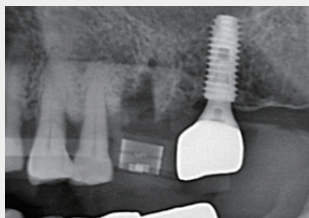


3 До операции с направляющим шаблоном

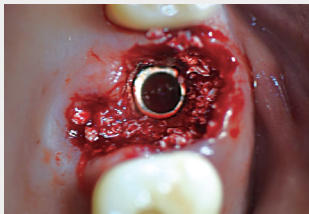


4 После установки имплантата и проведения костной пластики



5 НКР Винт + PRF
(используется вместо мембраны, снижая стоимость лечения)

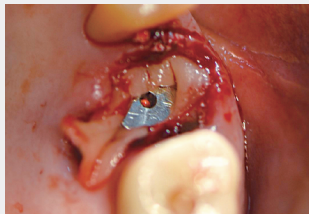

6 Фиксация винта на имплантате

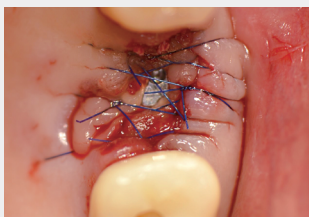

7 Удобное открытое ушивание без натяжения



8 Через 3 месяца — сформированная кость вокруг имплантата


Case 02.
Отслоение
слизисто-
надкостничного
лоскута



1 Участок с зубами #11-13



2 Широкий участок после откидывания лоскута

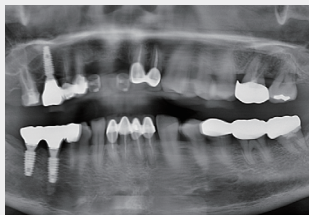


3 До направленной операции #11, 13




4 После установки имплантатов и фиксации НКР-винта




5 Костная пластика + надкостничный разрез

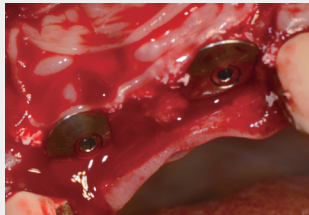


6 Покрытие PRF
(используется вместо мембраны)

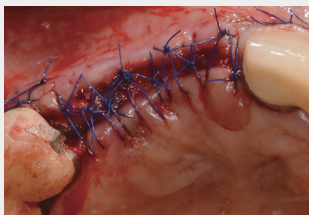

7 Удобное ушивание без натяжения в пределах допустимого уровня тканей

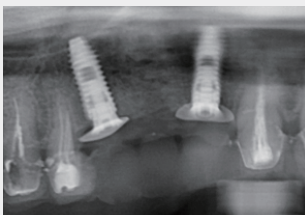

8 Сразу после операции

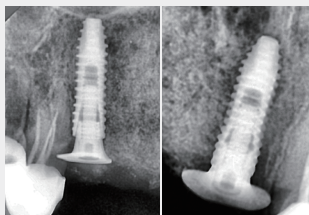

9 Через 3 месяца — ремоделированная кость вокруг имплантата

08

Оборудование & Материалы

266

3D Принтер & Материалы

DIO PROBO Z
DIO PROBO Cure2
DIO NAVI-C&B / P.MAX
DIO NAVI-SG / SG02
DIO NAVI-Model03
DIO NAVI-Denture02
DIO NAVI-Cast02
DIO NAVI-Очиститель

270

UV Облучатель

UV Активатор2

DIO PROBO Z

3D-принтер, оптимизированный для изготовления протезов

- 

Размер

300x378x484mm
- 

Вес

20kg
- 

Длина волны света

405nm
- 

Объём построения

105.6x59.4x80mm
- 

Разрешение XY

55µm
- 

Тип

DLP
- 

Сенсорный экран

7inch
- 

Толщина слоя

25, 50, 100µm



Код	PROBO Z
-----	---------

DIO PROBO Cure2

Более мощный источник света!




Размер
249x320x216mm



Вес
7.5kg




Источник света
405nm / LED

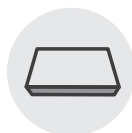

Объём полимеризации
100x100x42mm




Положение
источника света
Top / Bottom

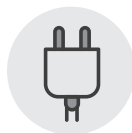

Входное напряжение
AC 100-240V, 50 / 60Hz



Потребляемая мощность
160W

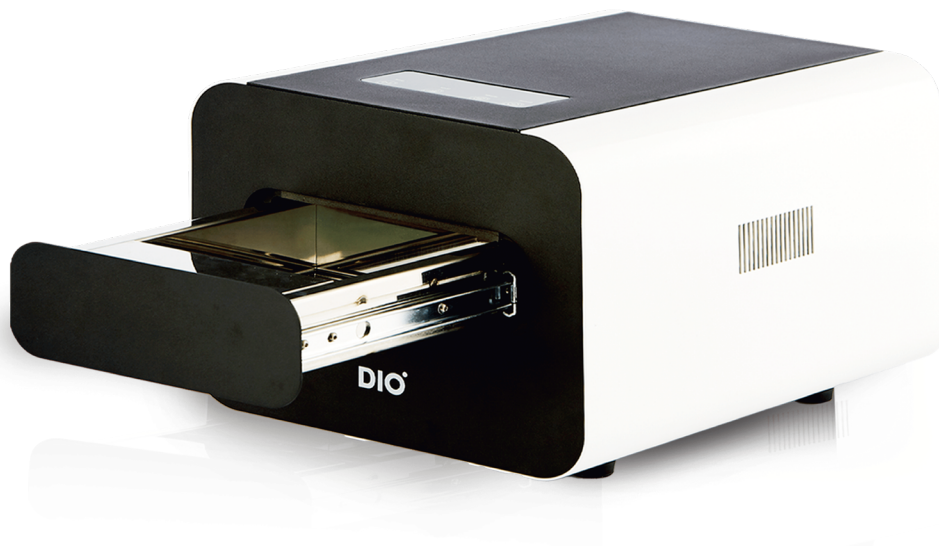

Код

PROBOCure2

3D Принтер & Материалы Оборудование & Материалы

DIO NAVI-C&B

Фотополимерная смола, предназначенная для печати
одиночных коронок и мостовидных протезов.

- Объем : 1kg
- Цвет : A0 / A1 / A2 / A3 / B1



Название	DIO NAVI-C&B
A0	-
A1	3DCNB-1000A1
A2	3DCNB-1000A2
A3	3DCNB-1000A3

DIO NAVI-SG / SG02

Биосовместимая фотополимерная смола, предназначенна
я для печати хирургических направляющих (Surgical Гайд).

- Объем : 1kg
- Цвет : SG — желтоватый, SG-02 — прозрачный (высокая эстетика)



Название	DIO NAVI-SG	DIO NAVI-SG02
Код	3DSG-1000	3DCLRSG-1000

DIO NAVI-Model03

Фотополимерная смола, предназначенная для печати
диагностических и рабочих моделей.

- Объем : 1kg
- Цвет : Оранжевый



Название	DIO NAVI-Model03
Код	3DMODEL03-1000

DIO NAVI-Denture02

Биосовместимая фотополимерная смола, предназначенная для печати базисов съёмных протезов.

- Объём : 1kg
- Цвет : Розовый



Название	DIO NAVI-Denture02
Код	3DDEN02-1000P1

DIO NAVI-Cast02

Фотополимерная смола, предназначенная для печати литьевых моделей и каркасов.

- Объём : 1kg
- Цвет : Тёмно-красный




Название	DIO NAVI-Cast02
Код	3DCAST02-1000

UV Activator 2

Обеспечивает гидрофильную поверхность имплантата с помощью облучения VUV-светом в течение 20 секунд.

- Размер : 261(W)x180(D)x348(H)
- Вес : около 6kg
- Потребляемая мощность : до 150W

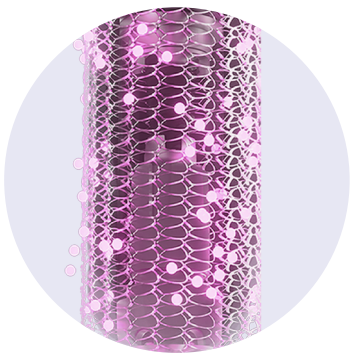

360° Цилиндрическое облучение
Источник VUV-света
с высокой энергией (172 нм)



Кварцевая лампа
Минимизация внешнего загрязнения




Rose Розовый Sky Синий

Цвет	Розовый ●	Синий ●
Код	UVACT 02P	UVACT 02B

Эффективное удаление органических загрязнений


Облучение поверхности имплантата VUV-светом позволяет удалить более 90 % органических веществ, что обеспечивает стабильное и прочное соединение имплантата с костью.

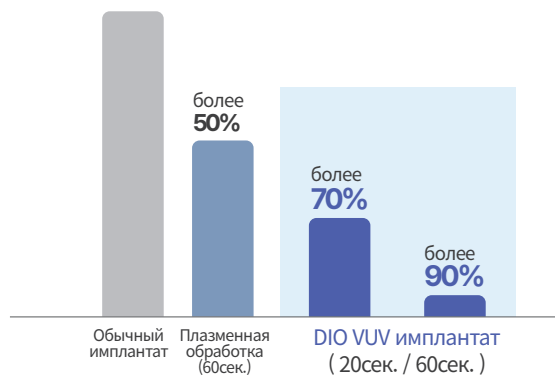

* Исследование ULCA University / Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 1978.
* KAIST KARA XPS (27 янв. 2021 / 5 июня. 2020)

Сверхгидрофильность

После облучения VUV поверхность имплантата приобретает сверхгидрофильные свойства, что способствует всасыванию крови к поверхности имплантата.

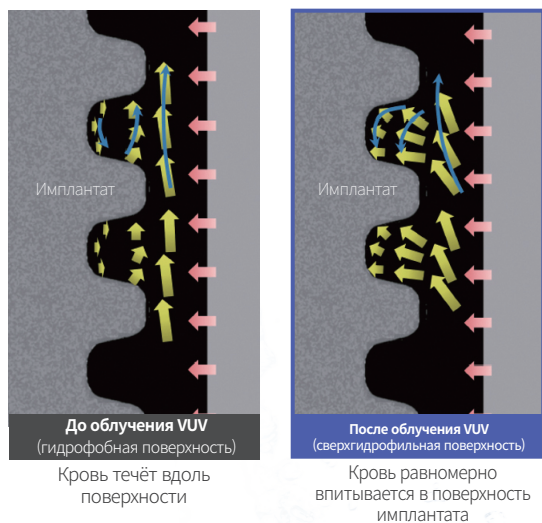

* Исследование ULCA University / JPR_D_22_00225



09

Решения DIO NAVI

274 **DIO NAVI Гайд**
Что делает DIO NAVI особенным?

DIO NAVI Гайд

Точная и безопасная цифровая система имплантации

Весь процесс — от диагностики до установки имплантата — осуществляется на основе цифровых данных, что исключает возможные ошибки и неточности, характерные для аналоговых методов.




Что делает DIO NAVI особенным?

DIO NAVI — это точность.


Минимизация зазора

Минимальный зазор между направляющей гильзой и сверлом обеспечивает точное начальное препарирование.

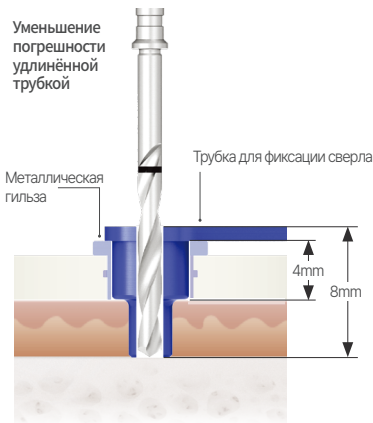


Зазор между трубкой сверла и металлической гильзой

0.143°

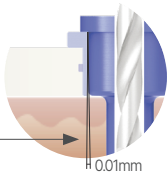

Зазор между трубкой сверла и самим сверлом


0.716°

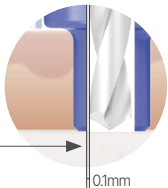

Минимизация отклонений за счёт двойного контакта сверления


Специальный протокол сверления, учитывающий плотность кости и характеристики бора, обеспечивает двойной контакт — со втулкой и стенками костного канала, что позволяет точно направлять сверло и минимизировать осевые отклонения.

Без профильного сверла

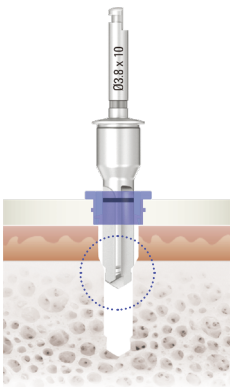

VS

Двойной контакт при сверлении

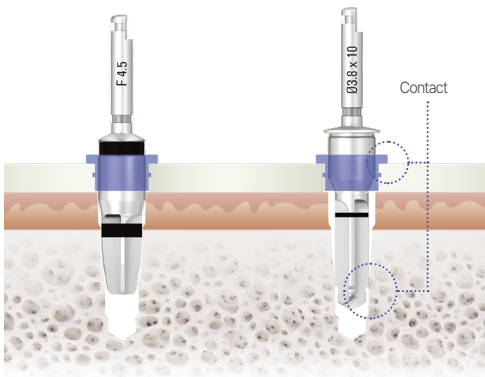

Профильное сверло F4.5 Финальное сверло Ø3.8×10
Расширение кортикального слоя и оценка плотности кости




DIO NAVI Видео-пр

DIO Navi — это надёжно и безопасно

Отсутствие образования стружки направляющей (Guide Chip)

Благодаря встроенной металлической втулке (Metal Sleeve) исключается повреждение направляющей во время сверления.

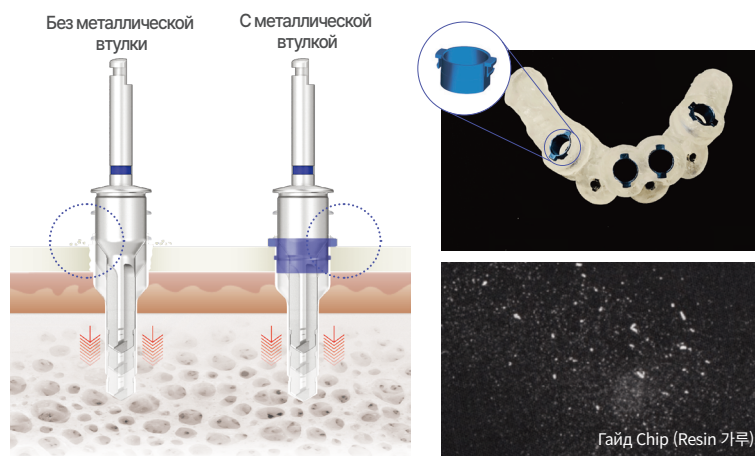


Предотвращение перегрева кости

Охлаждение возможно до глубины остеотомии благодаря металлической игле.

Эффективность металлической иглы

- Предотвращение перегрева кости
- Охлаждение до глубины остеотомии
- Удаление частиц из внутренней полости

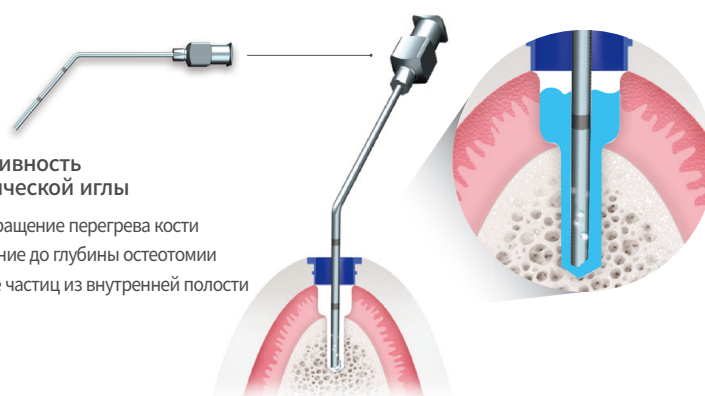


DIO Navi — это удобно


Удобное применение даже в области моляров

Благодаря короткому Offset и направляющему сверлу процедура удобна даже при ограниченном открывании рта.

Ø2.0 5mm Сверло

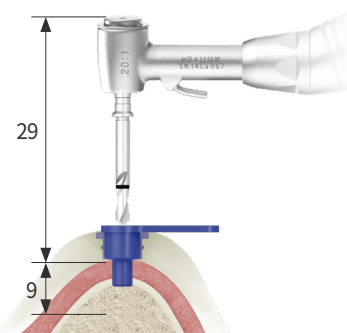

Направляющее сверло Ø2.0 × 5 мм (Wide Гайд Drill)

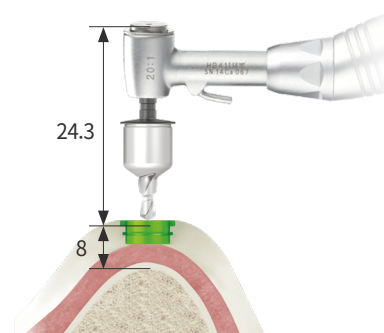

D:O IMPLANT

THE ORAL CARE SOLUTION CREATOR

D:O IMPLANT

<https://dio-russia.ru>



*Запрещен на территории
Российской Федерации

D:O